

El Oscillator™



Manual del Usuario



Introducción

El Oscillator™ es una tecnología experimental ofrecida por Innovation Technologies and Energy Medicine (ITEM). **El Oscillator™** genera ondas electromagnéticas con numerosas longitudes de onda a través del empleo de un sistema de circuito dual de bobina de Tesla, proveyendo un alto potencial (10,000 o más Voltios) de voltaje y baja corriente (menos de 1 Amperio) dentro del circuito.

Los pulsos de energía vienen del circuito primario. Este circuito está hecho de un transformador de alto voltaje, un capacitor primario, una cavidad de chispa y la bobina primaria. Juntas, estas partes forman un oscilador. Lo que ocurre cuando usted conecta **El Oscillator™** es que el transformador carga el capacitor hasta que haya un voltaje bastante alto a través de la abertura de chispa para saltar sobre la abertura de aire. Cuando este encendido ocurre, la energía almacenada en el capacitor es transferida dentro del inductor primario. El inductor primario luego construye un campo magnético a medida que la energía del capacitor fluye a través de él. El campo magnético eventualmente colapsará, y legará en la transferencia de vuelta lo que la energía le deja de regreso en el capacitor. Esta actividad oscilatoria continúa hasta no haya suficiente voltaje para saltar sobre la abertura de la chispa. La frecuencia de oscilación es determinada por el valor del capacitor primario y el inductor primario. Juntos, forman lo que es llamado un el circuito resonante paralelo.

Los pulsos de energía del circuito primario son de la misma frecuencia que el secundario, y de esta manera la energía transferida por el campo magnético del primario aumentará en la bobina secundaria. Al igual que un láser, esta energía aumenta y se amplifica a sí misma hasta que exista alto voltaje acumulado en lo alto de la bobina, el cual se disipa en el aire en forma de campos eléctricos.

El Oscillator™ es una adaptación del "oscilador de ondas múltiples" concepto, inventado por el científico ruso Georges Lakhovsky en la década de 1920. Lakhovsky utilizó los sistemas de la bobina de Tesla para generar frecuencias electromagnéticas para sanar enfermedades como el cáncer. Lakhovsky creía que las células vivas son baterías; el núcleo sujeta la carga positiva y el citoplasma lleva la negativa. Si las células fuesen irradiadas con un rango de oscilaciones electromagnéticas, podrían ser "recargadas" y de esta manera cobrar nueva vida. Un rango de frecuencias es necesario porque la célula y sus partes reaccionan a diferentes frecuencias. Vea Anexo el A, al final de este Manual, para ver dos artículos que corresponden a las ideas de Lakhovsky y las aplicaciones para su concepto del oscilador de ondas múltiples.

Descargo

El Oscillator™ es ofrecido por ITEM para uso experimental, y NO ES un dispositivo médico. ITEM no pretende que este sistema sea utilizado para afectar directamente la estructura o cualquier función biológica del cuerpo; en lugar de eso, el enfoque de ITEM está en las aplicaciones de la medicina energética por cuyo medio el campo energético humano puede ser fortalecido a través de la interacción con los campos electromagnéticos de alta potencia. Tal interacción puede mejorar condiciones que son psicosomáticas por naturaleza, y por ende pueden ser posibles las mejorías indirectas de la salud física. Sin embargo, debido a que sus efectos no son totalmente conocidos, ITEM alienta fuertemente a todos los usuarios de **El Oscillator™** a obtener el consentimiento de su médico autorizado antes de utilizarlo. ITEM no será responsable por cualquier efecto indeseable que pueda ocurrir a través del uso de **El Oscillator™**. Si el usuario está en desacuerdo con esta política, el usuario le devolverá el sistema a ITEM dentro de los 30 días para un



reembolso completo, menos una tarifa por reabastecimiento (los reembolsos más allá de los 30 días no serán contemplados).



La información sobre la seguridad es presentada en la sección titulada **Precauciones de Seguridad**, más abajo.

Como Utilizar El Oscillator™

Utilizar **El Oscillator™** es simple; simplemente enchufe el adaptador blanco en una toma CA estándar. Usted escuchará un sonido de “chisporroteo”, lo cual indica que la bobina tesla está trabajando correctamente. Quítese sus zapatos y coloque sus pies sobre el plato de vidrio aislado. El plato es una de las formas de transmisión de las frecuencias por el sistema de la bobina tesla; La otra es a través del “tubo plástico fosforescente”. Coloque el tubo fosforescente en cualquier zona donde usted sienta falta de energía, o simplemente sosténgalo en sus manos frente a usted. Su unidad puede también venir con otro accesorio especial, que consiste de un cojinete. Dentro del cojinete hay fibra de vidrio para producir tipos específicos de frecuencias. Usted puede usar el cojinete como una “envoltura” en cualquier área donde necesite energía.


Inicialmente, usted debería limitar la exposición a **El Oscillator™** a 15 minutos por día. Luego, usted puede incrementar la exposición gradualmente hasta 45 minutos por día. Si usted comienza a experimentar efectos adversos, en general usted debería 1) notificar a un profesional de la salud y 2) dejar de utilizar el sistema por un día o dos. A medida que su campo energético se ajusta a las altas frecuencias, la duración y la frecuencia de uso pueden ser incrementadas.

Su campo energético será afectado por **El Oscillator™**. Esto puede ser evaluado utilizando el sistema de [Campo de Resonancia por Imágenes™](#) de ITEM u otros sistemas como el “Aura Video Station” (AVS). Debajo hay un ejemplo de una medición de una persona con el AVS antes de utilizar **El Oscillator™** (arriba) y después de sólo 10 minutos de uso (abajo). Los resultados indican un incremento de al menos una “octava” o color, con un equilibrio mejorado sobre los lados izquierdo y derecho del cuerpo. Resultados aun más espectaculares son observados en personas con anomalías significativas en sus campos energéticos.

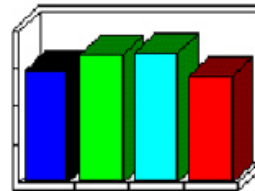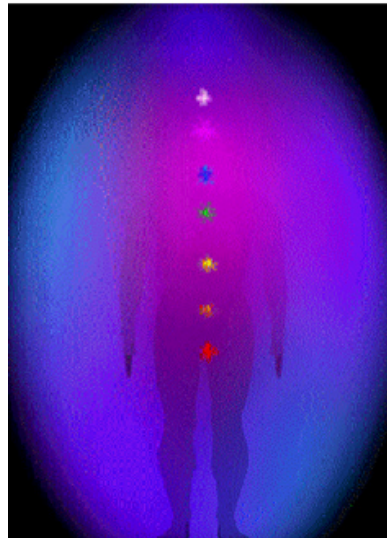

ENERGY LEVEL GRAPH

shows the different energy channels we measure.

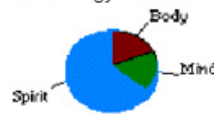

MIND-BODY-SPIRIT GRAPH

overview of your STATE OF MIND * BODY * SPIRIT.




ENERGY LEVEL GRAPH

shows the different energy channels we measure.



MIND-BODY-SPIRIT GRAPH

overview of your STATE OF MIND * BODY * SPIRIT.

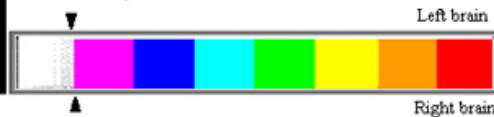

Precauciones de Seguridad

El Oscillator™ no debería ser utilizado en personas que tengan marcapasos u otros dispositivos electrónicos de soporte vital, o en mujeres embarazadas. No debería ser utilizado en personas con enfermedades neurológicas, cardíacas o personas que toman medicamentos prescritos o drogas ilegales. Si usted está administrando sesiones con **El Oscillator™**, por favor, hágales estas preguntas importantes a sus clientes antes de utilizarlo con ellos.

Es importante reconocer que **El Oscillator™** es un sistema eléctrico que puede ser peligroso si usted está expuesto al circuito, esta es la razón por la cual el circuito está blindado mediante una caja plástica. Las siguientes son precauciones generales de seguridad asociadas a los sistemas con bobinas tesla:



- Nunca trate de acceder al circuito debajo de la caja plástica cuando la unidad está enchufada a un tomacorriente. Generalmente no recomendamos que usted trabaje con la tabla del circuito a menos que usted sea un electricista experimentado, en lugar de eso contáctese con ITEM para la asistencia. Además, no trate de desensamblar el tubo fosforescente mientras la unidad está enchufada.
- No opere la unidad en presencia de mascotas o niños pequeños.
- Nunca opere la unidad donde esté mojado o dónde existe un peligro significativo de choque eléctrico. El cuarto en el cual usted utilice la unidad debería estar tan seco (humedad baja) como sea posible.
- No coloque nada en el plato de vidrio aparte de sus pies cuando la unidad está enchufada, ya que algunos otros objetos pueden acumular una carga y pueden convertirse en un peligro de choque eléctrico.
- Aunque la posibilidad de fuego o explosión es menor por el tipo de sistema de bobina utilizado dentro de **The Oscillator™**, no obstante recomendamos que usted tenga a mano un extintor de fuego que sea capaz de extinguir fuegos eléctricos.
- Apague las computadoras cercanas u otros equipos electrónicos sensibles durante el uso del dispositivo.
- Las emisiones de la bobina tesla pueden ser potencialmente tóxicas en grandes dosis, por consiguiente, como precaución, utilice la unidad en una habitación ventilada o con las ventanas abiertas para permitir el recambio de aire con el uso continuo.
- No almacene materiales inflamables cerca de la unidad en ningún momento.

Además, por favor sea consciente que el uso de **El Oscillator™** puede resultar en interferencias con otras señales, tales como televisión, radio o de teléfonos celulares.



Soporte Técnico

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su unidad, por favor póngase en contacto con ITEM al 1-888-304-ITEM. Si nadie está disponible para asistirlo, por favor deje un mensaje y su llamada será respondida a la mayor brevedad posible. Por otra parte, usted puede enviar un correo electrónico a ITEM para obtener una respuesta dentro de las 24 horas a Central@itembioenergy.com (en inglés) o a item-hispano@medenergetica.com (en español). Ya que ITEM no es el fabricante de esta unidad, resolver su problema puede requerir consultar al fabricante. En algunos casos, el fabricante podrá contactarse directamente con usted para resolver su problema. Usted puede recibir soporte técnico de ITEM durante todo el tiempo que usted posea **El Oscillator™**

Garantía

ITEM garantiza **El Oscillator™** por un período de un año desde la recepción del producto. Esta garantía cubre cuestiones relacionadas a las partes y fabricación de su unidad. La garantía no cubre cuestiones relacionadas con el uso indebido o maltrato de la unidad. ITEM reemplazará o reparará su unidad, sin cargo, dentro del primer año. Luego de un año, se aplicarán cargos razonables por la reparación o el reemplazo.

Anexo A

"Curando el Cáncer Con Ultra Radio Frecuencias" por Georges Lakhovsky

Radio News (Febrero 1925, pp. 1382-1283)

Desde noviembre de 1923 he publicado en varias revistas técnicas y de radio varios artículos en los cuales explicaba teóricamente que el instinto especial que permite a los pájaros volar y orientarse en el espacio es el resultado de la emisión y recepción de radiaciones por los seres vivos. Mientras desarrollaba esta teoría explicaba como estaba convencido por completo de que la ciencia descubriría algún día no solo la naturaleza de los microbios por medio de las radiaciones que producen sino también un método para destruir las enfermedades virales y bacterianas del organismo utilizando las radiaciones apropiadas.

Las investigaciones que he realizado con un aparato especial me han dado tales resultados que siento que mi teoría es acertada. Esa teoría es que la Vida nace de las radiaciones, se conserva por medio de la radiación y se interrumpe con cualquier accidente que produzca la destrucción del equilibrio oscilatorio, especialmente con la radiación de ciertos microbios que suprimen las de las células más débiles.

Antes de seguir adelante con nuestro razonamiento es preciso, para presentar los hechos al lector no iniciado, imaginar qué son realmente las oscilaciones. Como ejemplo utilicemos el movimiento de un péndulo. Cuando el péndulo se desplaza desde la posición de equilibrio, se mueve hacia atrás y hacia delante produciendo lo que se conoce como oscilaciones arrítmicas hasta que la energía almacenada se agota por completo. Por medio de un motor, un resorte o un magneto es posible hacer que el movimiento de un péndulo sea de amplitud constante produciéndose oscilaciones de forma ininterrumpidas. Si, por el contrario, se elimina la fuente de fuerza las oscilaciones terminan y no solo es preciso volver a aplicar la fuerza que alimenta las oscilaciones sino también suministrar energía adicional para que el péndulo empiece a moverse. Esta oscilación de un péndulo reproduce exactamente lo que ocurre en las células de un ser vivo.

Composición Del Cuerpo ~

Nuestros órganos están compuestos de células cuyo protoplasma contiene minerales y ácidos como hierro, cloro, fósforo, potasio, calcio. Mediante la combinación de estos elementos las células emiten ondas al exterior y vibran continuamente a una frecuencia muy alta, probablemente mayor que el circuito de rayos X o por encima de cualquier otra vibración que se conozca y se haya medido actualmente. La amplitud de las oscilaciones celulares puede alcanzar un cierto valor con el fin de que el organismo sea lo bastante fuerte para repeler las vibraciones destructivas de ciertos microbios.

Los Astrofísicos están realizando actualmente experimentos de gran interés sobre la existencia de las vibraciones que han sido denominadas rayos de penetración profunda, cuya frecuencia es mayor que la de los rayos X, alfa, beta, gamma. Algunos de estos rayos son producidos por la propia tierra y otros proceden del espacio exterior. Por esta razón es muy factible creer que esta penetración de rayos produzca el movimiento vibratorio de las células vivas y consecuentemente la vida.

Supongamos que una célula vibra a una determinada frecuencia y un microbio en otra. El microbio empieza a luchar con la célula dando comienzo a la enfermedad. Si la célula no puede repeler las vibraciones más fuertes y si la amplitud de su propia vibración disminuye el microbio vence y sus vibraciones debilitan y detienen las de las células pudiendo causar una grave enfermedad o la muerte. Si por el contrario la célula viva vibra en su adecuada amplitud, por motivos internos o externos, el ataque oscilatorio es repelido. Esta es mi teoría. El problema es algo parecido al de un liberador que va a ayudar a un amigo que está en una situación peligrosa y le encuentra luchando cuerpo a cuerpo contra fuertes agresores. El rescatador no se atreve a utilizar su arma pues teme dañar a su amigo mezclado con los agresores. Del mismo modo, microbios y células sanas están expuestos a la acción eléctrica o radioactiva, lo que puede utilizarse para destruir los rayos indeseados difíciles de suprimir sin herir o matar al mismo tiempo las células que deben ser tratadas. Desde Pasteur, los científicos han estado investigando constantemente medios para destruir los microbios. La gran dificultad encontrada con todos los métodos es que al destruir el bacilo también se dañaba la célula. Los resultados obtenidos en cáncer y tuberculosis tratados con radio, rayos X o rayos ultravioletas, indican lo difícil que es el trabajo de los investigadores.

Un Nuevo Método ~

En mi opinión, el remedio no consiste en matar los microbios en contacto con las células sanas sino en reforzar la oscilación de la célula, bien directamente reforzando la radioactividad de la sangre o produciendo en las células una acción directa por medio de los rayos adecuados. En enero de 1924 empecé a construir, de acuerdo con esta teoría y con la intención de aplicaciones terapéuticas, un aparato que llamé Oscilador Radio – Celular con el firme convencimiento de que las células al vibrar en una longitud de onda extremadamente corta podrían encontrar la suya propia en las ondas hertzianas que tienen la propiedad de producir armonías extremadamente cortas. Las células con vibraciones muy débiles cuando se colocan en el campo de radiaciones múltiples encuentran su propia frecuencia y empiezan de nuevo a oscilar normalmente por medio del fenómeno de resonancia. Este tipo de vibración que me propongo utilizar es muchísimo menos peligroso que la de los rayos X y por otra parte, su aplicación no ofrece ningún peligro al operador.

Expuse frente a mi aparato, durante largos periodos, cierto número de microbios en el cultivo que se desarrollaron por sí mismos de forma normal (nunca he sentido el efecto de estas frecuencias de ultra-radio a pesar de permanecer muchos días cerca del aparato durante el tratamiento aplicado a las células vivas). Los rayos que produce el Oscilador Radio-Celular tienen un efecto directo sobre la estructura celular solo cuando dos seres vivos como una célula y un microbio están en contacto.

El experimento que realicé en el Hospital Salpêtrière de París y con la colaboración del profesor Gosset, fue realizado con plantas (geranios) inoculadas con cáncer y los resultados fueron descritos en un informe presentado el 26 de Julio ante la Sociedad Biológica. El texto de este informe es el siguiente.

"Se sabe que es posible producir en las plantas por inoculación del *Bacterium tumefaciens*, tumores similares a los del cáncer animal. Obtuvimos experimentalmente con éste método un gran número de tumores con varios grados de desarrollo. Algunos de ellos se extirparon parcialmente aunque no morían por completo hasta que toda la planta o, por lo menos, la hoja que sostenía el tumor, murió. Incluso removido por métodos quirúrgicos, estos tumores crecieron nuevamente en la extremidad enferma.

El Oscilador Radio-Celular ~

"Nos proponemos describir en este informe la acción de las ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia obtenidas por medio del Oscilador Radio-Celular de Lakhovsky. Este aparato produce longitudes de onda del orden de dos metros y menores, correspondientes a 150 megaciclos por segundo. Al principio las plantas eran sometidas al efecto de la radiación un mes después de ser inoculadas con el cáncer. En este tiempo podían apreciarse sobre ella pequeños tumores del tamaño de una cereza. Esta planta fue sometida a las radiaciones durante dos sesiones de 3 horas cada una. En los días siguientes los tumores continuaron creciendo rápidamente del mismo modo que los de aquellas plantas que no habían sido sometidas al efecto de las radiaciones. Sin embargo 16 días después del primer tratamiento los tumores empezaron a disminuir y a deshidratarse. Días después los tumores se habían "marchitado" por completo y podían ser desprendidos fácilmente de la hoja de la planta simplemente con tocarlo. La acción de las radiaciones de radio frecuencia es selectiva afectando solamente a la parte enferma de la planta. Incluso fueron destruidos los tejidos internos enfermos a pesar de estar cerca de las células sanas en el centro del limbo, demostrando que las radiaciones no habían afectado a las partes sanas.

La Duración del Tratamiento ~

Otra planta fue tratada de la misma manera, a diferencia de haber sido expuesta en 11 ocasiones de 3 horas cada sesión. Dieciséis días después de la primera exposición los tumores, los cuales eran bastante grandes como se muestra en una de las fotos, comenzaron a encogerse y desecarse y fueron fácilmente separados de la extremidad exactamente como en el primer caso. Otra vez en este caso, las partes sanas de la planta no fueron afectadas en lo más mínimo. Una tercera planta expuesta a las radiaciones durante 9 horas es decir, tres tratamientos de 3 horas cada uno fue curada de la misma manera que las dos anteriores. Se dejó sin tratamiento a 16 plantas inoculadas también con cáncer que desarrollaron tumores con máxima actividad y varios de los cuales eran de gran tamaño. Estos experimentos muestran definitivamente que plantas inoculadas con cáncer pueden ser tratadas y curadas por medio de las vibraciones de frecuencia ultracorta, cuando los tratamientos quirúrgicos fallan.

En conclusión, deseo llamar la atención del lector sobre el hecho de haber obtenido resultados muy definitivos no sólo con una longitud de onda de 2 metros sino con mayores y menores longitudes de onda. Lo más importante es producir el mayor número de armonías posibles. Tales son los resultados en mis investigaciones con plantas. Actualmente estoy realizando experimentos similares con animales y parece que el efecto sobre cánceres en animales es el mismo que sobre las plantas.

Estoy muy satisfecho de presentar mi teoría y los resultados de mi trabajo en una revista científica de los Estados Unidos, este gran país que siempre ha estado en cabeza de la lucha contra esta horrible enfermedad, el cáncer, país cuya simpatía y ayuda quisiera agradecer.