
RESONANT FIELD IMAGING ä

(CAMPO DE RESONANCIA POR IMÁGENES)

Sistema por imágenes de Aura y Cerebro

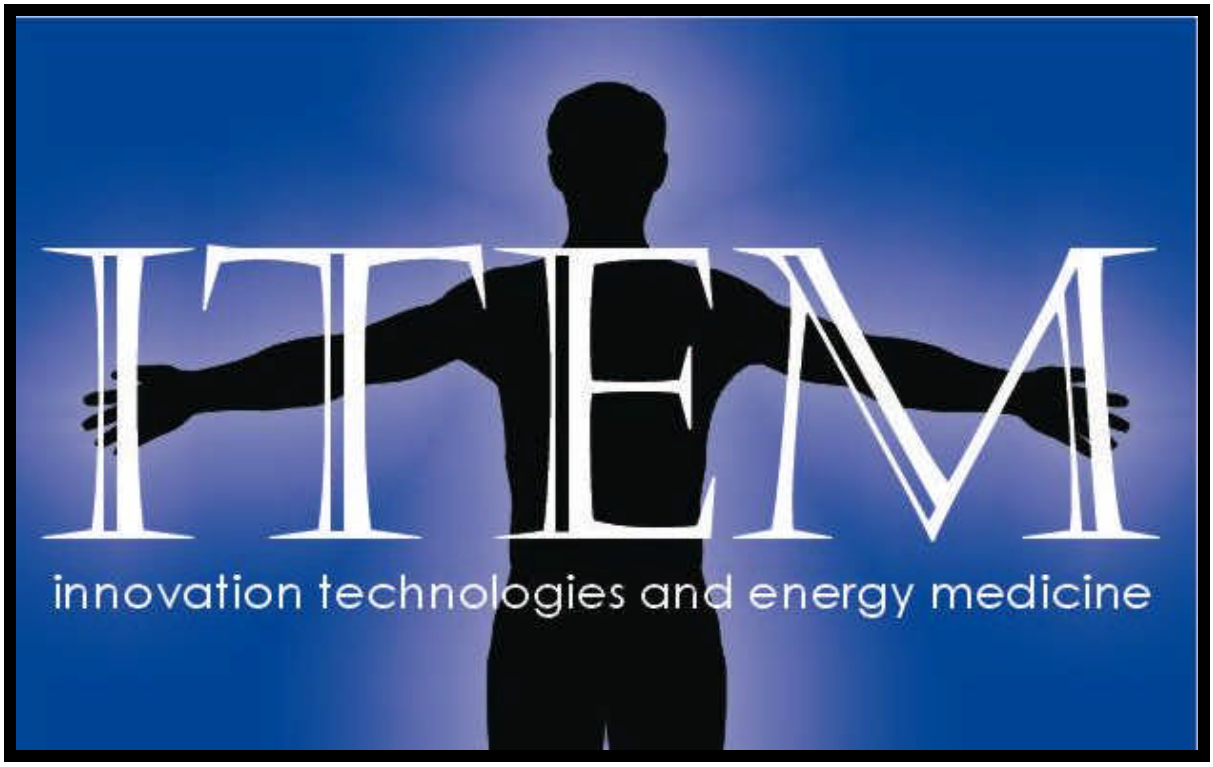

Manual Técnico Para Aplicaciones Clínicas y Científicas

© 2005 Innovation Technologies and Energy Medicine. Todos los Derechos Reservados

Tabla de Contenidos

Acuerdo de Lincencia 1

1.0 CONOCIENDO SU SISTEMA RFI 6

1.1 Acerca de ITEM 6
1.2 ¿Qué es el Aura? 7
1.3 ¿Qué es el RFI? 8
1.4 La Utilidad del RFI 9
1.5 RFI Tiene Interpretaciones Utiles y Clínicamente Objetivas 11
1.6 RFI Tiene Bases Científicas Firmes 12
1.7 Su Paquete RFI Incluye 13

2.0 COMPRENDIENDO LAS AURAS Y LAS BIOENERGIAS 16

2.1 Introducción Básica del Aura 16

2.1.1 Estructura del Aura 22
2.1.2 Estructura de los Chakras 24

2.2 Las Propiedades Electromagnéticas de la Bioenergía 30

2.2.1 Fundamentos de las Ondas Electromagnéticas 30
2.2.2 Un Modelo Simplificado del Aura Humana 41

3.0 COMO USAR EL RFI 59

3.1 Recolectando las Frecuencias 59

3.1.1 Contador de Frecuencias del RFI 59
3.1.2 Recomendaciones para la Recolección de las Frecuencias 66
3.1.3 Contador de Frecuencias / Posicionamiento de la Antena 70
3.1.4 Notas Adicionales de la Recolección de Datos 75
3.1.5 Información sobre la Garantía del Contador de Frecuencias 82

3.2 El Programa de Software del RFI 83

3.2.1 Pasos Preliminares para la Obtención de las Imágenes del Aura 83
3.2.2 Usando el Software del RFI para Crear Imágenes del Aura 85

4.0 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BIOENERGÍAS 112

4.1 Interpretación de las Imágenes del Aura y del Cerebro....112

4.1.1 Los Colores y sus Interpretaciones....113
4.1.2 Nivel Psicológico....119
4.1.3 Nivel de Salud....123
4.1.4 Chakras/Sistema Endócrino....125
4.1.5 Análisis del Cerebro....131

4.2 Yendo Más Allá de los Informes de Interpretación del RFI....136

4.3 Empleos Adicionales....143

4.3.1 Estados cerebrales....143
4.3.2 Objetos y Espacios....147
4.3.3 Análisis Botánico (Plantas y Árboles)....151
4.3.4 Animales y Mascotas....155

5.0 LAS MEDIDAS DEL RFI Y LAS "INTERFERENCIAS"....156

5.1 Comprendiendo las Fluctuaciones de las Frecuencias....156

5.1.1 Las Fluctuaciones como el Reflejo Natural del Cambio....156
5.1.2 "Estabilidad" Contra "Inestabilidad"....159

5.2 Comprendiendo las "Interferencias"....164

5.2.1 Interferencias Ambientales....167
5.2.2 Interferencias Industriales de Alta Potencia....179
5.2.3 Bases Teóricas de la Intensidad de la Bioenergía....183

6.0 SOLUCION DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS COMUNES....187

6.1 Solución de Problemas....187

6.2 Preguntas Comunes....190

6.2.1 Preguntas Generales Acerca del RFI....190
6.2.2 Aspectos Legales del RFI....191
6.2.3 Preguntas Técnicas Acerca del RFI....193

7.0 AURA POR IMÁGENES: TALLER Y DEBATE....217

7.1 Los Participantes 217
7.2 Debate sobre la Estructura y la Interpretación del Aura 218
7.3 Debate sobre Consideraciones Opcionales Avanzadas 229
7.4 Análisis del Aura #1 – Nivel de Salud 237
7.5 Análisis del Aura #2 – Nivel de Salud 247
7.6 Análisis del Aura #3 – Nivel de Salud 257
7.7 Análisis del Aura #4 – Nivel Psicológico 263
7.8 Preguntas y Debate de la Clase 268

8.0 GENERANDO INGRESOS CON EL RFI 274

8.1 RFI Programa de Coordinador de Investigación 274

8.1.1 Coordinador de Investigación Básico 274
8.1.2 Coordinador de Investigación Avanzado 276
8.1.3 Reglas Importantes de Elegibilidad para Coordinadores Básicos y Avanzados 280

8.2 Usando el RFI Con los Clientes 283

9.0 SOPORTE TÉCNICO PARA SU PAQUETE RFI 287

Acuerdo de Lincencia

Contrato individual del Investigador Científico
Lea Cuidadosamente: Éste no es un contrato normal. Es único y especializado, y establece sus derechos y restricciones concernientes al empleo del RFI.

INTRODUCCION:

1.1 Campo de Resonancia por Imágenesä (RFI) es un proceso experimental que constituye un tipo externo de imagen de resonancia magnética, el cual pretende analizar la situación mental de un paciente, sus estados emocionales y psicológicos, e identificar factores psicosomáticos de enfermedad física. Su aplicación directa a las condiciones de salud es por el momento desconocida. La marca registrada Campo de Resonancia por Imágenesä es una marca registrada de, utilizada para identificar a Tecnologías de Innovación y de Medicina Energética (ITEM) como la fuente en desarrollo de la tecnología cerebral por imágenes.

OBLIGACIONES DE ITEM:

2.1 ITEM por medio de la presente, concesiona una licencia al comprador de este software, en adelante denominado como el Concesionario, para utilizar el proceso del Campo de Resonancia por Imágenesä, los componentes afines de propiedad registrada y los datos derivados de los secretos industriales, en calidad de Investigador Científico.

2.2 Al aceptar las condiciones de este acuerdo de licencia, se concede al Concesionario el título oficial de “Investigador Científico” del Departamento de Investigación Científica de ITEM, y puede representar esta situación en su curriculum vitae y correspondencia. 2.3 A tal fin, por el presente documento, ITEM: (A) suministra un contador de frecuencia, antena, software de computadora, y cualquier otra pieza requerida para el proceso por imágenes; (B) proporciona el Manual Técnico de propiedad registrada por ITEM, que contiene las instrucciones detalladas para realizar el

proceso RFI; (C) otorga al Concesionario el total usufructo del software para crear imágenes a todo color y sus interpretaciones, y el total usufructo del Manual Técnico de ITEM para usar el proceso RFI en la práctica de sus investigaciones terapéuticas y científicas.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO:

3.1 En referencia al presente contrato de licencia, el Concesionario acuerda lo siguiente: (A) preservar la “Campo de Resonancia por Imágenes ä” asegurando que el nombre figure en todos los materiales impresos en relación con el proceso RFI y el nombre de ITEM, y que las letras 'T.M.' aparezcan en cada uso del nombre ” Campo de Resonancia por Imágenesä”; (B) representar activamente a Tecnologías de Innovación y Medicina Energética (ITEM) como la fuente de esta tecnología; (C) hacer los esfuerzos razonables para grabar la exactitud de RFI y el éxito de las medidas; y periódicamente enviar tales registros a ITEM; (D) reportar a ITEM todas las inconsistencias, inexactitudes y resultados inesperados del mapeo o análisis del RFI; (E) pagar el costo de la licencia fijada por ITEM el cual está incluído en el precio de compra del equipo; (F) respetar y cumplir todas las Restricciones y Condiciones de este contrato.

RESTRICCIONES Y CONDICIONES:

4.1 El Concesionario promete no revelar a sabiendas ni compartir los datos numéricos del proceso RFI a terceros, bajo ninguna circunstancia, y promete guardar tales datos responsablemente contra el empleo y uso ilícito.

4.2 El Concesionario está de acuerdo en no realizar copias no autorizadas del software o de cualquier parte del manual de instrucciones. Se obtendrá reemplazo o copias de seguridad del software o instrucciones del Manual directamente de ITEM.

4.3 Toda solicitud para la autorización de reproducción del software o los materiales de propiedad registrada, o solicitudes para autorizar la enseñanza del RFI a otra persona deberá

solicitarse por escrito a Tecnologías de Innovación y Medicina Energética.

4.4 Al Concesionario se le prohibe enseñar a cualquier otra persona u organización la practica o estudio del proceso RFI, sin el consentimiento escrito de ITEM. El Concesionario tiene el derecho para entrenar solamente a ayudantes que lo asistan en la práctica de las terapias, investigación científica, o producción de las imágenes en eventos públicos, para esto no requiere permiso; pero tales ayudantes no pueden usar el RFI ni procesar los materiales de forma independiente sin comprar un paquete separado a ITEM.

4.5 El Concesionario está de acuerdo en no trastocar la ingeniería ni ningún material del RFI o del software tratando de descubrir los secretos registrados de ITEM. En caso de que tales secretos registrados fueran descubiertos por el Concesionario, intencional o accidentalmente, el Concesionario promete no revelar tales secretos registrados a ningún otro individuo u organización y está de acuerdo en no usar tales secretos registrados para ningún propósito comercial o público.

4.6 El Concesionario está de acuerdo en no pretender ninguna patente registrada o derechos de propiedad basándose en los procesos del RFI.

4.7 Todos y cada uno de los descubrimientos, mejoras o desarrollos que efectúe el Concesionario relacionados a la propia tecnología del RFI, específicamente sobre el funcionamiento, el desempeño, estudio, o empleo del proceso RFI, se convertirán y seguirán siendo propiedad intelectual de ITEM. ITEM reconoce que los descubrimientos y desarrollos con respecto a otras tecnologías que se ayuden meramente por el uso intencional del RFI sigan siendo propiedad del Concesionario como permitido por ley.

4.8 Todas y cada una de las investigaciones, experimentos e informes realizados por el Concesionario se considerarán hechos por el Concesionario como tecnología desarrollada anticipadamente por ITEM para la patente , en calidad de Investigador Científico autorizado por la

agencia de Patentes.

ACEPTACIÓN:

5.1 La aceptación de este acuerdo rige a partir de la pulsación por parte del Concesionario haciendo click en el botón 'SÍ' en la computadora para instalar el software.

5.2 Si el comprador hace clic en el botón “No”, y el software no se instala en ninguna computadora, entonces el comprador de la licencia tiene derecho a devolver el paquete entero contra reintegro del valor de la licencia y del equipo, excluyendo los gastos de transporte y restando un valor de “reabastecimiento” fijado por ITEM.

CLÁUSULAS ESPECIALES PARA LAS ORGANIZACIONES:

6.1 Si el comprador de esta licencia no es un individuo, sino una corporación, sociedad registrada, institución educativa acreditada, cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos o del gobierno de cualquier otro estado, o cualquier organización o entidad, y utiliza el RFI para los estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud o de cualquier otro programa estatal o federal de ciencia, entonces se aplicarán las disposiciones adicionales de la cláusula número 6 (sexta).

6.2 Todo el material Licenciado que describa algún resultado de investigación del propio proceso RFI, ya sea en referencia a Campo de Resonancia por Imágenesä, a Tecnologías de Innovación y Medicina Energética y cualquier declaración con respecto a la efectividad o uso del RFI, no se publicará sin previa autorización escrita por parte del Presidente de ITEM. En reconocimiento del hecho de que las subvenciones y los fondos federales a menudo obligan a difundir los resultados de las investigaciónes, dicha autorización no será irrazonablemente retenida.

6.3 En caso que el Concesionario sea una organización como describe la cláusula 6.1, y violara cualquiera de las Obligaciones del Concesionario, o las Restricciones y Condiciones, o las Disposiciones Especiales para las Organizaciones, el Concesionario por medio de la presente acepta y consiente en pagar los daños y perjuicios fijados en la cantidad de $10,000. La liquidación por daños y perjuicios no evitará ni sustituirá cualquier otro daño y perjuicio que pueda adjudicarse bajo la patente federal, derechos de propiedad, marca registrada y la ley de secreto industrial, exceptuando el consiguiente acuerdo de pago legalmente obligatorio.

OTROS TÉRMINOS DEL CONTRATO:

7.1 El término de este contrato es perpetuo. Si y cuando ITEM obtenga una patente de RFI, el Concesionario retendrá la licencia para usar la tecnología patentada para los propósitos que se especificó en este contrato.

7.2 El Concesionario está de acuerdo a perpetuidad de estar vinculado en todo momento por las Obligaciones, Restricciones y Condiciones de este acuerdo de autorización después de recibir y usar el paquete RFI, a menos que ITEM conceda un descargo escrito de la obligación.

7.3 Aceptando este acuerdo, el Concesionario no se ha atenido a ninguna otra cosa que lo que aparece en este escrito.

7.4 En caso de que cualquiera de las cláusulas anteriores se considere como cláusulas sin valor, todas las restantes mantendrán toda su fuerza y efecto.

7.5 Cualquier disputa que se suscite por efecto de este acuerdo, será sometida a las leyes americanas, y se resolverá en una corte americana de jurisdicción competente.

7.6 El Concesionario concede la jurisdicción personal por la presente a tal corte americana de ley.

7.7 Cualquier disposición especial para el conflicto de leyes no será aplicable.

1.0 CONOCIENDO SU SISTEMA RFI

1.1 ACERCA DE ITEM

Gracias por unirse a los esfuerzos de Innovation Technologies and Energy Medicine (*Tecnologías de Innovación y Medicina Energética*) (ITEM) explorando la tecnología experimental llamada Resonant Field Imaging™ (**RFI**) (*Campo de Resonancia por Imágenes*). (Nota – de aquí en adelante, la abreviación **RFI** será usada para hacer referencia a la marca registrada Resonant Field Imaging™).

ITEM fue originalmente establecido en 1994 por los fundadores del Strategical Task-Force for International Law And Security, LLC (STILAS), como la corporación estadounidense del "Institute of Technical Energy Medicine, Inc.", con el objeto de desarrollar registros, tecnologías "de punta" en los campos de la medicina energética y las ciencia bioenergética.

En el 2002, La propiedad de las tecnologías y los secretos de fabricación del Instituto fueron transferidos a la empresa multinacional de leyes y seguridad STILAS.. Como resultado, ambas corporaciones ahora trabajan conjuntamente en asociación exclusiva bajo la dirección de STILAS, haciendo negocios en la ciencia y la industria de la salud como "Innovation Technologies and Energy Medicine (ITEM)".

ITEM tiene los siguientes objetivos primordiales:

- Usando sus recursos e infraestructura desarrollada, ITEM fabrica nuevas e innovadoras tecnologías, haciéndolas disponibles para los consumidores de altas tecnologías y para el uso personal de los hobbystas, así como también para el uso profesional de los científicos, los psicólogos y los practicantes de la salud.

- ITEM es un servicio completo de investigación y desarrollo y una empresa de comercialización de tecnología, especializándose en tecnologías únicas, registradas en los campos de las electrónica, electromagnética, ciencia cerebral y neurológica y el cuidado de la salud.

- Facultado por los recursos legales y comerciales de STILAS, ITEM provee a los practicantes, investigadores y compañías en el ámbito científico industrial y de salud, con servicios profesionales de desarrollo comercial.

ITEM sigue manejando y ampliando su estructura comercial corporativa, con el "Institute of Technical Energy Medicine, Inc.", el cual hoy funciona dentro de ITEM, Instituto especializado en medicina alternativa y en los sectores de la industria de la ciencia bioenergética. La misión primordial del Instituto es dar a la gente las herramientas para explorar la ciencia bioenergética y la medicina energética por su cuenta, desde una perspectiva crítica y técnica. Esto lo logra principalmente a través del manejo de la popular Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS), y administrando el Programa de Certificación Internacional de Analista en Medicina Energética (CEMA).

1.2 ¿**QUÉ ES EL "AURA"?**

El **RFI**, y la presunción de la existencia del Aura, está basado en los principios que sostienen que toda la actividad mental es electromagnética. Mientras algunos médicos en el campo teórico sostienen que la actividad mental es química, porque los neurotransmisores químicos están implicados, el hecho es que los neurotransmisores son creados sólo cuando los impulsos eléctricos inducen un voltaje en una neurona que excede su umbral de activación. Además, la tecnología del EEG (electroencefalograma) muestra que la actividad mental puede ser efectivamente analizada y monitoreada enteramente bajo principios electromagnéticos.

En ingeniería eléctrica, es un principio establecido que toda corriente eléctrica produce campos electromagnéticos circundantes. En consecuencia, nuestras actividades psicológicas y emocionales son enviadas a todas partes del cuerpo como impulsos eléctricos, irradiando campos electromagnéticos fuera del cuerpo, los cuales son característicos de la actividad mental que los generó. Efectivamente, aún el mero movimiento de átomos producirá un campo electromagnético cuantificable. Esto es claramente observado en el caso de los radioisótopos cargados, pero aún los átomos neutros y las moléculas emitirán un campo generado por el movimiento de valencia de las partículas cargadas de la sub-estructura. Como fue probado por los experimentos de la tecnología rusa de Tesla en la década del ´50, este fenómeno causa en los organismos procariotas la producción de un campo electromagnético externo, el cual consta de las radiaciones combinadas de millones de moléculas en el cuerpo biológico.

1.3 ¿**QUÉ ES EL RFI?**

RFI es un proceso de retro-alimentación electromagnética por imágenes. Esta nueva tecnología brinda información científica detallada e interpretaciones objetivas de todas las Auras y los campos bioenergéticos, e identifica el tipo y función de todas las bioenergías presentes en una región específica del cerebro humano.

En particular, el **RFI** genera perfiles psicológicos completos que revelan íntegramente el papel que juega la psicología del paciente en su salud. Aunque esto no intenta ser un diagnóstico médico para revelar enfermedades, el **RFI** suministra información comprensiva acerca de la salud del paciente, y provee un nivel de información técnico y detallado que los médicos entrenados pueden usar como un factor en sus decisiones profesionales.

Quizá más interesante, es el hecho de que el **RFI** es la primera tecnología de Aura por imágenes que puede crear cartas de bioenergía a todo color de objetos, plantas, animales, y aún de bioenergías del ambiente o de ondas cerebrales en el aire, siendo de uso ilimitado.

El sistema **RFI** identifica e interpreta con exactitud 15 colores de la bioenergía, representando todos los 15 colores distinguibles del espectro óptico, otorgando la máxima utilidad en detalle y precisión de las imágenes e interpretaciones.

El **RFI**, en sí mismo, no es meramente un equipo o un producto. Es un método , o proceso, que requiere de materiales registrados, y es conducido por un intrincado sistema de cálculos y fórmulas. En otras palabras, el **RFI** es realmente una propiedad intelectual, integrada en un sistema de computación que realiza un proceso técnico para generar imágenes a color e interpretaciones. Los principios científicos de este proceso, y las herramientas usadas en este sistema por imágenes, no pueden ser estudiadas en ningún otro lugar excepto con la compra de la licencia para usar el **RFI** como un Investigador Científico de ITEM. Cuando usted compra el paquete **RFI**, usted realmente está comprando la licencia, así como todo el equipo digital de medición y el software de computación, para asegurarle que usted obtendrá los mejores resultados estudiando y experimentando con esta tecnología en crecimiento.

1.4 LA UTILIDAD DEL RFI

Todas las actividades mentales son principalmente eléctricas, y los impulsos eléctricos en el cerebro viajan a través del sistema nervioso, por consiguiente irradian campos eléctricos, los cuales son característicos de la actividad mental que los generó. Por lo tanto, el análisis científico objetivo de los estados mentales y emocionales requiere de una comprensión especializada de las características electromagnéticas de estados mentales diversos, a través del estudio de casos. Trazando un mapa de los campos electromagnéticos que rodean el cuerpo humano, el Aura por imágenes que utiliza el **RFI** nos da un punto de partida objetivo y tangible para el análisis psicológico.

Para desarrollar un sistema de interpretación adecuado para el uso clínico, el inventor Matthew Greene partió de la premisa científica de que el color es frecuencia. Aplicando su experiencia en la ingeniería eléctrica, pudo calcular las frecuencias resonantes del color real como energía

lumínica, y creó una fórmula compleja de correspondencias resonantes y armónicas. Esta fórmula traduce todas frecuencias electromagnéticas perceptibles a sus colores científicamente objetivos. De este modo, los colores del Aura pueden ser detectados identificando la frecuencia precisa del campo bioenergético en una posición específica. El color real de la bioenergía puede ser determinado usando la fórmula para encontrar el color del espectro óptico que corresponde al número de frecuencia bioenergética que fue detectado. Esta fórmula secreta de fabricación es una parte esencial del software de computadora en su paquete **RFI.** Una tabla de asociaciones de la frecuencia con el color es también provista con el **RFI** como una "gráfica de búsqueda rápida" para esas ocasiones en las que usted no tenga su computadora a la mano.

La exactitud de las fórmulas y las interpretaciones de los colores del **RFI** son examinadas extensamente antes de que cada generación de prototipos se haga disponible a nuestros Investigadores Científicos para probar y usar por ellos mismos el análisis.

En una conferencia particular de salud donde ITEM probó y presentó el **RFI,** la imagen a color del Aura resultante pudo haber desempeñado un papel en ayudar a salvar la vida de una mujer. Una mujer de mediana edad pidió una lectura de su nivel de salud en el **RFI**, y el técnico de turno de ITEM halló una "gran banda roja" en la región superior del tórax del cliente. El técnico, sospechando que una concentración excesiva de energía material roja podría potencialmente ser cáncer de mama, le preguntó si ella alguna vez se había realizado una mamografía, a lo cuál la mujer respondió que no. El técnico le aconsejó que ella podría querer hacer una mamografía en un futuro cercano, poniendo énfasis en que no estaba realizando un diagnóstico, pero que meramente era una sugerencia lógica preventiva. Pocos meses más tarde, la mujer le escribió a ITEM elogiando a la tecnología **RFI** por haberla ayudado a identificar un pequeño tumor maligno que le fue satisfactoriamente removido a tiempo. Concluye su carta con la siguiente declaración: “El **RFI** es un instrumento científico que pudo haber ayudado a salvar mi vida, y yo les recomendaría a todos los terapeutas alternativos usar el **RFI** como complemento de su práctica.” (Esta referencia es proporcionada sólo como una demostración de los posibles beneficios del **RFI**, y de ninguna manera implica que **RFI** pueda diagnosticar tales condiciones o garantizar que usted

tendrá tales resultados).

El paquete **RFI** es producto de una investigación exhaustiva en el campo de la electrofísica y la psicobiología. Si usted es médico, quiropráctico, terapeuta físico, psicoterapeuta, practicante de la salud alternativa o alguien a quien le interesa explorar las nuevas fronteras de la ciencia, nosotros confiamos en que usted encontrará en el **RFI** una herramienta interesante y útil para sus propósitos.

1.5 RFI TIENE INTERPRETACIONES CLÍNICAMENTE ÚTILES Y OBJECTIVAS

Muchos científicos y doctores han encontrado particularmente intrigante que la tecnología pueda analizar los estados psicológicos y emocionales. Durante diez años de investigación en este campo, el inventor Matthew Greene encontró que la propia emoción es esencialmente una reacción energética de la percepción. Primero, uno tiene percepciones psicológicas de uno mismo y de su entorno. Esta percepción, siendo un proceso mental, induce impulsos eléctricos característicos en el cerebro, los cuales pueden afectar recorridos nerviosos parasimpáticos relacionados o glándulas endocrinas (por ejemplo, la percepción del miedo estimula las glándulas suprarrenales vía el cerebro). Ya que el cerebro está neurológicamente conectado al cuerpo humano en su totalidad, estos impulsos eléctricos pueden viajar a través del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, creando los campos eléctricos característicos.

La investigación actual por otro lado sugiere que ciertos niveles bioeléctricos del campo del Aura son causados por ciertos acontecimientos dentro del organismo biológico. La actividad biológica inicia, como respuesta autonómica, una serie de cambios celulares y electroquímicos, creando así un ambiente termodinámicamente favorable para la conversión de energía metabólica cinética en energía electromagnética. En este proceso, la bioenergía localizada “se vuelve compleja” para formar un campo dinámico que se distingue de acuerdo a la información neurológica que lo estimuló. Ya que los músculos y la piel no son ninguna barrera para dicha energía electromagnética, el campo bioenergético puede y de hecho irradia fuera del organismo

convirtiéndose en lo que llamamos Aura.

Según la citada biofísica, la información acerca del estado de "salud" del organismo complejo está disponible a partir de la coordinación de las energías sub-celulares, casi de la misma manera que en un procariota. Cualquier disminución en la homeostasis, incluyendo la infección parasitaria, la mutación genética, la constricción arterial, etc., producirá una correspondiente modificación en el campo bioeléctrico. **RFI** es una tentativa inicial para cuantificar e interpretar objetivamente dichas modificaciones.

1.6 RFI TIENE BASES CIENTÍFICAS FIRMES

La tecnología **RFI** comenzó como un experimento para descubrir las bases científicas para el uso clínico del Aura por imágenes tal como la fotografía Kirlian, y para legitimar las imágenes del Aura en general. Aún mientras hay algunos dispositivos altamente efectivos y sofisticados, previamente no ha habido justificación razonada y empírica para la interpretación de los colores del Aura y el análisis de las condiciones de la salud psíquica y física.

Las hipótesis de los experimentos iniciales con el **RFI** fueron que si la fotografía y la visualización del Aura fuesen reales, entonces las cámaras de medición del Aura y los psíquicos "videntes" verían exactamente los mismos colores que los identificados como colores objetivos de la frecuencia del biocampo, científicamente recogidos por el **RFI**. En una prueba preliminar controlada con 10 reconocidos "psíquicos videntes del Aura", puestos en pares separados con 10 clientes del sistema por imágenes, el **RFI** verificó los mismos colores que los psíquicos, en las 10 oportunidades. En otro experimento, 10 Rusos con facultades "extrasensoriales" - especialistas certificados entrenados en trabajos bioenergéticos y con educación en medicina – probaron la detección del **RFI** proyectando a voluntad colores específicos en su Aura. En estudios de doble ciego, los psíquicos anunciaron los colores que ellos intentaban proyectar, encontrando que las frecuencias verificadas por el **RFI** de los colores que los psíquicos proyectaban coincidían en un 100% todas las veces.

En Enero de 1995, el Fundador de ITEM, Matthew Greene, dio una presentación formal del **RFI** en el departamento principal, el Moscow Bauman State Technical University, en Rusia. El fundamento científico para la interpretación correcta de las imágenes del **RFI** fueron discutidas en detalle, y científicos de varias disciplinas ofrecieron comentarios y críticas constructivas. Basado en el debate de esta reunión, ITEM ha desarrollado principios técnicos que incrementan la legitimidad y los usos clínicos del Aura por imágenes del **RFI**. ITEM continúa con esta investigación hoy día, y los usuarios licenciados del **RFI** recibirán actualizaciones cada vez que se realicen nuevos avances.

1.7 SU PAQUETE RFI INCLUYE

1) Un comprensivo manual técnico, **Resonant Field Imaging™ (Campo Resonante por Imágenes™) Manual Técnico para Aplicaciones Clínicas y Científicas**, conteniendo instrucciones detalladas sobre cómo usar su sistema **RFI** para producir imágenes a todo color e interpretaciones del Aura y del cerebro humano.

2) **El Contador de Frecuencia de Mano** y la antena especialmente templada, producida por un fabricante independiente de equipamiento científico estándar. Nosotros probamos y seleccionamos diversos instrumentos de diferentes fabricantes, y seleccionamos el más adecuado para los procesos **RFI**, y el que da mejores resultados, con la máxima flexibilidad y de fácil manejo.

3) **Exclusivo Software de Computación diseñado especialmente** , el cual incluye:

- **Aura por Imágenes Completa del Cuerpo Humano**, que imprime imágenes a todo color y detalladas interpretaciones del Perfil Psicológico, Perfil de Salud, y las Ondas Cerebrales de sus clientes.

- **Mapeo Cerebral de calidad Médica**, que imprime imágenes a todo color del cerebro, y detalladas interpretaciones de las bioenergías del lado derecho del cerebro, bioenergías del lado izquierdo del cerebro, y las bioenergías del cerebro integrado.

- **Sistema de Clasificación**, que le permite salvar y recuperar los archivos de datos de sus clientes. Esto le da la libertad de reimprimir las imágenes y las interpretaciones de los clientes con posterioridad, y la habilidad de documentar científicamente estudios clínicos sobre la efectividad de terapias experimentales o tratamientos médicos.

- **Análisis de Punto / Objeto**, que le permite identificar las bioenergías de una sola región del Aura, y recibir la interpretación del nivel Psicológico o de Salud del color de la bioenergía detectada en esa región. Esto le brinda la total libertad para leer el Aura humana en todo el detalle que usted desee, y la habilidad única de identificar y analizar las bioenergías de objetos, plantas, animales, o incluso de fenómenos paranormales.

El Software de Computación requiere Windows 98 o superior o Macintosh OS X o superior, capacidad VGA para 256 colores, unidad de CD-Rom o disquetera, y una impresora a color. Está diseñado para funcionar en toda su capacidad aún en computadoras portátiles.

4) **Licencia de Por Vida** para usar esta tecnología exclusiva, y todo el material registrado incluyendo el programa de computación, Interpretaciones, gráficas de imágenes y el Manual Técnico.

5) **Soporte Técnico**. Nosotros responderemos gustosamente cualquier pregunta para ayudarlo en el uso del **RFI** en su práctica de salud o en su investigación científica. Nosotros procesamos regularmente todas las preguntas de nuestros usuarios licenciados

del **RFI**, llevamos nuestra investigación más allá para descubrir las mejores respuestas, y actualizamos el sitio **RFI** de ITEM con dicha información. Nosotros preferimos que usted se contacte vía correo electrónico (**Central@item-bioenergy.com**), pero siéntase también en la libertad de llamarnos a nuestra línea gratuita de fax/teléfono de la central de EE.UU, 1-888-304-ITEM (1-888-304-4836).

6) **Ambo Blanco de Laboratorio 100% Algodón**, que recomendamos que lleve puesto para realizar las mediciones con el **RFI**, como se indica en la **Sección 3.0** de este Manual.

7) **Ubicación Gratuita en el Directorio Internacional de los Profesionales de la Medicina Energética de ITEM**. Por un año, ITEM publicará vuestros servicios y maestría en el nuevo directorio en línea de ITEM. Si usted quisiera participar, por favor, envíe un correo electrónico a **Central@item-bioenergy.com**, incluyendo su nombre completo y aquello que quiera que aparezca en nuestro sitio, sus graduaciones, información completa para contactarse con usted, compañía (si corresponde), y una breve descripción de su área de trabajo y su maestría en el amplio campo de la medicina energética.

 © 2005 ITEM

2.0 COMPRENDIENDO LAS AURAS Y LAS BIOENERGÍAS

2.1 INTRODUCCIÓN BÁSICA AL TEMA DEL AURA

Durante muchos milenios de historia humana ha sido una creencia generalizada que todos los objetos, y especialmente el cuerpo humano y el de los animales, tienen un campo Aúrico (o campo electromagnético (EM)), y que este Aura puede ser visible al ojo entrenado. Hacia fines del siglo XIX la ciencia metafísica se explayó sobre este concepto con la teoría por la cual todas las cosas poseen un cuerpo de sustancia etérica, conocido como Cuerpo Etérico, compuesto por las frecuencias más elevadas de energía sutil y de partículas cuánticas refinadas de la pre-materia, las cuales están íntimamente ligadas al cuerpo físico como un producto generado por la materia mediante la exteriorización del campo eléctrico constituido por las partículas cuánticas en el plano físico.

Considerando la mecánica de los campos de energía sutil y la interacción materia-energía que desarrollaron a finales del siglo XX las ciencias académicas de Bio-energo-informática y la física del campo de torsión, y dado el estado de avance de la instrumentación científica moderna, parece bastante lógico y razonable concluir que el Aura puede ser cuantificada y estudiada de manera tangible en forma experimental. Ciertamente, ya que los colores de la luz son definidos como frecuencias, las energías sutiles y la bioenergía que emana de todas las cosas vivientes puede ser cuantificada como energía de campo electromagnético que resuena con diferentes frecuencias de luz.

De hecho, mucho se ha aprendido en este siglo acerca de las propiedades lumínicas de los campos de energía sutil y de las Auras con los trabajos de tan prominentes científicos como el doctor polaco Iodko-Narkovitz, quien trabajó con foto-electricidad y medición de campos eléctricos, el inventor ruso Semyon Davidovich Kirlian, quien experimentó con las cualidades y los significados del Aura usando fotografía y campos eléctricos por imagen, y el doctor británico Walter J. Kilner, quien eventualmente inventó una serie de gafas y filtros a través de los cuales cualquiera puede ver Auras en detalle. Muchas personas también están al tanto de la invención

de Harry Oldfield, la Fotografía de Policontraste por Interferencia (PIP), la cual visualiza patrones de luz que irradian de los organismos biológicos y de los objetos inanimados. De hecho, actualmente la lista de invenciones que utilizan a las energías sutiles como parte del tratamiento y los detectores de energía sutil es tan larga que posiblemente no los podríamos discutir todos ellos aquí en este Manual. En este Manual nosotros enfocamos nuestra atención en el **RFI,** un proceso que lo introducirá a usted en la detección de la energía sutil la y en el nuevo y excitante campo de la ciencia bioenergética, comúnmente llamado bioelectromagnetismo.

Para los propósitos de investigación científica a nivel universitario, la presunción de la existencia del Aura puede basarse en el principio de que toda actividad mental implica un intercambio electrostático o electromagnético de energo-información o información energética. Mientras los teóricos en medicina tienden a sostener la opinión de que la actividad mental es meramente química, debido a los neurotransmisores químicos implicados, la realidad es que los neurotransmisores son creados sólo cuando los impulsos eléctricos provocan un voltaje en una neurona que excede el umbral de excitación de ese nervio. Además, la tecnología EEG (electroencefalograma) demuestra que la actividad mental puede ser eficazmente analizada y monitoreada en su totalidad bajo principios electromagnéticos.

En la ingeniería eléctrica, es un principio establecido que todas las corrientes eléctricas moviéndose a través de un cable producen campos electromagnéticos circundantes. En consecuencia, cuando nuestras energías psicológicas y emocionales son enviadas por todo el cuerpo como impulsos eléctricos por senderos biológicos (neurales) y energéticos (meridianos), estas transmisiones originan campos electromagnéticos que irradian fuera del cuerpo. Por este proceso, las funciones tangibles (frecuencia, formas de onda, etc.) de estos campos radiantes de energía eléctrica son características de la actividad mental que los generó, como la vasta investigación en este campo ha revelado.

Efectivamente, aun el mero movimiento de átomos producirá un campo electromagnético cuantificable. Esto se observa más claramente en el caso de los radioisótopos cargados, pero aún los átomos neutros y las moléculas emitirán un campo por el movimiento de valencia de las

partículas cargadas de la sub-estructura. Como fue probado por los experimentos de la tecnología rusa de Tesla en los años `50, este fenómeno hace que los organismos procariotas produzcan un campo electromagnético externo, el cual, en el cuerpo biológico, está constituido por las radiaciones combinadas de millones de moléculas.

Muchos investigadores en este campo creen que los organismos biológicos complejos, como la humanidad, también producen frecuencias del tipo eléctrico de manera similar, pero que además de la contribución atómica y molecular, el sistema nervioso y los meridianos de energía juegan un papel significativo. Los nervios y las sinapsis nerviosas llevan corrientes eléctricas tan grandes como 55 milivoltios (mV) para la excitación neuronal, y algunas veces tanto como 3 voltios para los impulsos motores (para mover los músculos), los cuales irradian campos eléctricos mayores según la física del campo eléctrico. Todos estos campos radiantes, clasificados como bioenergía, son la esencia ciento por ciento tangible y la definición de la Aura humana.

Muchos científicos y doctores han estado particularmente intrigados por las afirmaciones de los científicos metafísicos de que la información energética del Aura puede usarse exactamente para analizar los estados psicológicos y emocionales de un paciente. Esta afirmación es mejor comprendida y medianamente bien sustentada abordando un poco más las causas tangibles conocidas. Los investigadores y asesores científicos de ITEM, tras nueve años procesando la investigación basada en la ingeniería eléctrica, se han encontrado con que la emoción misma es esencialmente una reacción energética a una percepción. En primer lugar, uno tiene una percepción psicológica de uno mismo y del entorno. Esta percepción, siendo un proceso mental, induce impulsos eléctricos característicos en el cerebro, los cuales son transmitidos a los nervios parasimpáticos relacionados o a las glándulas endocrinas. Por ejemplo, una percepción de miedo crea impulsos eléctricos específicos en el cerebro que transmiten impulsos eléctricos neuronales para estimular las glándulas suprarrenales. Ya que el cerebro está neurológicamente conectado al todo el cuerpo humano, estos impulsos eléctricos pueden viajar a todo lo largo del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, creando campos eléctricos característicos.

La investigación actual por otro lado sugiere que ciertos niveles bioeléctricos del campo del Aura son causados por ciertos acontecimientos dentro del organismo biológico. La actividad biológica inicia, como respuesta autonómica, una serie de cambios celulares y electroquímicos, creando así un ambiente termodinámicamente favorable para la conversión de energía metabólica cinética en energía electromagnética. En este proceso, la bioenergía localizada "se vuelve compleja" para formar un campo dinámico que se distingue en base a la información neurológica que lo estimuló. Ya que los músculos y la piel no son ninguna barrera para dicha energía electromagnética, el campo bioenergético puede y de hecho irradia fuera del organismo convirtiéndose en lo que llamamos Aura.

Según la citada biofísica, la información acerca del estado de "salud" del organismo complejo se hace accesible desde la coordinación de las energías sub-celulares, casi de la misma manera que en un procariota. Cualquier disminución en la homeostasis, incluyendo la infección parasitaria, la mutación genética, la constricción arterial, etc., producirá una correspondiente modificación en el campo bioeléctrico. El **RFI** es una tentativa inicial para cuantificar e interpretar objetivamente dichas modificaciones.

De esta manera, el análisis científico objetivo de las condiciones mentales, emocionales y de la salud, precisa una comprensión especializada de las características electromagnéticas de diversos estados psicológicos y biológicos, a través del estudio de casos. Trazando un mapa de los campos electromagnéticos que rodean al cuerpo humano, nosotros tenemos un punto de partida objetivo y tangible para comenzar dicho análisis clínico.

El Aura está fuertemente caracterizada y afectada por las condiciones emocionales y físicas de la persona, por la homeostasis biológica o el desequilibrio de la vida vegetal, o por las energías moleculares inherentes dentro y alrededor de un objeto. Esto hace de la lectura de Auras una herramienta muy útil y poderosa para el análisis metafísico y clínico de humanos, animales, plantas y objetos.

Las energías metafísicas están formadas por las energías sutiles del campo eléctrico del ambiente que está cargado de información. Dado que la frecuencia de los campos electromagnéticos y la información de la energía sutil revelan el tipo y la función de dichas energías, todas las energías metafísicas pueden ser identificadas por su frecuencia. Ya que el color está definido como frecuencia y el Aura es meramente una radiación electromagnética de frecuencias diversas, el Aura puede ser eficazmente analizada identificando qué colores están en qué parte del Aura.

Las frecuencias de color de la luz, de la cual el Aura consiste, son demasiado altas para ser percibidas por el ojo desnudo en la mayoría de los casos. Sin embargo, el practicante entrenado puede aprender a percibir estas frecuencias naturalmente, activando la Glándula Pineal y ajustando sus ondas cerebrales a las frecuencias superiores de las cuales el Aura consiste. Muchos psíquicos o practicantes metafísicos tienden a ver el Aura en seis colores básicos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, y violeta. Aunque el Aura misma consta de frecuencias más altas que esas en el espectro de la luz visible, las energías electromagnéticas en el Aura tienen frecuencias sub-armónicas, inferiores, que resuenan con las frecuencias de cada uno de los colores del espectro de la luz visible. Por consiguiente, aunque las Auras no son visibles para el ojo desnudo, el cerebro puede percibir las energías en resonancia con ciertos colores, y por consiguiente puede construir una imagen cuasi visual (mental) de percepción de esos colores. Es precisamente de esta manera que la humanidad algunas veces ve el Aura, y puede analizar sus diferentes colores. Esas frecuencias sub-armónicas del Aura son las que el **RFI** está diseñado para medir. Estas frecuencias están generalmente en niveles de entre 100 y 800 MHz (aunque a veces pueden ser superiores o inferiores), y en general existen en una gama entre y dentro de las ondas de TV, FM y microondas, entre moderado y fuerte. En la **Sección 5.0** se explica por qué, en casi todas las circunstancias, es posible medir las frecuencias del Aura excluyendo otras ondas.

Por todas las razones citadas anteriormente , ver el Aura e interpretar su color ha sido, por siglos, el centro de atención de la metafísica popular , y "¿ De qué color es mi Aura"? es un juego muy

popular en los círculos metafísicos y espirituales. Sin embargo, la mayoría de la gente "ve" colores que no corresponden al color objetivo de la frecuencia del Aura real. Esto es porque hacen una asociación psicológica entre "lo que sienten" respecto de la energía del Aura, y el color que "perciben" de manera intuitiva. El color asociado es entonces inducido magnéticamente en el centro visual del cerebro, así es como la persona "ve" ese color al mirar esa parte del Aura. Como resultado de este fenómeno psicológico común, la inmensa mayoría de la literatura sobre Auras y sobre los colores de la misma son enteramente subjetivos de la psicología de los autores, y los significados dados a entender sobre los colores son casi enteramente arbitrarios.

A pesar de tales limitaciones humanas, el estudio científico adecuado de las frecuencias del campo eléctrico del Aura, y de las frecuencias de color que corresponden a las frecuencias del Aura, puede revelar información objetiva y precisa acerca de sus colores y de su interpretación. Además, es posible ver los colores objetivamente correctos del Aura canalizando la frecuencia real de la bioenergía directamente de la corteza visual del cerebro. Esta práctica especializada de monitoreo auto-cerebral puede completarse con entrenamiento y práctica, usando objetos y equipo electromagnético de laboratorio que sea ajustado con las frecuencias fijas conocidas. Practicando con tales materiales como generadores, de procedencia confiable, el practicante puede aprender exactamente a reconocer los colores objetivamente correctos en el Aura. Por lo tanto, mientras las impresiones emocionales subjetivas acerca del color del Aura sólo tienen un valor simbólico o artístico, el acercamiento científico objetivo para ver el Aura tiene un valor práctico y clínico.

Dado que la visualización humana del Aura tiene el riesgo inherente de caer en un elemento subjetivo sustancial que puede sacrificar la exactitud y el detalle, ITEM desarrolló el **RFI** para eliminar tales elementos subjetivos y legitimar este fenómeno a través de la aplicación de las leyes incontestables de la ciencia fundamental.

2.1.1 **Estructura del Aura**

Toda interpretación de los colores objetivos del Aura es condicional al entendimiento de la estructura del Aura misma. Cada parte y cada nivel del Aura humana describe aspectos diferentes de la psicología de la persona o de su salud física, y algunas veces revela una interacción de ambos factores físicos y mentales. Entendiendo la estructura del Aura humana, nosotros podemos estudiar el significado objetivo de los colores del Aura dentro de un contexto.

Está actualmente sin resolver exactamente cuántos "niveles" hay en el Aura humana. Los estudios clínicos del Aura humana en ITEM, sin embargo, indican que la existencia metafísica de una entidad viva encarnada consta de cuatro Cuerpos Aúricos básicos.

El más elevado de los Cuerpos Aúricos es el **Cuerpo Causal,** el cual está tradicionalmente descripto como nuestro "Yo Superior" espiritual, relacionado con nuestra identidad personal más profunda. La ciencia metafísica actual describe al *Cuerpo Causal* como la muestra directa de la energía sutil universal de alta frecuencia que recibe conciencia individual y se manifiesta como una entidad que puede existir en el mundo físico de la materia. Tradicionalmente llamada *psique*, o *alma*, el *Cuerpo Causal* es el campo primario de energía sutil que encierra nuestro ser metafísico y contiene nuestra conciencia más profunda. El *Cuerpo Causal* puede ser detectado alrededor de las 24 pulgadas (60 cm) por encima de la cabeza y los hombros, y aún más allá.

El siguiente nivel identificable es el llamado **Cuerpo Etérico,** el cual está asociado a las partículas cuánticas de la pre-materia, animadas e influenciadas por las energías de fuerza vital eléctrica del Cuerpo Causal. Este cuerpo también contiene las huellas de todas las cualidades y energías temporales que adquirimos mientras estamos encarnados y que hacen a nuestra personalidad. Según las antiguas teorías de reencarnación, estas energías impresas pueden más tarde ser incorporadas al Cuerpo Causal básico, si es que ellas pueden ser útiles para las posibles encarnaciones futuras. El Cuerpo Etérico refleja nuestra identidad, y consiste del promedio más estable de nuestras energías generales. En general, el Cuerpo Etérico puede ser detectado entre

las 18 y 24 pulgadas (45 y 60 cm) más allá del cuerpo físico. Por su distancia del cuerpo físico, este nivel del Aura juega un papel importante en cómo interactuamos con otras personas, ya que entra en contacto con los cuerpos etéricos de los otros y participa de un intercambio mutuo de información energética, ambos proyectando y recibiendo energía.

Algunos investigadores en el campo de la ciencia de la información energética (energo-información) creen que los Cuerpos Causal y Etérico "provocan" la manifestación del cuerpo físico en el espacio-tiempo. Ellos creen que estos Cuerpos son el "diseño" o el "anteproyecto" del cuerpo físico, y contendrían las instrucciones para las moléculas físicas de ADN de cómo manifestarse. Semejante pregunta y semejante investigación, sin embargo, están fuera del alcance de este Manual.

El tercero, y el más claramente identificable, de los cuatro Cuerpos básicos del Aura es el llamado **Cuerpo Emocional.** Éste es el nivel más útil para el análisis e interpretación científica, porque está altamente caracterizado por el estado emocional y psicológico del sujeto. Generalmente, el Cuerpo Emocional puede ser detectado entre las 4 y las 18 pulgadas (10 a 45 cm) fuera del cuerpo físico. Por la riqueza de información psicológica que puede ser obtenida de este nivel del Aura y por ser utilizado para generar un perfil psico-personal cabal, en la tecnología del **RFI** es el comúnmente llamado **"Nivel Psicológico".**

El **Nivel de Salud** del Aura, el cuarto y más tangible de los Cuerpos Aúricos, está formado esencialmente por la energía sutil que irradia del cuerpo físico. Ésta parte naturalmente más visible del Aura es el campo bioenergético que emana del medio celular, neurológico, y de otras funciones biológicas del cuerpo físico. El Nivel de Salud de esa manera revela la condición física del sujeto, mostrando perturbaciones y patrones que guardan relación con la enfermedad o con otras condiciones biológicas. En general, el Nivel de Salud puede ser detectado aproximadamente entre 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) fuera del cuerpo físico.

La tecnología del **RFI** está diseñada para cuantificar, analizar e interpretar los dos "niveles" más

tangibles y prácticamente más significativos del Aura que son los más cercanos al cuerpo físico: El *Nivel de Salud* y el *Nivel Psicológico*.

2.1.2 **Estructura de los Chakras**

Las regiones espaciales correspondientes a los puntos endocrinos a lo largo de la columna vertebral, medidos desde el frente, son también una parte integral del Aura humana. Estos puntos, tradicionalmente conocido como "Chakras," entregan intensas emanaciones de origen eléctrico que parecen salir disparadas en línea recta hacia adelante, perforando todos los niveles perceptibles del Aura. Las lecturas del Aura de los puntos endocrinos revelan las características inherentes y actuales de la personalidad del sujeto, o las cualidades y emociones internas.

Los Chakras, o emanaciones bioenergéticas de las regiones alrededor de varios puntos a lo largo de la columna vertebral, son siempre considerados como parte del Cuerpo Emocional, aun cuando son leídos en el Nivel de Salud del Aura, ya que atraviesan todos los niveles del Aura. Como fue establecido a finales del siglo XX por los avances de la ciencia académica de Bio-energo-informática (los cuáles están fuera del alcance de este manual), los canales de energía denominados Chakras, están relacionados con el sistema endocrino físico. En consecuencia, si un análisis del Nivel de Salud es necesario, entonces uno puede asumir que un disturbio o un desequilibrio en un Chakra estará vinculado con el mal funcionamiento de una glándula endocrina (por hiper o hipo estimulación de la glándula).

Tomados conjuntamente, los Chakras se consideran tradicionalmente el "sistema nervioso" del cuerpo metafísico, ya que es a través de ellos que las energías vitales son recibidas, procesadas, y transmitidas, y es a través de ellos que cuerpo, mente, y espíritu son conectados en un sistema integral. Esta concepción tradicional parece validada en parte, porque las glándulas específicas del sistema endocrino del cuerpo humano son activadas por las frecuencias bioenergéticas que les corresponden. Como resultado de la sensibilidad y el grado de reacción directo del sistema endocrino a los estados psicológicos y mentales, a los acontecimientos y reacciones, las lecturas

del Aura en los puntos de los Chakras han probado revelar información fidedigna e intuitiva acerca de muchos aspectos de la condición mental, emocional y psicológica de una persona, así como también algunos procesos de pensamiento.

Recientes investigaciones en psicología y psicobiología sostienen que las glándulas endocrinas actúan en respuesta directa a todos los acontecimientos mentales, siendo un medio indicativo de la condición mental y psicológica de una persona. Ya que las glándulas endocrinas son estimuladas por, y corresponden a, frecuencias identificables específicas, y dado que el color es frecuencia, ITEM los ha usado estas premisas como un punto de partida para la interpretación objetiva del significado y el sentido preciso de colores diversos. Los datos médicos y de la psicobiología clínica claramente ilustran el significado y el sentido de la actividad endócrina; las actividades endocrinas están clara y directamente relacionadas con las frecuencias objetivas de color.

En resumen, las frecuencias de información energética encontradas en el Aura son idénticas a aquellas encontradas en los Chakras. Además, los Chakras emanan bioenergías que son receptivas a, e indicativas de, la actividad y el estado de las glándulas endocrinas correspondientes. Las glándulas endocrinas, a su vez, están directamente influenciadas y estimuladas por acontecimientos y condiciones psicológicas y somáticas. Como resultado de esta mecánica, hay una base firme, creíble y científica para relacionar a los colores de la bioenergía del Aura con acontecimientos y condiciones psicológicas y médicas específicas.

Es también interesante notar que la investigación experimental intensiva ha mostrado que las frecuencias de color relacionadas a los Chakras sobre los puntos endocrinos son idénticas a los colores primarios básicos tradicionalmente "vistos" por los psíquicos, y actualmente detectados por otras tecnologías de Aura por imágenes.

El número exacto de colores del Aura y de los Chakras está actualmente sin resolver. Tradicionalmente, hay siete colores primarios para los Chakras, los cuáles son usados como una

base para interpretar todos los colores del Aura. Como hay un número infinito de frecuencias, y el color es frecuencia, hay teóricamente centenares de otros colores y matices de colores de energías en los Chakras. Por esta razón, en la literatura popular hay muchas afirmaciones diferentes que insistien sobre algunos que otros diversos números "correctos" de Chakras o de colores relacionados con el Aura. En realidad, hay un infinito teórico de colores diferentes de bioenergía y de energía sutil. No obstante, sólo los siete Chakras básicos tienen frecuencias precisas de color que son conocidas por afectar las glándulas endocrinas, y de tal manera todos los otros colores sólo pueden basarse en la mera filosofía y la conjetura, y algo semejante es incompatible e inservible para un sistema científico objetivo de análisis de la bioenergía y el biocampo. Por esta razón, puede haber otros Chakras adicionales o intermedios, pero no funcionarían en las frecuencias correctas para interactuar con el sistema nervioso físico y con las glándulas endocrinas. Por consiguiente, estos nuevos Chakras o colores intermedios serían meramente sintomáticos o diagnósticos, basados en el estudio de los casos, pero no serían funcionales para una interpretación verificable.

Mientras el **RFI** usa un total de 15 colores, representando a todos los colores distinguibles del espectro óptico, sólo siete de estas frecuencias verificables de color están relacionadas con el sistema de los Chakras. Los siete Chakras primarios medidos por el **RFI** están tipificados de la siguiente manera:

El **Chakra Base**, localizado en el área genital, tiene una frecuencia de información energética que se corresponde con el color **rojo**. El Chakra Base tiene incidencia sobre los ovarios y los testículos como glándulas. Estas energías están experimentalmente asociadas con la sexualidad, la propia identidad y con las energías puramente físicas o materiales.

El **Chakra Sacral**, localizado encima del área genital, justo debajo del ombligo, se corresponde con el color **naranja**. EL Chakra Sacral tiene incidencia sobre las glándulas suprarrenales, específicamente sobre la médula suprarrenal. Estas energías están asociadas con la curación, la generación de la fuerza vital, y con la vitalidad física.

El **Chakra del Plexo Solar**, localizado alrededor del ombligo, se corresponde con el color **amarillo**. El Chakra del Plexo Solar tiene incidencia sobre los islotes pancreáticos como glándulas, así como sobre el sistema nervioso físico. Estas energías están asociadas con la calma y la estabilidad emocional, o con su carencia.

El **Chakra Cardíaco**, localizado en el centro del pecho, en el área del corazón, se corresponde con el color **verde**. El Chakra Cardíaco tiene influencia sobre la corteza suprarrenal , la tiroides y la glándula pituitaria anterior, ocasionando así manifestaciones biológicas de emoción, y controlando la secreción hormonal en todo el sistema endócrino. Estas energías están asociadas con las emociones profundas y el amor, o con emociones fuertes, incluido el trauma emocional.

El **Chakra de la Garganta**, localizado en el centro de la garganta, se corresponde con el color **azul**. El Chakra de la Garganta tiene influencia sobre la tiroides y la paratiroides, y estas energías están asociadas con la comunicación, tanto con la expresión como con la escucha.


El **Chakra del Entrecejo**, localizado en el centro de la frente, entre las cejas, se corresponde con el color **violeta**. El Chakra del Entrecejo tiene incidencia principalmente sobre la glándula pineal, así como sobre el cerebelo, y estas energías están asociadas con la clarividencia, la sensibilidad, la intuición y con la actividad intelectual.

El **Chakra Coronario**, localizado directamente encima de la cabeza, se corresponde con el color **lila** (un violeta muy claro). El Chakra Coronario tiene incidencia principalmente sobre la glándula pituitaria anterior, así como sobre la corteza cerebral y el cerebro. Estas energías están tradicionalmente asociadas con el yo metafísico superior, el espíritu y con la conciencia divina.

Un sistema de Chakras que se conforma por los colores primarios indicados arriba es generalmente considerado como "balanceado" en el sentido metafísico popular y en el de la medicina energética. Sin embargo, usted se encontrará con que es inusual encontrar un sistema

de Chakras resonando en las frecuencias de luz correspondientes a los colores primarios. A menudo, los colores intermedios (rosa, azul marino, oro, etc.) son encontrados en el sistema de Chakras, o pueden resonar en un color diferente que el color primario que tradicionalmente se asociase con él. Esto es completamente natural, y está altamente condicionado por la forma en la cual el sujeto interactúa con el ambiente. El programa del software del **RFI** provee interpretaciones para todos los Chakras y los colores en los cuales ellos corrientemente resuenan, sin preocuparse por si el Chakra individual o el sistema de Chakras está "balanceado" en el sentido tradicional.

El libro de texto de ITEM, "***Conferencias sobre la Ciencia de la Energo-informática: Un Programa de Dos Meses en Medicina Energética",*** el cual es el Paso 2 de la Serie de Desarrollo Profesional (PDS) de ITEM en Medicina Energética, comprende el debate de los principios científicos de la mecánica de los Chakras. Una copia de algunas partes relevantes de este libro de texto está reimpresa en el **Capítulo 7.0**.

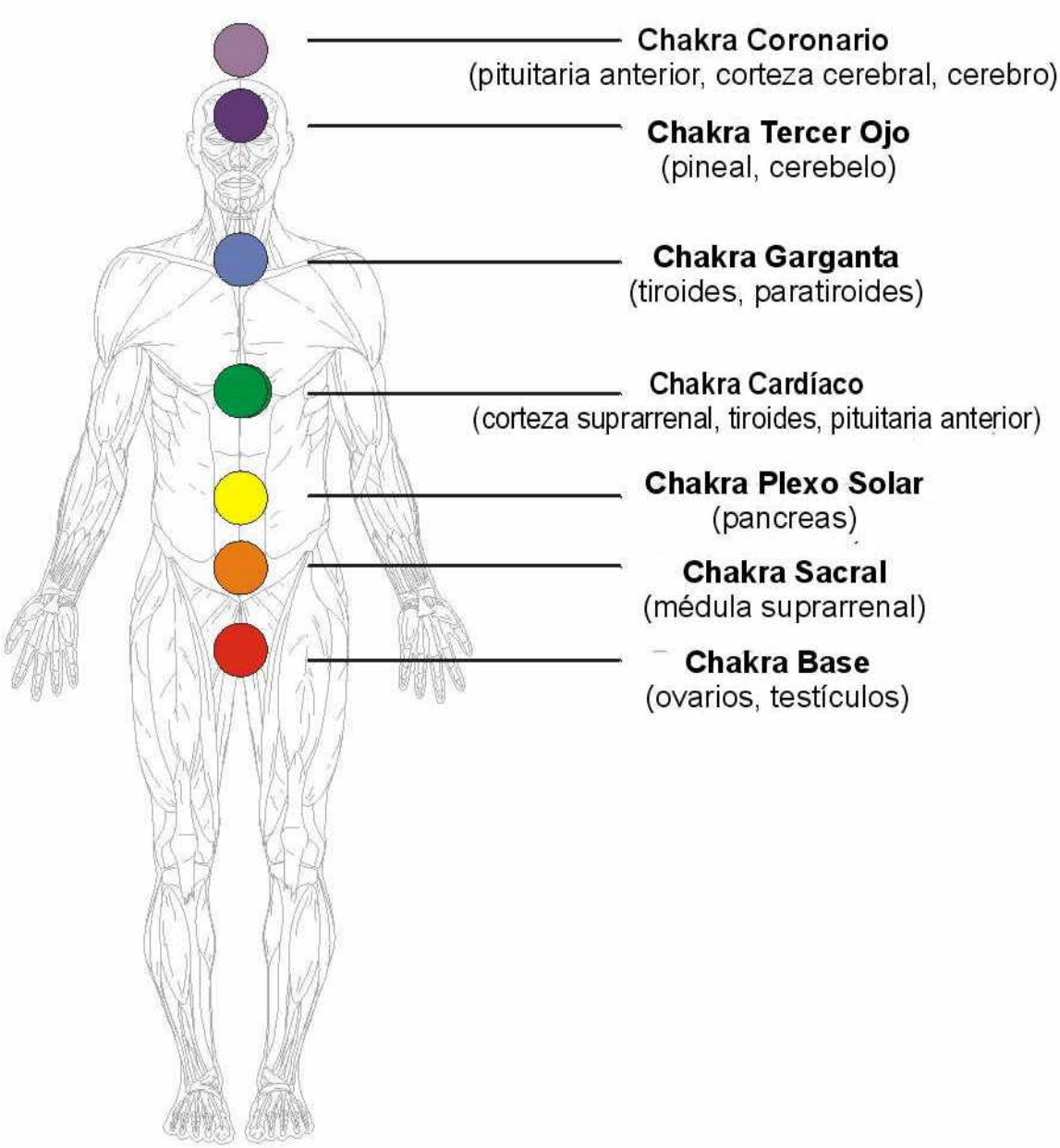
Chakra Coronario
(pituitaria anterior, corteza cerebral, cerebro)
Chakra Tercer Ojo
(pineal, cerebelo)
Chakra Garganta
(tiroides, paratiroides)
Chakra Cardíaco
(corteza suprarrenal, tiroides, pituitaria anterior)
Chakra Plexo Solar
(pancreas)
Chakra Sacral
(médula suprarrenal)
Chakra Base
(ovarios, testículos)


 © 2005 ITEM

2.2 LAS PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS DE LA BIOENERGÍA

La intención de este Manual no es la de servir de curso introductorio a la física del electromagnetismo. Sin embargo, es importante tener una comprensión básica de las ondas electromagnéticas (EM) y de los campos donde se desempeña el **RFI**. Es este capítulo, solo informaremos acerca de algunas características importantes de las ondas EM en relación con las bioenergías y la medición con el sistema **RFI**.

2.2.1 Fundamentos sobre Ondas Electromagnéticas

La radiación electromagnética viaja en forma de ondas. La figura de abajo ilustra una onda EM propagándose a través del espacio. Las ondas EM están conformadas por campos eléctricos (*Campo-E*) y campos magnéticos (*Campo-H*), de allí el nombre de "electromagnético." Los Campos-E y los Campos-H son compañeros, viajando perpendicularmente el uno con el otro y perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, formando en conjunto el campo EM. La potencia del Campo-E es medida en unidades de voltios por metro (V/m), mientras que la potencia del Campo-H es medida en amperios por metro (A/m). Las medidas de la potencia del Campo EM indican cuántos voltios o amperios inducirá un campo EM en una antena receptora de un metro de largo.

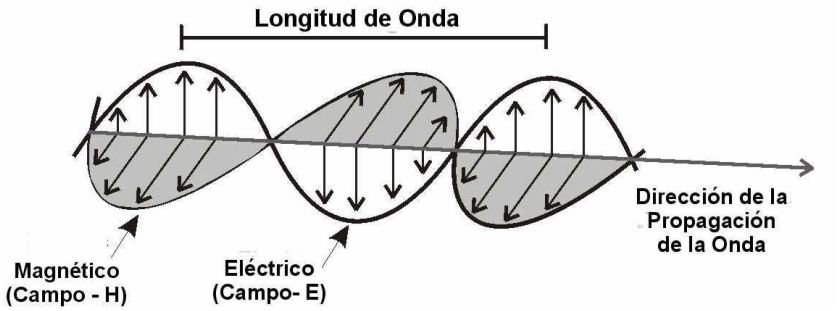

Las ondas EM se originan como consecuencia de dos efectos: (1) Un campo eléctrico inestable, o (2) un campo magnético inestable. Ni las cargas estacionarias ni las corrientes estables generalmente producen ondas electromagnéticas. El mecanismo fundamental responsable de la

radiación EM es la aceleración de las partículas cargadas. Cada vez que las partículas cargadas experimentan aceleración, deben irradiar energía. El componente fisiológico de la bioenergía (de 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) del cuerpo), por consiguiente, resulta del movimiento y de la aceleración de los electrones en el cuerpo (como la excitación de las neuronas o las reacciones bioquímicas). El componente psicológico de la bioenergía (de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) del cuerpo) resulta de las respuestas del cerebro a la percepción y, fundamentalmente, de la actividad "mental".

Las ondas EM así como las ondas de frecuencia modulada (radio FM) o de amplitud modulada (radio AM) llevan eléctricamente información en forma de sonido. De una manera similar, las ondas EM irradiando de formas de vida o de objetos inanimados transmiten información correspondiente a la función, objetivo, y estado del transmisor (células, tejidos, proyecciones mentales, materia no biológica, etc.).

Las Frecuencias y el Espectro Electromagnético

Las ondas EM se propagan en el aire en línea recta y a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz ha sido determinada experimentalmente en el vacío siendo de 3×10^8 metros por segundo (m/s). La velocidad de la luz en un medio distinto del vacío disminuye dependiendo de la "permeabilidad" de dicho medio, sin embargo 3×10^8 m/s es la velocidad frecuentemente utilizada como una aproximación de la velocidad de luz en el aire. La frecuencia y la longitud de onda de las ondas EM son descriptas por la expresión $c = f\lambda$, donde c es la velocidad de la luz, f es la frecuencia (medida en Hertz (Hz) o s^{-1}) y lambda (λ) es la longitud de onda (medida en cm o m). La longitud de onda es la distancia entre los picos o las crestas de la onda, como se muestra en la figura de la página anterior. Frecuencia es el término que describe la tasa de movimiento ondulatorio, medido para determinar el número de longitudes de onda moviéndose más allá de cualquier punto por segundo.

Si, por ejemplo, usted identifica una frecuencia de 500 Megahertz (MHz, o 10^6 Hz) cuando realiza

una medición con el **RFI**, usted puede determinar fácilmente la longitud de onda reacomodando la fórmula como sigue:

$$\lambda = c/f,\ \lambda = (3 \times 10^8\ m/s)/(500 \times 10^6\ s^{-1}) = 0.6\ m \text{ ó } 60\ cm \text{ (cerca de 2 pies)}$$


La corriente alterna (AC) genera ondas EM con campos eléctricos y magnéticos fluctuando en forma de ondas sinusoidales. La energía eléctrica generada en América Del Norte es de 60 Hz AC, mientras en la mayoría de las áreas fuera de América Del Norte la corriente generada es de 50 Hz AC. La longitud de onda de la corriente de 60 Hz AC es de aproximadamente 6,000 km. Los organismos biológicos también generan ondas EM de AC, como la corriente eléctrica que se mueve a través del cuerpo y que constantemente está cambiando y revirtiendo su dirección. Los investigadores han encontrado, por ejemplo, emisiones de ondas EM asociadas con una corriente inestable en el tejido muscular, lo cual es debido al pulso de carga bi-direccional en neuronas motoras. La gran diferencia, sin embargo, entre líneas de transmisión de energía eléctrica y la red nerviosa del cuerpo está en el voltaje que está siendo conducido; Las líneas de transmisión llevan cargas medidas en los kilovoltios, mientras las neuronas llevan cargas medidas usualmente en milivoltios.

Todas las ondas EM son componentes del espectro electromagnético ancho (EM). Una versión abreviada del espectro EM es mostrada abajo. Debería advertirse que no hay una división bien definida entre las clasificaciones diversas de ondas EM; el gráfico representa un método común por el cual los científicos y los ingenieros clasifican en categorías estas ondas. La luz visible comprende un fragmento pequeño del espectro EM; a menos que hayamos entrenado nuestros sentidos para ver más allá del rango de la luz visible, normalmente nuestros ojos sólo pueden enfocar longitudes de onda que están entre los 400 y 700 nanometros (10^{-9} m).

De la ilustración, puede verse que el rango en el cual recabamos medidas de frecuencia para los propósitos del **RFI,** generalmente entre los 100 MHz y los 800 MHz, se superpone con las UHF y las VHF, y está dentro del rango general de ondas de radio y televisión. La **Sección 5.0**

argumenta cómo podemos medir bioenergías en medio de estas otras frecuencias.


.

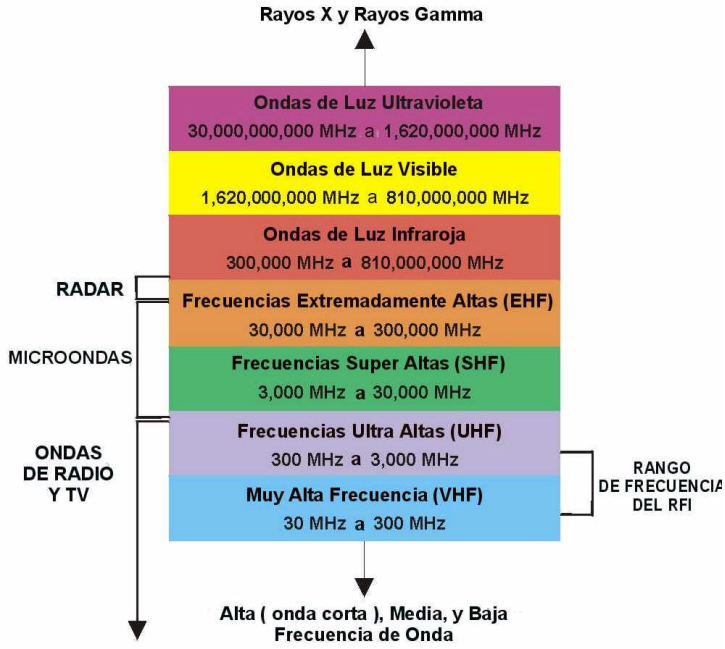

Forma y Estabilidad de las Ondas EM

Las ondas EM pueden tomar diversas formas como se puede ver a través de instrumentos como los osciloscopios. La forma que una onda toma depende principalmente del potencial eléctrico, o del voltaje, de la fuente de transmisión, y de cómo cambia el voltaje a medida que transcurre el tiempo. La forma sinusoidal clásica (la onda sinusoidal), manifiesta fluctuaciones uniformes, continuas en el voltaje. Si el voltaje cambia rápidamente, luego no cambia por un breve período, y luego vuelve a cambiar rápidamente, el resultado puede ser una "onda cuadrada". Luego hay otro tipo de onda dónde el voltaje aumenta gradualmente subiendo lentamente, y luego repentinamente desciende verticalmente hacia abajo de forma abrupta. Eso crea una forma conocida como "onda aserrada", porque literalmente se parece a los dientes pequeños de una sierra. Sin embargo, usando técnicas analíticas como el análisis de Fourier que reduce o atenúa el efecto de las disminuciones o incrementos rápidos en la intensidad eléctrica, se ha visto que

todas las ondas EM son fundamentalmente ondas sinusoidales.

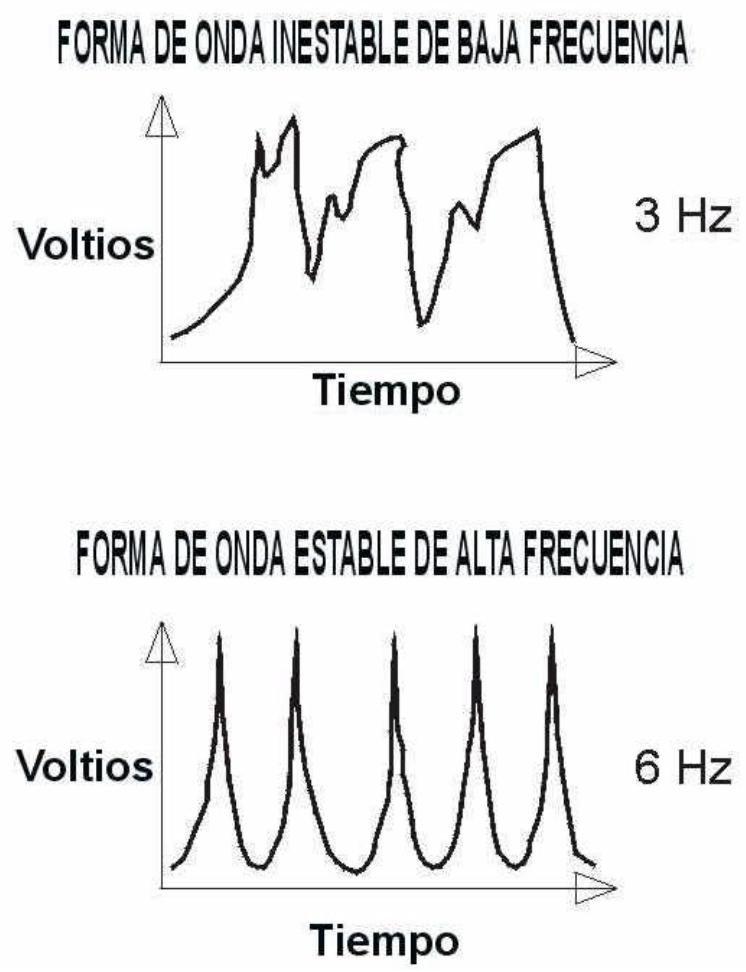

La estabilidad de las formas de onda es una función que muestra cuán uniformes o previsibles son los cambios en el voltaje en un período de tiempo dado. Los transmisores industriales son diseñados con transistores y condensadores que ayudan a producir fluctuaciones continuas en el voltaje. El resultado es usualmente un patrón de onda sinusoidal que es generalmente estable durante cierta distancia después de ser transmitido, pero puede volverse inestable al encontrar obstáculos en el exterior. La investigación de las propiedades eléctricas del cuerpo humano ha revelado que células somáticas (las células que no son nerviosas) también realizan la función de los condensadores, y las fluctuaciones eléctricas son generalmente graduales, produciendo ondas EM con la forma de ondas sinusoidales. Inversamente, las neuronas generarán más de una onda de forma aserrada, ya que hay una incremento gradual en el voltaje hasta el umbral de excitación – después del cuál hay una disminución rápida en el voltaje. Ambos tipos de transmisores, las células somáticas y las neurales, tienen fluctuaciones eléctricas previsibles, no aleatorias con el paso del tiempo, lo cual genera formas de onda estables.

El gráfico de arriba a la izquierda representa dos ondas EM. La que está en la parte superior es una onda inestable, de baja frecuencia. La que está debajo es una onda aserrada, estable, de

frecuencia relativamente superior. La onda inestable es generada a través de fluctuaciones de voltaje aleatorias o erráticas del transmisor. Si estas dos ondas viajan en direcciones opuestas y colisionan, entonces eventualmente la onda más estable, la de frecuencia más alta, inducirá a la frecuencia inestable a entrar en fase con ella, eliminando así cualquier inestabilidad, como se argumenta más adelante en el capítulo sobre **Resonancia e Inducción**.

Intensidad del Campo EM

Potencia es la tasa de transferencia de energía en un período de tiempo dado. La potencia irradiada es ese poder emitido por una fuente de irradiación (ej., el cuerpo de un organismo viviente, una antena transmisora, o aun un objeto cargado) y es transportada a través de espacio por las ondas EM. La potencia es medida en watts (W). La densidad de la potencia, o su intensidad, es la cantidad de potencia distribuida sobre una unidad de área dada, perpendicular a la dirección de salida de la misma, y está comúnmente expresada en términos de watts por centímetro cuadrado (W/cm2). Como una onda se propaga fuera de la fuente, la energía total irradiada de la fuente permanece constante, pero la intensidad de la onda decrece a medida que la distancia a la fuente aumenta. Esto es debido al hecho de que la amplitud o el "tamaño" de las ondas aumenta a medida que la distancia de la fuente aumenta, causando una expansión de la energía sobre áreas mayores y mayores; Por consiguiente, la energía por unidad de área, o la intensidad, decrece. Para fuentes lineales como las líneas eléctricas de transmisión y antenas direccionales, la intensidad de los campos EM decrece en una tasa inversamente proporcional a la distancia de la fuente (1 / distancia). Para fuentes de emplazamiento como los aparatos y las torres no direccionales de radio, la intensidad de los campos EM decrece en una tasa inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente (1/distancia^2). Además de la reducción teórica en la intensidad como una consecuencia directa de la distancia de la fuente, las ondas EM también pierden intensidad por la resistencia ofrecida por la atmósfera, y al toparse con obstáculos como edificios, árboles, etc. Hay muchos cálculos intrincados que los ingenieros eléctricos usan para calcular la "pérdida de espacio libre" de las ondas EM, ya que los diseños de los transmisores deben incluir formas para compensar estas pérdidas.

La siguiente tabla presenta un listado de los rangos de frecuencia de emisión más comúnmente usados en los Estados Unidos, y la potencia máxima usada para emitir estas ondas. Los rangos de frecuencia y la potencia transmitida usada en otros países generalmente se parecen a los mostrados en la tabla.

Rango de Frecuencia	Máxima Potencia Transmitida en Cualquier Dirección	Servicio
0.53 – 1.6 MHz	50 kW	Emisión AM
54 – 88 MHz	100 kW	VHF Canales de TV 2-6
88 – 108 MHz	100 kW	Emisión FM
174 – 216 MHz	325 kW	VHF Canales de TV 7-13
150 – 900 MHz	100 W	Radiocomunicación (bomberos, policía, ejército, etc.)
470 – 800 MHz	5 MW	UHF Canales de TV 14-69
800 – 900 MHz	600 W	Celular (análogo)
1900 MHz	100 W	Sistema Personal de Comunicación (PCS)

La transmisión de operadores radio aficionados en baja frecuencia, en general utiliza una potencia de salida de solo 0.1 a 1 W. En comparación, el cerebro humano transmite aproximadamente de 20 a 40 W de potencia, y cada neurona transmite aproximadamente 2 nanowatts (10^{-12} W).

La densidad (intensidad) de la potencia y la fuerza de las ondas EM después de la transmisión decrecen sustancialmente por las razones discutidas más arriba. Cuando la señal alcanza la antena receptora (como por ejemplo, su antena del radio), la señal puede ser tan débil que es inutilizable. Para compensar, ambas antenas transmisoras y receptoras se construyen con amplificadores para aumentar la fuerza de las ondas EM transmitidas y recibidas, respectivamente.

Armónicos

Todos los transmisores emiten frecuencias que son armónicos de la frecuencia fundamental que


se quiere transmitir. Por ejemplo, si una antena de radio es diseñada para transmitir una frecuencia fundamental de 100 MHz, entonces la antena generaría armónicos de 2, 3, 4, etc. veces la frecuencia fundamental, ej., 200 MHz, 300 MHz, 400 MHz, etc. Los sub-armónicos inferiores de frecuencia son también generados, ej., ½, ¼, etc. veces la frecuencia fundamental. Estas ondas armónicas son generadas por el circuito eléctrico en el transmisor, y son las comunmente llamadas "sidebands" (bandas laterales) o emisiones "espurias". El grado con el cual los transmisores generan frecuencias armónicas depende de la potencia de salida del transmisor. Las frecuencias armónicas son indeseables para la mayoría de propósitos industriales porque la generación de estas frecuencias reduce la intensidad de las ondas EM de la frecuencia fundamental. Los ingenieros electrónicos por consiguiente diseñan dispositivos del filtro (ej., "Los filtros de baja entrada") que son colocados en los transmisores para disminuir la influencia de los armónicos. Los filtros permiten a las ondas transmitidas propagarse más allá con suficiente intensidad para ser sintonizados por una antena receptora. Por ejemplo, si su estación de radio FM favorita estuviese a 50 millas, entonces usted generalmente no podría recibir sus señales de no ser por los filtros.

El cuerpo humano es un transmisor que no está equipado con un dispositivo filtrante. Los componentes eléctricos y magnéticos de cada átomo, molécula, célula, tejido, órgano, y sistema (y conjuntamente el cuerpo como un todo) cambian u oscilan continuamente, causando una emisión de frecuencias fundamentales. Las frecuencias armónicas son automáticamente generadas en el proceso, y es teóricamente posible que las frecuencias armónicas del cuerpo transmitan la totalidad del espectro EM. Para los propósitos de medición del **RFI,** no tiene importancia si las frecuencias detectadas son las frecuencias fundamentales o son las frecuencias armónicas generadas por el cuerpo, ya que todas estas frecuencias llevan exactamente la misma información. El contador de frecuencia del **RFI** detectará y mostrará la frecuencia más fuerte, fundamental o armónica, en un momento y posición particular.

Interferencia y Superposición de Ondas

Desde la física, el principio de superposición declara que cuando dos o más ondas se mueven en el mismo medio, el desplazamiento neto del medio (la onda resultante) en cualquier punto corresponde a la suma algebraica de los desplazamientos de todas las ondas. Si, por ejemplo, dos ondas viajan en direcciones opuestas y tienen la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud (tamaño), y están en fase (lo que significa que la cresta de una onda encuentra exactamente la cresta de la otra onda), la onda resultante tendrá la misma frecuencia y longitud de onda, pero el doble de amplitud (y de intensidad). Esto es lo que se llama interferencia constructiva de las ondas. Si las frecuencias están desfasadas 180 grados una con respecto a la otra (las crestas de una onda se igualan a los puntos mínimos de la otra onda), entonces las ondas se cancelarán mutuamente (amplitud e intensidad cero), un término conocido como interferencia destructiva. Un ejemplo claro de interferencia destructiva ocurre con el sonido; dos instrumentos musicales en partes opuestas de un cuarto, por ejemplo, pueden emitir ondas acústicas que anulen completamente ciertas notas, resultando en ningún sonido audible. Con interferencia destructiva, al punto de la cancelación de la onda, no hay intensidad que puede ser medida; sin embargo, la energía en forma de campos eléctricos y magnéticos no se ve afectada– en lugar de viajar en forma perpendicular a la onda, la energía es ahora dirigida paralela a la onda.

La ilustración mostrada debajo es un ejemplo simple de interferencia constructiva y destructiva. En nuestros ámbitos cotidianos normales, sin embargo, las cosas no son tan simples. Nosotros existimos en un mar de ondas EM diversas que están continuamente interactuando e interfiriéndose mutuamente. Los seres vivientes transmiten ondas EM con fuerzas y frecuencias numerosas, y estas interactúan con ondas EM que viajan por todos los rincones de nuestros ambientes y que también tienen fuerzas y frecuencias múltiples.

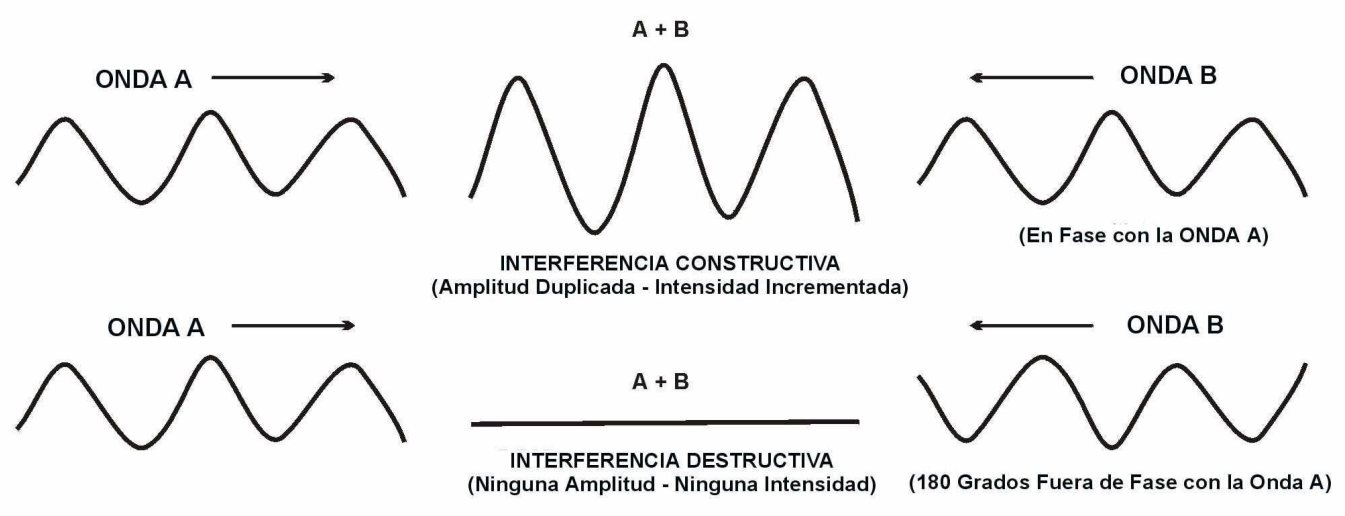

El resultado de esto es una "capa límite" de interacción entre la persona y el ambiente, en la cual las ondas interfieren constructivamente y destructivamente en grados diversos, hasta que se logra una resonancia, o un equilibrio (como se muestra en el siguiente sección). ¿Usted alguna vez ha estado en presencia de alguien y se ha sentido sumamente "energizado" o "en sintonía" con esa persona?. Esto puede ser explicado hasta cierto punto por el conjunto de principios que se encuentran más adelante en este sección. El campo EM de la esa persona puede interactuar con su propio campo y originar una interferencia constructiva, amplificando su campo EM. Inversamente, si usted estuvo alguna vez en presencia de alguien que "lo derribó", entonces una razón muy probable es que haya algún grado de interferencia destructiva teniendo lugar en su campo EM como resultado de la presencia de esta persona.

Resonancia e Inducción

Usted probablemente ha oído que un cantante de ópera puede hacer pedazos una copa, o tal vez usted hasta lo haya visto. ¿Cómo es posible?. Todo, desde el vaso al cemento armado, hasta el cuerpo humano, tienen su propia frecuencia fundamental – la frecuencia en la cual vibra – también llamada frecuencia resonante. Además todo vibra en las frecuencias que son armónicas a la frecuencia fundamental. Cuando una frecuencia fuera del objeto se iguala con la frecuencia fundamental o con una frecuencia armónica del objeto, ocurre la resonancia, causando una

amplificación de las vibraciones del mismo modo que ocurre con la interferencia constructiva de las ondas. El resultado puede ser que el incremento en la vibración reduzca la estabilidad estructural del objeto – de allí, la ruptura de un vaso cuando un cantante atina a una nota lo suficientemente alta como para igualarse con la frecuencia fundamental o con una frecuencia armónica del vaso. De hecho, los gobiernos prueban dispositivos de electrónica para garantizar que la frecuencia que emiten no se iguala con la frecuencia fundamental del cuerpo o una parte del cuerpo, lo cual teóricamente podría resultar en dolor severo, por lo menos.

Afortunadamente, las cosas vivas irradian campos EM que pueden escudarlos y protegerlos de muchas de las ondas EM de nuestros ambientes (si nosotros no tuviéramos dichos "escudos", podríamos potencialmente caer enfermos incluso ante el más débil de los campos EM ambientales). La razón por la que esto es así es que las transmisiones del Aura de las cosas vivientes (ej., las energías transmitidas como resultado de reacciones, tanto fisiológicas como psicológicas) es, en la mayoría de casos, más intensa (ej., La densidad de potencia es más elevada) que las EM ondas externas. El Aura, y particularmente el "nivel psicológico" externo en el lado izquierdo del cuerpo, puede, por un principio llamado *inducción*, producir ondas EM externas más débiles para entrar en resonancia con el entorno después de cierto período de tiempo. Puede ser más fácil para usted pensar en la Aura "amortiguando" estas ondas EM externas en el "capa límite" de interacción mencionada arriba. Este principio se discutirá además en la **Sección 2.2.2**, más abajo.

A modo de comentario al margen, muchos organismos de salud e instituciones han realizado estudios de laboratorio de los efectos de las ondas EM industriales de baja potencia en células humanas, como un patrón para medir dichos efectos en la totalidad del cuerpo físico. Las células individuales, claro está, no emiten la misma intensidad de ondas EM que el cuerpo entero, y no tienen la "protección" adicional de un "nivel psicológico" (emiten solamente bioenergía). Por consiguiente, cuando tales organismo comunican efectos negativos de salud debido a la exposición a ondas EM industriales en el laboratorio, los resultados no pueden necesariamente ser extendidos al nivel del ser humano, pues las células individuales tienen una habilidad

inductora limitada sobre las ondas EM externas. Muchos investigadores creen que mientras una persona esté generalmente saludable (física, mental, y emocionalmente), la fuerza del campo Aúrico será suficiente para causar la inducción de la mayoría de las ondas EM industriales , reduciendo sus efectos dañinos.

Un ejemplo excelente de resonancia e inducción es el ejemplo donde un terapeuta energético, como un practicante del reiki, proyecta "luz blanca" a una persona con un campo energético "disarmónico". Dependiendo de la experiencia del terapeuta y la fuerza (intento) de la proyección, la luz blanca, la cual es en teoría la frecuencia más alta (y la más fuerte) ejercerá inducción sobre el campo EM más débil del paciente, provocando que eventualmente tenga lugar la resonancia, la cual fortalecerá el propio campo EM del paciente.

2.2.2 **Un Modelo Simplificado del Aura Humana**

Ahora que hemos discutido algunos de los fundamentos importantes de los campos EM, postularemos cómo generan nuestros cuerpos físicos, nuestros pensamientos, y nuestras emociones las dos capas íntimas del Aura. Aquí es importante enfatizar que "las bioenergías" son emisiones de procesos biológicos, mientras que el "Aura" es un campo que consiste de ambas energías, biológicas y psico-emocionales. Ha habido una gran cantidad de investigaciones en este área, y muchas teorías complejas han sido propuestas sobre cómo los seres vivos generan bioenergías. El modelo teórico que veremos a continuación está sumamente simplificado, pero nos dará una base sobre la cual trabajar y a la vez que fomentará la investigación y el descubrimiento. Con dicho modelo además se da por sentado que los dos niveles íntimos del Aura, a los que llamamos "nivel de salud" y "nivel psicológico," son el *resultado* de fenómenos electromagnéticos que tienen lugar en el cuerpo y en la mente, y no son la *causa fundamental* de tales fenómenos (aunque tal teoría puede tener mérito, el debate de este tema está fuera del alcance de este Manual). Con este modelo, discutiremos brevemente las características teóricas fundamentales del Nivel de Salud y del Nivel Psicológico; la mecánica de los Chakras se discute en la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS).


Nivel de Salud

Es un hecho bien conocido para la comunidad médica que el cuerpo genera ondas EM endógenas (internas) a través de muchos mecanismos. En la electrónica médica, estas emisiones son medidas rutinariamente usando instrumentos como el electroencefalograma (EEG), el electrocardiograma (EKG), la resonancia magnética por imágenes (MRI), el electromiograma (EMG), y el ultrasonido. Sin embargo, estos campos endógenos están considerados generalmente por el cuerpo médico como subproductos de las reacciones bioquímicas en el cuerpo, y no tienen relevancia diagnóstica por sí mismos. El hecho de que estas emisiones irradien del cuerpo y creen bioenergía, es un concepto exótico para la mayor parte de los profesionales médicos (especialmente en Occidente). Este modelo simplificado revelará cómo todas las emisiones del cuerpo son muestras informativas y confiables de la salud del cuerpo.

El movimiento de las cargas atómicas positivas (protones) y negativas (electrones) y de los iones cargados positiva y negativamente dentro del cuerpo producen ondas EM que irradian a una corta distancia fuera del cuerpo. Tal movimiento a nivel molecular y celular es continuo. Un ejemplo es el flujo normal de iones a través de la membrana celular. La presencia de iones cargados en la célula y en el líquido extracelular que la rodea establece una distribución de la carga de un lado y otro de la pared de la membrana. Normalmente, hay cargas positivas fuera de la célula y negativas dentro de la ella. Con esta distribución de cargas, la célula es equivalente a un pequeño condensador separado por un dieléctrico (aislante), con la membrana de la célula actuando como dicho dieléctrico. La diferencia de potencial de un lado y otro de la membrana celular puede ser medida por un voltímetro colocando un sensor en el fluido extracelular y otro dentro de la célula. Una célula "saludable" típica en equilibrio tiene una diferencia de potencial a ambos lados de su membrana de 100 mV. Durante el metabolismo celular, las cargas positivas excesivas pueden entrar en la célula, y ésta necesitará posteriormente bombear fuera de sí las cargas positivas para restaurar el equilibrio. Es esta diferencia de potencial fluctuante que se genera a ambos lados de la membrana celular, de un estado de equilibrio a uno de desequilibrio, el que hace que la

membrana transmita frecuencias fundamentales y armónicas.

Las frecuencias fundamentales y armónicas son transmitidas por la membrana celular cuando la diferencia de potencial eléctrico se altera de un lado y otro de la membrana celular; las frecuencias transmitidas son enviadas hacia afuera desde todos los rincones de la célula, como si la célula fuese una antena isotrópica (una antena que emite ondas de todos lados). Además de las frecuencias emitidas por la membrana celular, generalmente las señales más débiles son transmitidas por los cambios eléctricos que ocurren dentro de la célula, producidos por alrededor de diez millones de reacciones químicas intracelulares que ocurren cada segundo. Incluso más fundamental que esto, sin embargo, son las oscilaciones continuas de las cargas que tienen lugar dentro de los trillones de átomos que componen nuestros cuerpos. Esencialmente, todos los átomos son "osciladores armónicos", como han querido llamarlos muchos investigadores en este área, y emiten campos EM sutiles. Los campos de los átomos individuales son muy débiles, pero la suma de muchos campos EM débiles da como resultado campos más fuertes que pueden medirse con equipo electrónico sensible. De este modo, todos los objetos (vivientes y no vivientes) son fundamentalmente transmisores de campos de información energética. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están compuestos de agua en aproximadamente un 70 %. El agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se sabe que un átomo de hidrógeno emite una frecuencia fundamental de baja potencia de 1420 MHz. Si usted considera los trillones de átomos de hidrógeno en nuestros cuerpos, entonces usted puede comenzar a ver cómo la resonancia de las frecuencias del hidrógeno puede producir una señal perceptible fuera del cuerpo. De hecho, los radioastrónomos a menudo sintonizan las antenas receptoras a 1420 MHz para hacer una revisión en busca de hidrógeno en la galaxia como una indicación posible de vida fuera de nuestro planeta.

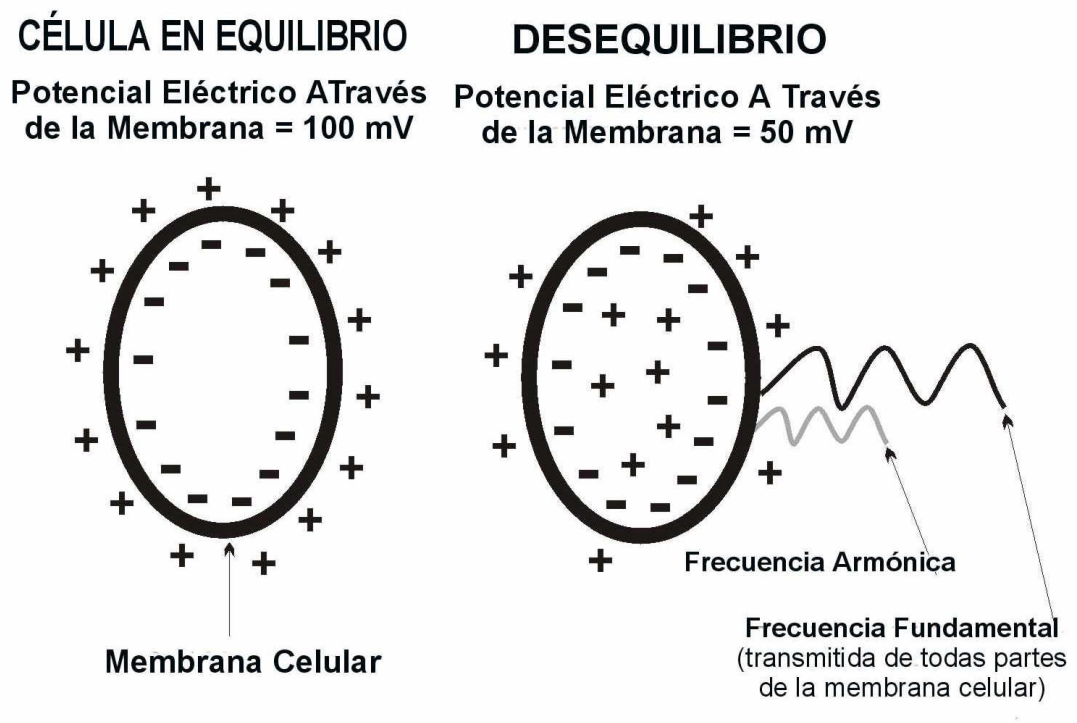

El movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio es otra forma por la cual se producen campos EM. La sangre es un transportador de oxígeno y nutrientes hacia las células, pero fundamentalmente es un transportador de corriente eléctrica. El movimiento de la sangre produce ondas EM a través de los cambios en la corriente (amperaje) y en la carga eléctrica (voltaje) del fluido. Sin embargo, la causa más notable de generación de ondas EM se da a través de los canales nerviosos. Una célula del sistema nervioso típica (la neurona) puede experimentar un cambio en el voltaje de 0 mV (o voltaje negativo) en reposo a 55 mV en el umbral de excitación, en pocos milisegundos. Esta fluctuación en el voltaje tiene lugar continuamente, produciendo ondas EM en áreas localizadas. Los nervios que inervan células musculares pueden fluctuar de un potencial de reposo a más de 3 V, causando ondas EM localizadas de una potencia relativamente más grande . Las ondas EM más fuertes son producidas por la conducción global de la carga eléctrica a través de la extensa red neural. Comparable a la corriente alterna viajando a través de una espira del alambre o un solenoide, el Campo-E detectable y los componentes del Campo-H son generados, formando ondas EM que irradian fuera del cuerpo.

Teóricamente, la potencia de las ondas EM de Campo-E emitidas por las células es generalmente muy débil, en el orden de 0.01 a 1 mV/m. La potencia del campo eléctrico producida por la conducción de la carga a través del sistema nervioso es usualmente mayor, y puede ser tan grande como 100 mV/m cuándo es detectada cerca el cuerpo (0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) de la piel).

Éstos son simplemente algunos ejemplos de cómo generan nuestros cuerpos ondas EM. ¿Cómo son estas ondas características del cuerpo? Hay muchas teorías detalladas especulando por qué los campos EM son reforzados, debilitados, y modificados a merced de las condiciones físicas y psicológicas. Un método simplificado para considerar esta pregunta es imaginar a cada célula en nuestros cuerpos como una antena transmisora. En un estado de salud, en el cuál pueden ser consideradas "normales" o "naturales" las fluctuaciones de corriente o carga eléctrica entre estados de equilibrio y desequilibrio, lo que se denomina homeostasis , las células usan una cierta cantidad de potencia (W) (como en el ejemplo de la membrana celular, arriba) y energía para realizar sus funciones bioquímicas, la cual es particular para cada "tipo" de célula (ej. las células cerebrales parecen usar más potencia para realizar sus funciones que, por ejemplo, las células hepáticas). La cantidad "natural" de potencia tiene por resultado la emisión de la frecuencia característica (fundamental) de la célula (con sus armónicos).

Cuando, por ejemplo, una enfermedad tiene lugar, las fluctuaciones naturales de la carga de las células están perturbadas, y la célula debe desviar una cierta cantidad de su potencia y su energía para combatir la causa de la enfermedad (los agentes patógenos, los cambios en el metabolismo debido a la llegada disminuida de nutrientes, y muchas otras causas de enfermedad) para devolver a la célula a la homeostasis. La enfermedad causa inestabilidad en el flujo natural de las fluctuaciones eléctricas dentro de la célula. La reducción en la potencia usada para realizar las funciones celulares normales puede reducir las frecuencias emitidas por la célula. Además están las frecuencias transmitidas por la enfermedad misma; por ejemplo, la investigación ha demostrado que los agentes patógenos emiten frecuencias muy inferiores a las de las células normales saludables.

En algunos casos, especialmente cuando hay infecciones localizadas, el cuerpo puede poner una gran cantidad de potencia en oponerse a la enfermedad – en cuyo caso, las frecuencias emitidas por el cuerpo pueden exceder a aquéllas emitidas en homeostasis. Algunos investigadores incluso han teorizado que cuando uno se empeña en oponerse a una enfermedad, el cuerpo comienza a irradiar el campo que necesita para restaurar la homeostasis (la salud).

Muchos investigadores creen que las emisiones atómicas, moleculares, y celulares irradian únicamente a poca distancia de la piel. Los cambios eléctricos a una escala mayor, incluyendo aquéllos que involucran la actividad muscular, parecen irradiar más allá. En general, ITEM ha encontrado que las bioenergías referentes al estado de salud del cuerpo pueden ser identificadas en la distancia que va de 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) más allá de la piel.

Una de las preguntas de la que no nos hemos ocupado específicamente hasta este punto es, "¿cuál es la magnitud de las frecuencias emitidas por el cuerpo?". No hay unanimidad absoluta en la respuesta a esta pregunta. En la década del `50 y del '60, los científicos rusos hicieron una investigación extensa sobre los fenómenos de las ondas biológicas EM endógenas, y concluyeron que los procesos biológicos transmiten frecuencias cercanas y por encima del espectro de la luz visible (ej. ultravioleta). Los investigadores en Europa reafirmaron esta conclusión. Otros investigadores han afirmado que las frecuencias emitidas por las cosas vivientes están generalmente debajo de los 10 KHz. Entonces, ¿por qué hay una discrepancia tan grande entre estos descubrimientos?. Nosotros creemos que tiene que ver con el tipo y grado de sensibilidad del equipo de detección. ITEM ha tomado una posición, que las ondas EM transmitidas por los procesos biológicos están efectivamente apenas por encima del espectro de la luz visible, ya que muchas personas pueden aprender a visualizar al Aura entrenando el circuito visual del cerebro para descifrar longitudes de onda más pequeñas que aquéllas del espectro visible (400 a 700 nm); visualizar ondas EM en el rango de Hz o KHz, con longitudes de onda muy grandes, sería imposible. Asumiendo entonces que las frecuencias fundamentales emitidas por el cuerpo están en el rango ultravioleta, el **RFI** mide esas frecuencias armónicas inferiores en el rango de los MHz.

Como se mencionó previamente en este Manual, las ondas EM emitidas por el cuerpo - se cree - son los efectos residuales exteriores de los campos de torsión subyacentes, o "la energía sutil". Einstein usó el término *energía sutil* para describir la energía que no puede ser medida. Hay un grupo creciente de investigadores que sugiere que la Aura es un cuerpo "bioplasmático" en expansión y contracción constituido por campos de energía Hertziana (la energía que no está asociada con ondas EM). Como se dijo previamente, la medición de las ondas EM es actualmente la forma más económica para determinar la información energética transmitida por el cuerpo.
Para un informe detallado (y más bien complejo) de las energías Hertzianas (escalares), por favor diríjase al trabajo de Dr. Glen Rein, Ph.D ("Bases Científicas para Curarse con Energías Sutiles"), el cual tenemos a su disposición, en línea, en nuestro "Centro de Información sobre Medicina Energética".

Nivel Psicológico

A diferencia del Nivel de Salud del Aura, ha habido relativamente poca investigación científica del Nivel Psicológico ("Cuerpo Emocional") del Aura. En la literatura esotérica, el organismo viviente es tanto un transmisor como un receptor de la información del entorno. El lado izquierdo del cuerpo es el receptor, mientras que el lado derecho del cuerpo es el transmisor. Las energías fluyen hacia adentro por el lado izquierdo, son procesadas a través de los sistemas de energía metafísicos del cuerpo (meridianos y Chakras), y luego son proyectadas desde el lado derecho del cuerpo. La amplia investigación de ITEM ha revelado que este modelo teórico tiene validez científica. Hemos encontrado que el Nivel Psicológico en el lado izquierdo del cuerpo hace las funciones de una "interfaz" o “capa límite" entre la persona (o cualquier otro organismo que sea capaz de pensamiento y emoción) y el ambiente, y que el Nivel Psicológico del lado derecho del cuerpo (especialmente las manos) puede transmitir o proyectar ondas EM con gran intensidad. Este descubrimiento también se ajusta bastante bien al modelo neurológico de lateralización de los hemisferios cerebrales, donde el lado izquierdo del cerebro es predominantemente activo y proyecta energía (el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo), y el lado derecho del cerebro es predominantemente receptivo (el hemisferio cerebral derecho controla el


lado izquierdo del cuerpo). Para los propósitos de este modelo teórico simplificado, discutiremos los lados derecho e izquierdo del Nivel Psicológico separadamente.

Lado Izquierdo

Aun cuando creemos que no pensamos en algo en especial durante nuestro estado de vigilia normal, ambos lados del cerebro continuamente envían señales a todo lo largo del sistema nervioso en respuesta a los estímulos subconscientes y al mantenimiento de un cierto estado de ánimo psicológico. Los campos EM resultantes del procesamiento de información debajo del umbral de nuestra conciencia ordinaria forman nuestra *"Aura Psicológica basal"*. El nivel "basal" del Aura Psicológica describe los atributos fundamentales de la persona. Por ejemplo, si una persona es esencialmente feliz y alegre, entonces el grado "basal" indicará frecuencias (y colores) que serán representativos de un estado psicológico de felicidad y alegría, y lo mismo se aplica para una persona fundamentalmente infeliz. En general, mientras más "estable" esté una persona, en un sentido psicológico, más estable será su nivel basal; sin embargo, aun el pensamiento negativo más leve de una persona esencialmente feliz resultará en cambios a nivel basal. En otras palabras, simplemente porque una persona se muestre completamente "estable" y en paz, usted no debería asumir que su Nivel Psicológico basal sea también estable. En estados meditativos, sin embargo, el nivel basal generalmente será más estable que en el estado de vigilia normal (debido al apaciguamiento de "la conciencia del ego" que usualmente produce "inestabilidades"). ITEM se ha encontrado con que para la mayoría de la gente, el nivel basal puede ser medido a una distancia de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) del cuerpo. El nivel basal existe en ambos lados, derecho e izquierdo del cuerpo (dado que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro son activos aun cuando activamente no pensamos en algo).


Ahora consideraremos la influencia profunda que el entorno tiene en nuestro Nivel Psicológico basal en el lado izquierdo del cuerpo. Imaginemos a una persona esencialmente feliz que entra en un cuarto lleno de personas esencialmente infelices – quiénes están encubriendo su infelicidad actuando como si fueran felices. Permítanos también considerar que las personas infelices

transmiten ideas subconscientes de negatividad (avaricia, celos, etc.) a la persona feliz. Los pensamientos negativos de muchas personas pueden interferir entre si y pueden amplificarse en relación a los pensamientos de cada persona infeliz individual. La persona feliz recibirá los pensamientos negativos amplificados en el lado izquierdo de su Nivel Psicológico. Si la fuerza combinada de los pensamientos negativos excede la fuerza de su nivel basal, entonces la persona "sentirá" físicamente la negatividad (si bien no habrá signos físicos obvios de negatividad en el cuarto). Ésta es una forma de percepción extrasensorial, y se debe a la interacción de estímulos externos en el lado izquierdo del Nivel Psicológico. La razón por la cual esto puede ser sentido es que los pensamientos negativos pueden, después de algún tiempo, inducir el nivel basal, lo cual entonces impide el flujo natural de energías basales positivas de la persona (vea

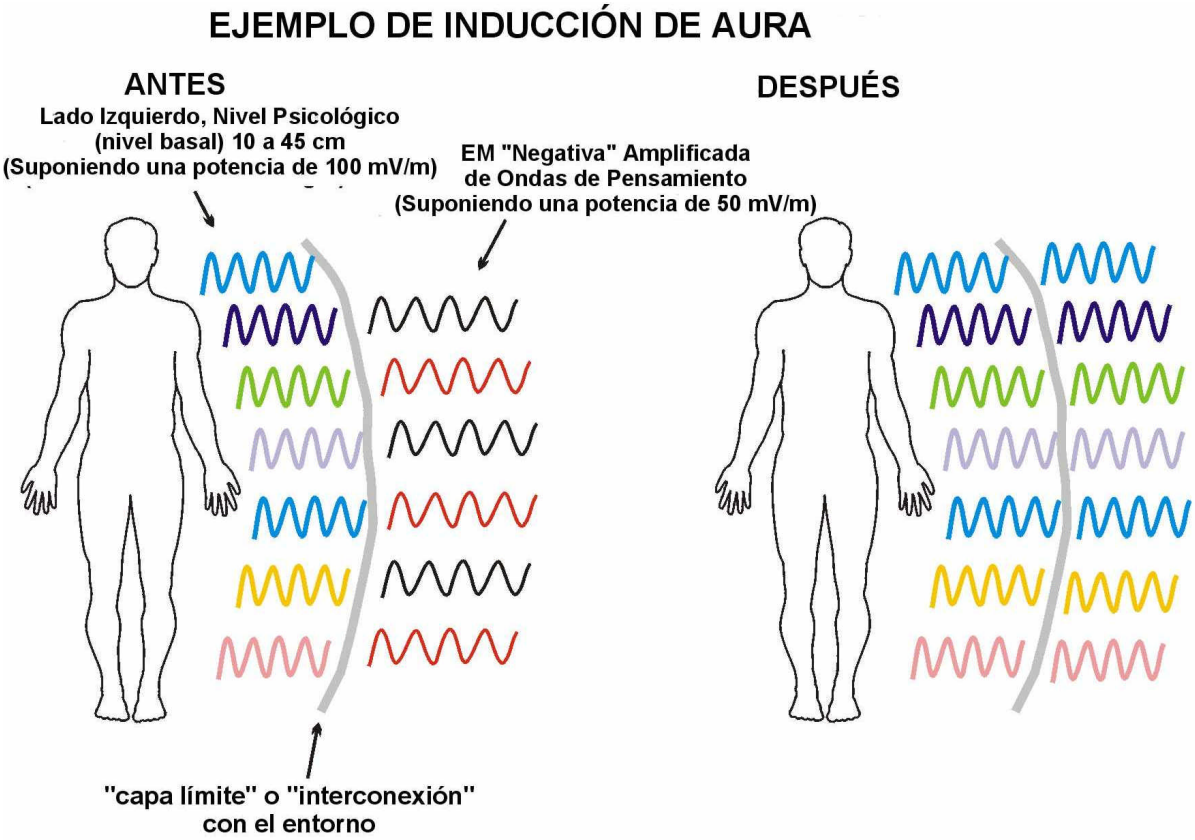

Ejemplo de Inducción por Ondas EM Externas, debajo). Sin embargo, si la fuerza del nivel "basal" de la persona feliz excede la fuerza de los pensamientos negativos combinados, entonces no los podrá percibir (vea **Ejemplo de Inducción por Aura**, debajo). Lo opuesto, claro está, es cierto también – una persona fundamentalmente infeliz puede percibir (y regocijarse también) ante las radiaciones positivas combinadas de muchas personas felices, con el resultado de que las ondas EM positivas ejerzan inducción sobre el Nivel Psicológico basal de la persona infeliz.

Éste es un ejemplo extremo de cómo pueden afectar las energías del ambiente a una persona. La interacción ocurre en la “capa límite" o "interfaz", en el lado izquierdo del Nivel Psicológico basal, la cual actúa como una antena receptora. ITEM ha determinado que en general, esta capa Psicológica "límite" existe a una distancia de más o menos 18 pulgadas (45 cm) del cuerpo.

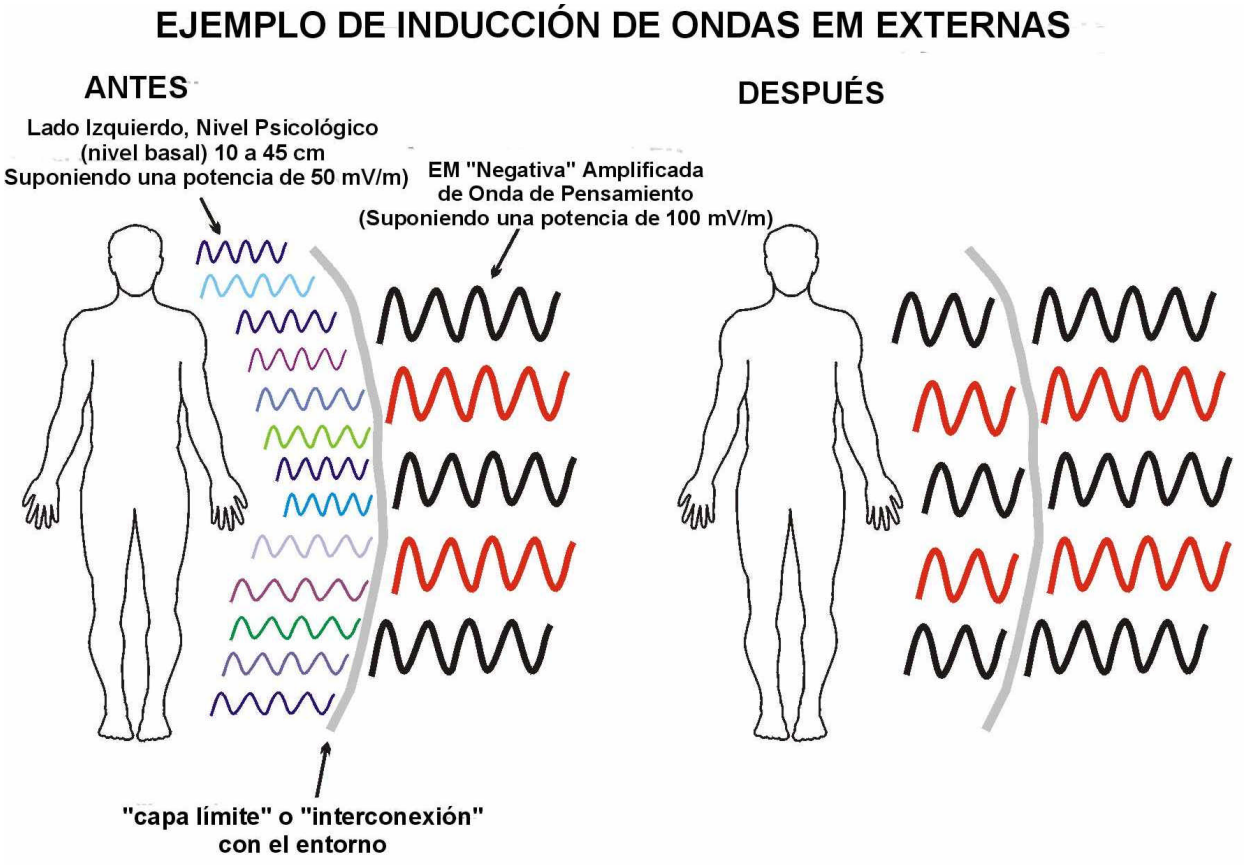

 © 2005 ITEM

En la práctica, sin embargo, hay centenares de miles de estímulos ambientales reaccionando con la capa del límite en todo momento, extendiéndose desde las Auras de otras personas, las bioenergías de las plantas, los árboles, y los animales, la radiación ultravioleta del sol, y la radiación geomagnética, y aun ondas EM producidas por los aparatos eléctricos y las ondas ocasionales que viajan desde las antenas de radio y televisión. Otros investigadores, usando modalidades de biofeedback como "la respuesta galvánica de piel", han demostrado que el nivel basal es altamente elástico a los estímulos ambientales exteriores en la mayoría de las circunstancias (el nivel basal puede inducir sobre ondas EM externas después de un cierto período de tiempo, como se muestra en la figura de abajo).


Un punto importante a recordar aquí es que nosotros hablamos de esos estímulos ambientales (en forma de ondas EM) que están usualmente debajo del nivel de percepción sensoria. La percepción sensoria puede darse cuando la fuerza de esos estímulos excede el nivel basal. La percepción se da más comúnmente cuando, por ejemplo, usted ve a las personas infelices en un cuarto usando un lenguaje corporal que revela su estado psicológico desafortunado. Este tipo de percepción obviamente conducirá a una reacción y a una subsiguiente transformación del lado derecho del Nivel Psicológico, como se discutirá más adelante.

Las mediciones del **RFI** del lado izquierdo del Nivel Psicológico, de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) del cuerpo, por consig*uiente revelan una interacción electromagnética compleja y dinámica entre el nivel basal y las influencias ambientales exteri*ores. Suponiendo que pudiéramos construir un filtro, como una jaula de Faraday, para reducir o impedir la interacción del nivel basal con las ondas EM externas, las frecuencias que usted detectaría con el **RFI**, teóricamente, serían las del nivel basal aislado. Sin embargo, la realidad es que no existimos aisladamente del ambiente, ya que dependemos del entorno e interactuamos con él cada segundo de nuestras vidas, de tal modo que recabar cualquier dato aparte de la interacción verdadera del nivel basal con el ambiente sería "antinatural". Es por tal motivo, esencialmente, que ITEM no ofrece o recomienda el uso de cualquier tipo de "dispositivo del blindaje" o filtro cuándo se realizan mediciones con el **RFI** en organismos vivos como humanos, animales, y potencialmente plantas (los organismos


superiores que son o pueden ser capaces de producir campos EM como resultado del pensamiento y la emoción), salvo en circunstancias inusuales de interferencia.

Lado Derecho

En términos metafísicos, la energía fluye a través del lado izquierdo, atraviesa el sistema de meridianos de energía del cuerpo, es procesada a través de los vórtices principales de energía o Chakras, y es proyectada de vuelta al ambiente por el lado derecho del cuerpo (con mayor influencia de la mano derecha). Basado en años de procesamiento de datos de frecuencias generados a través de pruebas con el **RFI**, ITEM cree que hay una sólida base científica para este modelo metafísico.

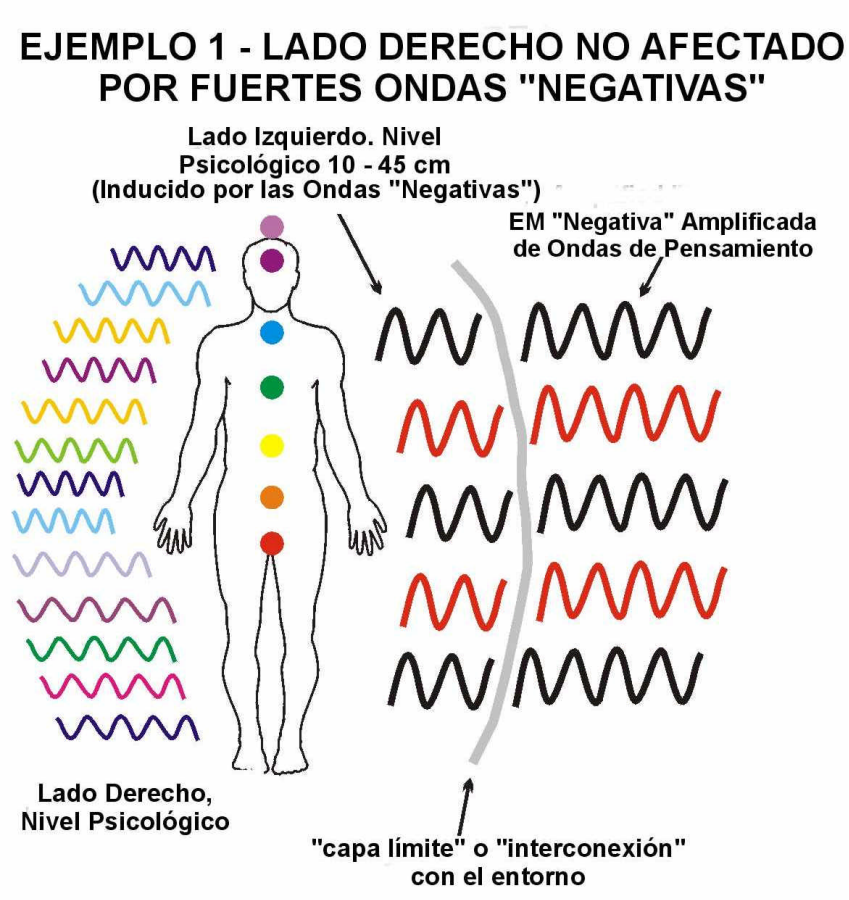

El lado derecho del Nivel Psicológico es sustentado por el campo EM basal al igual que el lado izquierdo. Si aisláramos a una persona del ambiente, entonces podríamos encontrar que el nivel basal del lado derecho es generalmente similar en términos de frecuencia e intensidad de campo al lado izquierdo. Sin embargo, dada la realidad de nuestra constante interacción con el ambiente, nos encontramos en la práctica con que usualmente habrá diferencias en las frecuencias e intensidades de campo entre el lado izquierdo y derecho, debido a 1) los tipos de ondas EM interactuando con el lado izquierdo, y 2) la forma en que las personas procesan los diferentes tipos de energía externa a través de los Chakras Volviendo a nuestro ejemplo de la persona fundamentalmente feliz que encuentra una corriente de ondas EM "negativas" amplificadas en un cuarto, consideraremos simplemente dos de las formas en las cuales la persona puede procesar y transmitir ondas EM de regreso al ambiente. En ambos de estos ejemplos, daremos por supuesto que la intensidad del campo de las ondas "negativas" externas excede en gran medida al del nivel basal del lado izquierdo, y de tal manera ejerce inducción sobre el Nivel Psicológico del lado izquierdo. En el Ejemplo 1 de arriba, nosotros vemos que aunque el Nivel Psicológico del lado izquierdo se ha convertido en “inductivo”, la fuerza del campo nuevo no subyuga el dinamismo natural de flujo de energía del sistema de los Chakras, y las ondas EM transmitidas por el lado derecho no se ven afectadas. Lo que esto quiere decir, prácticamente, es que la persona feliz puede sentir la negatividad en el ambiente a su alrededor, pero esto no es suficiente para impedir la transmisión natural de ondas EM "felices" y amorosas de regreso al ambiente.

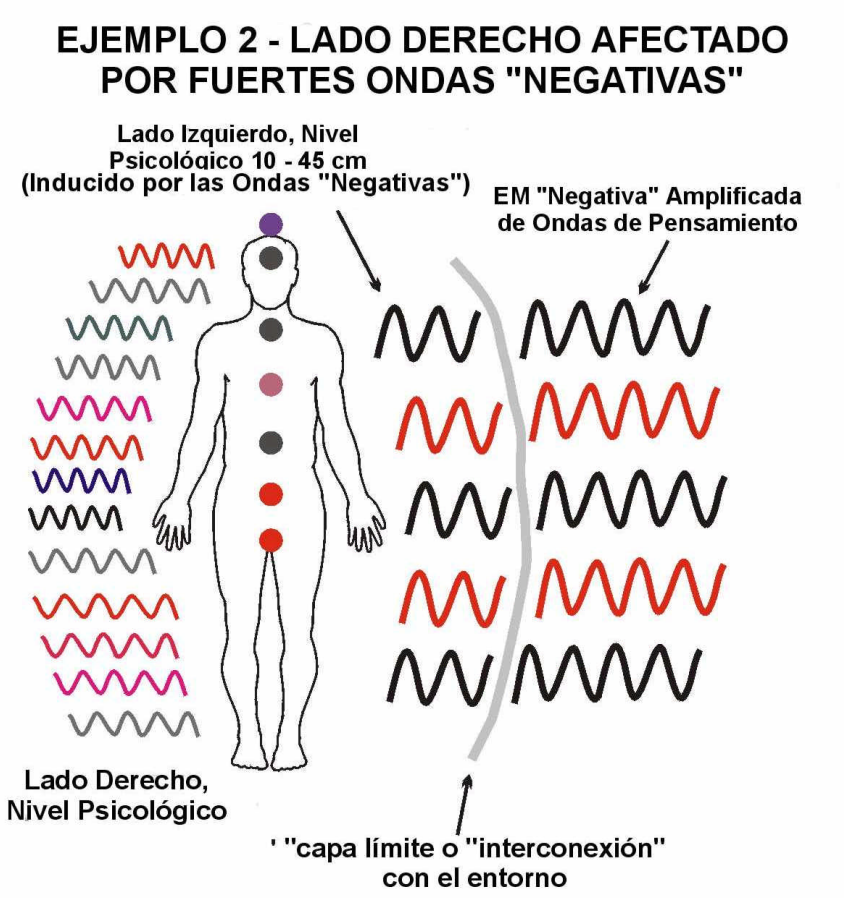

En el Ejemplo 2, nosotros vemos que las ondas negativas EM tienen un impacto adverso en el dinamismo natural de los Chakras, y por consiguiente afectan al tipo de energía transmitida del Nivel Psicológico del lado derecho. En general, el dinamismo de los Chakras y del nivel basal del lado derecho no permitirá el "paso directo" de ondas negativas EM del lado izquierdo al derecho, lo cual es, esencialmente, un "efecto atenuante". En otras palabras, una persona feliz que siente un gran trato negativo de buenas a primeras, usualmente no transmitirá esas mismas energías negativas de vuelta al ambiente con la misma fuerza como fueron recibidas (más bien, la persona, sintiendo las ondas fuertemente negativas, en general se sentirá incómoda y saldrá del cuarto).

En nuestros ambientes normales, cuando no estamos expuestos a una forma extrema tal, de

energía polarizada, sino más bien a conjuntos diversos de ondas EM complejas del ambiente, nuestras reacciones a los estímulos, observados en el lado derecho del cuerpo, pueden ser verdaderamente diversas. El nivel basal en el lado derecho del Nivel Psicológico no está afectado solamente por aquellas ondas EM "recibidas" por el lado izquierdo, sino tambi*én por las energías sutiles* que no pueden ser medidas y los pensamientos conscientes y subconscientes que se originan dentro de la mente de la persona (y por consiguiente no sujeto a la interacción con el nivel basal del lado izquierdo). ITEM ha demostrado que el pensamiento más leve puede producir cambios inmediatos en el Nivel Psicológico derecho. Si, por ejemplo, durante una lectura con el **RFI** el sujeto ve a una mariposa posarse en la ventana, entonces dicho sujeto puede responder sin reacción, con un pensamiento positivo, o con un pensamiento negativo, basado en sus propias experiencias. El estímulo (la mariposa) por sí mismo probablemente no causará cambio alguno en el Nivel Psicológico izquierdo (pocas o ninguna de las ondas de bioenergía EM serán recibidas), pero la percepción del estímulo provocará un pensamiento que puede afectar inmediatamente la transmisión de las ondas EM del lado derecho psicológico .

El hemisferio izquierdo del cerebro sirve como un transmisor primario de ondas EM. Cuando un pensamiento o un estímulo ambiental es percibido, el cerebro transmitirá corriente eléctrica a través del sistema nervioso parasimpático del lado derecho (sistema de meridianos), la cual será luego proyectada hacia afuera dentro del ambiente desde todo el lado derecho del cuerpo (aunque usualmente más intensamente desde la mano derecha). El cerebro usa bioquímicamente potencia para transmitir la corriente, y la cantidad de potencia usada es una función de la intensidad de la respuesta a la percepción sensoria o estímulo. Cuando una persona experimenta una emoción muy fuerte o se proyecta un pensamiento con gran deseo, la intensidad y la fuerza del campo EM en el lado derecho del cuerpo aumentará, así como también lo hará su frecuencia en la mayoría de los casos.

La fuerza del campo eléctrico (Campo E) del nivel basal del Nivel Psicológico varía dependiendo de la psicología de un individuo. En general, si una persona es esencialmente feliz y positiva, entonces la fuerza del Campo-E del nivel basal teóricamente puede ser 250 mV/m o más alto en

cualquier momento (aunque, claro está, el nivel basal está en un estado continuo de flujo en términos de frecuencia y fuerza). Un estímulo sostenido de fuerza mayor que 250 mV/m, por consiguiente, sería necesario para provocar inducción en el lado izquierdo del Nivel Psicológico.

Cuando una persona proyecta un pensamiento o una emoción de gran intensidad hacia el ambiente, la fuerza máxima resultante del Campo-E, en teoría, puede ser de 1 V/m o mayor. Como se argumenta en la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS), tales fuerzas del campo eléctrico transmitidas provocarán necesariamente el desplazamiento de materia (telekinesis). Cuando una persona transmite ondas EM, el nivel basal en el lado derecho del Nivel Psicológico se incrementa (en términos de magnitud de los campos eléctrico y magnético). (Nota – a la expansión y la contracción del Aura externa, a la que muchas veces se alude en la literatura metafísica, se la conoce más comunmente como “púas” en la intensidad del campo eléctrico y magnético debido a la proyección activa de ondas EM del lado derecho del cuerpo). Además, la transmisión de ondas EM produce una fuerza o un dinamismo, mayor que aquel presente en el nivel basal, que generalmente resulta en un más inmediata inducción con ondas EM externas. En otras palabras, a diferencia del lado izquierdo del Nivel Psicológico donde una capa límite de interacción puede ser encontrada a una distancia aproximada de 18 pulgadas (45 cm) del cuerpo, tal interacción en el lado derecho del Nivel Psicológico tendría lugar solo mucho más allá del cuerpo. Por consiguiente, entre las 4 y 18 pulgadas (10 y 45 cm) del lado derecho del cuerpo las frecuencias detectadas son el resultado exclusivo de la condición psicológica de una persona, pensamientos y emociones (el Aura Psicológica del lado derecho está compuesta del nivel basal generado por el estado psicológico principal y además por las transmisiones potencialmente más fuertes de ondas EM de pensamientos y emociones).

Aunque reconocemos que este modelo de los Niveles de Salud y Psicológico del Aura están sumamente simplificados, esperamos que los Investigadores del **RFI** lo puedan usar como una base para futuras investigaciones.

Antes de finalizar este capítulo, nos gustaría discutir brevemente otra consideración importante

del principio de inducción. En muchos libros esotéricos sobre la experiencia mística y los senderos maestros, el concepto de inducción de baja frecuencia es discutido. "Los maestros" místicos a menudo caracterizan sus campos basales de energía como estando compuestos de bajas frecuencias, estables. En el momento de redactar este manual, un Investigador del **RFI** le informó a ITEM acerca de algunos descubrimientos interesantes – antes de una clase sobre el sendero maestro del chi (energía esencial), la mayoría de los estudiantes tenían sus campos basales de energía en un rango de frecuencia de entre 400-600 MHz. Sin embargo, después de la clase, los campos de energía de la mayoría de estudiantes habían disminuido a 10-20 MHz. Este descubrimiento sugiere que el campo de energía del instructor de la clase de chi, provocó una inducción y causó una resonancia en los campos de energía de los estudiantes. La inducción de baja frecuencia, como la inducción de alta frecuencia abordada previamente en esta sección, es un principio establecido de la física y tiene muchas aplicaciones en la música. Sin embargo, la inducción de los campos de energía de baja frecuencia , a diferencia de la inducción de campos de alta frecuencia, tiene poco que ver con la fuerza de los campos eléctricos y magnéticos, pero puede tener más relación con la dinámica de energía no hertziana (energías que actualmente no podemos medir).

Muchos Investigadores del **RFI** le hacen a ITEM una pregunta natural – ¿qué es mejor en términos de espiritualidad, iluminación, amor etc., altas o bajas frecuencias?. La respuesta a esta pregunta es teórica y no existen datos científicos suficientes para dar una solución definitiva y objetiva. Por ejemplo, algunos “maestros” cuyo campo energético se describe como “poderoso”, irradian relativamente bajas frecuencias, mientras otros irradian altas frecuencias. Muchas personas piensan, “altas frecuencias del campo energético, más elevada realización de conciencia”, pero este no es necesariamente el caso. De hecho, uno podría sostener la opinión que lo contrario es cierto si consideráramos que, cuando las frecuencias aumentan, las longitudes de onda decrecen. Por ejemplo, la longitud de onda de una transmisión de radio de es de 3 metros. La longitud de onda de la frecuencia resonante fundamental de la tierra (resonancia Schumann) de aproximadamente 7.83 Hz es de 38,300 kilómetros. La longitud de onda de 0.000000032 Hz es de un año luz. Usted entonces puede comenzar a ver que cuando la

frecuencia se aproxima a cero, la longitud de onda se acerca al infinito, lo cual significa que la información energética puede viajar a través de infinitas distancias y literalmente puede existir "en todas partes simultáneamente" Así, la deducción teórica es que quizá cuanto más bajo en términos de frecuencia es el campo de energía de una persona, más alto es su estado de conciencia – no obstante, ésta es una investigación filosófica, claro está, y la ciencia nunca puede encontrar una respuesta definitiva para esto.

3.0 CÓMO USAR EL RFI

3.1 RECOLECTANDO LAS FRECUENCIAS

3.1.1 Contador de Frecuencias del RFI

Incluido con su paquete **RFI** usted encontrará un contador digital de frecuencia de mano, modelo FC1003, fabricado por Aceco. ITEM rutinariamente evalúa contadores de frecuencia y selecciona el contador más efectivo sobre la base de la seguridad funcional (la exactitud en detectar fuentes de frecuencia conocidas hasta el momento), sensibilidad (la habilidad para detectar frecuencias con campos de baja intensidad), y con una buena ecuación de costo-eficiencia (precio más económico con óptima calidad). El Aceco FC1003 ha sido seleccionado como el contador de frecuencia más adecuado para el **RFI** en este momento – no sólo en términos de sensibilidad y probada fiabilidad, sino también por su simplicidad de uso. La investigación en ITEM ha confirmado que el modelo FC1003 es más sensitivo y confiable que los contadores de frecuencia que ITEM ha ofrecido en el pasado. ITEM dirige una serie de pruebas básicas de comprobación de calidad en contadores individuales de frecuencia antes del embarque con el paquete del **RFI** para asegurar la operación normal (vea la Declaración de Comprobación De Calidad en el paquete del contador de frecuencia). Sin embargo, en raras ocasiones puede ocurrir un daño en el contador de frecuencia durante el embarque que impida la normal operación del dispositivo. Si ocurriese una avería física en el contador de frecuencia Aceco, entonces por favor contacte con ITEM inmediatamente en **Central@item-Bioenergy.com** para ser asistido. La información sobre la limitación de la garantía del contador de frecuencia se encuentra en la **Sección 3.1.5**.

En la Sección 2.0, discutimos tres de los parámetros más importantes de los campos EM – la frecuencia, el campo eléctrico, y el campo magnético. El **RFI** utiliza un contador de frecuencia para medir sólo uno de estos parámetros – la frecuencia (la cual ITEM cree que es la

característica más importante del Aura). Si usted tiene interés en medir fuerzas eléctricas y magnéticas del campo, entonces le recomendamos que obtenga un voltímetro ambiental y un medidor de gauss, respectivamente, o un multímetro. En tanto ITEM continúe desarrollando el **RFI** y entendiendo la importancia práctica de los campos de fuerza eléctrica y magnética para evaluar condiciones fisiológicas y psicológicas, podremos considerar el uso de instrumentos capaces de medir los tres parámetros citados.

En lugar de un manual de usuario, presentamos a continuación una descripción detallada de las características y especificaciones del contador de frecuencia Aceco FC1003.

Características

Entrada de 50 W (ohm) para un rango completo de cobertura entre 1 MHz y 3 GHz – la antena proporcionada con el contador de frecuencia Aceco es una antena receptora dipolar estándar con una impedancia máxima de entrada de 50 ohms. La impedancia se define como el voltaje dividido la corriente. Cuando las ondas electromagnéticas (EM) interactúan con la antena, una carga alterna (voltaje) es producida en la superficie de la antena, lo cual induce una corriente eléctrica alterna. La corriente viaja por el sistema de circuitos eléctricos internos del contador de frecuencia en donde la amplitud de la corriente es detectada y convertida en frecuencias. La impedancia (también llamada resistencia) está presente en la antena para proteger al circuito interno del daño que resultaría de una corriente eléctrica elevada. La impedancia máxima de 50 ohms se encuentra en los extremos de la antena – y es constante para el ancho de banda total que el contador de frecuencia puede medir (1 MHz a 3 GHz). La impedancia mínima en la antena (en cualquier antena dipolar) se encuentra en el centro. Por consiguiente, al medir campos débiles, es importante asegurarse que el centro de la antena esté dentro del área que se intenta medir, ya que la antena es más sensitiva en el centro. Sin embargo, inversamente, ya que el

centro de la antena tiene la impedancia mínima, es también el lugar donde la antena es más vulnerable a ser dañada por campos eléctricos de gran intensidad. Mientras más alta sea la impedancia concentrada en la antena, inferior será la corriente que alcance el circuito del contador e inferiores serán las frecuencias detectadas. Para probar este principio, encienda el contador de frecuencia y luego mire las frecuencias decrecer cuando usted presiona firmemente la punta de la antena con la punta de sus dedos.

El Filtro impide la exhibición de estática – El contador de frecuencia viene equipado con un módulo de filtro que, cuando es colocado en la posición **"ON"**, provoca que el circuito interno ignore las corrientes fluctuantes originadas por los cambios constantes en la potencia de los campos eléctricos de las ondas EM. El fabricante diseñó el módulo de filtro como una herramienta para que los electricistas e ingenieros electrónicos pudieran identificar ondas EM de "potencia industrial" relativamente constantes irradiando de transmisores, e ignorar así eficazmente a las ondas armónicas y ondas EM con potencias más débiles ("estática") interactuando con el ondas de "potencia industrial". Irónicamente, los campos EM llamados estática o "lecturas fantasma " por la industria de la electrónica son los mismos campos en los que estamos interesados los que medimos la bioenergía del Aura. Por consiguiente, recomendamos que a menos que usted realice un barrido para determinar si existe o no una interferencia (como se plantea adicionalmente más abajo), usted debería conservar el filtro en la posición **"OFF"**.

Alta Velocidad de conteo directo en 300 MHz con una resolución de 0.1 Hz por segundo – hay dos rangos de frecuencia en el contador de frecuencia – "300 MHz" (para medir frecuencias de menos de 300 MHz, hasta 1 MHz) y "3 GHz" (para medir frecuencias de hasta 3 GHz). ITEM recomienda que usted recoja sus mediciones del **RFI** usando el rango de 3 GHz; en este rango, la resolución máxima de exhibición es de 10 Hz (el contador redondeará las frecuencias cercanas a 10 Hz). Sin embargo, si usted utiliza el rango de 300 MHz, la máxima resolución mostrada será

0.1 Hz. Por consiguiente, el rango de 300 MHz es 100 veces más "sensitivo" que el rango de 3 GHz, aunque tal sensibilidad tiene relativamente poca importancia dentro del contexto de los MHz - rango de frecuencia de las mediciones. El interruptor de rango del contador de frecuencia debería ser colocado en "3 GHz" si usted espera que las frecuencias estén dentro del rango de 10 MHz a 3 GHz, en el cuál estarán todas o la mayoría de las mediciones del **RFI**. Como se discute debajo, usted raramente debería necesitar usar el ajuste de rango de "300 MHz".

Detector gráfico de barras sincrónico ultra sensitivo de señales potentes de RF – el contador de frecuencias incluye un rasgo que indica las potencias relativas del campo eléctrico de las ondas EM o del campo que interactúa con la antena (situado en la base de la pantalla). La sensibilidad de este gráfico de barras la siguiente:

Frecuencia	Primer Segmento	Escala Completa
27 MHz	7 mV	100 mV
150 MHz	5 mV	90 mV
800 MHz	10 mV	200 mV

En una frecuencia de 27 MHz, el primer segmento del gráfico de barras aparecerá si la onda tiene una potencia asociada de campo eléctrico de al menos 7 mV, y el gráfico de barras completo aparecerá si la potencia del campo eléctrico es por lo menos de 100 mV. De modo semejante, el primer segmento aparece con 10 mV para una frecuencia de 800 MHz, y la escala completa aparece con 200 mV. En la mayoría de los casos, las únicas frecuencias lo suficientemente "altas" y "fuertes" como para producir una respuesta del gráfico de barras son aquellas frecuencias asociadas con aplicaciones comerciales o industriales, por ejemplo, una transmisión de un telefóno celular. Es inusual que las frecuencias del Aura sutil o de la bioenergía tengan fuerzas de campo eléctrico de una magnitud como para causar una respuesta en este detector gráfico de barras de señales potentes. Una excepción puede ser una circunstancia donde haya

un ambiente "altamente cargado" como resultado de muchas personas proyectando formas fuertes de pensamiento o de entidades metafísicas. Una respuesta en este gráfico de barras mientras se están realizando medidas con el **RFI** es una buena razón para sospechar alguna forma de "interferencia," como transmisiones de un teléfono celular.

Batería de NiCd de bajo consumo, 6 horas de operación contínua – el contador Aceco FC1003 viene con una batería recrgable de niquel – cadmio (NiCd) que debería durar varios años. Las baterías usualmente durarán hasta 6 horas entre carga y carga. Para recargar la batería, inserte el adaptador AC de 120 Voltios, incluido en el paquete, en un tomacorriente y coloque la sonda del adaptador en la entrada "9-12 VDC", en la parte superior del contador de frecuencia. La recarga se completará entre las 12 a 16 horas. Si usted reside en un país que usa una fuente de poder distinta de 110/120 Voltios AC (como Europa, Asia y algunos países de América), entonces usted debería comprar un adaptador 9-12 V que sea compatible con su suministro eléctrico local. Tales adaptadores se venden normalmente en tiendas de electrónica y son generalmente baratos. Por favor tenga en cuenta que no es recomendable usar el contador de frecuencia para realizar mediciones con el **RFI** mientras está enchufado a un tomacorriente.

Indicador de batería baja – cuando la energía almacenada en la batería NiCd está casi agotada, un indicador de batería baja aparecerá en la base derecha de la pantalla de LCD, lo cual señala que es momento de recargar la batería.

Interruptor de Pausa que detiene la exhibición – el botón de "Pausa" ("Hold") puede ser usado en cualquier momento en el que a usted le gustaría detener la exhibición continua de frecuencias y registrar la frecuencia específica exhibida en ese momento. Como se explica con más detalle más adelante, recomendamos que usted presiona el botón "Pausa" ("Hold") después de un período de tiempo predeterminado para fijar la frecuencia que será ingresada en el programa de software del **RFI.**

Suministrado con antena telescópica y adaptador AC de pared – la "antena telescópica" es una antena dipolar vertical usada para recibir pasivamente un rango amplio de ondas y campos EM. El largo total de la antena, cuando está completamente extendida, es de aproximadamente 57 cm de largo (22.5 pulgadas) desde la base de la antena (por encima del conector BNC) a la base de la punta (nódulo negro). Hay un total de 7 segmentos en la antena, con las siguientes medidas: El primer segmento (la base de antena) – de aproximadamente 9.75 cm, el segundo segmento – 8.5 cm, el tercer segmento – 8.25 cm, el cuarto segmento – 8.0 cm, el quinto segmento – 7.75 cm, el sexto segmento – 7.5 cm, y el séptimo segmento (la punta de la antena) – 7.25 cm. Las instrucciones de cómo extender la antena para realizar las mediciones con el **RFI** son presentadas a continuación. El adaptador AC de pared fue presentado arriba, en la sección sobre baterías de NiCd.

El botón de Barrera ("Gate") – el botón de barrera ("gate") es crítico para recolectar datos de frecuencia con el **RFI.** El botón de barrera controla la velocidad en la cual las frecuencias son mostradas, o el tiempo entre cada exposición de frecuencias. Cuándo usted enciende el contador con la tecla "on", el tiempo de exposición es de aproximadamente de un veinteavo de segundo (aproximadamente veinte valores de frecuencia son mostrados cada segundo). Cuando usted presiona el botón de barrera una vez, el tiempo de exposición desacelera a aproximadamente un cuarto de segundo. Cuando se presiona dos veces, la exposición desacelera a un segundo. Cuando se oprime una tercera vez, el tiempo de exposición desacelera a cuatro segundos. El uso del botón de barrera es una buena forma para tomar medidas con el **RFI** porque las frecuencias son promediadas durante el período de la exposición; por ejemplo, la frecuencia media que el contador detecta durante un período de cuatro segundos es mostrada si usted presiona el botón de barrera tres veces.

Calibración – otro rasgo del contador de frecuencia FC1003 es la abertura de ajuste de

calibración (etiquetado "CAL" en el lado derecho). Las pruebas preliminares en ITEM señalan que usted no debería necesitar calibrar el contador de frecuencia. Sin embargo, si usted tiene un generador de función u otro dispositivo que transmita una frecuencia conocida, entonces podría ajustar la frecuencia expresada para que sea igual a la frecuencia conocida usando un objeto puntiagudo pequeño, como un clip, presionando en la abertura hasta que la pantalla del contador sea igual a la frecuencia conocida. Si usted decide calibrar el contador, entonces asegúrese de presionar el botón de velocidad de barrera ("gate") tres veces para desacelerar la exposición.

Especificaciones

Sensibilidad de entrada de datos – el voltaje mínimo del campo eléctrico que inducirá una respuesta en el contador de frecuencia para frecuencias específicas se indica a continuación: < 0.8 mV en 100 MHz, < 6 mV en 300 MHz, < 7 mV en 1 GHz, y < 100 mV en 2.4 GHz. Por ejemplo, en una frecuencia de 300 MHz, el contador puede detectar campos EM con potencias de campo eléctrico debajo de los 6 mV. De estos valores, usted puede ver que si el campo EM tiene una frecuencia de, digamos, 500 MHz y un componente de campo eléctrico de sólo 4 mV, el contador no lo detectará. En 500 MHz, el campo EM debe tener una potencia de campo eléctrico de al menos 6 mV para que el contador lo detecte. Las Auras de cosas vivientes generalmente producen campos EM con una fuerza de campo eléctrico más grande que los valores mínimos requeridos para generar una lectura (sin embargo no lo bastante fuertes como para generar una respuesta en el gráfico de barras nombrado arriba), así es que usted puede sentirse confiado en que el contador de frecuencias efectivamente detecta los campos del bioenergía.

La entrada de datos máxima del contador de frecuencia es 15 dBm. La unidad dBm expresa el poder que la antena puede recibir en decibeles (dB) relativo a un milliwatt; el decibel es la unidad estándar en la industria electrónica para expresar el poder transmisor y receptor de una antena (o "ganancia"). La ecuación para convertir dBm a milliwatts es: Milliwatts = $10^{(dBm/10)}$. Por

consiguiente, 15 dBm equivalen a 32 milliwatts (mW) o a 0.032 Watts (W). La antena suministrada con el contador de frecuencia FC1003, es, por consiguiente, perfectamente adecuada para realizar mediciones de bioenergía sutil. Generalmente excluirá campos EM de alto poder directo y ondas con potenicias de campo eléctrico más grandes que 32 mW, lo cual es deseable para realizar mediciones de campos sutiles de energía con el **RFI**.

3.1.2 **Recomendaciones para la Recolección de las Frecuencias**

Los siguientes pasos son recomendados por ITEM para realizar las mediciones con el **RFI** usando el contador de frecuencia FC1003:

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición "ON", el interruptor de rango en "3GHz," y el interruptor del filtro en posición "on," sin extender la antena. Póngase su chaqueta blanca 100% algodón de laboratorio. Dirija el contador y la antena al espacio aéreo delante suyo. Si la pantalla muestra cualquier cosa que no sea "0.000," entonces hay una señal industrial potente en su ambiente operativo que puede interferir con su habilidad para hacer mediciones sensitivas con el **RFI**. Apague cualquier radio y/o televisor que usted puede tener. Chequee si alguien que se encuentra cerca puede estar usando un teléfono celular móvil . Si usted no puede localizar la fuente de la señal potente en su ambiente inmediato, entonces la fuente puede estar afuera o en otra parte del edificio. Si la señal persiste con el filtro en posición de encendido (“on), entonces ITEM le recomienda que encuentre un nuevo lugar para realizar las mediciones con el **RFI**.

2. Si la pantalla muestra “0.000” con el filtro encendido, entonces usted puede estar razonablemente seguro que las señales potentes no entrarán en su ambiente de trabajo y puede entonces comenzar a recoger sus mediciones con el **RFI**.

3. Coloque el filtro en posición “off”, y asegúrese que el interruptor de rango esté en “3GHz.” Luego, usted puede querer extender la antena.

¿Hasta dónde debería ser extendida la antena? Si usted conoce la frecuencia que va a recibir, entonces podría aplicar la siguiente fórmula para calcular cuán larga necesitaría ser la antena:

468 / frecuencia (MHz) = largo de la antena (en pies)

Por ejemplo, si usted conoce que la frecuencia a medir será de 500 MHz, entonces puede usar esta fórmula para determinar que la antena necesitará ser extendida cerca de 28.5 cm (o 3 segmentos):

468 / 500 MHz = 0.936 pies = 28.5 cm

Sin embargo, usted nunca sabrá realmente qué frecuencias medirá cuándo opere con el **RFI**. Además, las frecuencias fluctúan en respuesta a los cambios en el campo bioenergético. Por consiguiente, es importante seleccionar un largo de antena que mida una banda amplia de frecuencias posibles.

Usando la fórmula citada anteriormente, usted puede ver que las frecuencias más altas pueden ser medidas cuando el largo de la antena es más corto (9.75 cm) y ésta es la razón por la cual las antenas de los teléfonos celulares son tan cortas (nota – reciben señales de alta frecuencia) y utilizan el primer segmento únicamente. Conforme a la fórmula, el primer segmento puede medir frecuencias superiores a 1,460 MHz (nota – se logran medir frecuencias tan altas como 3,000 MHz (3GHz), la cual es la frecuencia máxima que el contador puede mostrar, pero las ondas deben ser medidas en la base de

la antena para que estas frecuencias tan altas puedan ser detectadas). Sin embargo, cuándo la antena está en su largo más corto, puede ser sensible a las fluctuaciones bioenergéticas. Esto es así porque hay muy poca distancia que la corriente (inducida por las frecuencias EM) necesita atravesar en la antena antes de que ocurra la detección dentro del circuito del contador. Al mismo tiempo, sin embargo, la antena es menos sensible a campos eléctricos en su largo más corto.

Usted advertirá que si compara las frecuencias detectadas cuando la antena queda a su largo más corto con las frecuencias que se aparecen cuando está completamente extendida, entonces verá que los valores son usualmente inferiores cuando la antena está extendida por completo . Esto ocurre por dos razones: 1) un área de espacio mayor de ondas EM es detectada por la antena cuando ésta se encuentra completamente extendida, y 2) existen habitualmente pérdidas en la corriente que viaja a través de la antena a medida que el largo de la antena aumenta (a menos que las ondas EM sean enfocadas en la base de la antena – lo cual prácticamente no puede ocurrir al medir bioenergías). Por consiguiente, para mayor exactitud, es mejor conservar el largo de la antena tan corto como sea posible al realizar mediciones con el **RFI**.

ITEM recomienda que usted, en principio, use el largo más corto de la antena para recoger datos de frecuencia, es decir, sólo el primer segmento. El hecho de que la antena sea más sensitiva en su largo más corto, y de tal manera más proclive a la fluctuación a medida que las bioenergías del sujeto cambian, puede desafiar la mente científica de algunos individuos que creen que las frecuencias no deberían alterarse sino que deberían ser estáticas. Esto, sin embargo, no es un pensamiento realista ni una reflexión verdadera de la naturaleza del Aura.

Para vencer este desafío, ITEM ha dirigido centenares de pruebas para determinar la

mejor manera de medir frecuencias. Basados en nuestra investigación, nuestra recomendación es la siguiente: **1)** presione el botón de barrera ("gate") tres veces después de encender el contador para reducir la velocidad de exhibición a su modo más lento; **2)** coloque la antena horizontalmente (paralela al suelo) en la región de la bioenergía que intenta medir (la cuestión del posicionamiento se abordará más adelante); y **3)** presione el botón "Pausa" ("Hold") después de que la tercera frecuencia sea exhibida. La investigación de ITEM ha demostrado que la tercera frecuencia exhibida representa (casi en el 95 % de los casos) la frecuencia promedio que se obtendría si la antena fuera sostenida constantemente en la región durante un minuto. Luego de que la 3er frecuencia ha sido exhibida (a los 12 segundos aproximadamente), la antena generalmente ha tenido tiempo de mantenerse en equilibrio con el campo circundante de bioenergía. Esto no quiere decir que las medidas se hacen constantes o que cesa la fluctuación después de dicha medida (lo cual no representa a la naturaleza del Aura), pero la 3er frecuencia exhibida usualmente representa el punto medio de cualquier otra fluctuación que aparezca después de los 12 segundos.

Después de que usted haya presionado el botón "Pausa" ("Hold"), introduzca esta frecuencia en el programa de software del **RFI** como se plantea en la **Sección 3.1.4**, debajo. En lugar de introducir los datos de las frecuencias en el programa de software del **RFI** después de realizar cada medición, algunos Investigadores prefieren más bien escribir los datos de las frecuencias en copias de la **Carta de Análisis del Aura del RFI** que son provistas con el sistema **RFI.** Esto permite al usuario tomar rápidamente las mediciones, ponerlas por escrito en las líneas correspondientes de la gráfica del cuerpo, y luego entrar todos los datos en el programa y seguir con el escaneo completo del Aura. Si usted realiza sesiones RFI por usted mismo, sin ayuda, entonces este método puede ser de lo más efectivo para ahorrar tiempo hasta que ITEM complete su siguiente prototipo RFI que incluirá procesamiento de entrada de datos en tiempo real.

Este método parece trabajar adecuadamente basado en nuestras pruebas. Sin embargo, usted debería sentirse libre para experimentar por usted mismo. Si usted es un individuo de mente científica y no se siente cómodo a menos que las medidas sean "más constantes", entonces, tómese la libertad de extender la antena al 2do o 3er segmento. La variabilidad en las fluctuaciones a menudo (pero no siempre) declina, pero al hacer esto puede haber una cierta reducción en la exactitud de las lecturas por las pérdidas causadas por el largo de la antena. Además, algunos Investigadores, por cuestiones de tiempo, pueden querer usar la primera frecuencia exhibida (en lugar de la tercera recomendada). La investigación de ITEM indica que la mayoría de las veces, las primeras y terceras frecuencias exhibidas representan el mismo color, así es que puede ser seguro usar la primera frecuencia, pero sentimos que es más seguro y más confiable usar la tercera frecuencia exhibida. No importa qué método escoja usted, sea coherente durante toda la lectura (todas las regiones de bioenergía deberían ser medidas de la misma manera).

3.1.3 **Contador de Frecuencias / Posicionamiento de la Antena**

El programa de software del **RFI** contiene 40 regiones distintas donde las mediciones de la bioenergía deberían ser tomadas, tipificadas como a continuación se indica:

- **Nivel de Salud** – un total de 17 regiones abarcan el Nivel de Salud; estas incluyen la pierna izquierda, el muslo izquierdo, el lado izquierdo del torso (el área de cadera/pelvis), la mano izquierda, el antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, hombro y cuello del lado izquierdo, lado izquierdo de la cabeza, parte superior de la cabeza, lado derecho de la cabeza, hombro y cuello del lado derecho, brazo derecho, antebrazo derecho, mano derecha, lado derecho del torso, muslo derecho, y pierna derecha.


El Nivel de Salud existe, en general, de 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm.) Por consiguiente, el sujeto debería quitarse la ropa gruesa antes de la recolección de datos. Coloque la antena en el punto medio aproximado entre el cuerpo y las cuatro pulgadas (diez centímetros) del cuerpo, y en el centro de la región del Nivel de Salud de su interés, con la antena orientada en ángulo recto con el cuerpo (horizontalmente, paralela al suelo).
Sujete el contador de frecuencia con su pulgar en la base y con dos o tres dedos en la parte superior como se ilustra en la Figura 1, que muestra la posición para realizar la medición de la parte superior de la cabeza en el Nivel de Salud (0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm.) La antena debería estar lejos de usted y ser situada aproximadamente a 2 pulgadas) ((5 centímetros (cm) de la parte superior de la cabeza., el punto medio entre 0 y 4 pulgadas). No esté pendiente de la exactitud de la colocación – por ejemplo, usted no necesita usar una regla para delimitar el nivel exacto donde la antena debería estar. Utilice su sentido común. También, puede usar el "clip de la antena" como un punto de referencia para saber dónde colocar la antena – el "clip" debería ser situado en el centro de la región que usted va a medir. Por ejemplo, si usted mide la parte superior de la cabeza en el Nivel de Salud, entonces coloque la antena paralelamente al suelo, aproximadamente a 2 pulgadas de la cabeza, lejos de usted, con el clip localizado en el centro aproximado de la región de la parte superior de la cabeza .

El mismo posicionamiento se aplica a todas las otras medidas del Nivel de Salud alrededor de los lados del cuerpo – oriente el contador de frecuencia y la antena paralelamente al suelo, aproximadamente a dos pulgadas (5 cm) del cuerpo en el punto central de la región de interés. Dirija la antena lejos de usted. Es recomendable que el Investigador se coloque al lado del sujeto – excepto quizá cuando se mide la parte superior de la cabeza, que puede realizarse estando parado directamente delante del sujeto.

Para las medidas del Nivel de Salud en la región abdominal (cadera / pelvis), el sujeto debería levantar sus brazos durante la lectura para evitar cualquier interferencia posible de los brazos. Para realizar las mediciones del Nivel de Salud de las manos, el sujeto debería colocar sus manos en línea recta lejos del costado del cuerpo, con las palmas hacia abajo, y usted debería tomar la medida de la parte superior de las manos.

La figura 1 muestra la mano de del Investigador **RFI** entrando en el Aura del sujeto, pero la energía que irradia de la mano no se muestra. Por favor note que las energías de su mano pueden tener un impacto en las medidas que usted obtiene de dos maneras: 1) la base de la antena posiblemente puede detectar las frecuencias de su mano, y 2) si usted usa su mano derecha para sujetar el contador de frecuencia, entonces, sin su conocimiento, puede proyectar ondas EM en la Aura de su sujeto y producir cambios en el Aura que usted está midiendo (especialmente si usted es un terapeuta que practica proyección de energía). Hemos encontrado que esto generalmente no afecta a las medidas tomadas, pero si tiene alguna duda que lo lleve a sospechar que sus manos pueden afectar las mediciones, entonces recomendamos que usted lleve puestos guantes 100% de algodón durante las sesiones con el **RFI.**

Figura 1

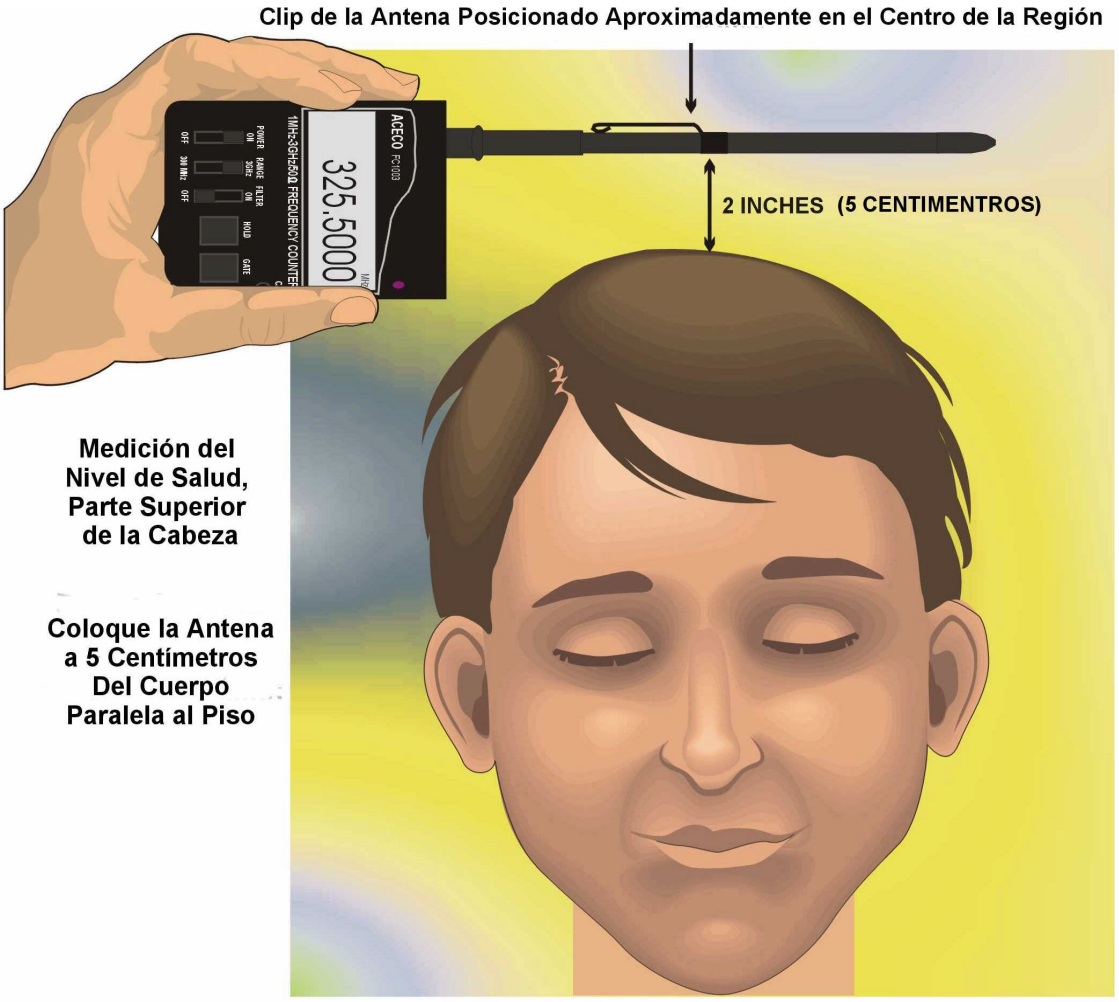

- **Nivel Psicológico** – un total de 17 regiones abarcan el Nivel Psicológico, también llamado Nivel Emocional o Cuerpo Emocional; este incluye la pierna izquierda, el muslo izquierdo, el lado izquierdo del torso, la mano izquierda (palma), el antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, hombro y cuello del lado izquierdo, el lado izquierdo de la cabeza, la parte superior de la cabeza (coronario), el lado derecho de la cabeza, el hombro y cuello

del lado derecho, el brazo derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha (palma), el lado derecho del torso, el muslo derecho, y la pierna derecha.


Las mediciones del Nivel Psicológico deberían ser tomadas en la mayoría de los casos de la misma manera que las del Nivel de Salud; sin embargo, hay dos diferencias: 1) la antena debería situarse dentro del espacio que está entre las 4 y las 18 pulgadas de la región de interés del cuerpo (la recomendación es aproximadamente a 12 pulgadas (un pie) o 30.5 cm), y 3) las manos deberían ser medidas con las palmas hacia arriba, y la antena debería ser colocada encima de la palma. Para las mediciones del Nivel Psicológico, la antena debería estar paralela al suelo, y usted puede situar el clip de la antena en el centro aproximado de la región que tiene intención de medir.

Las palmas de las manos transmiten y reciben información energética de la naturaleza psicológica predominante. La antena debería medir la energía que irradia de la palma de la mano (como lo ilustra la Figura 2, debajo). Usted debería pedirle al sujeto que tienda su mano hacia usted para realizar esta medición.

- **Sistema de Chakras** – hay un total de seis mediciones para tomar en el sistema de Chakras , incluyendo el Chakra del Entrecejo, el Chakra de la Garganta, el Chakra Cardíaco o del Corazón, el Chakra Sacral, el Chakra Suprarrenal o del Plexo Solar, y el Chakra Base . El séptimo Chakra (Corona o Coronario) es, por regla general, del mismo color que la parte superior de la cabeza – en el Nivel Psicológico. Los Chakras son puntos de luz generalmente pequeños – quizá de una o dos pulgadas de diámetro – que se proyectan fuera del cuerpo a 18 pulgadas y más allá. Una vez más, usted debería colocar la antena en ángulo recto al cuerpo, aproximadamente a 12 pulgadas (un pie o alrededor de 30.5 cm) fuera de él, paralela al suelo, en la localización aproximada del Chakra (como se ilustra en la Figura 3, debajo). Para los propósitos interpretativos, los

Chakras no sólo aportan información de las características psicológicas básicas de un sujeto, sino que también indican el estado de salud de las glándulas endocrinas localizadas en las regiones de los Chakras.

Figura 2

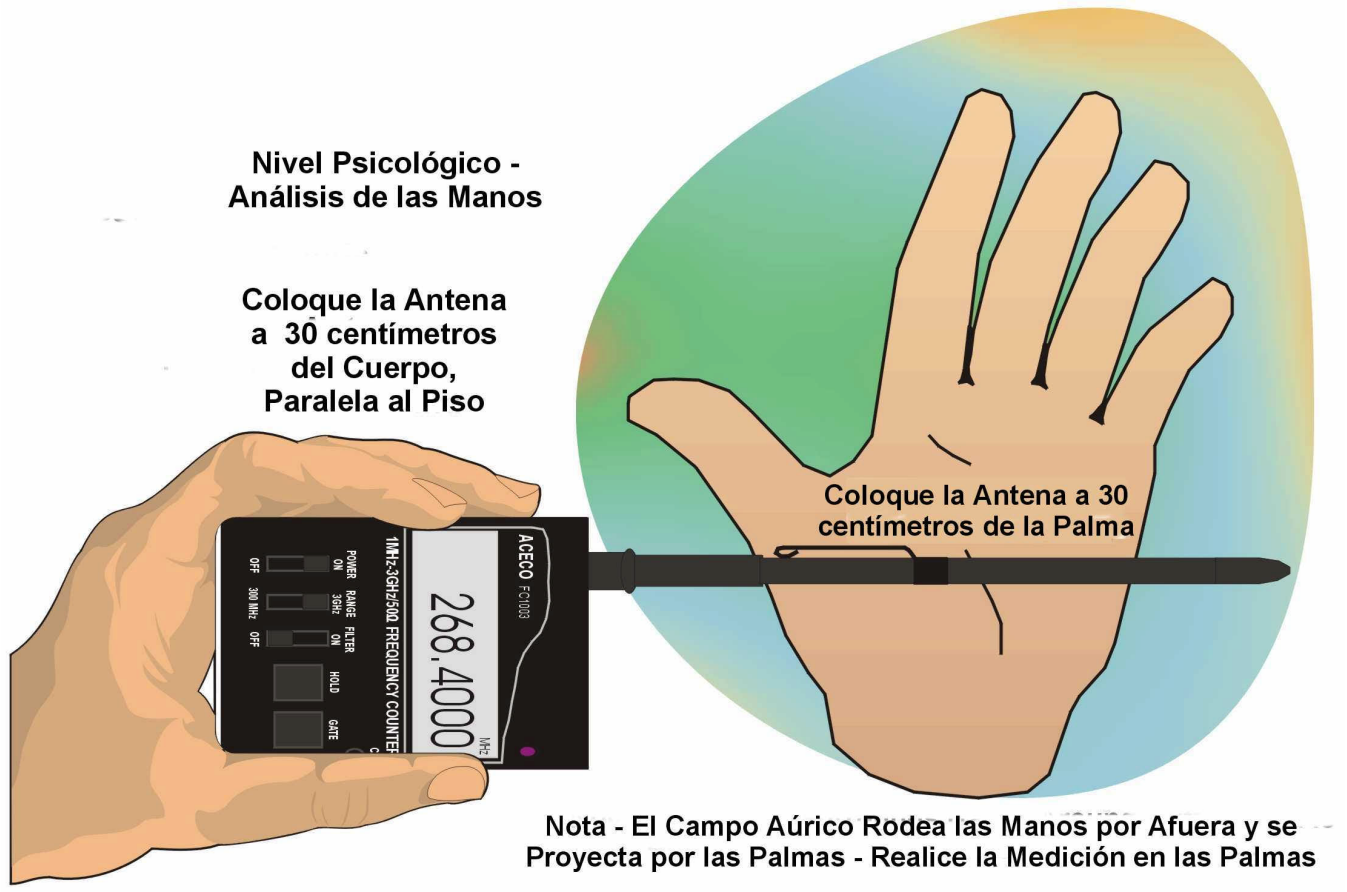


3.1.4 Notas Adicionales sobre la Recolección de Datos

1) Si usted utiliza el contador de frecuencia FC1003 para tomar mediciones con el **RFI**, las frecuencias del Aura medidas generalmente estarán en un rango de entre 100 MHz y 800 MHz (aunque no es imposible o improbable que las frecuencias medidas esten fuera de

este rango).

2) El programa de software del **RFI** está diseñado para calcular el color de la luz visible asociado con las frecuencias medidas en décimas de MHz. Por ejemplo, si, cuando usted presiona el botón de Pausa, lee una frecuencia de 209.7455 MHz, debería redondear este número a 209.7 MHz al introducir el valor en el programa de software (color – bordó). Si usted redondeó el número al MHz más próximo en lugar de redondearlo a la décima parte más próxima de un MHz, entonces el valor resultante, 210 MHz, arrojará como resultado el color rojo, el cual tiene un significado interpretativo diferente al del color bordó que fue realmente medido. Por consiguiente, recomendamos que usted redondee a la décima parte más próxima de un MHz al introducir los datos de frecuencia en el programa de software.

Figura 3

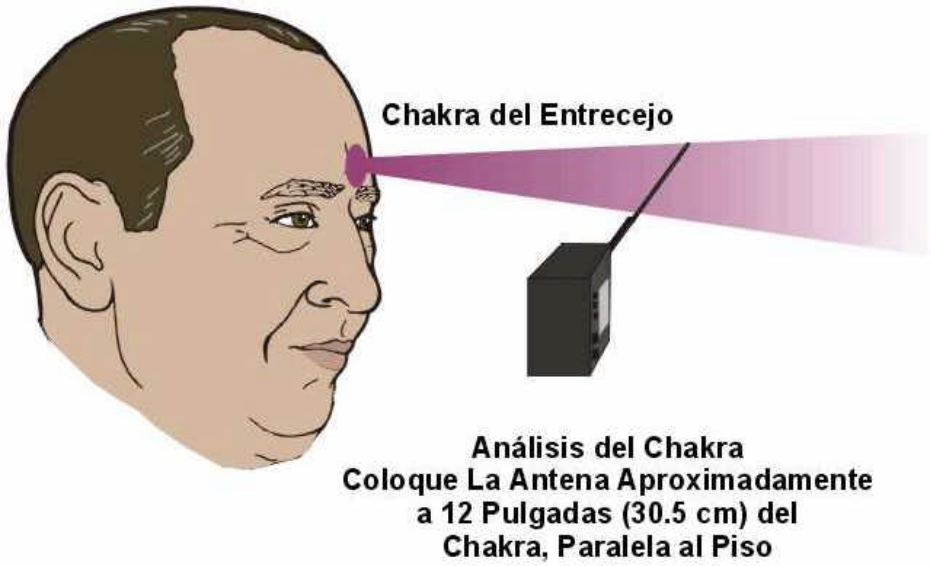

 © 2005 ITEM

3) Al tomar mediciones con el **RFI**, siempre debería estar consciente de la distancia entre la antena y el cuerpo. Manteniendo la distancia de la antena aproximadamente a 2 pulgadas (5 cm) para el Nivel de Salud y a 12 pulgadas (30.5 cm) para el sistema de Chakras y para el Nivel Psicológico, usted puede estar seguro que las frecuencias características correctas de esos Niveles estarán siendo medidas. Si usted no es capaz de hacer tales cálculos aproximados de la distancia espacial, entonces solo necesitará un poco más práctica.

Recuerde que la antena detectará las frecuencias más fuertes de esas ondas EM que estén más próximas a la antena durante cualquier momento. Por consiguiente, usted debe tener cuidado de no colocar la antena como para que invada más de una región. Una buena regla general es situar la antena en el plano opuesto a la orientación del cuerpo. Por ejemplo, los cuerpos humanos y las plantas están orientados principalmente en el plano vertical; entonces, la antena debe ser posicionada en el plano horizontal (paralela al suelo). Para algunos animales como los gatos y los perros, cuyos cuerpos están orientados principamente en el plano horizontal, la antena debe ser posicionada en el plano vertical (perpendicular al suelo). Cuando medimos campos EM que no están asociados con una forma corporal determinada, como las energía metafísicas en el espacio ambiental, no parece tener una significativa importancia cómo usted sitúa la antena. La otra buena regla general es situar el clip de la antena en el centro aproximado de la región de interés, como fue señalado anteriormente.

4) El programa de software del **RFI** requiere que usted recoja los datos de las frecuencias desde los lados del cuerpo, acorde a la teoría que dice que las energías son recibidas desde el lado izquierdo del cuerpo y proyectadas desde el lado derecho del mismo. La recolección de los datos de frecuencias desde el frente o desde la parte posterior del cuerpo no es parte del programa, excepto para la recolección de las frecuencias de los Chakras (sistema endócrino) que se realiza en la parte frontal del cuerpo. Sin embargo,

algunas personas pueden tener el deseo de medir el campo del Nivel de Salud de lugares específicos en la parte frontal del cuerpo. Por ejemplo, si alguien sabe que está enfermo del corazón, entonces el sujeto o el Investigador pueden querer determinar el estado del campo electromagnético frente al corazón. Hay un problema general, sin embargo, en recolectar datos del Nivel de Salud del la parte frontal del cuerpo, porque las frecuencias de los Chakras son generalmente las frecuencias dominantes (más fuertes), y siempre puede quedar la duda de si las frecuencias de los Chakras están interfiendo con las mediciones del Nivel de Salud o no. ITEM recomienda los dos métodos siguientes para distinguir áreas específicas correspondientes a órganos internos: **1)** si el órgano está situado en la parte frontal del cuerpo (como el corazón, los pulmones, etc.), mida el campo EM del órgano del lado del cuerpo que está más cerca de él. Por ejemplo, si el sujeto le da a conocer que tiene un problema cardíaco, usted puede, teóricamente, determinar el estado del campo EM del Nivel de Salud del corazón midiendo el lado izquierdo del pecho, debajo del brazo, ya que el lado izquierdo del cuerpo es el más cercano al corazón. En segundo lugar, **2)** si el órgano esta situado en la parte posterior del cuerpo (como es el caso de los riñones, la espina dorsal, etc.), mida el lugar aproximado desde la parte de atrás del cuerpo. Si el programa de software del **RFI** no tiene una región designada para el área que usted midió, puede usar la función de **Análisis de Punto/Objeto** del software para determinar el color y la interpretación, como fue señalado en la **Sección 3.2**.

5) Al tomar las mediciones con el **RFI** , usted se encontrará casi tan cerca de la antena como la persona a la cual usted está midiendo, y en general, su Aura tiene la misma extensión desde su cuerpo que el Aura del sujeto en cuestión. Por consiguiente, usted debería mantener el dispositivo y la antena tan lejos de usted como le sea posible, y no debería estar parado demasiado cerca de la persona cuya Aura usted está leyendo. Para reducir mejor la posible interferencia de su Aura, **lleve puesta la chaqueta blanca 100 % de algodón de laboratorio,** incluida en su paquete **RFI.**

La investigación sobre las interacciones entre materia y energía realizada por ITEM señala que la estructura atómica de algodón "amortigua" y retiene las energías del Aura en un grado mayor que otros materiales. De esta manera, cuando usted trae puesto una chaqueta fresca de laboratorio, su Aura será absorbida por la chaqueta de algodón, y será retenida en tanto esté siendo absorbida e inhibida por los electrones y polaridades atómicas del algodón. Esta "tracción hacia adentro" o efecto de contención de su Aura durará aproximadamente de 1 a 2 horas, hasta que la estructura atómica de los electrones del algodón esté saturada con las energías de su Aura, y entonces ésta comience a atravesar otra vez el tejido de algodón. Este fenómeno fue verificado por lecturas estables del voltaje del campo eléctrico de 80 millivolts para una Aura en descubierto, el cual fue instantáneamente reducido a sólo 20 millivolts en el momento en que la chaqueta de laboratorio de algodón fue abotonada. Esto significa que al usar la chaqueta de laboratorio de algodón, al menos el 75 % de las energías del Aura fueron retenidas.

Una vez que la **chaqueta de algodón está saturada (1 – 2 horas), es importante limpiarla de las viejas energías y renovar su poder de absorción de bioenergías lavándola,** preferentemente con blanqueador. Si usted no tiene el tiempo para lavarla porque debe seguir realizando gráficas del Aura para otras personas, **entonces el mejor método es colocarla delante o cerca de un dispositivo ionizador que ionizará el algodón.** Esto restaurará el balance atómico de los electrones y la polaridad del algodón, y disipará todas las energías viejas que hayan afectado su chaqueta y la de otros. Esta práctica incrementa sustancialmente la credibilidad y la fiabilidad de los datos experimentales producidos por el **RFI.** Si no dispone de un dispositivo ionizador como un generador del iones o una máquina radiónica, los cristales grandes de cuarzo blanco también han resultado ser efectivos, y generalmente despejan la chaqueta de laboratorio en aproximadamente 15 minutos. Otro método es colgar la chaqueta al aire libre de

noche, ya que la concentración de iones negativos en el aire nocturno puede tener un efecto similar.

6) ITEM ha encontrado que el uso por parte del Investigador de la chaqueta 100 % de algodón blanco de laboratorio reducirá significativamente la "interferencia" o interacción entre el Aura del Investigador y el Aura del sujeto durante las mediciones. Sin embargo, durante estos últimos años también hemos encontrado que la mano del Investigador puede influenciar las mediciones ya que la misma puede estar situada muy cerca de la base de la antena (especialmente la derecha, una de las áreas en las cuales la proyección de ondas EM es más fuerte). Para reducir o evitar cualquier interferencia posible, recomendamos que usted sujete un lado del contador de frecuencia con sus dedos índice y medio, y el lado contrario presionado firmemente con su pulgar contra el forro exterior de metal del contador. Esta posición ayudará a reducir los chances de que la antena capte las ondas EM de su mano, y la superficie de metal servirá para aislar el circuito interno del contador. Si usted está todavía preocupado de que la antena detecte la energía de su mano o que sus manos influencien el Aura del sujeto, entonces le recomendamos que se coloque guantes 100% de algodón mientras realiza mediciones (no incluido), como fue planteado anteriormente.

7) Después de varias lecturas consecutivas de sujetos diferentes, o después de una lectura particularmente fuerte de un sujeto altamente cargado, la antena misma puede quedar impresa, cargada o afectada por las fuertes energías que usted ha leído, y de esta manera continuará detectando esas energías pasadas en subsiguientes lecturas. Cuando esto ocurre, usted puede advertir que todas las subsiguientes lecturas parecen tener una cantidad desproporcionada de un color en particular. El remedio para esto, y también una precaución simple para evitarlo, es ionizar la antena después de cualquier lectura particularmente fuerte (alto voltaje o alta frecuencia) , e ionizar la antena periódicamente,

tanto como cada 2 lecturas, o quizá cada 15 minutos. La antena, sin embargo, no es verdaderamente ionizada por el uso de un dispositivo ionizador, como sucede con las chaquetas del laboratorio. La antena debe ser purificada y limpiada de la manera en la cual nosotros ionizamos una vara del vidrio: Simplemente frote la antena con una tela de algodón, a lo largo y a lo ancho, repetidamente. Usted puede usar una tela de algodón limpia separada para este propósito, o también puede frotar la antena en su chaqueta limpia de algodón que lleva puesta. Hacer esto periódicamente, e idealmente después de cada lectura de Aura, aumenta sustancialmente la exactitud y la fiabilidad de sus resultados.

8) Usted rara vez debería necesitar usar el rango de "300MHz" al realizar mediciones con el **RFI.** Cuando este ajuste es usado, la resistencia aumenta dentro del circuito del contador – causando frecuencias que inmediatamente disminuyen en comparación al ajuste de "3GHz" . Esto lleva a las ondas EM de campo eléctrico de alta potencia a inducir frecuencias localizadas en el rango de los "300MHz" que sean similares a aquéllas detectadas en el rango de "3GHz". En otras palabras, usar el rango de "300MHz" produce resultados inexactos a menos que usted sepa que el campo que está midiendo tiene un campo eléctrico de alta potencia. Dado que la mayoría de los campos de bioenergía tienen un campo eléctrico de potencias relativamente bajas, es mejor usar el rango "3GHz" en todos los casos. El rango de "300MHz" puede ser útil si usted esta, por ejemplo, midiendo campos cerca de una torre de radiotransmisión o de una transmisión telefónica celular.

9) Si usted usa la función **Análisis de Punto/Objeto** del programa de software del **RFI** para detectar energías presentes dentro del espacio de un cuarto o al aire libre (es decir, si usted realiza un barrido para sondear energías y no tiene en mente a un "sujeto" particular), ITEM recomienda que extienda la antena al tercer segmento. Esto

proporcionará más alcance aéreo a la antena, sin sacrificar una gran cantidad de exactitud en las frecuencias detectadas.

10) lITEM recomienda que usted no use el contador de frecuencia para medir bioenergías mientras el contador esté enchufado a una conexión eléctrica para recargar baterías. Hacer esto puede sacrificar la exactitud de las frecuencias medidas. Si usted tiene planificado un evento de todo el día para utilizar el RFI y esto lo afecta en que no podrá usar su contador de frecuencia el día entero, entonces una buena idea es tener a mano contadores de frecuencia de repuesto que estén completamente cargados. Los investigadores autorizados del RFI pueden encargarle a ITEM contadores de frecuencia adicionales con un descuento mayorista entrando en el sitio Web protegido por contraseña (**http://www.item-bioenergy.com/password/updates.html**).

3.1.5 **Información sobre la Garantía del Contador de Frecuencias**

El fabricante brinda la garantía del contador y sus accesorios por un año contra defectos de fabricación y materiales. La garantía no cubre al contador que haya sido modificado, sometido a reparaciones no autorizadas, uso indebido o abuso. La garantía no cubre daño causado por la aplicación de un nivel de poder excesivo en la entrada de la señal, y está limitada al valor del contador y no cubre ningún daño eventual o indirecto o costo. Si usted experimenta problemas con su contador de frecuencia dentro del primer año, o recibe su contador de frecuencia en malas condiciones, entonces por favor contáctese con ITEM inmediatamente en **Central@item-Bioenergy.com.** Si el contador funciona mal después del período de garantía limitada, entonces ITEM puede ayudarlo a que obtenga un nuevo contador o a que reciba un servicio de reparación para el contador original.

 © 2005 ITEM

3.2 EL PROGRAMA DE SOFTWARE DEL RFI

La **Versión 3.1** del programa de software **RFI** ha sido escrito en un disco compacto (CD) adjunto en su paquete. Hay dos programas de instalación en el CD – RFI_Windows.exe (para Windows 98 y superior) y RFI_macos.sit (para Mac OS10 y superior). Por favor, siga las instrucciones de Comienzo Rápido incluidas en el Manual Técnico para instalar el software. Si usted tiene algún problema con la instalación, por favor contáctenos en **Central@item-bioenergy.com**.

3.2.1 Pasos Preliminares para la Obtención de las Imágenes del Aura

Ahora que usted tiene una comprensión básica de cómo recoger mediciones **RFI,** discutiremos cómo crear imágenes de Aura y Cerebro usando el software **RFI**. Aquí le presentamos una breve revisión de los pasos que usted necesita recorrer para prepararse para tomar medidas del Aura. Vaya a las **Secciones 3.1.2** a **3.1.4** para una información más detallada .

1) Conecte la antena al conector BNC localizado en lo alto del contador de frecuencia. ITEM recomienda que usted no extienda la antena para tomar las medidas del Aura, pero usted puede querer extender la antena all tercer segmento para tomar medidas de bioenergía ambiental.

2) Coloque el switch de “Rango” en “3 GHz” y el switch de “Filtro” en “ON.”

3) Coloque el switch de “Power” en “ON.” Si la pantalla lee “0.000” (Cero) entonces coloque el switch del filtro en OFF y proceda con el siguiente paso. Si la pantalla lee cualquier otra cosa que no sea Cero, entonces apague los aparatos electrónicos innecesarios que puedan estar encendidos (televisiones, radios, etc.) y repita este paso nuevamente. Si usted no puede obtener una lectura de Cero con el filtro en la posición ON, existe en el

entorno una fuerte señal de interferencia, y usted debería intentar realizar las lecturas con el **RFI** en otra área.

4) Presione el botón de Barrera (Gate) tres veces para desacelerar la exhibición de las frecuencias. Coloque la antena del contador de frecuencias en la región del Aura que usted intenta medir, paralela al suelo, con el clip de la antena aproximadamente en el punto medio de la región (5 y 30 centímetros del cuerpo para el Nivel de Salud y el Nivel Psicológico/Chakras respectivamente). Con la práctica usted podrá apreciar exactamente dónde debería situarse la antena para medir el Aura, y no debería sentir la necesidad de medir con una regla antes de cada lectura. **Las regiones son identificadas como óvalos en blanco en el programa de software del RFI**.

5) Mantenga el contador de frecuencia y la antena tan quietos como le sea posible en la región, y presione el botón "Pausa" después de la tercera exposición. Éste es el llamado método del **Punto Único.** Escriba esta frecuencia en el programa del software **RFI,** o póngala por escrito en una Gráfica de Análisis del Aura **RFI** para su posterior ingreso.

Hay también otro método atractivo para realizar las mediciones de frecuencia en el Nivel de Salud y en las regiones del Aura del Nivel Psicológico, llamado el método del **Pase Simple,** en el cual se obtiene un "promedio espacial" de frecuencias. Para el método del Pase Simple usted debería colocar la antena aproximadamente a 5 centímetros (Nivel de Salud) o a 30 centímetros (Nivel Psicológico) de la base de la región del Aura y lentamente debería mover la antena hacia arriba hasta alcanzar la parte superior de la región del Aura. Cuando usted alcance la parte superior de la región, presione el botón de "Pausa" (Hold). Por ejemplo, si usted midiese el Aura del Nivel de Salud de la pierna izquierda, entonces debería colocar la antena a 5 centímetros del tobillo y lentamente subir la antena hacia la rodilla, y luego presionar el botón de "Pausa". De este modo, las frecuencias son

integradas por todo lo largo de la región del Aura.

El método del Pase Simple no es un método destacado porque la investigación de ITEM ha demostrado que hay una gran correlación entre los datos obtenidos utilizando el Punto Único y el método del Pase Simple, y el método del Punto Único es más simple. En otras palabras, hay poca diferencia al usar uno u otro método mientras usted sea consistente, pero es más fácil usar el método del Punto Único. Sin embargo, utilice el método que le sea más cómodo. Si usted decide usar, el método del Pase Simple para el Nivel de Salud y para el Nivel Psicológico, tenga en cuenta que el método del Pase Simple deberá ser utilizado también para los Chakras.

3.2.2 **Usando el Programa de Software del RFI**


En las páginas siguientes se plantea cómo se utiliza el programa de software del **RFI** para crear nuevas Imágenes de Aura y Cerebro e Informes de Interpretación.

Primero, instale la **Versión 3.1** del programa de software **RFI** hacienda clic sobre el archivo RFI_Windows.exe (para el sistema operativo Windows) o el archivo RFI_macos.sit (para el sistema operativo Macintosh). Lea y acepte el Contrato de Licencia, y seleccione el lugar donde desea que el **RFI** sea instalado. Después de la instalación, abra el programa **RFI** utilizando el icono de su escritorio o accediendo a la lista de programas en el menú Inicio de Windows. La primera vez que inicie el programa, usted será llevado a ingresar el Número de Serie. Por favor, ingrese el Número de Serie que está especificado en la carta de presentación de su sistema para registrar el software.

Cada vez que el software **RFI** es abierto, aparecerá un gráfico introductorio, señalando que el programa **RFI** se está cargando:



Cuando el programa se carga, usted verá la siguiente pantalla:

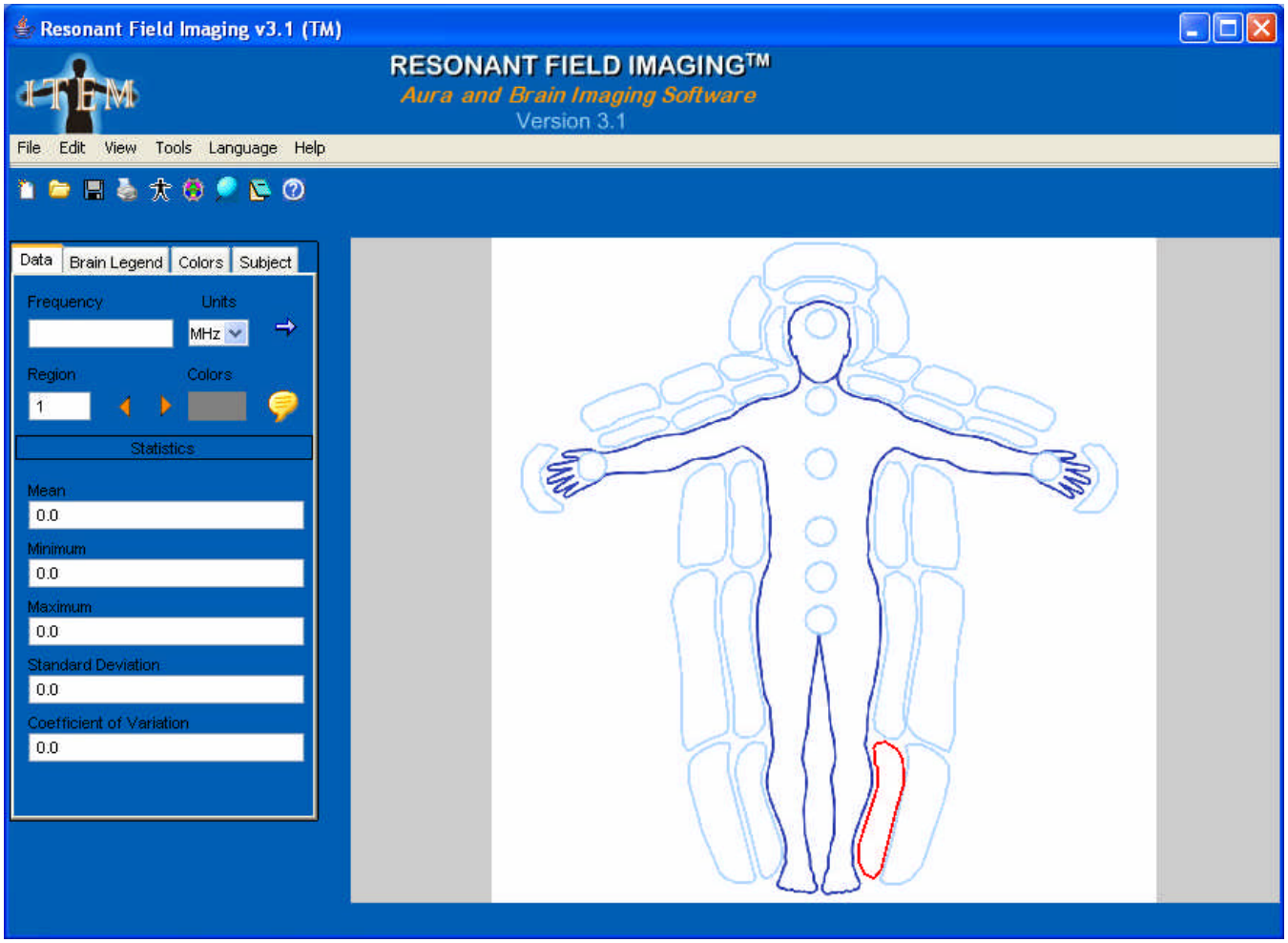

Una plantilla de la Imagen del Cuerpo con las 40 regiones del Aura se exhibe como óvalos vacíos alrededor del cuerpo (las regiones exteriores – las regiones del Nivel Psicológico, las interiores – las del Nivel de Salud) y en el medio del cuerpo (los Chakras).

Opciones del Menú

La barra de color gris contiene seis funciones de menú: **Archivo**, **Edición**, **Ver**, **Herramientas**, **Lenguaje** y **Ayuda**. Cada una de estas funciones se describe más abajo.

Archivo



- **Nueva Sesión** – Crea una nueva Imagen del Cuerpo y la plantilla de Imagen del Cerebro. Cuando usted abre el programa, Una nueva Imagen del Cuerpo y del Cerebro están ya presentes, y no necesita usar esta función. Esta función puede usarse para crear imágenes nuevas mientras usted está en medio de una sesión **RFI,** o después de que usted salve un archivo de Aura.

- **Nueva Sesión Personalizada** – Crea una nueva imagen desde un archivo de plantilla personalizada previamente guardada. Cuando usted presiona "Nueva Sesión Personalizada", usted será impulsado a seleccionar el archivo (con una extensión .rtd) que usted creó y guardó previamente para la plantilla personalizada. Vea "Crear Nueva Plantilla Personalizada" en el menú Herramientas para más información.

- **Abrir Archivo de Aura** – Abre el archivo de Aura previamente guardado(extensión de

archivo .rfi). Por favor, note que usted puede hacer cambios a cualquier archivo de Aura guardado creado en la Versión 3.1; no hay características de archivo que prevengan cambios en un archivo salvado (como en la Versión 3.0). Además, los archivos creados en la Versión 3.0 no podrán ser abiertos en la Versión 3.1, porque estas versiones fueron creadas mediante dos diferentes tipos de software. Esperamos poder ofrecer una utilidad de conversión en el sitio web de Investigadores RFI en un futuro cercano, pero hasta ese momento, le recomendamos que mantenga la Versión 3.0 en su computadora por si usted necesita acceder a algún archivo de Aura creado con dicha versión.

- **Cerrar** – Cierra el archivo actual del Aura sobre el que usted está trabajando. Usted será advertido para salvar el archivo del Aura antes de cerrarse.

- **Guardar** – Guarda el archivo de Aura sobre el que usted está trabajando en ese momento. Los archivos de Aura (incluso aquellos que son guardados desde la plantilla personalizada) son guardados con una extensión **.rfi**. Usted puede crear su propia carpeta para guardar archivos. Nosotros le recomendamos que incluya el nombre del sujeto y la fecha de la sesión **RFI** para recordar posteriormente, por ejemplo “Juan Pérez 03-01-03.rfi”. Cuando usted utiliza la función Guardar, el archivo del Aura puede ser abierto posteriormente y pueden realizarse cambios.

- **Guardar Como** – Utilice la función Guardar Como para guardar un archivo de Aura previamente guardado con un nuevo nombre, siguiendo los cambios realizados al archivo. Cuando usted utiliza la función Guardar Como, el archivo de Aura puede ser abierto posteriormente y pueden realizarse cambios.

- **Imprimir Imagen Actual** – Imprime la Imagen del Cuerpo o la Imagen del Cerebro (dependiendo de qué imagen esté viendo en ese momento) con la impresora

predeterminada en su computadora. El nombre del cliente y la fecha y hora se imprimirán automáticamente en toda impresión de Imagen del Cuerpo o del Cerebro.


- **Salir** – Utilice esta función para salir del programa. Si está trabajando sobre un archivo de aura, usted será advertido para guardar el archivo antes de salir

Edición



- **Despejar Datos del Aura** – Esta función despeja todos los datos (frecuencia y color) de la Imagen del Cuerpo y del Cerebro. Una vez que esta función es utilizada, los datos no pueden recuperarse, de modo que esta función solo debe utilizarse cuando usted decide reiniciar una sesión **RFI**.

Ver

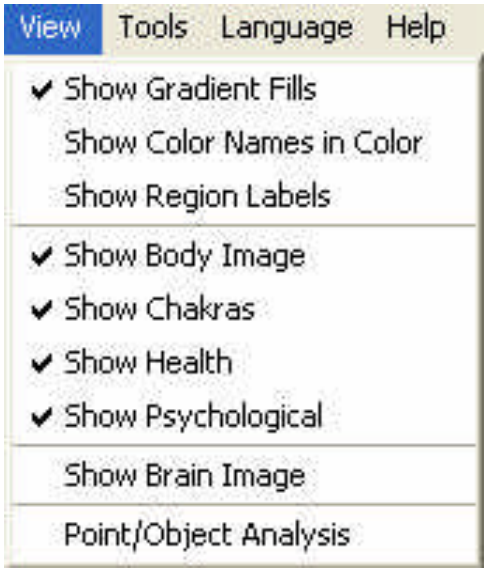

- **Mostrar Relleno en Gradientes** – Utilice este rasgo para alternar entre ver las regiones con los colores completos o exhibidos en gradientes (esfumados) tanto para las Imágenes del cuerpo como para las del Cerebro. Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar Relleno en Gradientes", los colores se mostrarán como un esfumado suave, desvaneciéndose hacia el blanco. Cuando la marca no esté activada, los colores se mostrarán completos (el color entero llenará la región).

- **Mostrar Nombres de Colores en Color** – Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar Nombres de los Colores en Color", los nombres de los colores presentados en los Informes de Interpretación para el Cuerpo y las Imágenes del Cerebro serán mostrados en color.


- **Mostrar Rótulos de las Regiones** – en la pantalla de Imagen del Cuerpo, se muestra el sistema de regiones numerado. Las regiones son numeradas secuencialmente desde la pierna izquierda del Nivel de Salud (1), moviéndose alrededor del cuerpo

sobre el Nivel de Salud al Nivel Psicológico, y luego al estrato de los Chakras, finalizando con el Chakra del Entrecejo (40). El sistema de regiones numerado es generalmente necesario solo si usted está interesado en saber cómo la Imagen del Cerebro es generada desde la Imagen del Cuerpo (ver debajo). Los Rótulos de las regiones también pueden ser mostrados en la Imágenes Personalizadas.


- **Mostrar Imagen del Cuerpo** – Haga clic sobre este ítem del menú cuando esté viendo la Imagen del Cerebro y quiera retornar la Imagen del Cuerpo (también puede presionar sobre el icono del cuerpo, como se indica más abajo).

- **Mostrar Chakras** – Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar Chakras", el estrato de los Chakras será exhibido (seis Chakras). Si usted no planea medir los Chakras en su sesión **RFI,** entonces puede hacer un clic sobre la función "Mostrar Chakras" quitar la marca, y el estrato de los Chakras desaparecerá o se ocultará. Si usted había tomado la medida de los Chakras y luego resuelve esconder este estrato, entonces los datos y los colores de este estrato permanecerán intactos y podrán ser reexhibidos en cualquier momento. Al ocultar este estrato también se ocultará el estrato en la etiqueta Leyenda del Cerebro, pero ocultar este estrato no afectará la imagen del Cerebro. El mismo concepto se aplica para las funciones **Mostrar Zonas Salud** y **Mostrar Zonas Psicológicas**.


Ejemplo: “Mostrar Chakras” y “Mostrar Zonas Psicológicas” Marcado, “Mostrar Zonas Salud” No Marcado

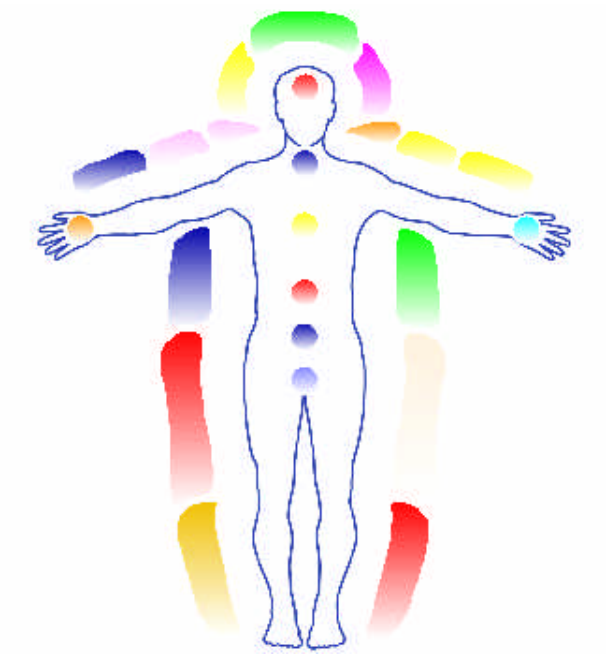


- **Mostrar Imagen del Cerebro** – Cuando la marca está al lado de la función “Mostrar Imagen del Cerebro”, se mostrará la Imagen del Aura del Cerebro; la marca es removida de la función “Mostrar Imagen del Cuerpo” de menú de opciones. El ítem “Mostrar Imagen del Cerebro” está oscurecido (no disponible) cuando se trabaja con Plantilla de Imagen Personalizada.

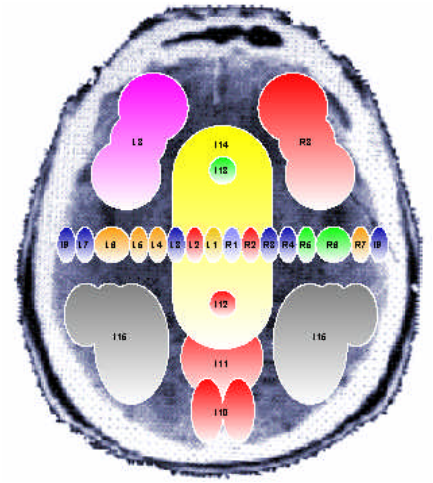

- **Análisis de Punto/Objeto** – Cuando la marca se coloca en el “Análisis de Punto/Objeto”, una nueva pantalla se abre con el rasgo de Análisis de Punto/Objeto. Este rasgo es utilizado para determinar el color y la interpretación de frecuencias sin una Plantilla de Imagen del Cuerpo. Si usted está midiendo un objeto o el espacio que no puede ser capturado usando la Imagen del Cuerpo (como una habitación, el jardín, un animal, etc.), puede crear su propia plantilla, determinando el color y la interpretación de su medición, y pintando manualmente los colores en su plantilla (o, como alternativa, puede importar su imagen personalizada al software, como se indica más abajo). Hay cuatro diferentes sistemas de interpretación dentro del Análisis de Punto/Objeto (seleccione “Tipo de Punto” antes de ingresar la frecuencia): Psicológico, Salud, Estados Cerebrales (Ondas Cerebrales), y Hierbas/Botánica. La información adicional sobre el rasgo de Análisis de Punto/Objeto se muestra debajo y en la Sección 4.0.

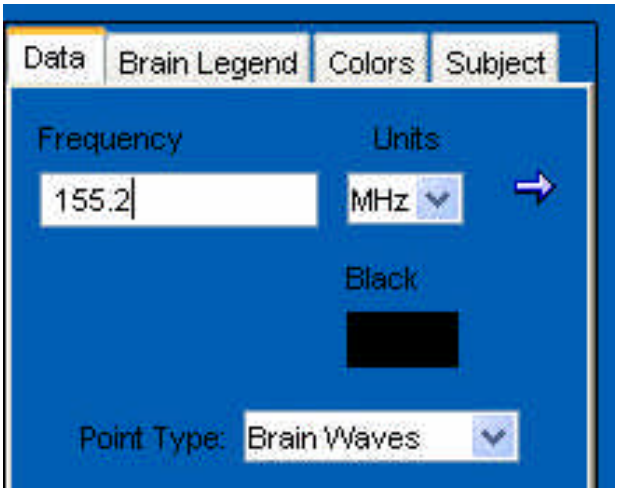

Herramientas

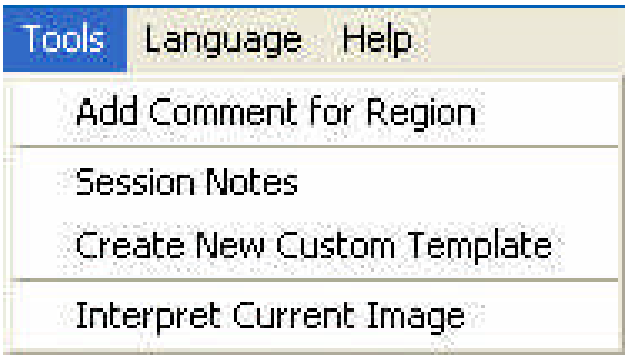


- **Agregar Comentarios a la Región** – Utilice este rasgo para agregar comentarios a una región particular mientras se encuentre en la pantalla de Imagen del Cuerpo. Usted debe hacer clic o apuntar en la región de interés, luego debe ingresar a "Herramientas" y a "Agregar Comentarios a la Región" para ingresar la información. Por ejemplo, si el sujeto reporta dolor en su tobillo derecho, usted puede ingresar esta información dentro de la región de la pierna derecha del Nivel de Salud (región 17) para documentar esta condición. Usted también puede utilizar esta característica para la Imagen del Cerebro y para la Imagen Personalizada sobre la región de su interés. La información que ingrese será guardada cuando usted guarde el archivo.

- **Notas de la Sesión** – Utilice este rasgo para grabar información y condiciones acerca de la sesión **RFI** completa. Esta información es de una naturaleza más amplia que la función "Agregar Comentarios a la Región"; por ejemplo, "la sesión **RFI** está siendo dirigida en una feria de salud durante el atardecer. El sujeto ha recibido recientemente un tratamiento de terapia de masaje. Hay terapeutas realizando sesiones curativas cerca del sitio de la sesión **RFI**." Esta información es importante desde una perspectiva histórica. Otro ejemplo, "la sesión **RFI** está siendo dirigida en la casa del sujeto. El sujeto ha experimentado estrés últimamente debido a problemas de salud."

Nuevamente, esta información lo ayudará a usted, el investigador, a evaluar la sesión **RFI** dentro de un contexto apropiado, lo cual es especialmente importante cuando establecemos la historia del sujeto en repetidas sesiones **RFI**. Cuando usted haya terminado de ingresar su información, presione “OK” y cierre el editor; la información que acaba de escribir será “adjuntada” y guardada con la sesión del **RFI** sobre la que está trabajando, pudiendo ser recuperada y revisada cuando usted abra el archivo previamente guardado.

- **Crear Nueva Plantilla Personalizada –** Esta es una nueva característica del software **RFI** en la Versión 3.1. Cuando usted hace clic sobre ”Crear Nueva Plantilla Personalizada”, aparecerá la siguiente pantalla (con una pantalla gris en blanco a la derecha):

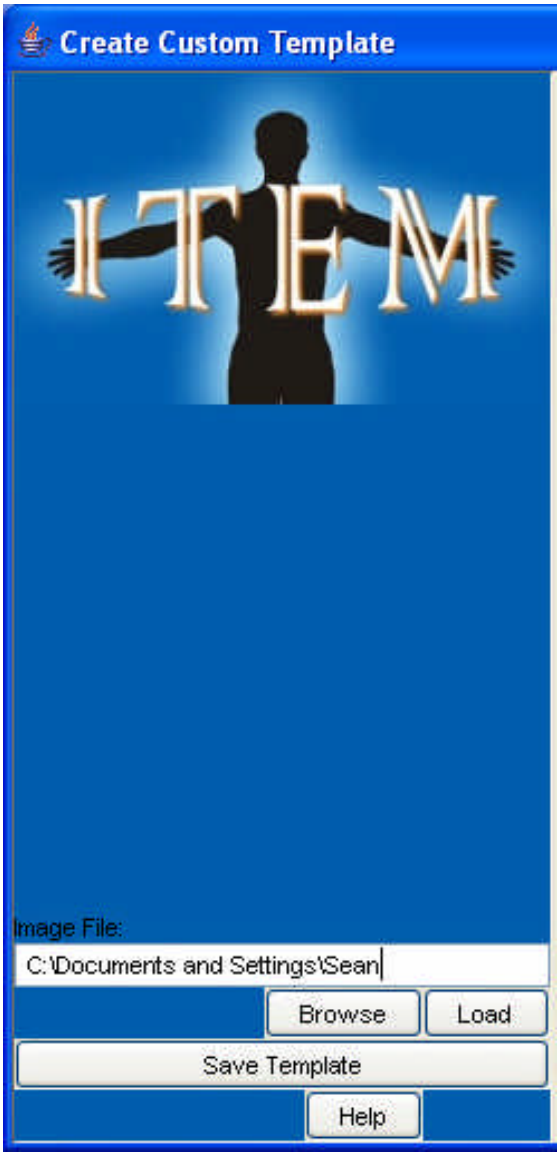

Utilice esta herramienta para construir una nueva plantilla personalizada del aura desde archivos de imagen. Esta herramienta fue desarrollada dentro del software porque muchas veces a los usuarios les interesa realizar mediciones sobre animales, objetos o espacios para los cuales no hay plantillas en el software. Esta característica también es muy útil en conjunción con la medición en eventos públicos o en su oficina, ya que usted

puede tomar una fotografía digital de su cliente e importarla a su computadora y luego al software **RFI**. Esto provee una forma más personalizada de mostrar la gráfica impresa del **RFI**.

Paso 1: Elija un archivo de imagen ya sea escribiendo la ruta del archivo en el cuadro Archivo de Imagen y dando un clic sobre el botón "Cargar", o explorando mediante un clic en el botón "Examinar" y seleccionando el archivo. Usted puede seleccionar cualquier tipo de imagen (JPG, GIF, BMP, otros formatos pueden ser soportados) para importar dentro del software.


Paso 2: Especifique los datos de la localización del punto dando un clic sobre las regiones deseadas de la imagen. Si usted comente un error y desea quitar un punto, simplemente haga un clic con el botón derecho del mouse en dicho punto (en Windows) o haga un clic en él mientras mantiene apretada la tecla Control (en Macintosh).

Paso 3: Presione botón Generar Plantilla. Se le preguntará el nombre del archivo para la plantilla que recién ha creado. Para que la plantilla (con extensión de archivo .rtd) funcione correctamente, debe estar guardada en la misma carpeta que el archivo de imagen que usted importó. De otra manera, cuando usted haga clic sobre “Archivo” y “Nueva Sesión Personalizada” e intente seleccionar la plantilla que recién ha creado, recibirá un mensaje de error.

Nota: Se recomienda que usted importe imágenes con un ancho aproximado de 400-450 píxeles, y una altura aproximada de 400-500 píxeles. Usted podría utilizar una imagen de dimensiones diferentes con resultados satisfactorios, y usted puede querer experimentar encontrando las dimensiones óptimas para la resolución de su computadora. Para testear esto, importe su imagen, genere la plantilla, y luego haga clic en “Archivo” y en “Nueva


Sesión Personalizada" par ver como se ajusta la imagen dentro del espacio asignado en la pantalla del software.

En el ejemplo de abajo, el usuario quería medir las bioenergías dentro de la jaula de su lagartija favorita. El usuario importó la fotografía, seleccionó los puntos de las regiones para tomar las mediciones (mostrados por los círculos en la imagen de abajo) e hizo clic sobre el botón Guardar Plantilla, y guardó la plantilla en la misma carpeta de la computadora en donde se encontraba la imagen original de la lagartija.

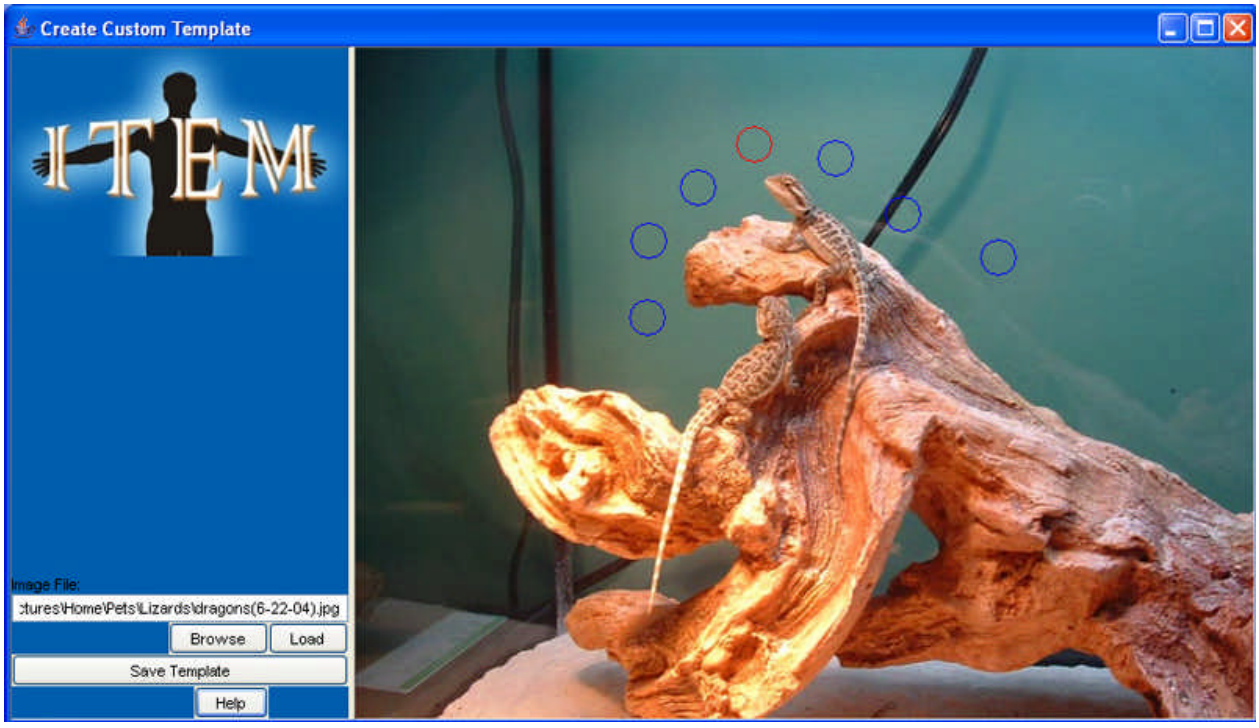

Una vez que usted guarda la plantilla, puede salir de esta función y seleccionar "Archivo" y "Nueva Sesión Personalizada", y luego seleccionar la plantilla que recién ha creado. La plantilla aparecerá, y usted puede entonces tomar las mediciones e ingresar los datos de las frecuencias dentro del software. Cuando usted vaya a interpretar los colores

mostrados en la imagen, será alertado a seleccionar el tipo de interpretación que se aplicará a la plantilla:

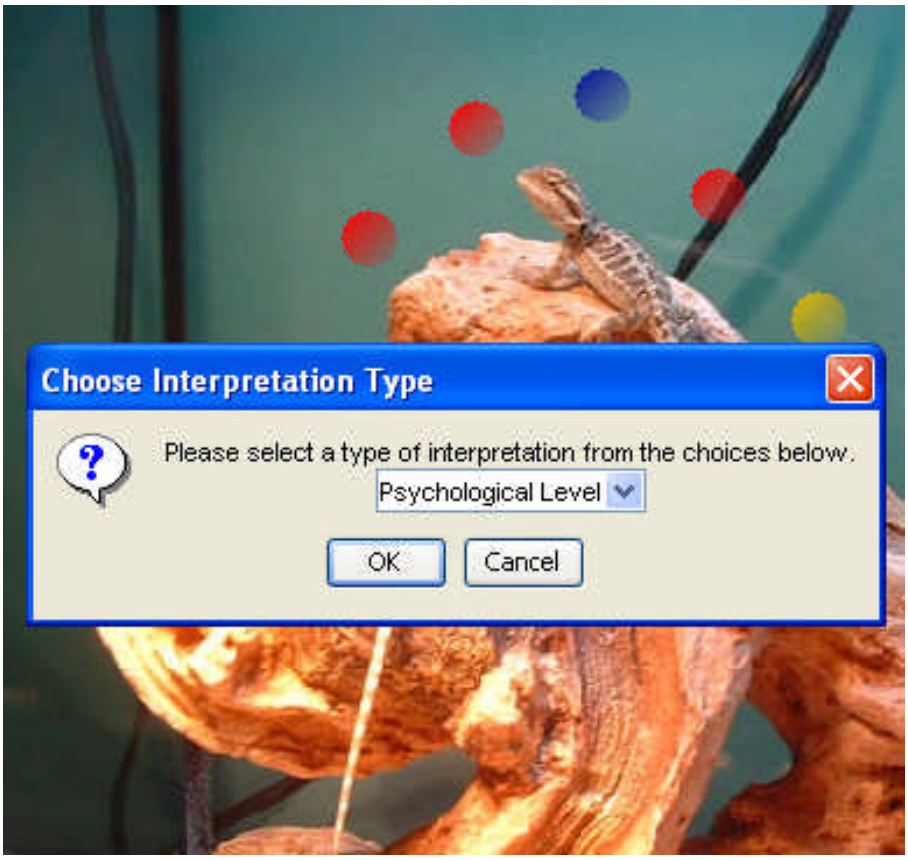

En el futuro, Pensamos utilizar un sistema donde usted pueda especificar el tipo de interpretación para cada punto que haya creado en la plantilla personalizada. Por ahora , sin embargo, usted debe seleccionar un tipo de interpretación que será utilizado para todos los puntos. Usted también puede imprimir la Imagen Personalizada seleccionando “Archivo” e “Imprimir Imagen Actual” o utilizando el botón “Imprimir Imagen Actual” .

o **Interpretar Imagen Actual** – Utilice esta función para crear un Reporte de

Interpretación para la Imagen del Cuerpo, del Cerebro y para la Imagen Personalizada; la imagen que esté siendo visualizada será interpretada. Los Reportes de Interpretación incluyen la Fecha y la Hora, y el nombre del Sujeto y del Investigador, si están especificados en la pestaña "Sujeto". Los Reportes de Interpretación son generados en formato HTML, y son visualizados en el navegador por defecto de su sistema operativo, donde pueden ser guardados, copiados e impresos. A menos que usted guarde los Reportes de Interpretación para un propósito especial, no es necesario guardar el archivo HTML resultante, ya que pueden ser regenerados en cualquier momento y, de manera adicional, el archivo es automáticamente guardado en una carpeta temporaria dentro del directorio del programa y puede ser visualizado en cualquier momento, ya sea con el software abierto o no. .

Lenguaje



El menú Lenguaje es nuevo para la Versión 3.1 del **RFI**. Un usuario puede ahora cambiar entre diferentes lenguajes. El software actualmente viene con Inglés y Español. Otras lenguas, incluyendo el Alemán y el Rumano, están en desarrollo. Hay tres "módulos" de lenguaje que pueden ser actualizados por ITEM en cualquier momento. Cuando nuevos lenguajes sean introducidos, ITEM enviará los módulos de lenguaje al sitio web de los Investigadores **RFI**. Allí cualquier usuario podrá descargar los módulos y sobrescribir los módulos presentes en su computadora. Luego, la próxima vez que el usuario abra el programa, el o los nuevos lenguajes serán exhibidos bajo el menú Lenguaje. Si se cambia de lenguaje durante la utilización del programa y luego el programa es cerrado, la próxima

vez que sea abierto será exhibido en último lenguaje mostrado antes de cerrarse.

Por favor, tenga en cuenta que la Versión 3.1 del software **RFI** ha sido escrita en un lenguaje de programación conocido como Java. ITEM ha aprendido que ciertos sistemas operativos nativos (como el Windows XP en Español) tienen problemas codificando aplicaciones basadas en Java . Es posible, por ejemplo, que el sistema operativo nativo permita al usuario crear y guardar nuevas imágenes, pero que no le permita abrir archivos previamente guardados. Por consiguiente, ITEM no garantiza la funcionalidad de la característica lenguaje para todas las versiones internacionales del sistema operativo, aunque esto ha sido testeado y funciona bien con todas las versiones de los sistemas operativos en Inglés. Si usted encuentra un error o tiene problemas utilizando un lenguaje que no sea el idioma Inglés, por favor, póngase en contacto con ITEM con los detalles de su problema, ITEM investigará e intentará proporcionarle una solución.

Por favor, tenga en cuenta también que el software no ha sido diseñado para hacer múltiples cambios de idioma durante una sesión. Cambiar de idioma repetidamente durante una sesión puede resultar en la caída del sistema. Si usted cambia el idioma, se recomienda que sólo lo haga una vez, antes de comenzar la sesión.

Ayuda



- **Contenido** – Abre los Contenidos de Ayuda del sitio web para el software **RFI**. Haciendo clic sobre Contenido, usted será direccionado al sitio web de ayuda del software **RFI** 3.1 de ITEM, http://www.item-bioenergy.com/rfi/software/help.html. Si usted tiene un acceso a internet por dialup, puede necesitar, dependiendo de la configuración de su sistema, conectarse a internet antes de que pueda ver el sitio web de ayuda. En general, toda la información del sitio web de ayuda está contenida también en este Manual Técnico.

- **Gráfico de Análisis del Aura** – Utilice esta gráfica en los momentos en los cuales no tenga una computadora cerca. Usted puede registrar las frecuencias en esta carta para después ingresarlas en el programa de software. La copia de esta gráfica está disponible en el sitio web del Investigador **RFI**.

- **Video RFI** – Abre el Video promocional del **RFI** en el sitio web http://www.item-bioenergy.com/rfi/software/video.html. El video dura aproximadamente 27 minutos, y es excelente para generar interés en sus sesiones **RFI** en eventos públicos. El video **RFI** fue creado por un Investigador del **RFI** como un producto publicitario para la televisión local. En el futuro, ITEM también tendrá un video instructivo para facilitar el estudio del sistema **RFI**. Siéntase libre de descargar este video para usarlo en su computadora de escritorio o



portátil (aproximadamente 275 MB).

- **Acuerdo de Licencia** – Usted puede ver el Acuerdo de Licencia del **RFI** en cualquier momento en el sitio web de ITEM http://www.item-bioenergy.com/rfi/software/license.html.


- **RFI en la Web** – Lo conecta con página principal del sitio web **RFI**, http://www.item-bioenergy.com/rfi/index.html. Usted debe estar conectado a Internet (para la conexiones dialup) o tener una conexión DSL o equivalente para conectarse apropiadamente.

- **Acerca –** Abre una pantalla separada que muestra la Información de la Propiedad Registrada y del Número de Serie.

Barra de Herramientas (Botones de Acceso Rápido)

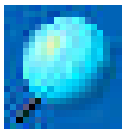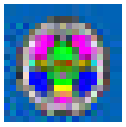 Nueva Sesión	 Imprimir Imagen Actual	 Análisis de Punto/Objeto
 Abrir Archivo de Aura	 Ver Imagen del Cuerpo	 Interpretar Imagen Actual
 Guardar	 Ver Imagen del Cerebro	 Ayuda

Pestañas

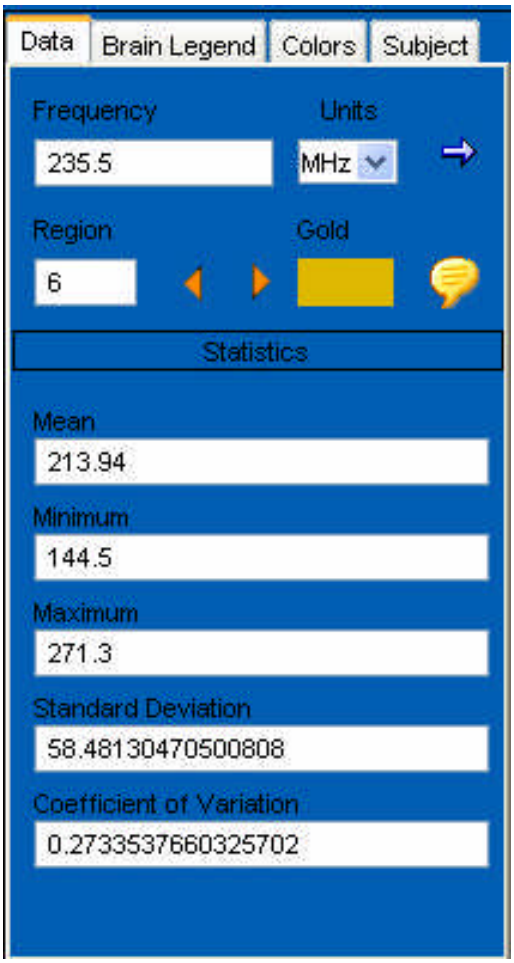

Pestaña de Datos

La Pestaña de Datos es utilizada para ingresar los datos de la frecuencia en la pantalla de Imagen del Cuerpo y en la pantalla de Análisis de Punto/Objeto. Esta pantalla puede también ser visualizada cuando la Imagen del Cerebro es la pantalla activa, para ver las frecuencias asociadas con las diferentes regiones del cerebro.

Frecuencia – Después de que usted seleccione una región en la Imagen del Cuerpo, escriba la frecuencia numérica (la 3^{era} medición mostrada, por ejemplo) en el campo Frecuencia. Redondee a la décima parte más próxima; por ejemplo, si la medición es 441.040, ingrese 441.0, o si la medición es 441.890, ingrese 441.9. Si usted está en la Pantalla de Análisis de Punto/Objeto, no necesita seleccionar la región (aquí no hay regiones para seleccionar).

Unidades – Aquí hay cuatro opciones para seleccionar unidades: Hz, KHz, MHz y GHz. El ajuste predeterminado es MHz, ya que el contador de frecuencia del RFI toma medidas en MHz. Si usted utiliza un tipo diferente de contador de frecuencia con un rango de medición diferente, puede cambiar las Unidades.

Flecha de Aplicar Frecuencia – Una vez que usted ingresa la Frecuencia, puede colocar la

frecuencia mediante un clic sobre la flecha naranja o presionar la tecla Enter de su teclado. Después de colocar la frecuencia de la región, el software convertirá automáticamente la frecuencia en uno de los 15 colores.

Región – Este campo muestra el número de la región en concordancia con el sistema numérico de regiones. Usted puede saltar a una región en particular introduciendo un número de 1 (pierna izquierda del Nivel de Salud) a 40 (Chakra del Entrecejo). Usted puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás a las regiones nuevas dando un clic sobre las flechas anaranjadas que se encuentran al lado del campo de la región. (también puede navegar a través de las regiones dando un clic sobre una región con su ratón, y usando la tecla Tab en su teclado después de colocar una frecuencia). Luego de aplicar la frecuencia a la región, el programa se moverá automáticamente a la región siguiente en el sistema de numeración. Una región está activa cuando está delineada en rojo.

Caja de Color – El nombre y el color correspondiente a la frecuencia colocada son mostrados al lado del campo de la región.



Comentarios Específicos en la Región – Usted puede hacer clic en el "balón gráfico" para agregar comentarios a una región específica que ha medido; por ejemplo "El sujeto experimenta dolor en su tobillo izquierdo".

Estadísticas – La Media, Mínima, Máxima, Desviación Estándar, y Coeficiente de Variación son calculados y actualizados a cada momento cuando una nueva frecuencia es colocada en la Imagen del Cuerpo. La mayoría de los usuarios no necesitarán preocuparse por estas estadísticas, aunque son útiles para examinar tendencias a lo largo de la historia de sesiones **RFI** de un sujeto. Por ejemplo, si la "Frecuencia Media" del sujeto es relativamente constante en el tiempo, esto puede indicar que el sujeto tiene una "personalidad relativamente estable" y posee

una “salud estable” (ya sea "buena" o "pobre", dependiendo de cómo interpretaría usted esta información). Inversamente, si la “Frecuencia Media” del sujeto varía regularmente, o si la Desviación Estándar o el Coeficiente de Variación son relativamente altos, entonces en general el sujeto puede ser considerado una persona con una “personalidad dinámica”, o ser “psicológica o físicamente inestable”, de nuevo, dependiendo de su evaluación o del caso específico. Las Estadísticas son discutidas más detalladamente en la Sección 5.0.



Pestaña Sujeto

La información que usted ingrese en la Pestaña Sujeto será colocada en la parte superior del Informe de Interpretación, y la información del cliente será incluida en la impresiones de la Imagen del Cuerpo, Cerebro y en la Imagen Personalizada.

Cliente / Nombre del Sujeto – Ingrese el nombre del sujeto que va a analizar en la sesión **RFI**.


Investigador – Ingrese su nombre, o el nombre del Investigador a cargo de la sesión **RFI**.

Fecha y Hora – La fecha y la hora deberían mostrarse automáticamente basados en la fecha y hora de su computadora, si esto no ocurre, entonces deberá ingresar dichos datos manualmente.

Pestaña Colores

La Pestaña de Colores muestra la leyenda de los 15 colores usados en el programa del **RFI**. Usted puede imprimir dicha leyenda presionando sobre el icono Imprimir en la parte inferior. Esta leyenda es provista a fin de que usted pueda, si es necesario, cotejar los colores de las Imágenes del Cuerpo y del Cerebro impresas con los colores correctos, ya que el nombre de los colores no son impresos junto con las Imágenes del Cuerpo y del Cerebro. La mayoría de las personas no necesitarán imprimir o utilizar esta leyenda.

Pestaña de Leyenda del Cerebro

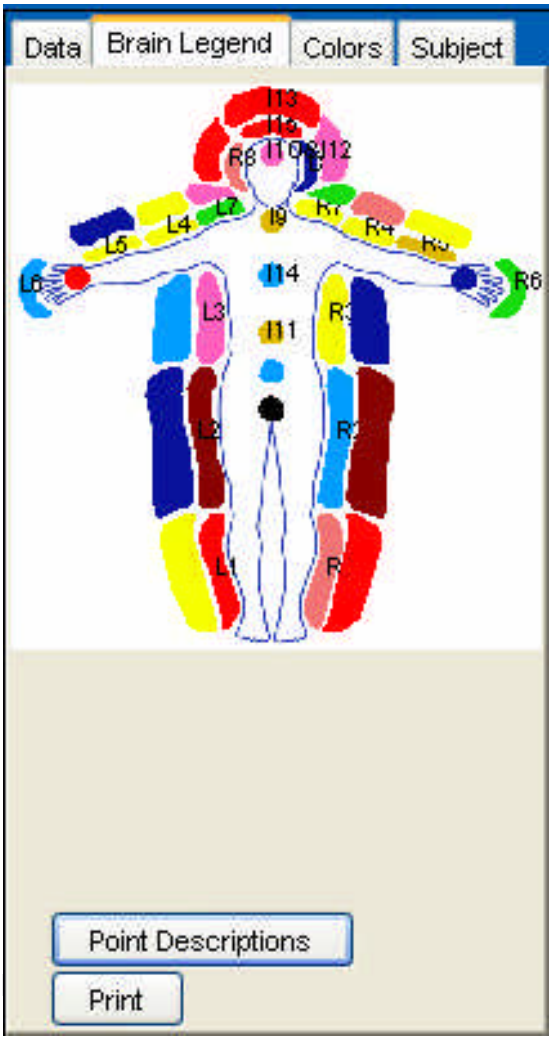

La Pestaña Leyenda del Cerebro muestra la Imagen de Cuerpo y cómo las regiones de la Imagen del Cuerpo corresponden a las regiones de la Imagen Cerebral. Cuando usted está visualizando la Imagen del Cerebro, puede ver cómo la Imagen del Cerebro se deriva de la Imagen del Cuerpo a través de los principios de la neurología y la electrofisiología aplicados por ITEM. La numeración de la región es diferente entre la Imagen del Cuerpo y la del Cerebro, y la Leyenda del Cerebro muestra el sistema de numeración para la Imagen del Cerebro.

Usted puede imprimir la Leyenda del Cerebro haciendo clic sobre el icono “Impresión”. También puede ver una descripción de cuales son las regiones correspondientes a la Imagen del Cerebro haciendo clic

© 2005 ITEM

sobre el botón “Descripción de los Puntos”. Visualizar la leyenda del cerebro puede ser algo dificultoso para algunos porque se necesita una gran cantidad de información dentro de un espacio pequeño; por consiguiente, es más fácil ver e imprimir la tabla que aparece cuando se presiona el botón “Descripción de los Puntos”.

Notas Adicionales sobre el Rasgo Análisis de Punto/Objeto

Como fue dicho anteriormente, el rasgo del Análisis de Punto/Objeto es utilizado cuando usted mide bioenergías que no se adaptan a la plantilla del cuerpo humano, o para que usted pueda medir una región única del Aura. Si cree que va a tomar regularmente mediciones de un objeto particular, de un área, del espacio o de un animal, puede querer entonces crear su propia plantilla de imagen y marcar los puntos en los cuales usted tiene la intención de tomar medidas. Por ejemplo, si usted estudia los campos bioenergéticos de una casa durante un cierto período de tiempo (o realiza lecturas en varias casas), entonces puede querer dibujar su plantilla de las habitaciones de la casa, y demarcar áreas donde tomará medidas con el contador de frecuencia.

Aquí están los pasos sugeridos para usar el rasgo Análisis de Punto/Objeto:

1) Seleccione el tipo de análisis que desea haciendo clic en el círculo más próximo de cualquiera de estos nombres “Psicológico”, “Salud”, “Estados Cerebrales” o “Hierbas/Botánica”.

   Las Interpretaciones Psicológicas son las mejores para:

   - Investigaciones paranormales;
   - Explorar las emociones de plantas o animales;
   - Analizar bioenergías impresas en la materia física;
   - Obtener información acerca de los dueños anteriores de un objeto; y

- Analizar las ondas cerebrales o las energías sutiles en un área, habitación o espacio abierto.

Las Interpretaciones de Salud son las mejores para:

- Analizar la salud de plantas o animales; y
- Analizar el efecto potencial de los objetos físicos en la salud humana.

Las Interpretaciones de los Estados Cerebrales son utilizadas para determinar el estado cerebral predominante de una persona, a través de las mediciones del Chakra del Entrecejo (centro de la frente).

Las Interpretaciones de Hierbas/Botánica son utilizadas para realizar las mediciones de árboles, plantas, cultivos y de hierbas y extractos.

2) Coloque la antena en el área en la cual quiere detectar bioenergía y mida la frecuencia utilizando el método del Punto Único o el del Pase Simple.

3) Escriba el número de la frecuencia dentro del campo de **Frecuencia**, luego presione la tecla Enter de su teclado. La computadora mostrará el color de la bioenergía de la frecuencia detectada, seguida de una interpretación general de las cualidades atribuidas a la bioenergía por su color.

Por favor, tenga en cuenta que con la introducción de la característica “Crear Nueva Plantilla Personalizada” bajo el menú Herramientas, la utilidad de la característica “Análisis de Punto/Objeto” está algo disminuida, y puede ser eliminada progresivamente de futuras versiones del software **RFI**.

Notas Finales

1) Si usted identifica algunos errores o encuentra algunos problemas con el uso del programa, por favor, envíe un correo electrónico (Central@item-bioenergy.com) o llame (1-888-304-ITEM). ITEM le proporcionará lo más pronto posible tantos detalles como le sea posible acerca de la naturaleza del error o problema. Las capturas de pantalla del mensaje de error junto con una explicación detallada de los pasos que usted realizó para recibir tal error serán apreciados. ITEM investigará su problema y tratará de solucionarlo lo más pronto posible.

2) Por favor, inspeccione el sitio web de Investigadores RFI ocasionalmente por parches y actualizaciones disponibles para el software para solucionar problemas menores, y por actualizaciones de módulos de lenguaje. Se le avisará sobre mejoras del software más importantes mediante correo electrónico.

 © 2005 ITEM

4.0 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BIOENERGÍAS

4.1 INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES DE AURA Y CEREBRO

En la lectura de este capítulo, el concepto más importante para tener en mente es que el **RFI no es un sistema de diagnóstico**; por lo tanto, las interpretaciones se reducen necesariamente a la categoría de información general. Es información que ha probado ser muy precisa en muchos casos, pero no obstante la información no es específica de una condición. ITEM ha desarrollado las interpretaciones durante muchos años de pruebas, estudios de casos, investigación y análisis lógico que ha servido para relacionar colores con muchas condiciones generales de Salud Física y Psicológica. Por ejemplo, el color rojo detectado en la región del Nivel de Salud indica generalmente "Funcionamiento biológico defectuoso o daño físico. También se puede interpretar como una sensación de dolor o reflejo en el área bioenergética con o sin funcionamiento defectuoso o daño real. El paciente se encuentra en esta área virtualmente Delicado. Generalmente no saludable" La interpretación para el color rojo no es, por ejemplo, "indica la presencia de un tumor maligno" por una razón muy importante – es necesaria mucha más investigación para relacionar colores y frecuencias con una condición específica. Con el tiempo, las investigaciones de ITEM, así como también gracias a las investigaciones que realicen los Investigadores del **RFI** como usted, puede producirse una base de datos suficientemente grande para brindar un uso clínico más extendido. Hasta entonces, sin embargo, utilice las interpretaciones del **RFI** como lo que son – información generalizada que debe ser usada conjuntamente con otros datos fisiológicos y psicológicos y con el mejor criterio profesional que le ayude a alcanzar una opinión sobre la condición de una persona o paciente.

Las interpretaciones están presentadas en la mayoría de los casos inicialmente como un análisis porcentual de las distribuciones de color en cada una de las secciones. Por ejemplo, si el color rojo fuera detectado en dos de seis regiones de una sección en particular (como en el Análisis de la Bioenergía Cerebral), la distribución del color sería del 33% (2/6). Siguiendo con el análisis de

la distribución del color, cada una de las interpretaciones de los colores detectados es presentada. Usted puede imprimir el Informe de Interpretación, copiarlo y pegarlo en otro programa, o regresar a la Imagen del Aura en cualquier momento presionando los botones de Imprimir, Copiar o Cerrar en las esquinas inferiores de la derecha y la izquierda. Puede visualizarse e imprimirse un Informe de Interpretación en cualquier momento de la creación de la Imagen del Aura; sin embargo, solo serán exhibidas en el informe aquellas secciones que hayan sido realizadas por completo. Por ejemplo, si usted elige medir solamente el sistema de los Chakras, el informe de los Chakras será la única sección que se mostrara comprendiendo las regiones que usted haya completado. Es decir, que si usted elige medir solamente el sistema de los Chakras, entonces la sección de los Chakras dentro informe será la única sección disponible para mirar y para imprimir.

4.1.1 **Colores e Interpretaciones**

Una vez que ITEM determinó los 15 colores distinguibles del espectro de la luz visible utilizados en el software **RFI,** y las frecuencias asociadas con esos colores, ITEM empezó la tarea de identificar técnicamente las interpretaciones precisas para esos colores.

El sistema de interpretación del color de ITEM fue desarrollado a través de análisis lógicos de principios pertinentes a la física y a la medicina, y a las observaciones experimentales directas. La parte lógica de nuestra investigación consistió en extensivos cálculos y análisis de datos, enfocando la atención sobre los datos médicos y psicológicos conocidos para potencialmente poder lograr la correspondencia de las frecuencias de la bioenergía, aplicando los principios establecidos de la neurociencia y de la medicina energética para rastrear el flujo de bioenergía en todo el conjunto del cuerpo humano. Este acercamiento lógico nos dio una base científica racional para desarrollar experimentos que confirmaran nuestras hipótesis.

Para la parte experimental de nuestra investigación, realizamos numerosas lecturas **RFI** en

voluntarios, algunas de las cuales fueron realizadas en condiciones experimentales controladas, y las interpretaciones resultantes fueron comparadas sobre la base de nuestros análisis lógicos de las condiciones fisiológicas y psicológicas reales comunicadas por los voluntarios. De este modo, las interpretaciones fueron refinadas y mejoradas.

Esta investigación fue dirigida durante varios años, y continúa hasta el día de hoy. Rutinariamente conducimos reevaluaciones de las bases técnicas para el sistema de interpretación, y hacemos revisiones o añadimos información nueva cuándo lo estimamos apropiado. Estamos seguros de que el sistema existente de interpretación sirve para su uso en la práctica, y le servirá a usted adecuadamente. Sin embargo, también reconocemos que el **RFI** no ha sido desarrollado hasta su máximo potencial, y continuamente nos esforzamos en aumentar la cantidad de información que puede proveer para los científicos y los profesionales de salud. Se sabe que hay muchas mejoras que se deben hacer, y continuamos trabajando con nuestros Investigadores y nos proveemos adecuadamente de personal y consultores científicos para desarrollar cálculos cada vez más precisos, nuevos métodos de detección, y mayor exactitud en las interpretaciones. En otras palabras, **RFI** funciona, pero es todavía una tecnología experimental, e ITEM está trabajando activamente para desarrollar una versión final y para generar la documentación que probará su utilidad en la práctica tradicional.

Mientras se escribía esta versión del Manual y se realizaba la versión actual del software **RFI,** la investigación de ITEM ha conducido al desarrollo de las siguientes interpretaciones prácticas, útiles y generales para los colores de la bioenergía detectada. El sistema de interpretación consta de dos categorías separadas: Las interpretaciones Psicológicas y las de Salud. El software **RFI** usa interpretaciones Psicológicas para el Nivel Psicológico, el Sistema de los Chakras, Bioenergías Cerebrales, Análisis del Cerebro Integrado, y análisis del Lado Derecho e Izquierdo del Cerebro (sólo la corteza cerebral prefrontal). El software **RFI** usa interpretaciones de Salud para el Nivel de Salud, el Sistema Endocrino, y los Análisis del Lado Derecho e Izquierdo del Cerebro (la corteza cerebral).

COLOR	INTERPRETACIÓN DE SALUD	INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA
Bordó (Rojo oscuro)	Actividad biológica incrementada en forma de Crecimiento o Regeneración. Generalmente Saludable.	Enfoque Físico-Material. Indica actividad mental relacionada a los problemas de supervivencia, dinero, objetos materiales, y al entorno físico inmediato. Relacionado a los instintos, necesidades humanas básicas y deseos.
Rojo	Funcionamiento biológico defectuoso o Daño físico. También se puede interpretar como una sensación de dolor o reflejo en el área bioenergética con o sin funcionamiento defectuoso o daño real. El paciente se encuentra en esta área virtualmente Delicado.	Enfoque Físico-Material. Denota actividad mental relacionada a la auto-gratificación material, logro de metas materiales y ambiciones. Estos pensamientos pueden referirse también al poder y a la posición social, al deseo de recibir atención y aceptación de los demás, indulgencia o artículos de lujo.
Rosa (Rojo claro)	Un estímulo sensorial está presente en este momento en esta área. Relacionado con experiencias del cuerpo sensual y físico, bienestar físico y con las sensaciones físicas agradables. Generalmente Saludable.	Energía sexual, Romance. Indica deseos físicos y sensuales o preocupaciones; relaciónado a los placeres físicos, la atracción sexual, la realización emocional y romántica o a la diversión y el entretenimiento.
Naranja	La energía curativa está actuando en esta área . Actividad del Sistema Inmunológico y de recuperación. En líneas generales el paciente se encuentra, por el momento, Delicado en esta área, pero con pronóstico positivo y realizando progresos tendientes a recuperar la Salud.	Curación Emocional. La actividad mental se centra en la solución de los problemas emocionales, la recuperación de experiencias intensas de la vida, y en la superación de los obstáculos. En líneas generales, el paciente está Saludable. Sin embargo sería muy beneficioso si recibiera apoyo psicológico o psicoterapeútico.

 © 2005 ITEM

Dorado	La energía curativa está emanando de un área que ya es vital y saludable. Este exceso de salud energética se proyecta hacia afuera para contribuir con energía saludable y curativa al medio ambiente, a otras personas, animales, plantas y objetos que entren en contacto con esta bioenergía.	Energía Curativa. El paciente tiene abundancia de salud bioenergética, por lo cual no se siente sobrecargado ni inhibido por los problemas emocionales personales que pudiera tener. Este exceso de salud energética se proyecta hacia fuera para contribuir con energía saludable y curativa a su entorno, a otras personas, animales, plantas y objetos que entran en contacto con dicha bioenergía.
Amarrillo	Vitalidad, Actividad Neurológica. En líneas Generales, el paciente se encuentra Saludable	Felicidad y bienestar, con una saludable cuota de equilibrada cautela.
Verde	Esta área está experimentando actualmente un incremento de Circulación Sanguínea, o una situación dónde una saludable actividad neurológica está causando un aumento en la circulación sanguínea desde un nivel enfermo o inhibido hacia un	Energía emocional de amor y compasión. Puede referirse también a una emoción negativa o trauma. El paciente está experimentando alguna situación o contingencia emocional.
Celeste	Bienestar y actividad biológica saludable en los sistemas circulatorios, incluida la circulación sanguínea, sistemas respiratorios y linfáticos, y cualquier otro sistema generador de fluidos de ésta área bioenergética. Generalmente Saludable.	Energía emocional. El paciente demuestra empatía y sensibilidad a las emociones de otros, y gusta de estar en comunicación o de expresar sus propias emociones, ya sea consciente o subconscientemente.

© 2005 ITEM

Gris/Negro	Sobreestimulación y estrés en los sistemas biológicos, órganos o sistemas circulatorios. Las Bioenergías en el área escaneada están agotándose debido a una situación medioambiental, biológica, dietética, o a una condición de comportamiento. El paciente se encuentra algo Delicado, sobre todo si esta bioenergía aparece en la misma área por períodos prolongados. Podrá tornarse saludable en tanto se realice una terapia apropiada si la presencia de esta bioenergia es temporal.	Pasión, obsesión, odio, intensas emociones negativas o destructivas.
Azul	Una energía o estímulo tranquilizador está actuando en estos momentos en esta área. Dicho estímulo está relacionado con el bienestar físico, la relajación o el reposo de músculos y órganos. El paciente se encuentra Saludable en esta area.	Comunicación - Perspectiva de la realidad. Busca expresión de la verdad. Está dispuesto a la comunicación con buenas intenciones.
Azul Marino (Azul Oscuro)	Incremento de la actividad biológica. En estos momentos, ciertos sistemas metabólicos, órganos o sistemas circulatorios podrían estar funcionando algo sobreexigidos. El paciente se encuentra Saludable, a menos que esta bioenergía aparezca en el área por períodos prolongados.	Liderazgo. Expresión de ideas intelectuales que involucran o influyen en situaciones materiales o sociales.

Violeta	Existe una conexión Psicosomática clara y directa en el área que presenta esta bioenergía. En este momento, la actividad mental está influenciando y controlando la actividad biológica y la salud física. Esto indica una probabilidad muy alta de éxito mediante hipnosis, psicoterapia, meditación o retroalimentación biológica (biofeedback), tendientes a controlar o sanar cualquier dolencia o problemas de salud en el área que presenta esta bioenergía. El paciente demuestra salud en esta área, pero a veces puede indicar un área de dolor o funcionamiento defectuoso que no tiene origen físico, y puede corregirse fácilmente trabajando con los factores psicológicos.	Energía intelectual, claridad de pensamiento. También indica pensamiento teórico o habilidad psíquica.
Lila	Hay una clara y directa Conexión entre Mente y Cuerpo en el área que presenta esta bioenergía. El paciente tiene una positiva y agradable asociación psicológica con la parte de su cuerpo dónde esta bioenergía se localiza. Los acontecimientos, acciones, y terapias que involucran a esta área tienen un impacto psicológico significativamente favorable en la persona. También indica que la actividad mental está influenciando y controlando la actividad biológica y la salud física en esta área. Generalmente Saludable.	Claridad de pensamiento, actividad psíquica, comprensión de la verdad. El paciente puede estar participando actualmente en el intercambio de información de energía.

 © 2005 ITEM

Plata	Fuerza, estabilidad, y resistencia en el área del cuerpo dónde esta bioenergía se localiza. Generalmente Saludable.	Protección, escudo contra energías destructivas, equilibrio emocional, paz y estabilidad.
Blanco	Pureza, energía de alta frecuencia que se está proyectando en el campo eléctrico de esta parte del cuerpo. Indica una descarga de bioenergía, usualmente en forma de exceso de energía biológica o de energía de reserva mental del cerebro. Esta bioenergía indica una descarga estática de la misma como corriente contínua, relacionada, por lo general, a la liberación emocional o a la liberación de bioenergía de la tensión física.	Pureza, Energía de alta frecuencia que se está proyectando en el campo eléctrico de esta parte del cuerpo. Indica una descarga de bioenergía, usualmente en forma de descarga emocional. También puede indicar una condicón mental o emocional enfocada sobre las energías de la fuerza vital, la pureza, y la verdad.

Como resultado de la diversidad de temas cubiertos por las anteriormente citadas interpretaciones de color, una imagen completa del Aura del **RFI** puede revelar información muy importante acerca de las condiciones mentales, emocionales, psicológicas y físicas del sujeto.

Ahora que hemos introducido este capítulo explicando el principio básico para interpretar los colores que pueden ser detectados en el Aura, discutiremos ahora los cuatro componentes del software **RFI** – el Nivel Psicológico, el Nivel de Salud, el Sistema Endocrino / Chakras, y el Cerebro – y cómo son generadas automáticamente las interpretaciones por el programa.

4.1.2 **Nivel Psicológico**

Las interpretaciones del Nivel Psicológico, llamado **Perfil Psico-Personal** en el informe de

interpretación, consiste de las siguientes cuatro secciones:

1) *Análisis de las Bioenergías del Lado Izquierdo del Cuerpo – Influencias Ambientales* – esta región examina las siete regiones que comprende el lado izquierdo del Nivel Psicológico (10 –45 cm del cuerpo) que son influenciados por las energías ambientales: la pierna izquierda, el muslo izquierdo, el torso del lado izquierdo, la mano izquierda (palma), el antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, y el hombro y cuello del lado izquierdo.

2) *Análisis de las Bioenergías del Lado Derecho del Cuerpo – Patrones de Conducta* – esta sección evalúa las siete regiones que forman el lado derecho del Nivel Psicológico (10 – 45 cm del cuerpo), que indica las energías proyectadas por el sujeto al ambiente: la pierna derecha, el muslo derecho, el torso del lado derecho, la mano derecha (palma), el antebrazo derecho, el brazo derecho, y el hombro y cuello del lado derecho.

3) *Análisis de las Bioenergías Cerebrales – Pensamientos Predominantes* – esta sección contempla cinco regiones alrededor de la cabeza del sujeto como un indicador de los pensamientos predominantes. Esta región incluye el lado izquierdo, el derecho y la parte superior de la cabeza en el Nivel de Salud (0 - 10 cm), y el lado izquierdo y derecho de la cabeza del Nivel Psicológico (10 - 45 cm). Todas la regiones son evaluadas utilizando las interpretaciones del Nivel Psicológico ya que el campo del Aura alrededor de la cabeza consiste casi enteramente de energías de ondas cerebrales, las cuales generalmente revelan la psicología de la persona. Sin embargo, las regiones entre 0-4 cm de los lados derecho e izquierdo de la cabeza son también utilizadas en el Análisis del Nivel de Salud (discutido en la **Sección 4.1.3** debajo), porque estas energías también consisten de ondas EM irradiando de la cabeza y del cerebro como una función de su estado fisiológico. La parte superior de la cabeza, el Nivel Psicológico (Chakra Coronario) no es utilizado para este conjunto de interpretaciones porque la investigación indica que la información energética detectada en esa localización está más asociada con las características

personales / espirituales más que con los pensamientos.

4) *Análisis de la Bioenergía de los Chakras – Características Personales*– esta sección de las interpretaciones examina los siete Chakras, la cual incluye seis regiones dispuestas a lo largo del eje central del cuerpo y el Chakra Coronario (parte superior de la cabeza en el Nivel Psicológico) Información adicional sobre estas interpretaciones es presentada en la **Sección 4.1.4**, debajo.

En el fenómeno "cerebro izquierdo-derecho" de lateralización selectiva de hemisferios del cerebro, el cerebro izquierdo es predominantemente activo, y tiende a proyectar energía, mientras el cerebro derecho es predominantemente receptivo, y tiende a recibir y a ser perceptivo a la energía. Dado que el cerebro derecho está neurológicamente conectado al lado izquierdo del cuerpo, y el cerebro izquierdo está neurológicamente conectado al lado derecho del cuerpo, los dos lados del cuerpo nos pueden dar información diferente acerca de la condición del sujeto. Por consiguiente, cuando analizamos el Nivel Psicológico del Aura humana, hay que interpretar las bioenergías en el contexto en base al lado del cuerpo en el cual son detectadas.

Es importante recordar que ya que las imágenes del Aura son medidas desde el frente, el lado derecho del cuerpo aparece del lado izquierdo de la gráfica – en otras palabras, sobre el lado izquierdo desde la perspectiva del obserbador – como en una fotografía de frente. Análogamente, cuando medimos desde el frente, el lado izquierdo del cuerpo aparece sobre el lado derecho de la gráfica, desde la perspectiva del observador. Acorde a esto, la referencia al lado derecho o izquierdo del cuerpo en este planteo se refiere específicamente al lado del cuerpo físico del propio sujeto, desde la perspectiva del sujeto.

El lado izquierdo del cuerpo, conectado al hemisferio derecho de cerebro, revela cómo el sujeto experimenta o percibe el mundo, o qué energías sutiles la persona está recibiendo de su entrono social. Las bioenergías del lado izquierdo del cuerpo generalmente consisten de información

energética impresa por las energías predominantes del entorno de la persona, a las cuales la persona está más fuertemente o frecuentemente expuesta. Esto puede indicar también la propensión o tendencia a recibir y absorber las bioenergías detectadas, o una sensibilidad inherente a tales energías. En otras palabras, las bioenergías sobre el lado izquierdo del cuerpo indican las energías sutiles que están afectando a la persona en mayor medida, y las energía que la persona está recibiendo y absorbiendo. Esto puede decirnos mucho acerca del entorno social y de la vida de la persona. Comparando esta información con las bioenergía detectadas alrededor de la cabeza nos revelará cómo está reaccionando la persona a su situación general o al entorno.

El lado derecho del cuerpo, conectado al hemisferio izquierdo del cerebro, revela cómo interactúa socialmente el sujeto, o con qué bioenergías contribuye o transmite de regreso al entorno. Las bioenergías del Lado Derecho del cuerpo generalmente influencian la manera en que los otros perciben y responden al sujeto. Indican las reacciones corrientes del sujeto a las situaciones presentes, y los comportamientos o hábitos predominantes para interactuar con su entorno. En otras palabras, las lecturas en el lado derecho del cuerpo del sujeto indican las energías que la persona proyecta hacia el exterior en mayor medida, lo cual nos dice cómo funciona y se comporta la persona, y cómo la pueden percibir otras personas y cómo pueden responderle.

Cuando consideramos los lados derecho e izquierdo del Nivel Psicológico del Aura, es especialmente útil identificar el color de la bioenergía que viene da las palmas de la manos. Las manos son los canales primarios de salida y entrada de impulsos de energía eléctrica a través de los nervios radiales y cubitales, de esta manera ellas son las que revelan en mayor medida cómo la persona interactúa con el mundo exterior.

Cuando medimos el lado izquierdo del Nivel Psicológico de la persona para identificar qué energías en el ambiente están afectándola, y el lado derecho del Nivel Psicológico para identificar qué energias está proyectando al entorno para afectar a otras pesonas, los colores de la

bioenergía encontrados en las manos son los más significativos, y deben tener mayor peso en la interpretación que los otros colores de la bioenergía sobre el mismo lado del cuerpo.

Las regiones del campo bioenergético alrededor de la cabeza consisten en ondas cerebrales electromagnéticas y de otra información de enrgía mental. Estas regiones revelan algunas características inherentes de la persona, como ser sus pensamientos y procupaciones predominantes. Dado que esta área contiene primariamente ondas cerebrales, las cuales son más fuertes en dicha área que cualquier emanación de un nervio parasimpático, la regla del cerebro derecho-izquierdo planteada más arriba no tiene aplicación. En este caso, las bioenergías del lado izquierdo de la cabeza simplemente muestran la actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, y las bioenergías del lado derecho de la cabeza muestran la actividad del hemisferio derecho del cerebro. Las regiones de la parte superior de la cabeza muestran la actividad del cerbro integrado, usando ambos hemisferios.

Para aquéllos más interesados en metafísica, es interesante notar que el cerebro sirve de canal y amplificador para las energías de los Cuerpos Causal y Etéreo, dando a nuestro Yo Superior permiso de funcionar y tener conciencia material a través de nuestro cuerpo físico. De esta manera, puede decirse que todos los pensamientos vienen de una entidad metafísica (eléctrica), la cual es nuestro Yo Superior. Estos Cuerpos superiores del Aura actúan entonces en el cerebro creando impulsos eléctricos que son amplificados y organizados dentro del cerebro, con el fin de monitorear el cuerpo físico.

4.1.3 **Nivel de Salud**

Las interpretaciones del Nivel de Salud, llamadas **Análisis del Nivel de Salud** en el informe de interpretación, consisten de las siguientes dos secciones:

1) *Análisis Fisiológico* – esta sección considera las 17 regiones del Nivel de Salud (0-10cm),

incluyendo la pierna izquierda, el muslo izquierdo, el torso del lado izquierdo (área cadera/pelvis), la mano izquierda (la parte superiror de la mano), el antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, el lado izquierdo del cuello, el lado izquierdo de la cabeza, la parte superior de la cabeza, el lado derecho de la cabeza, el lado derecho del cuello, el brazo derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha, el torso del lado derecho, el muslo derecho, y la pierna derecha.

2) *Análisis del Sistema Endócrino* – esta sección presenta las interpretaciones del Nivel de Salud para las siete glándulas del sistema endócrino que existen en los puntos Chakra, incluyendo los ovarios/testículos (Chakra Base), la médula suprarrenal (Chakra Sacral), el pancreas (Chakra del Plexo Solar), la corteza suprarrenal/pituitaria anterior/glándulas paratiroideas (Chakra Cardíaco), las glándulas tiroidea/paratiroideas (Chakra de la Garganta), la glándula pineal (Chakra del Entrecejo), y la pituitaria anterior (Chakra Coronario). Esta sección es presentada porque los puntos Chakra proveen información energética de ambos niveles, del Nivel Psicológico y del Nivel de Salud.

El nivel de Salud del Aura humana, que irradia de 0 a 10 cm del cuerpo físico, consiste de resonancia electromagnética de la actividad neurológica originada en el cerebro, combinada con la energía del campo electromagnético transmitida desde diversas áreas del cuerpo. Los colores de la bioenergía detectada en cada región del Nivel de Salud revelan información referente a condiciones específicas de la regíon en donde cada color es encontrado. En otras palabras, en el Nivel de Salud, no hay asociación con el lado contrario correspondiente del cerebro, porque el Nivel de Salud contiene bioenergías basadas puramente en la función biológica, y no pueden ser interpretadas usando principios de psicología o psicobiología. Por consiguiente, cuando un color de al bioenergía es detectado en una región específica del Nivel de Salud, simplemente significa que la bioenergia detectada está físicamente presente en el área próxima correspondiente al cuerpo fisico.

4.1.4 **Chakras/Sistema Endócrino**

Las interpretaciones del sistema de los Chakras están incluidas en el **Perfil Psico-Personal** bajo el título de *Análisis de la Bioenergía de los Chakras - Características Personales*, y en el **Análisis del Nivel de Salud** bajo el título de *Análisis del Sistema Endócrino.* Los Chakras son vórtices de bioenergía localizados en puntos fijos a lo largo de al espina dorsal, los cuales irradian información energética referente a la actividad de las correspondientes glándulas endócrinas. En concordancia con las funciones conocidas de las glándulas endócrinas, cada Chakra representa una categoría, o esfera, de la vida del sujeto. El color de la bioenergía encontrado en cada región de los Chakras revela eventos o condiciones en esa categoría de la vida de la persona.

Las bioenergías de los Chakras tienden a proyectarse hacia fuera, penetrando todos los niveles del Aura. Por consiguiente, independientemente de si la antena está en el Nivel de Salud (0-10 cm del cuerpo) o en el Nivel Psicológico (10-45 cm), si la antena se encuentra en la parte frontal de los puntos Chakra, esta detectará las bioenergías de los Chakras. Las frecuencias detectadas en los puntos Chakra pueden tener dos significados separados – las características personales básicas del Nivel Psicológico, y las condiciones fisiológicas del sistema endócrino del Nivel de Salud. Cada uno de estos análisis será planteado más adelante.

Análisis de la Bioenergía de los Chakras – Características Personales

Los Chakras son la clave para entender algunas de las características más personales, acontecimientos internos y bioenergías emocionales de la persona. Los Chakras son considerados tradicionalmente teniendo una frecuencia de color “natural” ligada a la activación de las correspondientes glándulas endócrinas. De esta manera, cuando los Chakras están “balanceados” o “armonizados”, tienen bioenergías con colores predeterminados basados en sus frecuencias naturales de color, en el orden natural de los colores de la refracción de un prisma: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta , y lila (de abajo hacia arriba).

Sin embargo, considerando que las correspondientes glándulas endócrinas son altamente responsables de los estado emocionales y psicosomáticos de la persona, los colores tradicionales asociados con cada Chakra son meramente teóricos. En otras palabra, en la práctica, los usuarios del **RFI** raramente encuentran que los puntos Chakra están "balanceados", y en cambio encuentran otros colores en los puntos donde el color "natural" teóricamente debería estar. Por ejemplo, el Chakra Cardíaco, el cual teóricamente es verde de manera predeterminada, puede estar irradiando energía naranja. Esto no invalida de ninguna manera los datos científicos que explican el significado del color verde (o naranja), como se deriva de su posición endócrina naturalmente correspondiente. Tal lectura simplemente significa que la energía naranja es predominante en el tópico o materia emocional o mental definida por la energía verde que enmarca la posición del corazón. En otras palabras, **los colores teóricos predeterminados que son propios de los puntos Chakra definen la categoría (o la esfera) de actividad emocional o mental que es explicada por el color de la bioenergía que realmente fue detectada en cada punto Chakra**.

Las categorías de la actividad emocional y mental definidas por el color predeterminado en cada punto Chakra, como fue determinado por ITEM a través de tres años de pruebas experimentales y clínicas, son como se detallan a continuación:

Categorías de lo Puntos Chakra:

Las bioenergías encontradas en estas regiones revelan situaciones o eventos dentro de la categoría (o esfera) de la vida de la persona.

$ **Base/Sexual** (Predeterminado: **Rojo**) – Sexualidad, propia identidad, y centro de predominancia de lo físico o lo material

- **Sacral** (Predeterminado: **Naranja**) – Vitalidad física y curativa, referente tanto a la curación emocional como a la física, cuestiones que necesitan ser curadas o resueltas.

- **Plexo Solar** (Predeterminado: **Amarillo**) – Calma o nerviosismo, factores que están influenciando o afectando la estabilidad.

- **Cardíaco** (Predeterminado: **Verde**) – Emociones profundas y satisfacción o insatisfacción emocional, generalmente en el área del romance, materia o foco de las emociones más fuertes.

- **Garganta** (Predeterminado: **Azul**) – Cuestiones primarias o centro de la comunicación, tanto de la expresión como de la escucha.

- **Entrecejo** (Predeterminado: **Violeta**) – Clarividencia, sensibilidad, intuición, y actividad intelectual, actividad predominantemente mental.

- **Coronario** (Predeterminado: **Lila**) – Desarrollo espiritual, espiritualidad, y conciencia universal.

Habiendo expuesto las categorías, comprendiendo que el color presente detectado en el punto Chakra modifica y explica la emoción o la actividad mental en la categoría definida por el color teórico de ese punto, algunos ejemplos ayudarán a ilustrar este concepto. Para presentar un ejemplo del método de interpretación, sin generar un volumen de texto excesivo, interpretaremos ahora sólo los colores azul y naranja como detectados en cada uno de los siete puntos Chakra/endócrinos corrientemente utilizados en el **RFI**.

BASE/SEXUAL (ROJO): El color azul (referente a la comunicación y a la apertura), encontrado en el Chakra base (que se esperaba fuese rojo), significa que la identidad más profunda de la

persona es ser un comunicador, y que su foco físico está en alguna expresión o medio de comunicación. Dado que el Chakra Base es también la posición de la sexualidad, el color azul en esta localización puede indicar también apertura en la sexualidad.

El color naranja (referente a la curación), encontrado en el mismo Chakra Base, significa que la identidad más profunda de la persona es la de ser un sanador, y que su foco físico está sobre algún método o práctica curativa. Esto puede indicar también que la persona está experimentado actualmente una curación emocional en el ámbito sexual.

SACRAL (NARANJA): El color azul, encontrado en el Chakra Sacral, significa que el ámbito de la comunicación necesita ser, o está siendo ahora, sanado o resuelto. Para ponerlo de modo difente, las energías de la comunicación están actualmente actuando para curar ciertos ámbitos, o, las habilidades comunicativas sirven como instrumento o medio para la curación.

El color naranja encontrado en esta misma localización, cuando el naranja es el color que se espera en este punto, simplemente significa que las energías en esta categoría están balanceadas, de manera que no hay acontecimientos o situaciones especiales, y no hay interferencias con el libre flujo de bioenergías curativas.

PLEXO SOLAR (AMARILLO): El color azul, encontrado en el punto del Chakra del Plexo Solar, significa que el ámbito de la comunicación afecta el estado de calma o nerviosismo de la persona. Ésta podría ser una frustración con falta de comunicación en una relación, o similarmente que la buena comunicación hace que la persona esté en calma y confortable.

El color naranja en esta misma posición significa que la salud y el ámbito de la curación afectan a la persona en el ámbito de la calma o el nerviosismo.

CARDÍACO (VERDE): El color azul, encontrado en el Chakra Cardíaco, significa que la persona tiene una expresión de apertura y comunicación de su emociones, y también que sus emociones están enfocadas en el ámbito de la comunicación.

El color naranja en esa misma posición significa que la persona está experimentando la curación de emociones, y también que sus emociones están enfocadas en sus asuntos curativos.

GARGANTA (AZUL): El color azul encontrado en esa posición, cuando el azul es el color que se espera en este punto, simplemente significa que las energías en esta categoría están balanceadas, de manera que no hay acontecimientos o situaciones especiales, y no hay interferencias en el libre flujo de bioenergías.

El color naranja, encontrado en el punto del Chakra de la Garganta, significa que la energía curativa está actuando sobre el ámbito de la comunicación.

ENTRECEJO/PINEAL (VIOLETA): El color azul, encontrado en el Chakra del Entrecejo, significa que la actividad mental predominante de la persona es la comunicación. Esto también indica una apertura y comunicación de tipo intelectual y energía psíquica.

El color naranja, encontrado en esta misma posición, significa que la actividad mental predominante de la persona está enfocada en la curación, y también que allí hay una curación de temas intelectuales y del ámbito psíquico.

CORONARIO (LILA): El color azul, encontrado en el Chakra Coronario, indica que las cuestiones de la comunicación ejercen influencia sobre las actividades intelectuales y mentales del individuo. La presencia del azul en el Chakra Coronario puede indicar que la persona se estimula intelectualmente al comunicarse con los otros. También puede indicar que la persona está transmitiendo o recibiendo pensamientos psíquicos o energías hacia o de una persona o grupo en particular (comunicación).

El color naranja, encontrado en el Chakra Coronario, revela que el propósito más alto de la

persona o las prioridades intelectuales predominantes tienen que ver con cuestiones curativas.

Regla General: Como regla general, las bioenergías presentes detectadas (identificadas por el color de la frecuencia) se considera que están actuando en los temas y los asuntos identificados por la categoría de la localización de los Chakras dónde el color es detectado. En otras palabras, **las bioenergías de los Chakras detectadas están generalmente actuando sobre la categoría**. Esta es una regla fácil y simple para ayudarlo a improvisar en sus interpretaciones.

Nota: Muchas filosofías y tradiciones antiguas enseñan sobre centros Chakra localizados en los pies. Algunos practicantes de metafísica han notado que los pies no se miden específicamente en el proceso **RFI**, y no son considerados específicamente en el software. La investigación experimental realizada por ITEM ha mostrado que los pies siempre emanan la misma frecuencia bioenergética de color que el Chakra Base, con tal regularidad que nosotros hemos tomado este resultado como una regla. Por consiguiente, algunos practicantes que desean considerar las energías de los pies pueden usar la función de "Análisis de Punto/Objeto" del software, o simplemente utilizar el mismo color de la bioenergía que fue detectado en el Chakra Base.

Interpretación del Sistema Endócrino

Mientras que las bioenergías de los Chakras revelan características personales básicas y son interpretadas usando las interpretaciones de los colores del Nivel Psicológico, estas bioenergías también tienen algún valor interpretativo de salud. Los puntos Chakra irradian información energética referente a la actividad correspondiente de la glándulas endócrinas, y la condición y la actividad de las glándulas endócrinas juegan un papel principal en afectar incluso las medidas psicológicas del Aura humana. En consecuencia, puede considerarse que las bioenergías detectadas en las regiones de los Chakras indican aquellas bioenergías que actualmente emanan de, influencian, o actúan sobre las correspondientes glándulas endócrinas. Recuerde, sólo necesita ser tomada una medida por cada Chakra, colocando la antena aproximadamente a 30.5 cm del punto, pero esta medida provee no sólo información energética sobre los Chakras, sino también sobre el sistema endócrino.

Las glándulas endócrinas que corresponden a los puntos Chakra se detallan a continuación:

Base – Ovarios y Testículos
Sacral – Médula Suprarrenal
Plexo Solar– Pancreas
Cardíaco – Corteza Suprarrenal, Tiroides, y Pituitaria Anterior
Garganta – Glándula Tiroides y Paratiroides
Entrecejo – Glándula Pineal
Coronario – Pituitaria Anterior

La condición del Nivel de salud de estas glándulas se expone a través del informe de interpretación en el Análisis del Nivel de Salud – sección Interpretación del Sistema Endócrino.

4.1.5 **Análisis del Cerebro**

las regiones del Nivel de Salud, de los Chakras, y las Cerebrales (cabeza) son usadas para elabrorar la Imagen Cerebral, utilizando los principios de la neurología y la medicina energética. El Análisis del Cerebro está dividido en las siguientes partes:

1) Análisis del Lado Derecho del Cerebro (Interpretaciones del Nivel de Salud Para Todas Excepto para la Corteza Prefrontal).

a) Corteza Cerebral– la corteza cerebral es el revestimiento exterior de los hemisferios cerebrales y consta en su mayor parte de cuerpos y ramificaciones celulares nerviosas, el cual está implicado en funciones como el pensamiento, los movimientos voluntarios, el lenguaje, el razonamiento y la percepción. El lado izquierdo y derecho de la corteza cerebral están conectados por una gruesa banda de fibras nerviosas (cuerpo calloso). Para la interpretación del Análisis del Lado Derecho del Cerebro, el control motor del Nivel de Salud del lado izquierdo del cuerpo es controlado por la corteza cerebral derecha.

Para la interpretación del Análisis del Lado Derecho del Cerebro, el control motor de la pierna izquierda del Nivel de Salud (**Derecha 1 (R1)** en el sistema de numeración de la region Cerebral), muslo izquierdo (**R2**), lado izquierdo del torso (**R3**), brazo izquierdo (**R4**), antebrazo izquierdo (**R5**), mano izquierda (**R6**), y cuello/hombro del lado izquierdo(**R7**) es realizado por la coreteza cerebral derecha.

b) Corteza Prefrontal– la corteza prefrontal es la región más anterior de la corteza frontal; involucra la resolución de problemas, la emoción, y los pensamientos complejos. Es la región que controla las funciones cognitivas y el procesamiento de información, ligada a la hormona dopamina, la cual balancea y controla la tasa de procesamiento de información. Contiene información energética que es transmitida a través de las ondas cerebrales.

Para la interpretación del Análisis del lado Derecho del Cerebro, el lado derecho de la cabeza en el Nivel de Salud (**R8**) indica las energías de las ondas cerebrales transmitidas desde la coreteza prefrontal derecha. A diferencia de la corteza cerebral, que queda entendido que utiliza las interpretaciones del Nivel de Salud, el software del **RFI** utiliza para la corteza prefrontal las interpretaciones del Nivel Psicológico ya que esta área es la fuente primaria de ondas cerebrales.

2) Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro (Interpretaciones del Nivel de Salud Para Todas Excepto para la Corteza Prefrontal)

a) Corteza Cerebral– para la interpretación del Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro, el control motor del Nivel de Salud de la pierna derecha (**Izquierda 1 (L1)** en el sistema de numeración de la region Cerebral), muslo derecho (**L2**), lado derecho del torso (**L3**), brazo derecho (**L4**), antebrazo derecho (**L5**), mano derecha (**L6**), y cuello/hombro derechos (**L7**) es realizado por la coreteza cerebral izquierda.

b) Corteza Prefrontal– para la interpretación del Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro, el lado izquierdo de la cabeza en el Nivel de Salud (**L8**) indica las energías de las

ondas cerebrales transmitidas desde la corteza prefrontal izquierda. Serán usadas aquí las interpretaciones del Nivel Psicológico (a diferencia de las interpretaciones del Nivel de Salud utilizadas para la corteza cerebral) ya que la corteza prefrontal genera ondas cerebrales.

3) Análisis del Cerebro Integrado (Interpretaciones del Nivel Psicológico para Todas las Regiones)

a) Corteza Cerebral– para la interpretación del Análisis del Cerebro Integrado, el control motor de la región de la garganta (**Integrado 9 (I9)** en el sistema de numeración de la region Cerebral) puede ser realizado por dos áreas en la corteza cerebral. Ya que ambos lados, derecho e izquierdo de la corteza cerebral controlan la región de la garganta (la cual es medida en el punto Del Chakra de la Garganta), la región de la garganta es presentada dentro de la interpretación del Análisis del Cerebro Integrado.

b) Corteza Visual– la corteza visual está localizada en el lóbulo occipital (lóbulo posterior del cerebro), y esta es la región del cerebro que recibe la información visual desde los nervios ópticos, y procesa la información visual incluyendo las imágenes mentales.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Entrecejo (**I10**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la corteza visual. Esta información energética no está necesariamente relacionada con la transmisión del nervio óptico que resulta de la luz entrando en el ojo físico, sino que es más indicativo de información energética en forma de imágenes mentales

c) Cerebelo – Estructura localizada detrás del cerebro involucrada en la regulación central del movimiento, como el movimiento básico, balance, y postura.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Plexo Solar (**I11**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por el cerebelo. La asociación básica entre el cerebelo y el Chakra del Plexo Solar es que

ambos cumplen funciones eni el balance o la estabilidad del individuo.

d) Glándula Pineal– de acuerdo al diccionario médico, la glándula pineal es definida como "Pequeña, gris rojizo, vascular, cuerpo cónico de estructura glandular rudimentaria encontrada en el cerebro y sin función conocida". Sin embargo, la glándula pineal es bien conocida por los practicantes de la medicina energética y psicológica como funcionando en la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas, y en la regulación de la hormona melatonina.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Entrecejo (**I12**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la glándula pineal. La glándula pineal es la glándula endócrina correspondiente al Chakra del Entrecejo, y se considera que transmite o recibe los mismos tipos de información energética que la corteza visual porque la glándula pineal y la corteza visual están en la misma senda neuronal.

e) Glándula Pituitaria– la glándula pituitaria es una pequeña glándula endócrina con un lóbulo anterior y otro posterior localizado en la base del craneo que secreta una hormona involucrada en los procesos urinarios, reproductivos y de crecimiento. A veces es llamada la glándula maestra del cuerpo porque todas las otras glándulas endócrinas dependen de sus secreciones para la estimulación.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra Coronario (**I13**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la glándula pituitaria. El Chakra Coronario es considerado el "centro energético maestro" porque todas las características personales más elevadas teóricamente residen aquí.

f) Sistema Límbico– el sistema límbico es un grupo de órganos cerebrales que incluye al tálamo, el hipotálamo y el hipocampo que son importantes para el control de las emociones y de la memoria.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra Cardíaco (**14**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por el sistema límbico. El Chakra Cardíaco es el centro clave para el influjo y la emanación de las energías emocionales a través del individuo.

g) Lóbulo Parietal– el lóbulo parietal está localizado detrás de la corteza frontal, y está involucrado en la percepción sensoria y en la memoria y en la conciencia de sí mismo. El lóbulo parietal es el centro cerebral que transmite ondas cerebrales.

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, la parte superior de la cabeza del Nivel de Salud (**15**) indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por el lóbulo parietal.

Para la mayoría de los investigadores **RFI**, la imagen del Cerebro y su interpretación no serían tan útiles como la imagen del Aura y sus interpretaciones, porque sólo las regiones seleccionadas del Aura son utilizadas para desarrollar la imagen del Cerebro. Desde una perspectiva fisiológica, la imagen del Cerebro y sus interpretaciones pueden ser valiosas cuando, por ejemplo, son comparadas con las imágenes médicas como la TAC para suplementar la diagnosis del cerebro. Sin embargo, la imagen del Cerebro y las interpretaciones (como la imagen del Aura y sus interpretaciones) no pueden ser usadas como la única base para un diagnóstico médico.

La etiqueta Leyenda del Cerebro muestra la correlación entre la Imagen del Aura del Cuerpo y la Imagen del Cerebro. Los rótulos de la región aparecen pequeños en la pantalla, pero cuando son impresos se ven más facilmente. Presionando el balón gráfico debajo de la etiqueta Leyenda del Cerebro, usted puede acceder a una gráfica que muestra estas correlaciones.

4.2 YENDO MÁS ALLÁ DE LOS INFORMES DE INTERPRETACIÓN DEL RFI

Las interpretaciones del **RFI** le proveen de una visión básica general de las condiciones actuales de bienestar emocional, psicológico y físico de una persona. Cuando usted finaliza con la lectura y le muestra al sujeto las imágenes e interpretaciones, usted generalmente querrá describir cómo está información se aplica específicamente al él o a ella. Algunos investigadores del **RFI** ya tienen un sentido intuitivo acerca de cómo aplicar las interpretaciones generales más específicamente al sujeto, especialmente aquellos que tienen una profesión médica o están en el campo de la salud alternativa. Sin embargo, si usted no posee actualmente este sentido intuitivo, no se preocupe porque tales habilidades se adquieren con la experiencia. El concepto de describir las imágenes y las interpretaciónes del **RFI** a otros es muy parecido a mirar una gráfica generada por un instrumento de biofeedback o un análisis de un equipo médico por imágenes, como la TAC. Usted necesita examinar los datos que tiene enfrente suyo e interpretarlos como para que el sujeto pueda entenderlo.

En esta sección, le presentaremos un ejemplo de una lectura del **RFI** y discutiremos brevemente las diferentes maneras de interpretar las imágenes e interpretaciones del Aura, más allá de las capacidades del software. En otras palabras, trataremos de demostrarle cómo usar el "juicio profesional" en la evaluación de los resultados arrojados por el **RFI**; los mejores resultados no vendrán de la máquina o el sistema, sino a través del uso de las habilidades interpretativas y el juicio profesional de practicantes como usted.

Imaginemos que usted simplemente ha realizado una lectura completa del Aura, y generado la siguiente imagen:



Del informe de interpretación, nosotros podemos hacer algunas observaciones preliminares sobre la condición de esta persona en este momento en particular:

1. Perfil Psico-Personal

a. *Análisis De la Bioenergía Del Lado Izquierdo - Influencias Ambientales*

- Dos de siete regiones son rojas - la persona está recibiendo energías materialistas del ambiente, o está alrededor de otras personas que pueden ser egocéntricas o materialistas.
- Tres de siete regiones son doradas - la persona también está recibiendo una gran cantidad de energía curativa de una fuente en su ambiente, y éstas son las

energías predominantes recibidas por la persona desde el ambiente.

- La palma de la mano izquierda es amarilla, indicando que el sujeto está recibiendo mucha felicidad y bienestar del ambiente en el cual esta persona está actualmente.
- El rosa también se ha detectado, y puede revelar energías recibidas de naturaleza romántica o sexual.

b. Análisis De la Bioenergía Del Lado Derecho - Patrones De Comportamiento

- Dos de siete regiones son azules, indicando que la persona proyecta energías de naturaleza comunicativa y expresiva.
- El celeste se está proyectando de la mano derecha, indicando que las energías de empatía y emocionales son las energías dominantes que la persona está proyectando.
- Tres de las regiones son verdes, acentuando además que la persona está proyectando energías emocionales fuertes. La naturaleza de esas emociones sigue siendo, sin embargo, incierta.
- Una región es bordó, significando que la persona también está proyectando energías referidas al foco físico y material.

c. Análisis Cerebral De la Bioenergía - Pensamientos Predominantes

- Los pensamientos predominantes de la persona se enmarcan en el ámbito intelectual o filosófico (el violeta fue detectado dos veces), materrialista (rojo), curativo (naranja), y de naturaleza comunicativa (azul).

d. Análisis de la Bioenergía de los Chakras - Características Personales

- El Chakra base es amarillo, lo cual significa que la persona está contenta con sus circunstancias físicas y sexuales.
- El Chakra Sacral es azul, indicando que la persona encuentra actualmente lo curativo a través de comunicación y la expresión.

- El Chakra Plexo Solar es verde, indicando que las energías amorosas aseguran lo mejor posible el equilibrio emocional y la estabilidad de la persona.
- El Chakra Cardíaco es verde (balanceado), revelando con un claro énfasis que las energías emocionales están sosteniendo actualmente el bienestar de la persona.
- La Chakra de la Garganta es azul marino, lo cual refleja las cualidades intelectual o de liderazgo de las energías de la persona cuando se está comunicando.
- El Chakra del Entrecejo es lila, lo cual significa que la búsqueda espiritual de ideales y de verdades más altas es de gran interés para la persona.
- La Chakra Coronario es lila, lo cual significa que la persona ha alcanzado un estado elevado del desarrollo espiritual.

2. Análisis del Nivel Salud

a. *Análisis Fisiológico*

- El rojo está presente en el brazo derecho, en el antebrazo derecho, y en el brazo izquierdo, lo cual indica la presencia de dolor o mal funcionamiento biológico en estas áreas, aunque no está claro cuál es la causa de dolor o de mal funcionamiento en este punto, o si la persona está experimentando actualmente el dolor.
- Gris/negro está presente en las regiones izquierdas y derechas del torso, sugiriendo que hay una cierta clase de tensión o de sobre estimulación en estas áreas, aunque no conocemos aún la causa de estas dolencias.
- Hay aquí actualmente energías curativas (naranjas) que actúan sobre el lado izquierdo de la cabeza y del muslo izquierdo, o se trata de actividad inmunológica creciente en dichas regiones.
- Las áreas restantes del cuerpo pueden ser consideradas saludables, mientras que podemos observar bienestar físico (azul en la pierna izquierda, en pierna derecha, mano derecha, y en el lado derecho de la cabeza), conexión psicosomática (violeta en el antebrazo izquierdo), saludable actividad biológica o neurológica (celeste en el cuello/hombro izquierdo y amarillo en el cuello/hombro derecho), y buena

circulación sanguínea (verde en el muslo derecho y en la mano izquierda).

b. Análisis Del Sistema Endócrino

- Todas las glándulas endócrinas situadas en los puntos Chakra parecen funcionar en niveles saludables sin tensión, ya que encontramos amarillo en la región genital (vitalidad), azul en riñón/médula suprarrenal (calma, bienestar), verde en el páncreas (circulación sanguínea o producción hormonal incrementada), verde en las glándulas asociadas al Chakra Cardíaco (secreción hormonal incrementada), azul en las glándulas de la tiroides y de la paratiroides (bienestar, niveles normales de secreción), lila en el glándula pineal (lo que significa que la glándula pineal está activa y que participa en el intercambio de información energética), y lila en el pituitaria anterior (esto podría indicar que la pituitaria anterior está activa pues está respondiendo a los pensamientos intelectuales o espirituales de la persona).
- La presencia del verde en los puntos Chakra que corresponden al páncreas y a las glándulas del Chakra Cardíaco parecen revelar un aumento en la secreción hormonal, que puede ser producido en respuesta a un dolor o al mal funcionamiento biológico en las regiones del Nivel de Salud.

Hasta aquí hemos desarrollado algunas observaciones preliminares respecto a esta imagen del Aura. En este punto usted tiene básicamente dos opciones:1) explicar la imagen y la interpretación al sujeto basándose en sus observaciones preliminares, o 2) utilizar el juicio profesional para hacer conclusiones más detalladas (o mejor dicho, " estimaciones razonadas ") de la condición del sujeto.

La decisión es la suya; sin embargo, usted encontrará probablemente que una vez que usted adquiera cierto nivel de experiencia en el uso del **RFI**, usted elegirá automáticamente la segunda opción, e intuitivamente sacará algunas conclusiones basadas en las interpretaciones del **RFI**. Hay una cosa a recordar sobre el juicio profesional - mientras usted no haga que su interpretación suene como un diagnóstico, y le avise al sujeto que usted está realizando estimaciones razonadas, usted no puede equivocarse.

Este es un camino para aproximarse a una interpretación detallada de la imagen del Aura planteada arriba (pero de ninguna forma es la única manera):

Condición Emocional/Psicológica del Sujeto

Al parecer hay dos tipos predominantes de energías externas que están influenciando a esta persona:1) una fuente curativa fuerte (presencia significativa de dorado en Nivel Psicológico del lado izquierdo), y 2) una fuente de energías orientada a lo material atado a lo físico (rojas). Sin embargo, éstas energías orientadas a lo material no parecen afectar perceptiblemente el bienestar psicológico de la persona, considerando:1) la carencia del rojo en los Chakras y en el Nivel Psicologico del Lado Derecho, y 2) el predominio de la información energética intelectual y/o espiritual alrededor de la cabeza y en la Chakra Coronario. Es decir, a pesar de que algunas energías pueden considerarse negativas o perjudiciales en el ambiente de la persona, a la persona parece no afectarle, pues tiene su mente enfocada en otras materias.

El predominio de azul y de verde en el Lado Derecho del Nivel Psicologico indica que esta persona es un comunicador fuerte, y comunica probablemente su mensaje con gran entusiasmo y emoción. La presencia de lila en los Chakras del Entrecejo y Coronario indica que la persona puede estar implicada en búsquedas de una elevada naturaleza espiritual e intelectual, y que está adaptada probablemente a energías metafísicas más elevadas (es decir, el lila o el blanco en estos Chakras "superiores" indican generalmente que la persona ha encontrado o está en camino de encontrar su camino espiritual, y que ahora está en la búsqueda de verdades más elevadas).

Podemos hacer la “estimación razonada” de que esta persona es un artista, filósofo, profesor, o quizás incluso un ministro, que ha dedicado el trabajo de toda la vida a comprender las verdades superiores y poder comunicar con eficacia lo aprendido mediante la expresión artística o la palabra escrita o hablada. La persona recibe una mezcla del amor y estímulo y una presión materialista de la gente o de su ambiente, pero elige generalmente no hacer caso de las influencias negativas. La presión materialista puede no tener origen en una persona en particular, sino quizás de la sociedad en general, como en el caso de un artista que recibe presiones para

hacer un trabajo más comercial para sobrevivir, pero prefiere en primer lugar hacer ilustraciones para satisfacer un propósito más elevado.

Análisis del Nivel de Salud

La presencia de gris/negro en ambos lados izquierdo y derecho del torso parece indicar tensión en esas regiones, aunque no se puede hacer una afirmación más definitiva sin una lectura de seguimiento con el **RFI**. Sin embargo, la presencia de tensión en el área abdominal o de cadera/pelvis más baja parece ser verificada por la actividad creciente del páncreas, de la corteza suprarrenal, de la tiroides y de las glándulas pituitarias anteriores (verde en los Chakras del Plexo Solar y Cardíaco), que responden a factores estresantes biológicos aumentando la secreción hormonal. Podría hacerse probablemente una interpretación diferente si las regiones izquierda y derecha del torso fuesen, por ejemplo, azules, pero la presencia del verde en las glándulas endocrinas junto con gris/negro o rojo en las regiones vecinas del Nivel de Salud se puede considerar un signo de tensión o de daño probable.

El flujo creciente de la circulación sanguínea y la actividad inmunológica en los muslos revela que cualquier tensión en esas áreas se está aliviando actualmente. El rojo abarca el brazo y el antebrazo derecho y el brazo izquierdo. Cuando se observa el rojo en el Nivel de Salud usted puede querer plantearse una pregunta por ejemplo, " experimenta usted algún dolor en sus brazos?" o "sufrió alguna vez una lesión en sus brazos?" En muchos casos, cuando el rojo esté presente en esas regiones, usted recibirá una respuesta afirmativa. En los casos donde la respuesta no sea afirmativa, puede ser un indicador de alguna enfermedad o lesión que todavía no se ha manifestado físicamente; ITEM ha observado dicho fenómeno algunas veces, pues al parecer las enfermedades y lesiones físicas se pueden detectar en el Aura de una persona incluso antes de que cualquier efecto físico sea experimentado. En tales casos, puede ofrecer como consejo por ejemplo, "usted podría querer vigilar esta área," o "usted podría querer controlar esto por su médico" lo cual sería lo apropiado.

El ejercicio que acabamos de realizar aquí es muy similar a los ejercicios que los "sanadores energéticos intuitivos" realizan analizando las condiciones del Aura a través del intercambio vibratorio, realizado a menudo con las manos. La diferencia, por supuesto, es que cuando usted

basa sus interpretaciones en las lecturas del **RFI**, está utilizando las herramientas de la ciencia y del análisis racional objetivo, mientras que la mayoría de la gente consideraría a la "diagnosis energética intuitiva" enteramente subjetiva. No se sorprenda si usted les da un shock a sus pacientes con lo que usted "sabe" sobre ellos apenas con la interpretación de una lectura del **RFI**.


La habilidad de "avanzar en la interpretación" viene casi siempre automáticamente con la repetición y la experiencia. Otras formas de interpretación son proporcionadas en el Taller de Aura por Imágenes de ITEM en la **Sección 7.0**.

La otra cuestión importante a tener presente es que "lo que está allí, está allí" – o en otras palabras, los colores que usted detectó con el **RFI** son los colores predominantes en aquel momento, y están presentes allí por una razón. Usted no tiene que presentarse como un experto que revela todas las verdades ocultas del sujeto o cliente. Su papel es, esencialmente, guiar al sujeto al crecimiento personal facilitando la interpretación de su Aura. Haciendo preguntas de entrada como por ejemplo, "parece que usted proyecta fuertes energías curativas por la presencia de dorado en el Lado Derecho del Nivel Psicológico – ¿esto tiene sentido para usted?" esto será más eficaz.

4.3 EMPLEOS ADICIONALES

4.3.1 Estados Cerebrales

Los investigadores **RFI** le preguntan a veces a ITEM por el uso del **RFI** para determinar estados cerebrales. Los estados cerebrales identifican generalmente el nivel de conciencia de la persona, y se mide a través de la actividad eléctrica del cerebro. La actividad eléctrica completa típicamente un ciclo a través del cerebro a una tasa que se pueda medir usando tecnología tal como un electroencefalograma (EEG). La unidad de medida para esta tasa son los ciclos por el segundo (CPS), la cual es fundamentalmente la misma unidad que el hertzio (Hz). Sin embargo, el **RFI** no puede medir directamente el CPS del cerebro porque la actividad eléctrica es interna al cerebro, y el **RFI** puede medir solamente las ondas EM que viajan a través del aire.

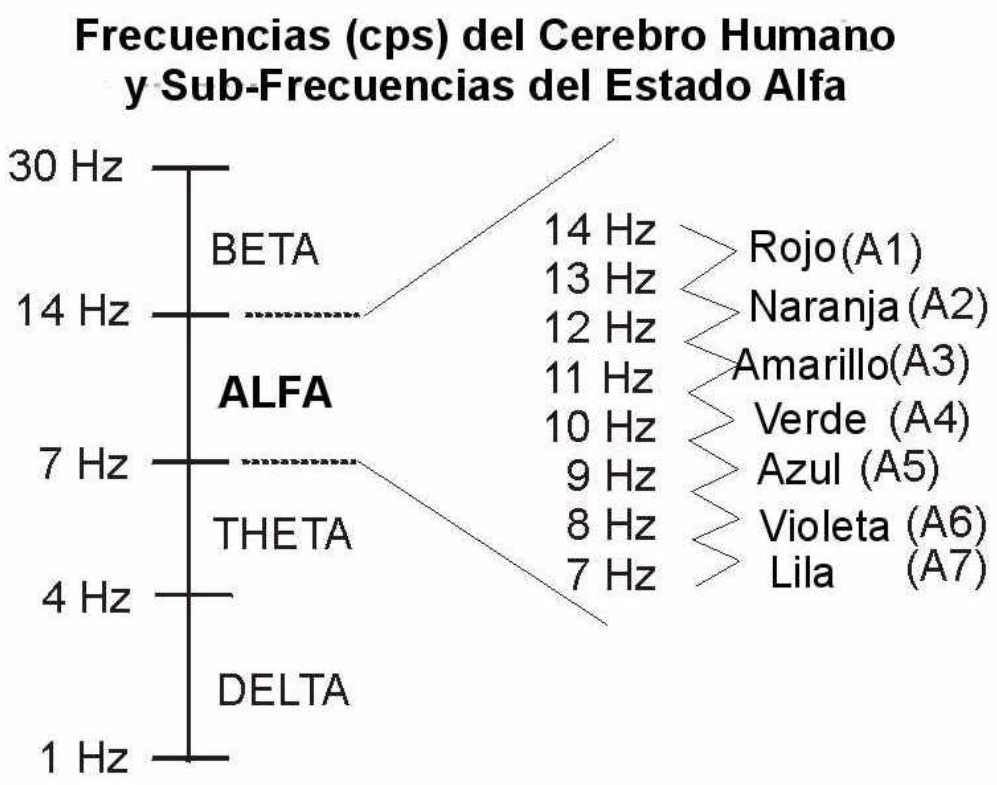

Se reconocen típicamente cuatro estados cerebrales– Beta, Alfa, Theta y Delta. El estado Beta se puede considerar, "la conciencia normal de vigilia," entre 30 CPS (o Hz) y 14 CPS. El estado Alfa es el estado cerebral asociado generalmente a la meditación entre moderada y profunda, entre 14 CPS y 7 CPS. El estado Theta generalmente se considera de sueño profundo (entre 7 y 4 CPS), mientras que el estado Delta es de sueño muy profundo (entre 3 CPS y 1 CPS).

Aunque el RFI no puede medir directamente estados cerebrales, ITEM ha desarrollado un método indirecto para determinar el estado cerebral predominante de la persona basado en el color que está presente en el Chakra del Entrecejo (Glándula Pineal). El estado cerebral predominante de una persona es el estado (rango de frecuencia) en el cual su cerebro funciona la mayor parte del tiempo durante las horas normales de vigilia, como el nivel primario y natural de conciencia, aunque muy ocasionalmente entra en otros estados

de conciencia en algunos momentos. Se utiliza el Chakra del Entrecejo porque la Glándula Pineal es el regulador principal de la conciencia. Coloque simplemente la antena en el Chakra del Entrecejo (aproximadamente a 12 pulgadas (30.5 cm) de la cabeza), ingrese la frecuencia detectada en el campo de Datos de Frecuencia de la función **Análisis de Punto/Objeto** (compruebe que el botón de al lado de Estados Cerebrales esté chequeado), y presione la tecla Enter. La frecuencia será convertida a un color y a un estado cerebral predominante con una interpretación de acuerdo con la siguiente tabla:

Color	Estados Cerebrales	Rango de Frecuencia	Interpretation
Bordó (Rojo Oscuro)	Estado Beta Alto	30 – 22 CPS (Hz)	Estado de la conciencia de vigilia activo o estimulado caracterizado por la alerta mental y la actividad física.
Rojo	Estado Beta Bajo	22 – 14 CPS	Estado normal de conciencia de vigilia de auto motivación caracterizado por la alerta mental y la actividad física.
Rosa (Rojo Claro)	Estado Alfa Nivel 1	14 – 13 CPS	Estado activo de conciencia profunda conectado con la mente subconsciente. Apertura a la creatividad, la relajación o la meditación.
Naranja	Estado Alfa Nivel 2	13 – 12 CPS	Estado activo de conciencia profunda caracterizado por la conexión más íntima con las emociones y con la mente subconsciente. El estado de relajación más profunda, y de una meditación más controlada.
Amarillo	Estado Alfa Nivel 3	12 – 11 CPS	Estado pasivo de conciencia más profunda caracterizado por paz interna y euforia, combinados con un estado de preparación para reaccionar a los estímulos externos. Preparación para incorporar niveles más profundos de conciencia para la meditación enfocada.
Verde	Estado Alfa Nivel 4	11 – 10 CPS	Estado pasivo de conciencia profunda caracterizado por la emoción pura como resultado de la apertura completa de la mente subconsciente. Meditación altamente enfocada, ocupándose de sus emociones potentes, preparándose para entrar a niveles más profundos de conciencia.

Celeste	Estado Alfa Nivel 4/5	11 – 9 CPS	Estado alterado de conciencia inestable donde el sujeto está fluctuando entre el procesamiento de emociones del subconsciente y los esfuerzos para conectarse con la información de la energía universal. Puede indicar distracciones o ansiedades subconscientes interferiendo con el proceso de la meditación.
Azul & Azul Marino	Estado Alfa Nivel 5	10 – 9 CPS	Estado alterado de conciencia caracterizado por el despertar de capacidades para obrar recíprocamente con la información universal y la energía sutil. Comienzo de las condiciones conducentes a la telepatía y a la influencia mental a distancia.
Violeta	Estado Alfa Nivel 6	9 – 8 CPS	Estado alterado del conciencia caracterizado por la completa activación de capacidades para realizar trabajos psíquicos y tareas de influencia a distancia, y sentir, controlar y dirigir de manera tangible bioenergías y energías sutiles.
Lila	Estado Alfa Nivel 7	8 – 7 CPS	El estado alterado de conciencia incrementado caracterizado por la máxima utilización y eficacia de la Glándula Pineal del cerebro, indicando que la persona está activamente comprometida en el control del trabajo psíquico o de la energía sutil.
Gris/Negro	Estado Theta	7 – 4 CPS	La mente subconciente puede estar respondiendo temporariamente a situaciones de gran estrés en el momento presente, o procesando situaciones de un pasado traumático. Puede ser propenso a los "retrocesos" o a breves alucinaciones. El sujeto es actualmente altamente susceptible a la sugestión, y los acontecimientos probablemente tengan un hondo impacto emocional en el subconsciente profundo.

Plata	Estado Delta Alto	4 – 3 CPS	Estado alterado extremadamente profundo caracterizado por una intensiva recarga de sus bioenergías, mientras que está siendo fuertemente protegido de las influencias de cualquier acontecimiento físico, mental o de energías sutiles. El sujeto es temporalmente inmune a la sugestión subliminal o a la influencia a distancia, pero puede ser propenso a la pérdida del conocimiento en respuesta a la severa tensión.
Blanco	Estado Delta Bajo	3 – 1 CPS	Estado alterado de conciencia extremadamente profundo que conduce a experiencias fuera-del-cuerpo. Caracterizado por la conexión profunda con las energías universales puras, de alta frecuencia que pasan a través del sujeto, potenciándolo y protegiéndolo. La meditación en tal estado por más de 30 minutos puede presentar un riesgo real a su salud física.
Dorado	Todos	30 – 1 CPS	Rara habilidad para pasar de uno a otro Estado Cerebral (1 - 30 Hz Ciclos Cerebrales) de manera controlada e intencional, posibilitado por la liberación de todas las distracciones o disturbios emocionales debido a una mente subconsciente sana y clara. Este estado se caracteriza por las transiciones rápidas, fáciles y ágiles a través de todos los Estados Cerebrales, evidenciando la maestría completa real o potencial de sus Estados Cerebrales para trabajar poderosamente con bioenergías.

Debe notarse que las asociaciones de color-frecuencia desarrolladas en esta carta fueron basadas predominantemente en argumentos teóricos, y fueron realizadas pocas pruebas con tecnología de EEG para confirmar dicha carta; sin embargo, esto se puede considerar un buen punto de partida para ahondar en la investigación y aceptable para la utilización práctica hasta el momento.

4.3.2 Objetos y Espacios

Hay un campo específico de la ciencia bio-energo-informática, tradicionalmente llamado "psicometría" que estudia cómo las bioenergías y las energías mentales sutiles causan

"impresiones" en la estructura subatómica de objetos materiales, y practica la medición de tales cambios y la extracción de la información energética de las estructuras materiales. Éste es el acercamiento objetivo y técnico a la práctica de los "psíquicos" quiénes "leen" la energía sutil de objetos o de lugares, para obtener información sobre los acontecimientos y las condiciones que entraron en contacto con el objeto o el área física. La física y a la mecánica de la psicometría es explorada el la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM.

En general, debido a las características y a la suceptibilidad inherente a las partículas subatómicas, los objetos materiales tienden a conservar las impresiones de la información de las bioenergías de los seres vivos que entran en contacto cercano con ellos. Las bioenergías impresas son generalmente ondas cerebrales electromágneticas, u otros campos bioenergéticos resultantes de la emoción.

Como resultado de los mecanismos implicados, las bioenergías de los seres vivos que se imprimen en la estructura subatómica de un objeto también se convierten en parte del campo de energía sutil del objeto. Por consiguiente, cuando medimos las emanaciones de energía sutil de objetos materiales, también detectaremos una "copia" de la bioenergía original que fue impresa en la estructura subatomica del objeto. Por lo tanto, el análisis del **RFI** de objetos materiales puede darnos un perfil psicologico operativo de la gente o de otros seres vivos que entraron en contacto con ese objeto.

El **RFI** se puede utilizar también para detectar energías sutiles que "flotan alrededor" del ambiente en un espacio, tal como un cuarto. La mayoría de estas energías sutiles vienen de la información energética que irradia de los objetos en el área. Los muebles, las rocas y la madera, los árboles, las alfombras, las paredes y los techos, todos pueden irradiar información energética caracterizada por la psicología de la gente que vive - o ha vivido - en un hogar, un cuarto, o aún en un espacio al aire libre tal como un sitio arqueológico.

Por lo tanto, es a menudo productivo y absolutamente revelador utilizar el sistema **RFI** colocando la antena cerca de objetos, o simplemente sosteniendo la antena en el aire para recoger los campos de energía sutil que están pasando cerca de o atravesando un espacio o un área

específica.

Para obtener los mejores resultados en la medición de objetos, mantenga sus manos alejadas del objeto que usted está midiendo, puesto que el bioenergía de las manos es fuerte, e interferirá con las energías más débiles de la información que emana de un objeto material. Por lo tanto, no sostenga el objeto, sino que debe ponerlo en una tabla o una superficie con la menor cantidad posible de otros objetos. Luego, coloque la base de la antena tan cerca del objeto como le sea posible, y observe los números de la frecuencia detectados. También se recomienda que usted use los guantes 100% de algodón en ambas manos (pero especialmente en la mano derecha, que es la que proyecta energía) cuando mida objetos y espacios.

Para obtener los mejores resultados midiendo energías sutiles en un ambiente, espacio o área, coloque la antena en el aire, y barra lentamente con la antena una región del área a la vez, observando los números de la frecuencia detectados en cada región del área. Para medir energías sutiles en un ambiente o espacio ancho, usted puede querer extender completamente la antena, de modo que pueda aumentar el área de detección de ondas EM por la antena. Extendiendo la antena usted pierde cierto grado de exactitud en la medición de la frecuencia; sin embargo, esto puede no ser una preocupación importante considerando que usted aún así detectará la frecuencia-color presente más fuerte, y esto le ayudará a identificar la naturaleza de las energías sutiles.

Analizar los colores de la energía sutil de un cuarto es casi exactamente igual que interpretar los colores de la bioenergía en el Nivel Psicologico del Aura humana. Por ejemplo, si hay una región grande de energía azul en una esquina particular de un cuarto, o cerca de una región del un mueble en particular, entonces esa área se ha utilizado o está siendo utilizada sobre todo para actividades que implican a la comunicación. Si hay una región de color naranja, esto significa que el área se ha utilizado o se está utilizando sobre todo para actividades que implican curación emocional, y así sucesivamente.

Porque los bioenergías que se imprimen sobre la materia física son bioenergías intrínsecamente psicologicas y emocionales, y porque los objetos materiales no son sistemas biológicos y por lo

tanto no tienen Auras de Salud, sólo se deberá utilizar la tabla de interpretación del Nivel Psicologico para analizar objetos y espacios.

Para realizar el análisis de objetos y de espacios, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1) Dibujar un cuadro o una gráfica del objeto o del espacio en un pedazo de papel;

2) Colocar la antena en cada área espacial significativa alrededor del objeto;

3) Anotar cada número de la frecuencia detectado en el programa del software, usando la función del “Análisis de Punto/Objeto" (cerciorarse de que el botón Psicologico esté tildado); y

4) Dibujar el color detectado sobre el área correspondiente de su gráfica de papel, usando lápices de colores, o quizás simplemente escribiendo el nombre del color.

Ha habido investigadores que han realizado análisis **RFI** en hogares luego de la compra del inmueble para ayudar al nuevo dueño a entender mejor las "energías residuales" dejadas en el hogar por los inquilinos anteriores. El investigador debería dibujar el plano de la casa, y seleccionar áreas de cada sitio para tomar una medida con el **RFI**. Después de cada lectura, él investigador debería escribir la frecuencia detectada en el punto seleccionado de la muestra del el plano de la casa, y después de la recolección de todos los datos debería colorear el plano con los colores correspondientes de las características dadas por el Análisis del Punto/Objeto del software **RFI**. Luego el investigador, con las habilidades interpretativas avanzadas aprendidas con la experiencia, debería explicar los colores de una manera que ayude al nuevo dueño a entender, por ejemplo, cómo deberían ser orientados los muebles en el hogar, decidir sobre esas áreas que requieran la "limpieza" de energías negativas, así como otras decisiones.

El punto es que las aplicaciones del **RFI** están limitadas solamente por la imaginación – si usted tiene un interés que va más allá de la investigación del Aura humana, tiene todos los medios para perseguir dicho interés.

4.3.3 Análisis Botánicos (plantas y árboles)

En tanto que las diversas formas de vida vegetal no tienen actividad cerebral ni respuestas neurológicas que la acompañen, al igual que los seres humanos y los animales, emanan campos bioenergéticos de "Aura" que consisten en la irradiación bioeléctrica de la actividad atómica y celular. Hay muchas investigaciones que sugieren que las plantas también tienen "sensaciones," en el sentido del grado de reacción al intercambio de la información energética con el ambiente y con otras criaturas vivas. Las plantas evidentemente hacen uso de los pensamientos y de las sensaciones de los seres humanos asimilando esta energía de campo eléctrico, y utilizándola para aumentar el grado de actividad metabólica. Por consiguiente, una planta que es "alimentada" por la atención y la interacción humana positiva crece generalmente más alta y más verde que una planta que no lo es.

Por lo tanto, es probable que las plantas tengan dos campos de energía distintos análogos al Cuerpo Emocional humano y al Nivel de Salud. El primer nivel, más cercano a la materia física de la planta, es característico de su homeostasis biológica y de su vitalidad. El segundo nivel, irradiando más allá que el anterior, es indicativo de sus actividades de intercambio de información energética, y de su grado de utilización de las fuentes de energía aparte de la luz solar.

El ancho o dimensión de estos dos niveles depende en gran medida del tamaño de la planta o del árbol. Para las plantas pequeñas y medianas, el Nivel de Salud existe generalmente entre las 0-2 pulgadas (0-5 cm) de los tallos, de las hojas y de las flores, mientras que el "Nivel Emocional" generalmente está presente entre las 2-8 pulgadas (5-20 cm) de la planta. Para las plantas grandes, los arbustos y los árboles pequeños (los brotes y los árboles jóvenes) los rangos generales son entre 0-2 pulgadas (0-5 cm) (Nivel de Salud) y 2-12 pulgadas (5-30 cm) (Nivel Emocional). Para los árboles de tamaño mediano y grandes, la información del Nivel de Salud está generalmente presente entre 0-4 pulgadas (0-10 cm), mientras que el Nivel Emocional parece extenderse más lejos que muchas Auras humanas, entre 4-24 pulgadas (10-60 cm) (o más).

En experimentos preliminares realizados por ITEM, los campos bioenergéticos de las plantas domésticas y los árboles pequeños en macetas fueron analizados sobre la base del "antes y el después" de imágenes del Aura de plantas enfermas, y las características energéticas de su recuperación. Estas investigaciones iniciales dieron lugar a un sistema básico de interpretación de los colores de la bioenergía de la vida vegetal.

El color bordó de la bioenergía (rojo oscuro) apareció con más frecuencia en lo alto de las ramas más grandes ascendentes en expansión que estaban más estrechamente conectadas con el tallo principal (de una planta) o el tronco (de un árbol). En general, el color rojo se asocia a energías, acontecimientos y condiciones físicas y materiales. Para los seres humanos y los animales como entidades físicas y metefísicas, un exceso de energía material física indica un desequilibrio que se relaciona generalmente con el dolor, mal funcionamiento o con daños físicos. Dado que las plantas, sin embargo, son fundamentalmente criaturas que prosperan en el "terreno" de las energías físicas y materiales, tal interpretación sería errónea o inapropiada. Por lo tanto, las bioenergías rojas y bordó en las plantas bien se pueden interpretar como "energías terrestes" (quizás como nutrición o bioenergías del terreno) que fluyen a través de la planta, o como replicación y crecimiento activo de la célula.

Todas las partes visiblemente enfermas, dañadas o deterioradas de una planta irradiaron constantemente un Aura anaranjada. En algunos casos, el área que emana bioenergía naranja visiblemente parece saludable, pero hay allí no obstante una cierta deficiencia, de nutrición, luz solar, o agua, o bien la planta pudo haber adquirido algún virus, y pronto podría mostrar signos de deterioro. Como con los animales, el color naranja en las plantas indica una enfermedad o lesión de esa parte de la planta, así como el hecho de que un cierto proceso curativo está actuando sobre esa área. Por consiguiente, el naranja representa los esfuerzos de la planta de repararse o de recuperarse de la infección, de la infestación o de la enfermedad.

Puesto que el color amarillo representa calma o ansiedad (nerivosismo), tanto como vitalidad general y salud en animales, podemos extrapolar para las plantas una descripción más general de tales condiciones, que serían el nivel de comodidad y de compatibilidad con el ambiente. Por lo tanto, mientras que el amarillo aparece raramente en alguna parte de una planta, podemos razonablemente estimar que representa la relación simbiótica actual que vive la planta con los insectos, los microbios, o los hongos que la rodean.

Las áreas de la planta que fueron privadas del agua, o que trabajaron activamente para promover la circulación vascular, constantemente emanan un Aura verde. En seres humanos y animales, el verde en el Nivel de Salud del Aura indica incremento de la circulación, ya sea relacionado con una patología o con un estímulo saludable. Debido a diferencias biológicas fundamentales, es razonable que la bioenergía verde en la vida vegetal indique no solamente un incremento de la circulación, sino también posiblemente una circulación inhibida. Es decir que para las plantas, la bioenergía de color verde indica un tema de circulación, ya sea aumentada o inhibida. En plantas no-vasculares, donde no es técnicamente un tema de "circulación", el verde es muy probablemente indicativo del balance osmótico incrementado o inhibido.

El agua puede funcionar como un catalizador para el intercambio de la información energética, por su característica de conductor eléctrico. El color azul marino (azul oscuro) está asociado a la comunicación consciente en animales, que es esencialmente intercambio de informacion energética. Por lo tanto, el color azul marino indica lógicamente la presencia de agua en una parte de la planta, y sugiere que tal área tiene un alto potencial para la comunicación por intercambio de información energética con el ambiente y con otras criaturas vivas.

Todas las partes visiblemente sanas de una planta emanan constantemente un Aura violeta. En seres humanos y animales, la bioenergía violeta en el Nivel de Salud se asocia a una conexión psicosomática con esa parte del cuerpo, puesto que la salud en esa parte del cuerpo depende de la energía mental que se dirige a esa área. Las plantas no tienen procesos mentales propios, sino que por el contrario funcionan permitiendo que las energías naturales de la vida tales como la luz,

las moléculas en aire, y el agua las atraviesen. Por lo tanto, es lógico concluir que el violeta indique salud y vitalidad general en esa parte de la planta.

En base a la investigación del ITEM realizada hasta la fecha, hemos desarrollado las siguientes interpretaciones generales para las mediciones del **RFI** de hierbas, plantas y árboles:

Bordó y Rojo:	Nutrición a partir del Terreno, Replicación Y Crecimiento Celular
Gray/Black:	Enfermedad, Desequilibrio o Muerte Debido a las Condiciones Ambientales (es decir, Falta de Alimento o Agua, Patógenos, etc.)
Naranja:	Enfermedad o Desequilibrio, pero en el Proceso de Autoreparación o Autorecuperación
Amarillo:	Relación Simbiótica con el Ambiente Biológico
Verde:	Incremento Inhibición de la Circulación o del Balance Osmótico
Azul Marino:	Sensibilidad a las Condiciones Ambientales, y presencia de Humedad Suficiente
Violeta y Lila:	Salud General, Vitalidad, y Homeostasis
Celeste:	Condiciones Ambientales Desfavorables para el Crecimiento
Blanco:	Recepción de Influencia Energética de los Seres Humanos
Dorado:	Características Curativas Inherentes
Rosa:	Presencia de Luz Suficiente para el Metabolismo Celular
Plata:	Campos Electromagnéticos Ejerciendo Influencia, Beneficiosa o Perjudicial

Estas interpretaciones están incorporadas en la función de Análisis de Punto/Objeto del software **RFI** (comprobar que el botón al lado de Hierbas/Botánica está tildado).

Algunos investigadores utilizan el **RFI** específicamente para el análisis de árboles y de plantas, y por lo tanto se han hecho peritos en la evaluación de las condiciones botánicas con la medición del **RFI**. Para saber si hay algún ejemplo específico, por favor, compruebe el sitio Web del investigador **RFI** de ITEM (http://www.item-bioenergy.com/password/updates.html).

4.3.4 Animales y Mascotas

Muchos investigadores han utilizado el **RFI** para leer las Auras de animales y mascotas, incluyendo gatos, perros y caballos. Los animales tienen Auras del Nivel de Salud y del Nivel Emocional/Psicológico tal como los seres humanos, aunque generalmente no le conferimos a los animales las mismas capacidades emocionales o psicologicas que los seres humanos. Puesto que el software **RFI** en este momento no tiene "plantillas" para los diversos animales, usted puede anmarse a crear su propia plantilla del contorno del animal. Dado que el cuerpo de un animal está generalmente en el plano horizontal en oposicón con el plano vertical para los seres humanos o las plantas, la antena debe ser orientada perpendicularmente al piso (la antena en línea recta hacia arriba en el aire) al tomar medicones de frecuencia. Utilice la función de Análisis de Punto/Objeto para obtener los colores y las interpretaciones. Aunque hasta el momento se ha realizado una experimentación limitada, al parecer se le pueden aplicar a los animales las interpretaciones del Nivel de Salud y del Nivel Psicológico con un grado similar de éxito al que se tiene con los seres humanos.

5.0 LAS MEDIDAS DEL RFI Y LAS "INTERFERENCIAS"

5.1 COMPRENDIENDO LAS FLUCTUACIONES DE LAS FRECUENCIAS

Uno de los conceptos que encuentra más resistencia para ser entendido por parte de los investigadores **RFI** de mente científica es el porqué fluctúan las frecuencias detectadas por el contador, y porqué las frecuencias detectadas son representaciones válidas del Aura.

Al realizar las lecturas con el **RFI**, usted mide lo que otros llaman "estática" o "interferencia aleatoria". Lo llaman interferencia aleatoria porque: 1) Para la mayoría de la gente, no tiene la apariencia de una fuente transmisora de ondas EM, y 2) no da la apariencia de ser ningún patrón reconocible de frecuencias. Las ondas pueden superponerse, diferenciarse en forma y amplitud, y cambiar en un cierto período de tiempo. Puesto que, según ingenieros y aficionados, no hay un origen, función o lógica evidente de estas señales, son necesarios los filtros para evitar que este interferencia aleatoria interfiera con las señales discretas y constantes que se intentan medir. Por supuesto, nosotros sabemos el origen de esta interferencia aleatoria – bioenergía – y este es un hecho no del todo aleatorio, sino generado en función **del cambio** en la salud y en los estados psicologicos del sujeto. Y, ciertamente, nosotros no querríamos filtrar aquello que estamos interesados en medir.

5.1.1 Las Fluctuaciones como el Reflejo Natural del Cambio

Todas las cosas vivientes cambian con el paso del tiempo – la única pregunta está en **el grado del cambio**. La mayoría de las cosas vivas cambian a nivel físico y emocional o psicológico. No obstante, el cambio no es solamente una característica de la vida, pues incluso la materia inerte cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, las condiciones geológicas cambian en períodos muy largos del tiempo debido a la presión. El cambio es, por lo tanto, una característica inherente a la materia en sí misma –viva o no – y más fundamentalmente, el cambio es una característica

primaria de la conciencia.

Puesto que toda materia cambia con el paso del tiempo, las emisiones electromágneticas de la materia también cambian. En los seres humanos, los animales y las plantas, los cambios en los niveles físicos y emocionales pueden causar cambios inmediatos en el Aura. Dichos cambios pueden ser tan pequeños que usted puede no notarlos a simple vista, ni observar dichos cambios en el comportamiento de la persona, no obstante, existen y se reflejan en los cambios detectados en la Aura con el **RFI**. Por ejemplo, usted no tiene ninguna idea de todos los cambios que ocurren en las células de su cuerpo cada segundo de su vida, y a pesar de ello están sucediendo. Cada cambio produce una emisión que configura el Aura a cada segundo.

No obstante las células de su cuerpo no cambian de la misma manera, o en los mismos tiempos. Ilustremos esto con un ejemplo, considere tres células etiquetadas como "A," "B," y "C." La célula A es una glóbulo rojo, la célula B es una célula muscular, y la célula C es una neurona motora. Cuando la célula A libera sus moléculas de oxígeno al líquido circundante, dicha liberación (cambio) causa una emisión, por ejemplo, de 100 MHz. Mientras la célula A termina su tarea, otros glóbulos rojos liberan sus moléculas de oxígeno y producen señales de 100 MHz. La célula B (célula muscular) está situada cerca de la célula A, y cuando la célula B se contrae, este cambio causa una emisión, por ejemplo, de 200 MHz. Mientras la célula B se contrae, otras células musculares también se contraen, y producen señales de 200 MHz. La célula C está situada cerca de las células A y B. Cuando la célula C recibe su señal electroquímica de las neuronas motoras precedentes, emite su descarga, causando un liberación de químicos, que causan la contracción de las células musculares. Cuando la célula C emite su descarga, genera una señal, por ejemplo, de 300 MHz. Lo que tenemos aquí son reacciones bioquímicas complejas en las cuales cada parte de la reacción genera su propia señal única. Las señales combinadas que resultan son complejas y varían en el transcurso del tiempo. Si las células A, B y C generaran sus señales en el mismo momento, entonces tendríamos como resultado un patrón complejo de frecuencia predecible. No obstante las señales se generan en momentos levemente

diferentes, lo que hace que el patrón de frecuencia "combinado" resulte mucho más difícil de predecir.

En este ejemplo, la célula A (100 MHz), la célula B (200 MHz) y la célula C (300 MHz) emiten sus frecuencias "distintivas", es decir, emiten la energía asociada con la realización de las funciones previstas para lograr el equilibrio o la homeostasis (es decir, un grado saludable). Sin embargo, si las células A, B y C se enfrentan de alguna manera con un obstáculo que evita que realicen sus tareas rutinarias, entonces será necesaria más energía para terminar la tarea, y puede que emitan frecuencias diferentes a sus frecuencias distintivas. En este caso, los patrones combinados de frecuencia resultantes pueden llegar a ser aún más complejos.

Cuando usted coloca la antena cerca de una parte del cuerpo (Nivel de Salud), usted está recibiendo literalmente señales de millones de células y de componentes celulares, grupos que emiten sus propias frecuencias distintivas, y algunos de las cuales pueden emitir ondas EM más altas o más bajas de lo "normal." En el Nivel Psicológico, hay millones de estímulos ambientales diversos (formas del pensamiento, bioenergías, ondas EM artificiales creadas por el hombre, etc.) que actúan sobre el lado izquierdo invocando el cambio, y esto es procesado y proyectado por el derecho – cada segundo. Tenga esto presente al mirar la frecuencia exhibida en el contador fluctuando literalmente cada segundo. El número que usted ve en cualquier momento (en términos de energía del campo eléctrico) es la señal combinada más fuerte recibida por la antena y el circuito del contador en ese momento. El cambio tan comentado por el cual las frecuencias fluctúan es un fenómeno natural, y como tal es más constructivo reconocerlo y apreciarlo que desalentarse por este fenómeno.

Las mismas fluctuaciones se observan en todos los equipos diseñados para medir procesos y actividades corporales (tal como el EEG). Con el debido entrenamiento, todos los usuarios de tales equipos reconocen la utilidad de bs patrones que existen dentro de esas fluctuaciones. Puede considerarse afortunado de que nosotros ya hayamos identificado el patrón útil para usted


– la tercera frecuencia detectada (utilizando el tercer ajuste de velocidad de barrera (con el botón "Gate") es la frecuencia que recomendamos que usted utilice para las lecturas con el **RFI**, según lo planteado en la Sección 3.0. La tercera frecuencia es, en la mayoría de las lecturas, la frecuencia media que sería detectada en el área si usted sostuviera la antena en el lugar por un período de tiempo más largo. Es útil identificar las fluctuaciones, pero no las sobreanalice – son el producto natural del cambio. Usted puede, si lo desea, no hacer caso de las fluctuaciones, presionando el botón de Pausa del contador en la tercera frecuencia, y estar seguro de que ha seleccionado la frecuencia y el color que caracteriza lo mejor posible esa región en su conjunto.

5.1.2 "Estabilidad" Contra "Inestabilidad"

Esta sección se ha desarrollado para aquellos investigadores que desean entender más sobre lo que significan las fluctuaciones de la frecuencia en un sentido práctico. Los cambios en la Aura se pueden caracterizar por dos términos relativos – "estabilidad" y "inestabilidad". La estabilidad significa que los cambios, o las fluctuaciones, ocurren dentro de un rango relativamente pequeño. Por ejemplo, consideremos las 10 medidas siguientes que fueron obtenidas usando el contador de frecuencia en el tercer ajuste de la velocidad de barrera (una exhibición de la frecuencia aproximadamente cada cuatro segundos):

Medición	Frecuencia (MHz)
1	332
2	298
3	315
4	311
5	289
6	300
7	322
8	335
9	328
10	317

La frecuencia promedio en esta serie de datos es de 315 MHz. El rango es de 44 MHz (la medición más alta de 335 MHz menos la medida más baja 289). La desviación estándar de esta la serie de datos, un término estadístico que describe variabilidad, es de 15 MHz. En este caso, podemos determinar que este Aura es relativamente estable. Estabilidad significa, esencialmente, que las señales detectadas por el contador de frecuencia no cambian perceptiblemente en un cierto período de tiempo. En tanto que existen cambios definidos, los cambios son relativamente sutiles, como en la figura de la página siguiente. Si estas mediciones decimos que fueron realizadas en el Nivel de Salud, puede decirse que la región está en condiciones relativamente estables, es decir, que no hay cambios significativos que tengan lugar en el momento de la

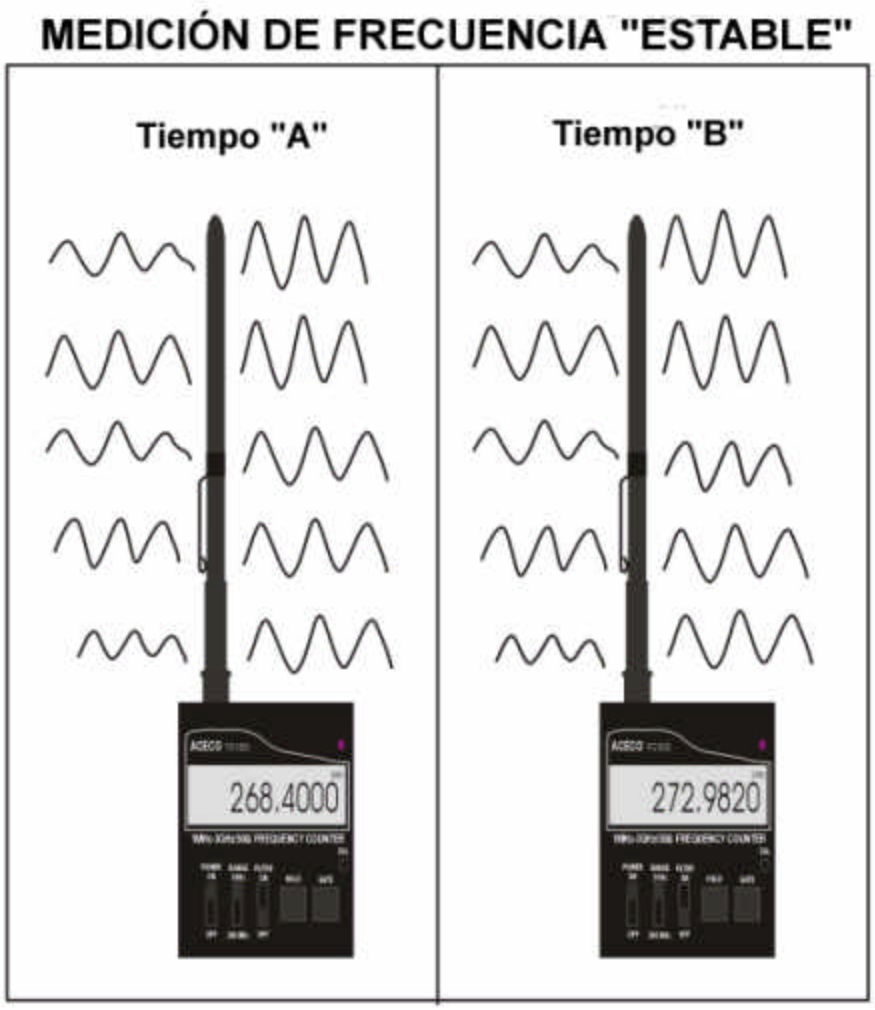

lectura.

Si las mediciones hubiesen sido tomadas en el Nivel Psicológico, entonces la interpretación dependerá del lado del cuerpo donde se haya realizado la medición. Si las mediciones fueron hechas del lado izquierdo, puede decirse que las energías en el ambiente de la persona son relativamente estables; si fueron hechas del lado derecho, diríamos que las energías proyectadas por la persona son relativamente estables.

Fíjese que en la figura de arriba, hay una diferencia muy sutil entre las ondas mostradas en el Tiempo "A" y en el Tiempo "B", pero esta diferencia se registra como una fluctuación en la frecuencia entre el tiempo "A" y el tiempo "B." La frecuencia promedio para esta serie de datos es de 315 MHz y la desviación estándar es de 15 MHz. El coeficiente de variación (CV), otra medida estadística para la variabilidad, es de 0.05 (desviación estándar dividida por el promedio).


En general, un conjunto de datos de frecuencia con un CV de 0.1 o de menos se puede considerar un sistema de frecuencias estable.

Ahora, digamos que tomamos otras diez medidas, con los siguientes resultados:


Medición	Frecuencia (MHz)
1	217
2	155
3	267
4	290
5	214
6	288
7	305
8	254
9	321
10	290

La frecuencia promedio en este conjunto de datos es de 260 MHz. El rango es de 166 MHz (la medida más alta de 321 MHz menos la medida más baja 155). La desviación estándar del

conjunto de datos es de 51 MHz. El CV es por lo tanto 51/260 = 0.2. En este caso, podemos determinar que este Aura es relativamente inestable. Según lo que se muestra en la figura de la siguiente página, hay cambios significativos en la naturaleza de las ondas EM de un momento al siguiente, lo cual es indicativo de cambios muy pronunciados en la fisiología o la psicología del sujeto.

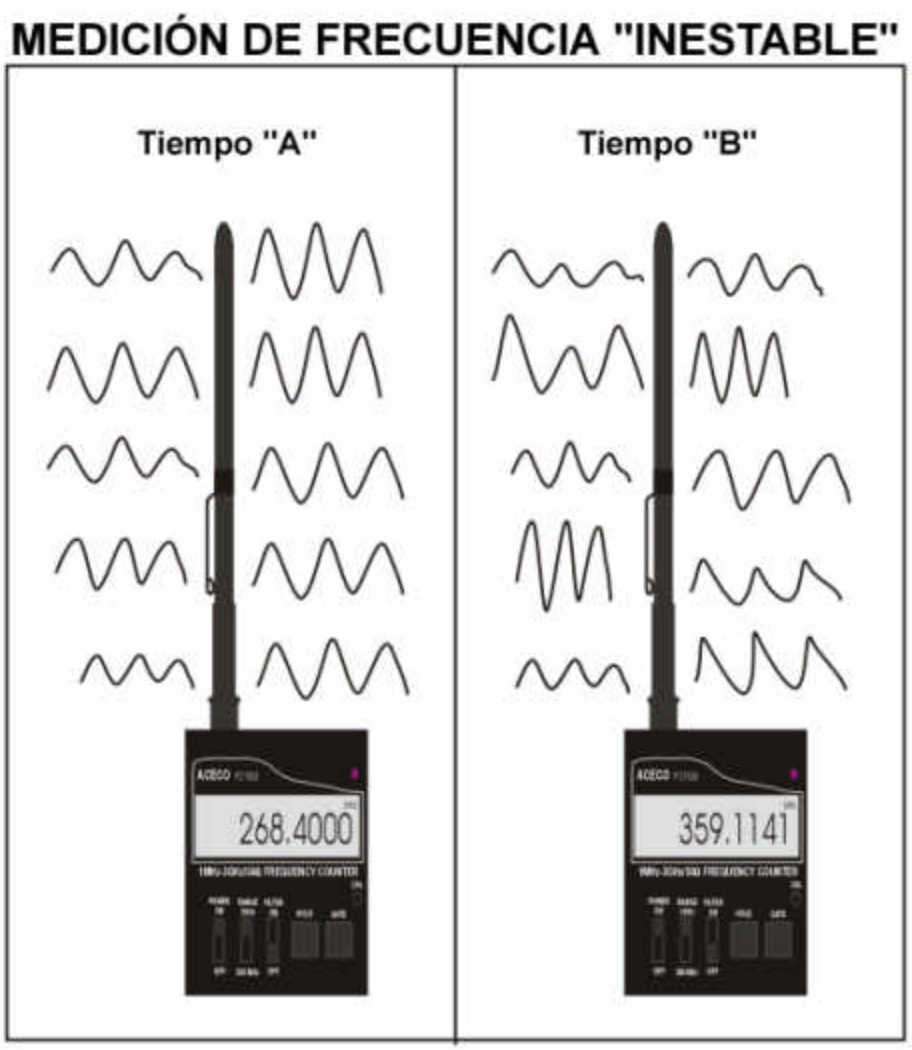

El propósito de esta sección era clarificar las diferencias entre las mediciones de frecuencia estables e inestables tomadas en un período de tiempo, y mostrar que todas las fluctuaciones que usted observa son debidas a los cambios en el Aura (a excepción de la situación inusual en donde esté presente una interferencia perceptible). No hay generalmente una razón para que usted necesite examinar este fenómeno durante las lecturas con el **RFI**, puesto que el botón de Pausa se debe utilizar para bloquear la exhibición en la tercera frecuencia. Sin embargo, usted puede, si lo desea, presionar el botón de Pausa otra vez luego de registrar la tercera frecuencia para observar la magnitud relativa de las fluctuaciones, lo cual puede proporcionar una fuente adicional de información para su interpretación. Por ejemplo, si usted determina que una región del Aura en el Nivel Psicológico del lado izquierdo es de color verde y hay poca fluctuación en las frecuencias, usted podría decir, "usted está recibiendo energías emocionales fuertes de alguien, o de un grupo de personas, o de algo en su ambiente, y esta energía es relativamente estable – hay pocas probabilidades de que esta energía se aparte de usted."

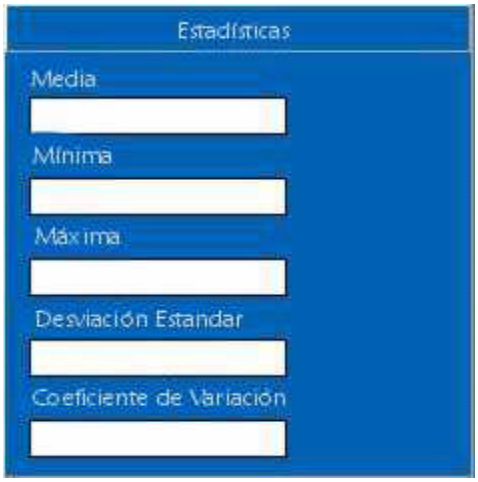

ITEM ha incorporado una función estadística que corre en la versión 3.0 del programa de software **RFI**. Estas funciones se pueden ver en la etiqueta de Frecuencia del programa. La Media (promedio), la Mínima, la Máxima, la Desviación Estándar, y el Coeficiente de Variación (CV) son exhibidos a medida que usted continúa incorporando datos de frecuencia en el programa. Esta información es útil para un propósito primario – para documentar la estabilidad o la inestabilidad relativa de las mediciones durante una lectura particular, y evaluar tendencias en un cierto período de tiempo. Por ejemplo, digamos que usted tiene tres sesiones planeadas con el **RFI** para un cliente. La primera sesión revela una frecuencia Media de 350 MHz, una Desviación Estándar de 100 MHz, y un CV de 0.2. La segunda sesión muestra una frecuencia Media de 400 MHz, una Desviación Estándar de 50 MHz, y un CV de 0.1. Durante la

sesión final, usted observa una frecuencia Media de 450 MHz, una Desviación Estándar de 25 MHz, y un CV de 0.05. Su conclusión de esta tendencia podría ser que el Aura de la persona está llegando a ser en ese cierto período de tiempo, quizás más estable debido a su terapia o tratamiento.

5.2 COMPRENDIENDO LAS "INTERFERENCIAS"

Ahora que tenemos una comprensión de las fluctuaciones y de la estabilidad de la frecuencia contra su inestabilidad, el resto de esta sección estará dedicado a examinar cómo podemos medir con confianza frecuencias del Aura en medio de señales externas que puedan estar presentes en el ambiente.

Según lo mencionado previamente, las Auras están cambiando continuamente debido a las reacciones fisiológicas y psicológicas causadas por los acontecimientos internos y estímulos ambientales externos. Por ejemplo, si un vecino pone la radio muy fuerte durante su meditación, usted puede enojarse. Su respuesta emocional interna causa un cambio inmediato en la naturaleza de las frecuencias que usted proyecta, el cual será detectado por el **RFI**. Éste es un ejemplo de una reacción interna a un estímulo ambiental que es fácilmente perceptible, es decir, música ruidosa. ¿Qué se puede decir acerca de los sobrestímulos ambientales que no son perceptibles por sus cinco sentidos? La misma clase de reacciones internas pueden ocurrir y ocurren, aunque usted no sea generalmente consciente de sus reacciones. En general, interferencia es cualquier clase de estímulo electromágnetico que no se puede percibir comunmente usando sus cinco sentidos, pero no obstante puede tener un impacto en la naturaleza de su Aura.

Vivimos en un mundo donde las señales están omnipresentes en nuestro ambiente. No podemos estar dondequiera sin el bombardeo de señales tales como ondas de radio, banda de frecuencia de celulares, y muchas otras, incluyendo ondas atmosféricas naturales. Además de esto,

existimos entre una nube sin fin de formas de pensamiento y bioenergías de los organismos vivientes, que tienen un impacto definido en nuestros propios pensamientos, opiniones, en nuestras Auras, y lo más importante, en nuestras mediciones del Aura. Todas estas se pueden considerar "interferencias".

Pregunta #1: ¿En qué medida la interferencia afecta al Aura?

Respuesta: En armonía con el modelo teórico del Aura presentado en la Sección 2.2.2, las señales externas afectan en forma directa solamente el Lado Izquierdo del Nivel Psicológico del Aura. El Nivel Psicologico del Lado Derecho, el sistema de los Chakras, y el Nivel de Salud pueden ser afectados por las señales externas, pero solamente de forma indirecta, en función de cómo "se filtren" las señales a través del Nivel Psicológico del Lado Izquierdo y de cómo se procesen internamente. Sin embargo, si un organismo no posee un Nivel Psicológico del Aura (formas de vida inferior), entonces las señales externas pueden afectar directamente el Nivel de Salud.

La interferencia puede ser fuente de cambio en el Aura, como se ha observado con las fluctuaciones de frecuencia. En otras palabras, si usted encuentra "inestable" al Aura que está leyendo, entonces es posible y quizás muy probable que las señales externas se asuman como la fuente de este cambio – aunque usted generalmente no está detectando la interferencia en sí misma con el contador de frecuencia.

Por ejemplo, considere a la persona que recibe una masa negativa de energía (es decir, un tipo de interferencia) de las personas de su ambiente, como fue planteado en la Sección 2.2.2. Si la persona feliz se ve afectada por la interferencia a través de cambios en el Nivel Psicológico del Lado Izquierdo del Aura, estos cambios pueden afectar otros niveles del Aura. Si tal cambio ocurre debido a interferencia, las fluctuaciones de frecuencia llegarán a ser probablemente más pronunciadas en todos los niveles del Aura. Sin embargo, tales fluctuaciones no son

necesariamente un indicador de que la interferencia está afectando a la persona, pues la fisiología o la psicología de la persona puede reaccionar a acontecimientos internos (es decir, a los pensamientos), antes que a señales externas.

Pregunta #2: ¿En qué medida la interferencia afecta a las mediciones **RFI** del Aura con el contador de frecuencia?

Respuesta: El grado en el cual las señales externas interfieren con la Aura depende de la potencia y de la frecuencia de esas señales. Señales fuertes – en términos de la energía del campo eléctrico – que están en el rango de frecuencia de los MHz y dentro del rango de la energía del campo eléctrico del contador de frecuencia pueden afectar sus lecturas en cualquier parte del Aura. La mayoría de las interferencias, sin embargo, son demasiado fuertes, demasiado débiles, o están fuera del rango de frecuencia del contador, y no afectan su capacidad de detectar frecuencias del Aura. Si usted observa las frecuencias que fluctúan rápidamente, característica de un Aura "inestable", no puede asumir directamente que está midiendo señales de interferencia – la inestabilidad en la Aura puede ser causada en cierta medida por la interferencia, pero usted generalmente no está midiendo la interferencia en sí misma.

En la mayoría de los casos, usted sabrá cuándo encuentre una interferencia, porque 1) la exhibición de la frecuencia generalmente "se fijará" en una frecuencia particularmente fuerte, y 2) el gráfico de barras de la potencia de la señal del RFI se activará (según lo planteado en la Sección 3.0).

Para los propósitos de este cuestión, podemos separar interferencia en dos categorías – interferencia ambiental e interferencia industrial de alta potencia – dependiendo de la densidad de la potencia y de la energía del campo eléctrico de las señales, según lo planteado más abajo.

5.2.1 **Interferencia Ambiental**

Interferencia ambiental puede ser cualquier cosa, desde los pensamientos de otros, los campos bioenergéticos de otros, las ondas de radio débiles que atraviesan el aire, las ondas naturales atmosféricas y solares, la radiación geomagnética, y hasta cualquier cosa que está generalmente fuera de la percepción humana.

Reaccionamos a todas estas energías, consciente o inconcientemente, cada segundo de nuestras vidas. Los organismos vivos son procesadores y transformadores de energía. La energía ingresa al organismo, reacciona con él y es utilizada, procesada y transformada, y luego sale, ya sea que se trate de energía material (alimento, agua, etc.) o de energía no física (luz del sol, ondas de radio, etc.).

No hay manera – y ninguna razón – para separar el Aura de la interferencia ambiental durante las sesiones del **RFI**. Sería imposible construir un filtro que quitara todas estas diversas fuentes de señales externas – y francamente, nosotros no lo desearíamos, puesto que la interferencia ambiental es una parte natural del ambiente vivo, y sus mediciones del Aura no serían objetivas sin ella. Sin embargo, sólo porque la interferencia ambiental está alrededor de nosotros y puede afectar a la persona y al Aura que usted está midiendo, no significa que tal interferencia reduzca su capacidad de recoger mediciones exactas del Aura. Esto es así porque las ondas de interferencia normalmente están fuera del rango del contador de la frecuencia – cuando no lo estan, y pueden ser medidas por el contador de frecuencia, usted sabrá cuándo ha encontrado una señal que interfiera con sus medidas **RFI** ya que se activa el indicador gráfico de barras de la potencia de la señal del contador de frecuencia.

Ondas De radio

Las ondas de radio existen a todo lo largo del espectro de frecuencias que el contador de frecuencia FC1003 puede medir teóricamente (1 MHz a 3 GHz). Sin embargo, generalmente hay solamente dos tipos de ondas de radio que nos conciernen – las ondas de frecuencia modulada (FM) y a las frecuencias locales tales como las usadas por la policía y los servicios de emergencia locales. Estas ondas pueden tener frecuencias dondequiera en el radio de acción de 80 MHz a 900 MHz, dependiendo de las regulaciones federales y locales. La potencia de la estación que transmite para FM y para frecuencias locales es típicamente de 100 W. Si se asume que la antena que transmite es isotrópica (es decir, que transmite en todas direcciones), la energía del campo eléctrico a cualquier distancia desde el transmisor se puede estimar por la ecuación:

$$E\ (V/m) = (\text{Potencia de Transmisión } 30 \times (w))^{1/2} \ / \ \text{Distancia de la Fuente (m)}$$

Esta ecuación calcula la pérdida teórica de potencia que ocurre en el espacio libre como resultado de la propagación de la onda. Asumamos que hay una estación o torre de transmisión local en su área, y usted está realizando una lectura con el **RFI** al aire libre a una distancia de 1.000 m del transmisor de 100 W. La energía del campo eléctrico teórica que alcanzaría a la antena de su contador de frecuencia es:

$$E\ (V/m) = (30 \times 100\ W)^{1/2} \ / \ 1.000\ m = 0.055\ V/m \text{ o } 55\ mV/m$$

Pregunta: ¿Una onda de radio típica transmitida en 100 MHz desde una estación afectará sus mediciones de frecuencia si usted se encuentra a una distancia de 1.000 m del radiotransmisor?

Primero de todo es importante mencionar que la energía del campo eléctrico de la onda de radio será mucho menor a 55 mV/m porque la ecuación considera solamente las pérdidas en el "espacio libre". Otras pérdidas ocurren naturalmente cuando se encuentran obstáculos, por ejemplo en el terreno (presencia de colinas, montañas, árboles, etc.), los hogares y los edificios, y la potencia real del campo eléctrico puede ser menos del 1% de aquella predicha por la ecuación

arriba. Sin embargo, para los propósitos de este ejemplo nosotros asumimos que no hay otras pérdidas y que la energía del campo eléctrico es de 55 mV/m.

El contador de frecuencia se verá afectado solamente por la interferencia si tales señales que interfieren están presentes dentro del rango de frecuencias y de potencias del campo eléctrico que el contador puede detectar. Puesto que 100 MHz están dentro del rango del contador de frecuencia, *detectará la onda de radio si la energía del campo eléctrico está dentro del rango del contador*.

¿Cuál es el rango de energía del campo eléctrico del contador de frecuencia? Según lo discutido en la Sección 3.0, **la máxima potencia de entrada de las ondas que el contador de frecuencia puede detectar es de 15 dBm o 32 mW**. Podemos determinar la potencia máxima del campo eléctrico que el contador puede detectar cuando la onda de radio es de 100 MHz usando los pasos siguientes:

1) Primero, necesitamos calcular el área operativa de la antena del contador de frecuencia (es decir, el área espacial en la que una antena será capaz de detectar frecuencias, lo cual depende de la frecuencia recibida). La ecuación siguiente se utiliza para determinar el área operativa de una antena:

Área Operativa de la Antena (m2) = Ganancia de la Antena x (longitud de onda) ^{2} / (4 x π)

Donde: Ganancia de la Antena = 1.64 para una antena receptora de dipolo fino;
Longitud de onda = (Velocidad de la Luz (3 x 10^{8} m/s) / Frequencia MHz / 10^{6} (en metros)); y
Frecuencia = onda de radio de 100 MHz.

Área Operativa de la Antena = 1.64 x (3 m) ^{2} / (4 x π) = **11.6 m** ^{2}

2) En segundo lugar, necesitamos calcular la densidad de potencia de una onda EM que corresponda a una potencia máxima de entrada de 32 mW, de la siguiente manera:

Densidad de Potencia (W/m^{2}) = Potencia Máxima de Entrada (W) / Area Operativa de la Antena (m^{2})

Densidad de Potencia = 0.032 / 11.6 m ^{2} = **0.00276 W/m** ^{2}

3) Tercero, necesitamos convertir la densidad de potencia en energía del campo eléctrico mediante la siguiente ecuación:

Energía del campo Eléctrico (V/m) = (Densidad de Potencia (W/ m^{2}) x 120 x π (pi – 3.14159)) $^{1/2}$

Energía del campo Eléctrico = (0.00276 W/m ^{2} x 120 x 3.14159) $^{1/2}$ = **1.02 V/m**

Este valor – 1.02 V/m – es la energía del campo eléctrico máxima estimada que el contador de frecuencia detectará cuando la frecuencia de recepción sea de 100 MHz. El contador no detectará las ondas EM que excedan esta especificación.

Para estimar la energía del campo eléctrico mínima que el contador de frecuencia puede detectar, podemos utilizar la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, que en 100 MHz es < 0.8 mV (véase la Sección 3.0). Esto puede significar que una onda EM con una energía del campo eléctrico mínima de 0.8 mV/m será detectada por el contador de frecuencia en 100 MHz. Las ondas de radio en 100 MHz que sean menores a dicha energía del campo eléctrico no serán

detectadas por el contador de frecuencia (aunque por supuesto tales ondas pueden potencialmente afectar el Aura y causar fluctuaciones).

Por lo tanto, una estación de transmisión de radio localizada a 1.000 m de usted podría potencialmente interferir con sus mediciones **RFI**, puesto que los 55 mV/m estimados están en el rango perceptible del contador de frecuencia en 100 MHz (es decir, > 0.8 mV/m y < 1.02 V/m).

Para evaluar la presencia de señales que interfieren, usted, como Investigador RFI, necesita prestar atención al gráfico de barras de la fuerza de la señal y a la frecuencia detectada. Si el gráfico de barras de la fuerza de la señal se activa (según lo demostrado en la figura de abajo) o si la frecuencia parece "fijarse" en una o algunas frecuencias, entonces hay una señal que interfiere y usted probablemente no podrá realizar sus mediciones **RFI** en ese lugar (a menos que usted pudiese escudarse de la interferencia). Si el gráfico de barras de la fuerza de la señal se activa, coloque el Filtro en la posición ON y observe el gráfico de barras – si el gráfico de barras permanece activo, la señal que interfiere se ha confirmado.

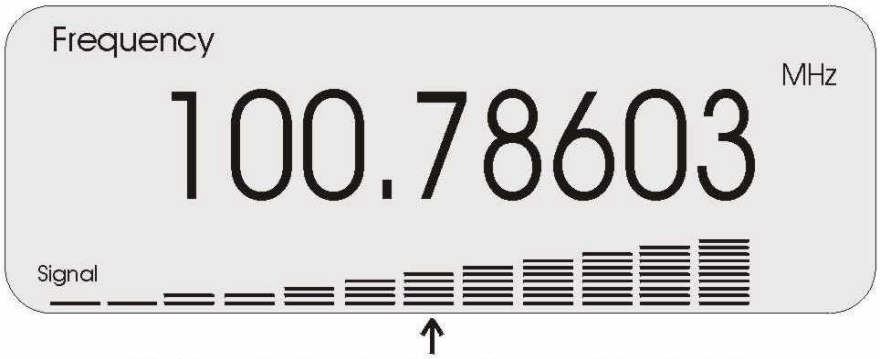


Gráfico de Barras de la Fuerza de la Señal

La respuesta más leve del gráfico de barras puede indicar interferencia. Por lo tanto, usted deberá prestar mucha atención al gráfico de barras al tomar las lecturas, pero especialmente cuando usted se mueve en un ambiente nuevo para tomar sus mediciones. En la mayoría de los casos, usted no observará una respuesta en el gráfico de barras. Sin embargo, debe, según lo planteado

en la Sección 3.0, colocar siempre el Filtro en la posición ON y comprobar si recibe alguna señal y si hay alguna respuesta en el gráfico de barras antes de realizar cualquier lectura con el **RFI**. Si la pantalla de frecuencias muestra "0.0000" y no hay respuesta en el gráfico de barras, entonces proceda con sus mediciones. Si no, entonces usted necesitará trasladarse a otro lugar para realizar las mediciones o puede proteger la antena del contador de frecuencia de la fuente de interferencia. Usted puede protegerse de los campos eléctricos de prácticamente cualquier onda EM en el rango de detección del contador de frecuencia usando una barrera de plástico o de metal. Esto no sería práctico si está midiendo el Aura de una persona, pero si usted está al aire libre y midiendo las bioenergías de plantas o de árboles y encuentra interferencia, puede eliminarla generalmente colocando un pedazo de plástico o de metal detrás de la antena mientras realiza sus mediciones.

Hay generalmente más chances de encontrar interferencia de ondas de radio al realizar lecturas **RFI** al aire libre que cuando usted está en un lugar cerrado. Las paredes de los edificios y la presencia de árboles y de arbustos tienen un efecto significativo de absorción de la fuerza de las ondas de radio dentro de los edificios. Cuando usted pasa a través de un túnel al conducir su coche, muchas estaciones de radio llegan a hacerse "borrosas" o inaudibles. Esto es así porque las ondas de radio no pueden pasar eficazmente a través del material del túnel (concreto u otros materiales pesados) con la fuerza suficiente como para que pueda ser captada por el receptor de radio de su coche. Los receptores de radio tienen generalmente una sensibilidad de 0.001 a 0.02 mV, la cual es mucho más sensible que el receptor en el contador de frecuencia FC1003. Por esta razón, es posible que usted pueda escuchar una estación de radio mientras mide frecuencias del Aura sin observar ninguna interferencia, puesto que en casi todos los casos la fuerza de las ondas de radio estarán muy por debajo de la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, aunque sí dentro del rango del receptor de radio. (Sin embargo, tenga en cuenta que nosotros recomendamos reducir el número de dispositivos y aparatos eléctricos en uso durante las lecturas **RFI**, solamente como medida preventiva).

Ondas De Televisión

La mayoría de los televisores en uso actualmente reciben señales directamente de un cable o de un abastecedor digital de televisión a través de los cables. Las antenas de televisión raramente se utilizan en la actualidad para recibir señales de televisión. Sin embargo, las ondas de televisión siguen siendo frecuentes en el aire, incluso si su aparato de TV no las está utilizando. Aunque las ondas de TV coexisten dentro del mismo rango general de las ondas de radio, su fuerza usualmente está por debajo de la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, y por lo tanto no nos deberían preocupar. Las fugas de las líneas de televisión por cable cerca o dentro de su hogar pueden producir señales en la gama de los MHz, pero éstas son también demasiado débiles, en general, para que el contador de frecuencia las detecte. Los aparatos de TV (y los monitores de computadora) emiten rayos X a través del tubo catódico que utilizan para crear una imagen en una pantalla, y estas ondas pueden entrar en el aire circundante. Sin embargo, las frecuencias de estas ondas son mucho más altas que la frecuencia máxima que el contador de frecuencia puede detectar y es, por lo tanto, de poco interés práctico (aunque, según lo indicado previamente, recomendamos no usar dispositivos eléctricos salvo que sea absolutamente necesario).

Radiación Natural de Fondo

La radiación electromágnetica en la gama ultravioleta, microonda, onda de radio, y de frecuencia ultra baja del espectro EM estará en el espacio general de sus lecturas **RFI**, sin importar si usted está en un lugar cerrado o al aire libre. Esta radiación es generada sobre todo por condiciones cósmicas, solares, sísmicas, geológicas, atmosféricas, y biológicas. La radiación natural de fondo nunca es interferencia porque es la condición en la cual vivimos, y es una parte natural de la

interacción electromágnetica entre un organismo vivo y su ambiente. Si usted aparta a un organismo vivo del ambiente en el cual se ha tornado "electromagnéticamente aclimatado", encontrará que el Aura de dicho organismo cambia, a veces perceptiblemente.

Hay proposiciones importantes e interesantes para hacer sobre la radiación EM de fondo:

1) Hay una radiación EM natural de fondo en todos los ambientes que varía dependiendo de la localización geográfica. Usted no puede estar en cualquier lugar de la tierra y no detectar frecuencias con el contador de frecuencia. Dependiendo de su localización en el mundo, las frecuencias naturales de fondo podrían ser tan bajas como 1 MHz o quizás tan altas como 1 GHz. Hay tantas variables que explican la radiación de fondo que se podría escribir un libro entero sobre el tema. Sin embargo, hemos notado que las frecuencias EM de fondo tienden a ser más altas y menos estables en esas áreas que son 1) de altitudes elevadas, 2) cercanas o en ciudades o áreas industrializadas, 3) cercanas a actividad sísmica incrementada, tales como líneas cercanas a fallas geológicas, y 4) latitudes medias. Frecuencias más bajas, más estables de fondo se observan generalmente en 1) altitudes más bajas, 2) a grandes distancias lejos de ciudades o de áreas industrializadas, 3) zonas sísmicas estables, 4) cerca del ecuador y de los polos norte y sur, 5) cercanas a los océanos, y 6) cerca de "vórtices de energía" o "nodos," los cuales tienen lugar en todas partes del mundo y se piensa que son transformadores naturales de energía. En los Estados Unidos, hay nodos planetarios en la costa de la Florida, cerca de Arizona y de la costa oeste, y cerca de Great Lakes, así como hay otros. *Si usted detecta una lectura de "0", lo cual es posible, esta es una fuerte indicación de que está cerca de uno de estos nodos*. Medidas de "0" han sido reportadas por los usuarios del **RFI** en California y Florida, en los E.E.U.U., y en la costa de China y de otros países asiáticos. La presencia o la ausencia de fuertes vientos puede también influenciar en la detección de frecuencias de fondo.

2) Si usted vive en una nación industrializada, hay una gran posibilidad de que las frecuencias naturales de fondo hayan sido influenciadas o alteradas (de forma permanentemente) por las ondas de radio industriales y las microondas. La investigación realizada cerca del polo sur (antártida), que está prácticamente libre de interferencia industrial, ha demostrado que hay diferencias significativas en las frecuencias EM naturales de fondo entre áreas no industrializadas y, por ejemplo, la Ciudad de Nueva York. En áreas industrializadas, las frecuencias de radio y de microondas a menudo modifican e interfieren constructiva y destructivamente con las frecuencias de fondo.

3) Si usted fuera a montañas alejadas, a kilómetros de la torre de radio más cercana, la fuente principal de frecuencias naturales de fondo sería generalmente de bioenergías emitidas por los árboles. Si usted fuera al desierto, la fuente primaria de las frecuencias de fondo sería probablemente atmosférica y geológica, suponiendo que estas fuentes tienen energías del campo eléctrico bajas.

4) La energía del campo eléctrico de la atmósfera inferior se extiende generalmente entre los 100 V/m a 30.000 V/m, dependiendo del nivel de actividad de las tormentas en el área. Las ondas de radio atmosféricas están por lo tanto, en la mayoría de los casos, muy por encima del rango de la energía del campo eléctrico del contador de frecuencia.

5) Si usted no está apuntando la antena al Aura de un organismo vivo, entonces las frecuencias detectadas por el contador serán un compuesto natural de fondo y de cualquier señal que interfiera. No hay "espacio" vacío de ondas EM en el rango que el contador de frecuencia puede detectar, así que usted podrá siempre detectar una cierta señal compuesta (excepto quizás en el caso que usted esté cerca de uno de los nodos mencionados arriba, en los cuales la lectura puede ser de cero en base a la teoría de que no hay ondas EM cerca de tales nodos). Si hay energías "metafísicas" presentes en el espacio donde se sitúa la antena, y si estas energías son más fuertes que las frecuencias

de fondo y no exceden el rango del contador, usted detectará dichas frecuencias asociadas a la fuente metafísica. A menudo puede observarse un "salto" brusco de las frecuencias en presencia de tales energías metafísicas.

6) Si, durante el curso de sus mediciones de frecuencia, nota que las frecuencias de fondo en el espacio aereo del ambiente del cuarto parecen ser iguales que las frecuencias detectadas en la Aura de su cliente, no se desaliente, pues hay un gran número de explicaciones posibles. Por ejemplo: 1) la antena puede necesitar "ser despejada" del exceso de carga frotando un paño del algodón a lo largo e ella; 2) una fuente de interferencia puede estar presente en el cuarto, la cual debe procurar identificar y eliminar o, si la fuente no está en el cuarto, usted debe considerar cambiar de lugar para realizar su lectura **RFI**; 3) la radiación natural de fondo es más fuerte que el Aura de su cliente o algo en el ambiente está generando ondas electromagnéticas que son más fuertes que el Aura del sujeto (lo cual no es muy frecuente); 4) las frecuencias de su propia Aura, especialmente las que se proyectan desde la mano derecha, pueden influenciar las frecuencias detectadas; o 5) la Aura del sujeto es más fuerte que las frecuencias naturales de fondo y "colorea" el área con sus propias energías.

7) Cuando usted mueve la antena desde el espacio del ambiente al Aura del sujeto, por lo general no habrá un aumento o una disminución dramática de las frecuencias detectadas. En otras palabras, no espere que una vez que acerque la antena al cuerpo del sujeto las lecturas varíen sustancialmente de las frecuencias naturales de fondo. Por ejemplo, si no se detecta ninguna interferencia (es decir, ninguna respuesta del gráfico de barras de la fuerza de la señal), usted puede observar frecuencias en el rango de los 300 – 350 MHz en el espacio del ambiente; luego, cuando usted mueve la antena al Aura del sujeto, las frecuencias generalmente no saltarán, por ejemplo, a 500 – 550 MHz (aunque no es imposible). Esto es porque el Aura, particularmente el Nivel Psicologico del lado izquierdo, está influenciado por y puede resonar con frecuencias naturales de fondo, y viceversa.

Usted puede notar que las fluctuaciones de la frecuencia se hacen más o menos pronunciadas en la Aura comparadas a las del espacio del ambiente, lo cual es una función indirecta de la respuesta de la persona a las frecuencias naturales de fondo. Es más importante examinar diferencias y semejanzas en fluctuaciones de la frecuencia, y en colores, entre un Aura y un fondo natural que la gama de las frecuencias detectadas.

8) Ningunas de las frecuencias que usted mide en el espacio aereo del ambiente (o en la Aura de un organismo vivo) es arbitraria. Todas las frecuencias detectadas tienen cierto significado. El desafío es entender las causas de estas frecuencias, que generalmente requiere investigación, experimentación y paciencia.

Bioenergías de Otros Organismos Vivos

Las Bioenergías de otros organismos vivos definitivamente pueden tener un efecto en el Aura del sujeto, y pueden ser una fuente de interferencia en las mediciones con el **RFI**; de hecho, las bioenergías son generalmente la causa más importante de interferencia durante las lecturas con el **RFI**. Hemos discutido ya cómo usted, como investigador, puede reducir el impacto de su propia Aura en las mediciones con el **RFI** utilizando una chaqueta de laboratorio 100% de algodón y quizás incluso utilizando guantes 100% de algodón. Si usted está realizando lecturas **RFI** en un lugar con mucha gente, como una feria de salud, debe ser conciente de que las ondas bioenergéticas serán predominantes en toda la atmósfera, y podrían afectar directamente el lado izquierdo del Nivel Psicologico o afectar indirectamente el resto del Aura de su cliente. Lo mismo se aplica a los contextos clínicos, si cualquier persona además de usted y de su cliente están presentes en el cuarto. La pregunta que aparece es, "¿estoy interesado en evaluar el Aura del sujeto con o sin las posibles influencias de otros organismos vivos?". Por un lado, cuando su cliente no está midiendo su Aura, está interactuando constantemente con la gente y con otros organismos vivos; por otra parte, sin la presencia de la gente cerca, usted puede obtener una

descripción más exacta de la naturaleza "verdadera" de la persona, sin tales influencias. La pregunta es filosófica y puede ser contestada solamente por usted, el investigador.

El punto más importante a recordar sobre la presencia de bioenergía de otros organismos vivos es que pueden influenciar el Aura de la persona que usted está intentando medir, pero no interferirán con las mediciones del contador de frecuencia cuando usted está dentro de los "límites" del Aura de su cliente – a menos que se detecten sus propias bioenergías. Es decir cuando usted coloca la antena entre 0 y 18 pulgadas (0 y 45 cm) del cuerpo del sujeto, las frecuencias detectadas serán una medida verdadera del Aura del sujeto en cualquier momento particular, pero no de las bioenergías de otros organismos vivos; la única excepción posible es cuando sus propias bioenergías, las de la persona que está realizando las mediciones, alcanzan la antena del contador antes que las bioenergías del sujeto (lo cual puede ser prácticamente eliminado usando la chaqueta de laboratorio de algodón y, en caso de necesidad, los guantes de algodón).

5.2.2 **Interferencias Industriales de Alta Potencia**

Interferencia industrial de alta potencia es un término que se utiliza aquí para describir las ondas EM artificiales fuertes que resultan de usos tecnológicos, incluyendo aplicaciones eléctricas, líneas de energía, hornos de microondas, frecuencias de teléfono celular, y ondas potentes de radio cerca de una estación transmisora.

Aparatos Eléctricos

Según lo planteado arriba, la sensibilidad máxima de entrada del contador de frecuencia es de 15 el dBm o 32 mW. El contador no detectará las ondas EM que excedan esta especificación.

Consideremos un aparato eléctrico hogareño común – un televisor color. Una pantalla de TV emitirá ondas EM con una energía típica del campo eléctrico de 30 V/m. Usando la ecuación presentada arriba, podemos encontrar la densidad de potencia de las ondas de la pantalla de TV de la siguiente manera:

$$W/m^2 = (30\ V/m)^2 / (120 \times \pi) = 2.4\ W/m^2$$

El área operativa de la antena, suponiendo que las ondas de la TV son de 300 MHz (longitud de onda de 1 m):

$$\text{Área Operativa de la Antena} = x\ 1.64\ (1\ m)^2 / (4 \times \pi) = 1.288\ m^2$$

Finalmente, podemos determinar la potencia (w) recibida por la antena del contador de frecuencia mediante la siguiente ecuación:

$$\text{Potencia Recibida} = 1.288\ m^2 \times 2.4\ W/m^2 = \mathbf{3.1\ W\ o\ 3.100\ mW}$$

Como usted puede ver, la potencia recibida por la antena sería aproximadamente 97 veces mayor (3.100 mW / 32 mW) que la potencia máxima de entrada del contador de frecuencia. La señal por lo tanto sería ignorada por el contador de frecuencia, puesto que la densidad de potencia está fuera de su rango de operación. Si la señal fuera de 800 MHz en lugar de 300 MHz, la potencia recibida sería aproximadamente de 435 mW, que sigue siendo mucho más alta que la potencia de entrada máxima. La tabla de abajo presenta las energías del campo eléctrico aproximadas (a aproximadamente un pie del dispositivo o aparato), densidades de potencia, y las potencias recibidas en la antena del contador de frecuencia para un número de aparatos electrodomésticos y de dispositivos comunes, suponiendo que los dispositivos emiten frecuencias de 1 GHz:

Aparato o Dispositivo	Energía del campo Eléctrico	Densidad De Potencia	Potencia Máxima Recibida
Manta Eléctrica	100 kV/m	2.7×10^7 W/m^2	3.1×10^6 W
Afeitadora Eléctrica	250 V/m	166 W/m^2	19.2 W
Estéreo	90 V/m	21.5 W/m^2	2.5 W
Refrigerador	60 V/m	9.6 W/m^2	1.1 W
Secador de Pelo y Tostadora	40 V/m	4.3 W/m^2	500 mW
TV Color	30 V/m	2.4 W/m^2	278 mW
Aspiradora	16 V/m	0.7 W/m^2	81 mW
Bombilla Incandesente	2 V/m	0.011 W/m^2	1.2 mW

Estos cálculos demuestran que usted teóricamente podría realizar mediciones al lado de cualquier aparato electrodoméstico o dispositivo eléctrico – a excepción de una bombilla – y no necesitaría preocuparse de que contador de frecuencia detectara las ondas EM que emiten. No obstante usted podría incluso realizar mediciones cerca de una bombilla y no preocuparse por la interferencia, ya que una bombilla emite ondas en la gama de los Hz, y de ninguna manera cerca de la frecuencia de 1 GHz supuesta en este ejemplo – lo que significa que de todos modos las ondas emitidas por una bombilla no podrían ser detectadas por el contador de frecuencia. De hecho, cualquier aparato o dispositivo que reciba su energía de la electricidad por corriente alterna (CA) (como los 110-220 V de los enchufes eléctricos en su hogar) emitirá frecuencias en el rango bajo de los Hz, las cuales no puede influenciar sus mediciones con el **RFI**.

Aunque usted podría, en teoría, realizar mediciones de frecuencia cerca de aparatos eléctricos y no experimentar interferencias, le recomendamos que no lo haga, porque las energías elevadas del campo eléctrico podrían *potencialmente* dañar el circuito interno del contador o la efectividad de la antena durante un período de tiempo. También, medir las frecuencias del Aura entre otras ondas de alta potencia puede polarizar la antena, requiriéndole "limpiar" la antena (con un

generador de iones o un paño de algodón) con más frecuencia para asegurarse mediciones exactas. Por estas razones, nosotros recomendamos que si usted está realizando una lectura con el **RFI** en un cuarto con artefactos o dispositivos eléctricos, se coloque tan lejos de ellos como le sea posible y que los apagague si no los está utilizando. Por supuesto, ya que que necesita usar una computadora o una computadora portátil para utilizar el software **RFI**, usted no puede eliminar todas las fuentes de ondas de alta potencia. Sin embargo, nunca necesitará preocuparse por dañar el contador de frecuencia si usted se encuentra a una distancia razonable (es decir, por lo menos cuatro pies) de la computadora, y no necesitará preocuparse por una interferencia de la computadora. Es una buena idea, sin embargo, "limpiar" la antena con frecuencia cuando esté presente una computadora (es decir, por lo menos después de cada lectura con el **RFI** de cuerpo completo).

Si usted enciende su horno de microondas y mide las frecuencias emitidas por él, observará probablemente frecuencias en la gama de 1.0 a 2.0 GHz, y el gráfico de barras de la fuerza de la señal probablemente se activará. Los hornos de microondas, a diferencia de la mayoría de los otros artefactos eléctricos, generan frecuencias y energías del campo eléctrico dentro del rango que es detectado por el contador; por lo tanto, simplemente no ponga a funcionar un horno de microondas durante lecturas con el **RFI** y así no detectará estas señales interfiriendo.

Teléfonos Móviles/Celulares

Las estaciones celulares transmiten generalmente en frecuencias entre 800 MHz y 1.8 GHz, las cuales son detectadas por el contador de frecuencia. Mientras está en uso, la energía del campo eléctrico de las ondas EM transmitidas o recibidas cerca de la antena de un teléfono celular (inalámbrico) puede ser tan alta como 300 V/m. A pocos pies del teléfono, la energía del campo eléctrico se reducirá a un rango en el cual el gráfico de barras de la fuerza de la señal del contador de frecuencia se activará. De hecho, si alguien dentro del cuarto está utilizando un teléfono inalámbrico, usted notará que la pantalla del contador de frecuencia generalmente "se

fija" en la frecuencia del teléfono, y no podrá detectar ninguna otra cosa. Si usted se mueve a otro sitio, probablemente podrá detectar otras frecuencias, pero todavía podría observar una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal. Es por lo tanto importante que usted o cualquier persona en la cercanía inmediata de donde realiza sus mediciones no utilice un teléfono inalámbrico. Esto puede ser un problema en una feria o en una convención de salud, donde usted no tiene control sobre tales condiciones. Mientras el gráfico de barras no muestre ninguna respuesta, usted puede estar razonablemente seguro de que las transmisiones del teléfono portátil no interferirán con sus lecturas.

¿Si usted está cerca de una estación de transmisión de telefonía celular, cuál es la probabilidad de que las transmisiones interfieran con sus mediciones?. Mientras usted esté dentro de un espacio cerrado, hay pocas probabilidades de que tales transmisiones interferfieran con sus lecturas **RFI**, puesto que los materiales del edificio (las paredes) reflejarán y amortiguarán perceptiblemente la fuerza de estas ondas a un nivel no detectable para el contador. Sin embargo, tales transmisiones pueden afectar sus lecturas si usted está al aire libre; en estos casos, se observará una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal, y si éste es el caso, un pedazo de metal o plástico sostenido detrás de la antena lo protegerá con eficacia de tal interferencia.

Una nota final sobre la interferencia – si no se extiende la antena a todo su largo (según lo recomendado), será necesaria una fuerza de señal más elevada para interferir con las mediciones del Aura que cuando la antena se extiende. Esto ocurre así porque la impedancia (resistencia) se incrementa cuando la longitud de la antena se acorta. Usted puede probar este fenómeno de sensibilidad encendiendo un horno de microondas, por ejemplo – primero mida el espacio aéreo cercano al microondas con la antena en su longitud más corta, y luego extienda la antena a su máxima longitud. Usted debe poder observar una mayor respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal cuando la antena está completamente extendida. Según lo expuesto, utilizar la antena en su menor longitud es una manera adicional de reducir los efectos de una interferencia.

5.2.3 **Bases Teóricas de la Intensidad de la Bioenergía**

Los científicos de la Asociación Rusa de Ecología Humana y Ciencias Energo-Informáticas, así como muchos profesores destacados de la Universidad Técnica Estatal de Moscú (el "MIT" de Rusia), creen que las propiedades electromágneticas del Aura detectadas por los procesos Kirlian y **RFI** pueden ser solamente rastros, o efectos secundarios, de una causa subyacente más profunda. Esta causa se cree que es la bioenergía en la forma de campos de torsión o campos no-Hertzianos. Considerando que los campos de torsión pueden ser medidos solamente mediante un equipamiento científico exclusivo y extremadamente costoso, los datos y la investigación disponible sugieren que el análisis electromágnetico (tal como el **RFI**) sigue siendo la manera más tangible y rentable de medir los efectos secundarios de los campos de torsión, sin sacrificar exactitud y precisión.

La teoría de la eficacia del **RFI** se basa en la mecánica de la bioenergía y la física de los campos de torsión, y en el hecho de que la bioenergía genera, se manifiesta como, y generalmente produce energías de campo EM como efecto secundario. La teoría básica es que: **(1) La bioenergía produce energía de campo EM, y (2) La bioenergía es más fuerte que la energía de campo EM**. La lógica de esta teoría funciona de la siguiente manera: cualquier causa es funcionalmente más fuerte que el resultado, por definición, porque removiendo la causa (o previniéndola) se eliminaría el resultado, y la inversión de la causa alteraría el resultado. Además, el manipular indebidamente el resultado no cambiaría la causa, sino que solamente presentaría una causa irreconciliable que jamás podría prevalecer por completo sobre el resultado mientras la causa original continúe reforzándolo.

La hipótesis resultaltante es que **un campo EM originado por una bioenergía cercana es más fuerte que un campo EM aislado**, porque está sustentado por la bioenergía como fuente presente regeneradora y como señal generadora que lo refuerza, mientras que los campos EM

sin sustento pueden ser disipados o alterarados por una energía más fuerte.

La prueba de la teoría de la bioenergía predominante y la hipótesis que la acompaña es encontrada en las observaciones de la biología médica básica. Las funciones neurológicas y bioeléctricas son tan sutiles y están basadas en umbrales tan bajos de voltaje para su funcionamiento que, según la ley de la electrofísica por la cual todos los campos electromagnéticos deben inducir un voltaje en un potencial portador de impulsos eléctricos, las funciones bioelectricas tendrían que ser desencadenadas, activadas o bien verse directamente afectadas por alguna interferencia electromágnetica ambiental. Es decir que si las funciones bioelectricas neurológicas tales como la activación neuronal fueran puramente eléctricas, cualquier interferencia electromágnetica en el aire induciría una corriente y un voltaje que excedería el umbral de activación de la neurona, lo cual sería suficiente para activar las sinapsis y las respuestas nerviosas subsecuentes. Sin embargo, los mecanismos bioelectricos no son afectados de esta manera, así que podemos deducir que existe una bioenergía de respaldo detrás de los procesos bioelectricos humanos, además de un simple campo EM humano constitutivo el Aura. Además, dado que el cuerpo humano y el cerebro funcionan eléctricamente, y que aún no se ha encontrado nada parecido a un generador o fuente de energía eléctrica en ninguna parte del cuerpo humano, es evidente que tales señales eléctricas y campos EM son un producto y una manifestación directa de la bioenergía.

Aún mientras que es verdad que los contadores de frecuencia conectados a una antena pueden ser influenciados por interferencias de radio (si existen en el mismo rango de frecuencia y energía del campo eléctrico), es también verdad que el campo bioenergético humano (Aura) está demostrado que causa un disturbio significativo de las transmisiones de radio. La experiencia común muestra que el campo energético humano puede bloquear totalmente o interferir con la recepción de la televisión aerotransportada o de las transmisiones de radio. Todo aquel que alguna vez haya luchado para ajustar la recepción de una antena de televisión cambiando el lugar en donde estaba parado en el cuarto es un testigo de esta realidad física. Podemos por lo tanto

mantener como una afirmación válida que generalmente **mientras la antena del RFI se coloque dentro del campo bioenergético humano, la interferencia industrial no afectará ni comprometerá la verdad o la exactitud de las lecturas del Aura, a menos que tal interferencia sea advertida por una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal**. Debe observarse que el fenómeno del Aura siendo impermeable a todos menos a una interferencia industrial excepcional se aplica no solamente a los seres humanos, sino también a las Auras animales, a la vida vegetal, y a las entidades eléctricas ambientales desencarnadas en el ámbito paranormal.

Para los objetos físicos que retienen las impresiones de la información energética de los sistemas vivos, pero no encierran en sí a la fuente bioenergética original, la interferencia industrial tal como las transmisiones de radio en MHz pueden convertirse en un factor. Cualquier interferencia, sin embargo, puede ser remediada fácilmente cambiando a un canal en el contador de frecuencia que utilice un rango de frecuencia diferente a las de las transmisiones de radio, o simplemente agregando algunos mecanismos de filtro a la antena o al circuito digital de cualquier contador de frecuencia.

6.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS COMUNES

6.1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los Colores en la Pantalla No Son Iguales a los Colores Impresos

Los colores presentados en el software **RFI™** están basados en el "sistema de color PANTONE" estándar internacional. La mayoría de las impresoras color fabricadas pocos años atrá se basan en este sistema o uno equivalente. Por lo tanto, si los colores en la pantalla no son iguales a aquellos impresos por su impresora, usted muy probablemente tenga una impresora más vieja basada en un sistema diferente de coincidencia. Desafortunadamente, no hay manera de corregir esto a excepción de comprar una impresora de color nueva.

Cuando Presiono el Botón "Imprimir", No Sucede Nada – ¿Qué Puedo Hacer?

Desinstale el software **RFI™** entrando a "Agregar o Quitar Programas" de su panel de control de su computadora. Asegúrese de copiar todos sus archivos existentes de la Imagen del Aura del **RFI™** a otro directorio primero. Si el programa no se desinstala a sí mismo automáticamente, suprima el programa y los archivos asociados usando a Explorador de Windows. Entonces reinstale el software al directorio por defecto.

El Contador de Frecuencia se "Fija" en Cierto Valor de Frecuencia – ¿Qué Debo Hacer?

Si sucede esto, usted tiene una señal fuerte que interfiere, probablemente de una estación de transmisión de radio próxima, un horno de microondas, o de un teléfono celular, o de cualquier otro equipo en el área inmediata a sus lecturas que emite frecuencias en el rango de los MHz. Esto puede ser confirmado por una respuesta

en el gráfico de barras de la fuerza de la señal en el contador. Si éste es el caso, la solución es identificar y procurar eliminar la fuente; si esto no es posible, entonces necesitará moverse a un nuevo sitio para realizar sus lecturas. Si el gráfico de barras de la fuerza de la señal no se activa, y el display del contador "se fija" en una frecuencia particular, el contador puede estar funcionando incorrectamente. Por favor contáctese con ITEM para asistirlo en la localización de averías.

Los Valores De Frecuencia Fluctúan Violentamente – ¿Qué Es lo que Esta Mal?

Nada – por favor revea la Sección 5.1. Las fluctuaciones son una función natural de cómo el Aura del sujeto está respondiendo a los pensamientos, a las emociones, a los acontecimientos fisiológicos, y a los estímulos ambientales. Usted puede evaluar si las fluctuaciones son en respuesta a estímulos ambientales pidiéndole al sujeto que se mueva a un nuevo ambiente, luego continúe con sus mediciones. Usted también puede reducir las fluctuaciones testeando al sujeto bajo condiciones más controladas; por ejemplo, podría realizar hipnosis en el sujeto o pedirle que medite antes de la lectura con el **RFI™** para reducir ansiedades y promover la homeostasis. Sin embargo, es importante recordar que cuando el sujeto experimenta tales mecanismos de control inducido, puede no encontrarse en su "estado natural." Parte del proceso de toma de decisión de todos los Investigadores es la condición deseada del sujeto.

Las Frecuencias Detectadas Dentro del Aura Son Iguales a las Frecuencias que Detecto en el Aire – ¿Qué Debo Hacer?

Vea "Radiación Natural De Fondo " en la Sección 5.2.1. Realice los siguientes pasos: 1) "limpie" la antena extendiéndola a su longitud completa y frotándola ligeramente con un paño del algodón (o con su chaqueta de laboratorio), 2) dirija la antena en el aire lejos del sujeto y observe el gráfico de barras de la fuerza de la señal, 3) si el gráfico de barras se activa incluso levemente, entonces es probable que haya una señal presente que está interfiriendo, la cual debe localizar y eliminar si es

posible; si el gráfico de barras no se activa del todo, entonces colóquese un par de guantes 100% de algodón. Si, después de tomar estas medidas, los valores de frecuencia en el aire y dentro de la Aura del sujeto continúan siendo similares, entonces A) la radiación natural de fondo, o las bioenergías de otros organismos vivos que puedan estar presentes en el cuarto, están influenciando el Aura del sujeto, o B) el Aura del sujeto está ejerciendo influencia en el espacio aéreo del cuarto. Si bien usted puede remover de la habitación a los organismos vivos tales como plantas o mascotas o instar a la gente que pueda estar en el cuarto a irse, no hay mucho más por hacer. Si bien las frecuencias entre la Aura y el ambiente externo pueden ser similares en tales casos, los colores pueden ser drásticamente diferentes – y son los colores del Aura los más importantes en términos de interpretación del **RFI™**.

Me Parece que Tengo una Señal que Interfiere que No Puedo Identificar o Eliminar – ¿Qué Puedo Hacer?

Esto ocurre solamente en muy raras ocasiones. Sin embargo, para tratar la pregunta, se puede sostener inmediatamente detrás de la antena un simple y fino pedazo de metal o plástico durante las mediciones para remover las influencias de la mayoría de las señales que esten interfiriendo. Si le resulta incómodo sostener esto en una mano mientras sostiene el contador de frecuencia con la otra mano, entonces podría unirlo al contador de la frecuencia, o podría entrar en contacto con ITEM para que lo ayude a construir un filtro en línea (un filtro que podría unirse a la antena para "bloquear" las frecuencias sobre o debajo de cierto rango).

LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN EL GENERAL – Contáctese con ITEM a **Central@item-bioenergy.com** si usted tiene alguna pregunta.

6.2 PREGUNTAS COMUNES

La que sigue es una lista parcial de las Preguntas Frecuentes (FAQ) y de las

respuestas que se pueden ver en el sitio web FAQ del **RFI™**, **http://www.item-bioenergy.com/rfi/faq.html**. Solamente se presentan aquellas preguntas y respuestas relevantes al uso del **RFI™** (preguntas legales y técnicas), mientras que otras preguntas no pertinentes al uso del **RFI™** se omiten. Usted puede querer chequear este sitio web de vez en cuando para saber si hay nuevas preguntas y respuestas. Éstas son preguntas reales hechas por Investigadores del **RFI™** durante los últimos años.

6.2.1 Preguntas Generales Acerca del RFI™

¿Cuál Es Su Política Acerca del Malfuncionamiento Del Equipo?

Hay solamente una pieza del equipo para utilizar con el **RFI™** – el contador digital de frecuencia, más el programa de software. Si se presentan problemas, hay algunas opciones. Básicamente, si su equipo se daña en tránsito, podemos conseguir un reembolso con el servicio de envío y enviarle uno nuevo una vez que usted nos envíe de regreso el contador dañado. Cada contador digital que enviamos debe pasar nuestra Pruebas de Garantía de Calidad para asegurarnos de que no funciona incorrectamente o está defectuoso a la hora del envío. Si "funciona incorrectamente" o se daña en cualquier momento durante su uso, le sugerimos primero enviar un correo electrónico a ITEM y describir la naturaleza del problema. Si el contador está bajo la garantía de un año del fabricante, probablemente le solicitaremos que envíe el contador directamente al fabricante para su reparación o reemplazo. Si se produce un problema más allá del período de garantía, envíe un correo electrónico a ITEM y nosotros decidiremos la mejor manera de reparar su contador. Si el contador no puede ser arreglado, entonces podemos hacerle un descuento "al por mayor" por un contador de reemplazo. Esta "Garantía Limitada Expresa" se aplica solamente si el equipo funciona incorrectamente o tiene un defecto que no deviene del uso que usted le haya dado. El "deterioro y desgaste causado por el uso" no se incluye en esta "Garantía."

¿Pueden Dos Personas Utilizar el RFI™ Bajo Una Licencia?

Hemos permitido, por ejemplo, a un marido y a su esposa estar como un "equipo" bajo una licencia, aunque no es algo que nosotros hagamos regularmente. Podría ser considerado bajo algunas circunstancias. Sin embargo, solamente una persona puede ser especificada en el "Certificado de Concesión," así que una persona va a tener que aceptar ser el Concesionario primario.

6.2.2 Aspectos legales del RFI™

¿Cuál es el Efecto Legal de la Declaración en el Acuerdo de Licencia que dice que "Cualesquiera y Todos los Descubrimientos, Mejoras o Progresos Realizados por el Concesionario Referente a la Tecnología del RFI™ Se Convertirán y Permanecerán como Propiedad Intelectual de ITEM?"

1) La intención de esta disposición es evitar que la gente (incluidos los competidores) compren el **RFI™**, y lleven a cabo pequeñas mejoras en los datos, los procesos o en el método en sí mismo, y lo revendan como su propia tecnología. Puesto que ésta sería ya una violación de la Ley Federal Epígrafe 42 de competencia desleal, y una violación a la Ley Federal de Patentes y Secreto de Fabricación, esta restricción no agrega nada nuevo más allá de los requisitos establecidos por la ley.

2) El efecto de esta disposición es que si usted llevó a cabo descubrimientos o mejoras en los datos existentes del **RFI™**, en el método o en el proceso en sí mismo, las mejoras seguirán siendo parte de nuestra propiedad intelectual. Esto es justo, porque nosotros ofrecemos el único sistema de Aura en el mundo que expone los funcionamientos internos del proceso para el beneficio de científicos serios, y si no fuera por nuestros años de trabajo duro y muchos miles de dólares en inversiones,

usted no tendría la posibilidad de realizar tales mejoras.

3) ITEM, y el fundador Matthew Greene como el inventor, han conservado la "Patente Prioritaria" legal completa sobre solicitudes de patente de competidores bajo los requisitos de la Ley Federal de Patentes. Por consiguiente, cualquier mejora o progreso que usted podría hacer posiblemente sería descalificado de todos modos para una patente, y si usted nos ganara en la Oficina de Patentes, la Corte del Distrito Federal invalidaría su patente como una violación de nuestra prioridad establecida. Por lo tanto, usted no podría hacer nada con tales descubrimientos de todos modos, así que la disposición no agrega nada nuevo más allá de los requisitos establecidos por la ley.

4) Nuestro ofrecimiento de una licencia para convertirse en un Investigador Licenciado del **RFI™** es una manera de compartir nuestros Secretos Industriales y los procesos y datos patentables, sin perder nuestros derechos de propiedad intelectual, de modo que usted pueda beneficiarse de la tecnología. Este sistema de licencia también nos permite recoger preguntas, comentarios y datos de nuestros investigadores **RFI™**, los cuales nos ayudan a mover la tecnología hacia su último estado patentable, y nos permite imprimir las actualizaciones que enviamos a todos los usuarios licenciados. Por lo tanto, sólo sus contribuciones ayudarán a otros, sus contribuciones le ayudarán a usted. Ésta es la verdadera ventaja de esta cláusula. ITEM se convierte en una cámara de compensación para todos los avances y los descubrimientos del **RFI™**, en bien de todos los usuarios autorizados. En resumen, es como un club exclusivo, que comparte los secretos comerciales, mientras que protege sus derechos de propiedad intelectual contra los competidores.

5) El **RFI™** se propone para ser utilizado para asistirlo a usted a desarrollar otras tecnologías, tales como la invención y el desarrollo de generadores de bioenergía eficaces, terapias de sonido y de luz, etc., y esta cláusula de ninguna manera compromete sus derechos de desarrollar cualquier otra tecnología, incluso si utiliza el

RFI™ para su desarrollo o para medir su eficacia. La restricción cubre solamente los progresos en el proceso real del Aura por imágenes en sí mismo. Puesto que usted no está en el negocio de la invención de tecnologías del Aura, esto no debe aplicarse a usted o a su propiedad intelectual, y usted está libre y exonerado de cualquier efecto de esta cláusula.

6.2.3 Preguntas Técnicas Acerca del RFI™

¿Por Qué Este Método de Análisis se llama "Campo de Resonancia por Imágenes"?

El proceso se conoce como "**Campo de Resonancia por Imágenes**" simplemente porque el programa se basa en el cálculo de la frecuencia del color en el espectro de la luz visible que está en **resonancia** con la frecuencia real detectada durante las lecturas del Aura.

Estoy Interesado en las Frecuencias del Rango Ultravioleta del Aura; ¿Cómo Puede el RFI™ proporcionarme Este Tipo de Monitoreo?

Usted puede comprar el equipo que le permitirá leer longitudes de onda en el rango visible ultravioleta (UV), pero éstos son costosos y no son prácticos a menos que usted disponga de un gran presupuesto. Si está interesado en obtener lecturas UV equivalentes del contador de frecuencia del **RFI™**, todo lo que necesita hacer es extrapolar las lecturas del **RFI™** hasta este rango mediante los principios de los armónicos y, teóricamente, usted podría conseguir resultados válidos del espectro UV.

¿Cómo Puede Utilizarse el RFI™ para Monitorear Energías Ambientales en un Cuarto?

La lectura de los colores del Aura de un cuarto se interpretan exactamente igual que los colores alrededor de un cuerpo humano en el Nivel Emocional (Nivel Psicológico).

Por ejemplo, si hay una gran zona de energía azul en una esquina particular de un cuarto, esa área es o ha sido un área de comunicación excelente; si hay una zona anaranjada, significa que el área es un centro de energía curativa, y así sucesivamente. La característica de Análisis de Punto/Objeto del software fue desarrollada para este propósito. Un gráfica personalizada o un mapa podrían ser desarrollados para rastrear las frecuencias y colores detectados.

¿Qué Tipo de Frecuencia Monitorea el Sistema RFI™?

La mecánica de la bioenergía implica teorías intrincadas del electrofísica, más específicamente física de los campos de torsión. Mientras que el examen de los campos dinámicos de torsión no es rentable para el consumidor medio, afortunadamente las bioenergías producen frecuencias de ondas EM residuales que se extienden en el rango de los MHz (entre otras), con longitudes de onda típicamente más pequeñas que las ondas de radio y TV. El **RFI™** mide estas frecuencias EM, las cuales mediante fórmulas industriales secretas son convertidas a los colores dentro del espectro visible, permitiendo que el **RFI™** cree imágenes del Aura de todo el cuerpo y del cerebro.

¿Cómo Podría Determinar la Forma y el Contorno del Aura Utilizando el RFI™?

El **RFI™** no le dará ninguna indicación de la forma de las Auras, más allá del conocimiento general de que el Nivel de Salud existe entre las 0 y las 4 pulgadas del cuerpo y que el Nivel Psicológico existe entre las 4 y las 18 pulgadas. Para determinar la forma y el contorno, le recomendamos que utilice las varas de radiestesia. Este método se ha utilizado durante mucho tiempo, y hay muchos libros disponibles sobre el mismo. No obstante tenga en cuenta un punto significativo –

aunque hemos planteado el tema de las capas límite de interacción entre el Aura y el ambiente, en teoría no hay ninguna restricción en el Aura. Teóricamente, todas las ondas EM viajan infinitamente. El Aura es realmente solo ésas ondas EM continuamente emitidas en el área local alrededor del cuerpo. ¿Ha oído alguna vez el principio esotérico que dice que "todas las cosas están conectadas y son una?". Las Auras de todas las cosas interactúan y se conectan. En un sentido metafísico más verdadero, no hay forma o contorno en el Aura, pero en un sentido práctico, la forma y el contorno pueden ser determinados – relativamente hablando – sobre la base de la localización precisa del límite del nivel de la potencia del campo; esto puede ser realizado con las varas de radiestesia, o quizás incluso usando un medidor de la potencia del campo.

¿Los Campos Magnéticos Afectan las Lecturas del RFI™?

Las ondas electromagnéticas están formadas por componentes eléctricos y magnéticos. Cuando hablamos de campos eléctricos o magnéticos localizados, estamos hablando de un solo elemento de un campo dual. Las ondas o los campos magnéticos, por sí mismos, no afectarán las lecturas del **RFI™**, aunque el componente magnético de las ondas o los campos EM pueden afectar el Aura de la persona que usted está midiendo. Si las ondas o los campos magnéticos se juntan con los campos eléctricos, como en el caso de los campos EM localizados, la potencia del campo eléctrico – junto con la frecuencia de las ondas EM dentro del campo – son las consideraciones más importantes para determinar si el contador de frecuencia detectará las ondas EM. Así pues, el componente magnético del campo de las ondas o los campos EM no ejercen una influencia directa en las mediciones del **RFI™**. Sin embargo, con los campos EM localizados en general, es más fuerte el componente magnético del campo, cuanto más fuerte es el componente eléctrico del campo, así que como resultado usted debe poder detectar las ondas o los campos EM que tienen componentes magnéticos fuertes asociados a ellos. Si, por otra parte, las ondas EM no están localizadas en un sitio sino que por el contrario se

originan de una fuente más o menos distante, los componentes magnético y eléctrico del campo se pueden "desacoplar" uno del otro; en este caso, un campo magnético potente tendrá un campo eléctrico débil asociado a él, y usted no podrá detectar la onda con el contador de frecuencia. El lector interesado deberá referirse a los textos avanzados en electromagnetismo para una información adicional.

¿Cuál es la Diferencia Entre las Ondas y los Campos Electromagnéticos?

Una fuente o un transmisor de ondas EM produce un campo EM; el cuerpo humano, por ejemplo, es un transmisor de ondas EM (a través de las bioenergías del campo de torsión subyacentes) que produce un campo EM (el Aura). Un campo EM no es nada más que un área de ondas EM localizadas que se emiten continuamente desde la fuente, las cuales pueden superponerse, interferir, o bien combinarse para formar una "masa compleja" de ondas EM que generalmente llamamos un campo EM.

¿Las Fuentes de Ondas EM de Alta-Potencia Como las Radiofrecuencias Podrían Afectar el Funcionamiento de la Antena del RFI™?

Por favor, recurra a la Sección 5.0. La interferencia puede ser encontrada mediante una de dos maneras: 1) usando el filtro del contador de frecuencia y observando lecturas de la frecuencia diferentes a cero, y 2) observando una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal. Nosotros recomendamos apagar los aparatos y dispositivos eléctricos durante las lecturas (aunque tales ondas generalmente no interferirán con las lecturas). Las emisiones de la computadora generalmente tampoco interferirán con las mediciones. Si se encuentra tal interferencia, entonces usted debe comprobar si está funcionando algún dispositivo de alta energía (es decir, microondas, teléfonos celulares, etc.) y apagarlo. Si no puede identificar y eliminar la fuente de interferencia, usted necesitará reposicionarse en un área donde el filtro y el gráfico de barras de la fuerza de la señal no detecte interferencia, o en algunos casos puede querer construir un protector simple o un filtro

para la antena. Si usted continúa experimentando problemas, el personal de ITEM se encuentra disponible para asistirlo. La mayoría de los investigadores nunca tienen problemas en este sentido.

Algunos de los Libros que He Leído Sugieren que Puede Haber Una Relación Entre el Grado de Espiritualidad de una Persona y los MHz que Emite. ¿Usted Está De Acuerdo?

En términos generales, estamos de acuerdo con los libros en este asunto. Pero no discutimos esta idea demasiado profundamente en nuestros materiales porque no tenemos suficientes pruebas científicas de esta teoría. Por ejemplo, hemos notado que cuanto más alta es la frecuencia para algunos colores como el verde, más alto es el grado de, por ejemplo, amor. Pero para otros colores, como el violeta, cuanto más bajas son las frecuencias, más "tranquila" o "en paz" está la persona, o así parece según nuestros datos preliminares. Como intentamos explicar en nuestros materiales, no tenemos *todas* las respuestas y animamos a los usuarios del **RFI™** a que nos den información de sus investigaciones de modo de poder evaluar la información a la luz de nuestros resultados y por consiguiente poner al día nuestros materiales. Si usted descubre algo interesante, el compartir esa información sería inestimable para nosotros.

¿Puedo Medir Frecuencias con el Adaptador de Carga de la Batería Conectado a la Toma Eléctrica?

Esto no es recomendable, pues no producirá lecturas exactas. La electricidad generará por sí misma un campo EM que reducirá la exactitud de sus mediciones. Nosotros recomendamos que usted cargue las baterías durante la noche para usar el contador durante el día. Si su contador de frecuencia es utilizado a menudo durante el día, usted tal vez quiera comprar un contador adicional de ITEM, que ponemos a

disposición de los Investigadores **RFI™** a precio por mayor (véase **http://www.item-bioenergy.com/password/updates.asp**).

¿Puede una Jaula de Faraday Eliminar Algo de la Extraña "Estática" Que se Observa A Veces en el Proceso RFI™?

Una jaula de Faraday agregaría un nivel adicional de "protección" a las mediciones del **RFI™**, pero no sería necesaria a menos que fuera identificada una fuente persistente de interferencia que no pudiera ser eliminada. Si ni el filtro ni el gráfico de barras de la fuerza de la señal indican interferencia, no habría necesidad de ninguna protección adicional. Si se detecta interferencia persistente, una jaula de Faraday probablemente trabajaría, pero existen también alternativas menos costosas tales como 1) una pedazo delgado de metal o plástico sostenido detrás de la antena, 2) un filtro en línea, y 3) encontrar una nueva localización para las mediciones del **RFI™**.

Noto Que Usted No Tiene Contornos del Cuerpo de Animales en el Software. ¿Se Podrían Utilizar los Contornos del Cuerpo Humano para las Mediciones de Animales?

Seguro, usted podría utilizar el contorno del cuerpo humano para los animales domésticos. En el futuro, esperamos incorporar más contornos del cuerpo para que los investigadores los utilicen. Lo que nosotros hemos hecho fue dibujar nuestro propio gráfico del animal (o de la hierba del jardín, o de cualquier objeto para eso), hicimos fotocopias de él, y utilizamos la función de Análisis de Punto/Objeto del software para determinar los colores después de recoger las medidas. Luego, utilizamos lápices de colores para colorear las regiones de la bioenergía. Por supuesto, de esta manera usted no tendrá las interpretaciones integrales del Aura/Cerebro, pero tendrá una idea excelente de la manera en que las bioenergías fluyen del lado izquierdo y salen del derecho, y además conocerá las interpretaciones para las regiones individuales que usted mide. Usted, por ejemplo, podrá decir si su

mascota se siente amada viendo los colores específicos en el nivel externo del Aura.

Soy Acupunturista y Quisiera Saber si el RFI™ Puede Detectar el "Color" de los Puntos de Acupuntura y si Alguien Tuvo Algún Logro Cambiando su Color

Su pregunta realmente muestra el tipo de pensamiento creativo que ha conducido nuestro desarrollo del sistema **RFI™** desde un principio. De hecho, en nuestra oficina de Moscú hemos experimentado exactamente con ese uso. El sistema **RFI™** viene actualmente con un contador de frecuencia, y una antena que conecta con el contador por un conector de tipo "BNC". Simplemente compramos un adaptador de BNC en una tienda local de electrónica, y conectamos un cable al adaptador de BNC que luego fue unido a un par de electrodos (almohadillas adhesivas como las de electrostimulación) o a pequeños sensores (como los utilizados para diagnóstico en electrónica). Nos exaltó mucho encontrar que los electrodos y los sensores, cuando tocaban directamente un punto de acupresión específico o los puntos de los meridianos, transmitían exactamente la señal bioenergética al contador de frecuencia.

El resultado fue que el programa de computación del **RFI™** identificaba exactamente colores bioenenergéticos específicos. Precisamente como con la Aura, nuestros experimentos con el **RFI™** demostraron cambios inmediatos en el color de la bioenergía de los puntos de acupuntura después de aplicar ciertas técnicas de la terapia.

¿Puede el RFI™ Detectar la Cantidad y la Calidad del Campo Energético?

El sistema **RFI™** definitivamente detecta la "calidad" del campo energético revelando el color objetivo del espectro óptico de las vibraciones del campo bioenergético, y traduce esos números a interpretaciones específicas Psicológicas y de Salud. El sistema **RFI™** no detecta "cantidad", porque la cantidad de un campo bioenergético es medida por su voltaje, por la potencia de su campo eléctrico. El **RFI™** utiliza un

contador de frecuencia, que tiene un circuito diferente al de un medidor de potencia del campo ambiental. Esperamos pronto poder brindar a nuestros usuarios del **RFI™** un sistema dual de medición que pueda detectar simultáneamente la potencia de la frecuencia y del campo eléctrico, pero primero necesitamos realizar más investigaciones sobre lo que indican los diversos niveles de la potencia del campo en el contexto de la frecuencia y del color.

Estoy Utilizando una Gráfica Especial que Clasifica los 365 Puntos de Acupuntura por el Color. Esta Gráfica Nace de la Investigación de Dos Físicos que Utilizaron un Péndulo para Detectar el Campo Energético. Ellos lo Dispusieron sobre una Gráfica de Acupuntura y se Supone que Representa la Vibración de la "Salud-Normal". ¿De Qué Manera se Relaciona el RFI™ con esto?

Hay muchos sistemas y concepciones de análisis metafísico de los Chakras y puntos de acupuntura que confían en colores de referencia para juzgar si la condición de una persona es "saludable." La mayoría de estos conceptos se basan en exploraciones experimentales de los campos bioenergéticos de mucha gente, e intentan identificar qué colores se encuentran comúnmente en los sujetos "sanos".

Es muy importante observar, sin embargo, que los colores de referencia no pueden ser técnicamente suficientes como base para evaluar la condición de "salud" de una persona individual. Tanto la salud física como la psicológica son esencialmente una función de la adaptación de una persona a su ambiente. Si una persona vive en un ambiente agresivo, por ejemplo, un campo bioenergético que muestre "apertura" de los canales (es decir, alta receptividad e interacción con los bioenergías de la gente) sería "dañino," mientras que si la persona viviera en un ambiente amoroso y comprensivo, la misma configuración bioenergética sería "saludable."

Por lo tanto, en vez de usar gráficas de color de referencia con colores por "defecto"

considerados para indicar "salud," ITEM se centra en la evaluación técnica objetiva de la "función" de cada color bioenergético. Es decir no intentamos juzgar si cada color es "bueno" o "malo," sino utilizar simplemente una identificación objetiva de lo que hace ese color de la bioenergía, como función. Entonces, usando esa información técnica, podemos determinar si es saludable o no en el contexto de un análisis holístico comprensivo para cada persona individual.

Éste es el principio detrás del sistema **RFI™** de ITEM, en el cual un programa de computación utiliza nuestros años de investigación para identificar los colores, y generar automáticamente los informes que analizan los colores en el contexto de los niveles de Salud y Psicológico del Aura. Este es un tema importante acerca del cual deben pensar todos los científicos al intentar interpretar sus conclusiones sobre los colores de la bioenergía en cualquier parte específica del cuerpo o del campo bioenergético.

¿Qué Clase de Mediciones Son Posibles Con el RFI™ en el Campo de la Materia? Tengo Entendido que la Señal que Puede Obtenerse de los Materiales está en Relación con la Electrones de Valencia. ¿Es Esto Cierto?

Es absolutamente cierto que la materia física (es decir, los objetos materiales) puede contener grandes cantidades de información, retenidas en los patrones y movimientos de sus electrones de valencia. La práctica de los psíquicos bien entrenados "que leen" tales patrones de energía para recolectar información es conocida tradicionalmente como "psicometría."

El **RFI™** fue diseñado específicamente para poder leer tanta información de los objetos materiales como nos sea posible, pero sin tener que confiar en la habilidad o la capacidad humana. Sorpendentemente, la información que el **RFI™** proporcionó de varios objetos durante los experimentos iniciales confirmó las "lecturas" de los

psíquicos que usaron psicometría en los mismos objetos, incluso excediendo la información que los psíquicos podrían dar, tanto en alcance como en detalle. El análisis del electrocampo proporcionado por el sistema **RFI™** permite que detectemos y que registremos información específica sobre la historia de un objeto, revelando 3 diferentes perspectivas: (1) el ambiente donde el objeto fue localizado o almacenado, y las energías metafísicas y mentales predominantes que describen el propósito o la función del lugar o del ambiente donde el objeto fue encontrado, (2) el perfil psicológico de un dueño anterior del objeto, y (3) las características bioenergéticas inherentes del objeto en sí mismo, por ejemplo si puede curar, o qué efecto puede tener en la salud o en la psicología humana.

Debido a los resultados excepcionales que el **RFI™** nos dio constantemente con los objetos durante nuestra investigación exploratoria inicial, nosotros hemos venido confiando en él como una herramienta sólida y científica en exploraciones arqueológicas, así como en evaluaciones de sitios de hogares y de casas para analizar fenómenos paranormales. El **RFI™** también ha demostrado ser una herramienta excepcional para la fitoerapia, identificando objetivamente tanto las características curativas como los efectos de tipo metafísico (emocional/psicológico) de las hierbas.

¿Ha Realizado Alguna Vez Lecturas RFI™ Mientras que Da a la Gente el Aroma de Diversas Plantas Aromáticas a Respirar?

Hemos hecho algunos experimentos con nuestro sistema **RFI™** en la evaluación de los efectos terapéuticos, sobre un nivel bioenergético, de varios granos aromáticos, hierbas y especies vegetales. Los resultados sugieren de forma contundente que dicha terapia aromática pueda tener resultados beneficiosos significativos en el campo energético de un individuo.

¿Cuáles son Sus Sugerencias para Usar el RFI™ en el Monitoreo de

Condiciones de Salud?

Aquí están los pasos que usted puede llevar a cabo paa monitorear las condiciones de salud en un periódo de tiempo usando los principios bioenergéticos del **RFI™**. Recuerde, el **RFI™** no es un substituto de la consulta y el diagnóstico médico, es apenas una herramienta suplementaria de análisis (ITEM no hace ninguna afirmación médica en absoluto).

Si usted está analizando a un individuo con una condición médica conocida:

- Coloque la antena en la Aura de la Salud (a 4 pulgadas del cuerpo) en el lugar aproximado en donde está el problema de salud. Por ejemplo, si el sujeto tiene una condición conocida en el hígado, coloque la antena (específicamente el nodo negro de la antena) cerca del lado derecho del abdomen inferior (estómago). Cerciórese de evitar los puntos Chakra que están directamente debajo de la línea central anterior (frente) del cuerpo si usted está midiendo órganos internos cercanos al frente del cuerpo. Mida la frecuencia de esta área, y registre este número y su color correspondiente para su análisis posterior en el programa de software. Ésta es su medida de base. El **RFI™** indicará que puede haber un problema de salud si el color del campo en esta región es rojo o posiblemente gris/negro; si no son estos colores, entonces probablemente están teniendo lugar actualmente ciertos procesos fisiológicos curativos en el área afectada.

- Después de que el sujeto recibe tratamiento, realice otra medición de la frecuencia del área afectada. Usted debe buscar dos cosas cuando toma medidas después de una medición de base: 1) si las lecturas consecutivas son más altas que las medidas anteriores, el área afectada puede estar mejorando en salud, y 2) si el color de la región cambia de rojo o de naranja a otros colores, el área puede estar mejorando en salud. Por ejemplo: un médico

diagnostica a un hombre de una enfermedad cardíaca. Usted toma una medida de la frecuencia de base en el corazón de 120 MHz, correspondiendo al color Naranja. El hombre se somete a cirugía, y cuando se recupera se le realiza otra medición, y este vez es de 145 MHz, correspondiendo al color Verde. Esta medida es significativa porque la frecuencia ha aumentado, lo cual puede indicar una mejoría de la salud en esta área. También, el color ha cambiado al verde, lo cual indica que puede haber un incremento de la circulación en esa área.

Si usted está analizando a un individuo con una condición médica desconocida o realizando un monitoreo general de salud:

- Haga una exploración completa del Aura de la Salud y registre las medidas y los colores de la frecuencia. Utilice el mismo procedimiento que con el monitoreo de una condición conocida en un período de tiempo. Por ejemplo, si usted ve disminuciones de frecuencias sobre varias lecturas consecutivas (sobre algunas semanas por lo menos) en una región particular de la salud, el sujeto puede experimentar una enfermedad en esa área. También, es una señal de peligro potencial si usted identifica rojo o posiblemente gris/negro en cualquier parte del Aura de la Salud. Si usted identifica rojo o gris/negro, espere por lo menos otro día para tomar otra medida en esa región. Si todavía encuentra este color, entonces usted puede sugerirle al sujeto que realice una consulta médica, independientemente de los síntomas. Puesto que el **RFI™** trabaja sobre principios bioenergéticos, puede detectar problemas de salud potenciales incluso antes de que se conviertan en síntomas.

¿Por Qué los Números de la Frecuencia "saltan" Tan A Menudo?

Por favor remítase a la Sección 5.1. Las fluctuaciones de la frecuencia son

simplemente un indicador del cambio. El índice de fluctuaciones puede ser un indicador de la estabilidad y de la inestabilidad relativas. El hecho objetivo, innegable, es que las Auras cambian constantemente, y que incluso los mismos colores resuenan en diversas frecuencias. De hecho, cualquier pensamiento o movimiento consciente o inconsciente puede inducir un cambio en las frecuencias. Cualquier sistema de Aura que no dé lecturas que fluctúan en tiempo real está ocultándole información verdadera, y está siendo incapaz de brindarle cualquier información verdaderamente objetiva. Varios años de investigación intensiva en ITEM han probado que las fluctuaciones no son causadas por "interferencias", y que generalmente las "interferencias" (todas a excepción de ciertas señales industriales de alta potencia) no afectan ni influencian las lecturas del **RFI™**, aunque la interferencia puede afectar el Aura de una persona. Mientras el gráfico de barras de la fuerza de la señal y el filtro del contador de frecuencia del **RFI™** no indiquen interferencia, usted puede estar seguro de que las lecturas son de hecho bioenergías.

Además, hemos eliminado la necesidad de que usted se preocupe excesivamente de las fluctuaciones de la frecuencia identificando *la tercer* frecuencia exhibida en la tercera velocidad como la frecuencia predominante en cualquier región particular del Aura (véase la Sección 3.0).

He Estado Practicando Psicometría y Necesito una Descripción Más Detallada de los Colores y del Significado que se Desprende del Objeto Estudiado. ¿Usted Tiene una Explicación Más Detallada en Esta Area Particular?

La práctica de psicometría implica la "vibración empática" - es decir, el establecimiento de una energía "canal" o puente entre las frecuencias del objeto y las frecuencias del cerebro. En otras palabras, su cerebro generalmente está entrenado para "reducir" sus frecuencias de modo que pueda entrar en resonancia con las frecuencias del objeto. Una buena descripción de cómo se hace esto se explica en las Series de Desarrollo Profesional en Medicina Energética de ITEM. Los

psicometristas entrenados pueden, mediante la vibración empática, discernir el origen y los acontecimientos significativos en la historia del objeto, pues cada persona que entra en contacto con él deja una huella residual de energía que las personas especialmente entrenadas pueden leer. Ésta es una habilidad que debe ser desarrollada - como visualizar el campo del Aura. Sin embargo, el **RFI™** puede ser de algún uso para los psicometristas - determinando las frecuencias predominantes que rodean el objeto, e ingresando esa frecuencia en la función de Análisis de Punto/Objeto del software (utilizando el Nivel Psicológico), usted puede observar las energías predominantes impresas en el objeto. Por ejemplo, si el campo del objeto es "rojo," el psicometrista tendría una idea básica de que este objeto fue altamente deseado por su valor material o que su dueño era una persona materialista.

El Ruido de Fondo en Nuestra Casa Fluctúa Alrededor de los 40-50 MHz, y las Frecuencias de Nuestras Auras están en el Mismo Rango General. Los Valores del Aura Parecen Desviarse Sistemáticamente de los Valores del Ruido de Fondo. ¿Por Qué Algunas Personas Tienen Valores Relativamente Bajos Como Nosotros y Otras Tienen Valores Mucho Más Altos (en Centenares de MHZ)?

Fundamentalmente, las bioenergías ambientales en su entorno (radiación natural de fondo) pueden desempeñar un papel importante en las frecuencias expresadas en su propia Aura. Si las bioenergías ambientales están en el rango de los 300 - 400 MHz, por ejemplo, sus propias bioenergías pueden estar típicamente en este rango o un poco más arriba. Hay de hecho una pregunta sobre las bases de la causa y el efecto para las bioenergías ambientales – por un lado, si usted y el resto de los habitantes de la casa tienen campos de energía fuertes (es decir, si usted es de voluntad fuerte por naturaleza, carismático, de mucha energía, etc.), puede afectar las bioenergías ambientales circundantes de su hogar. Por otra parte si usted está deprimido, tiene la autoestima baja, etc., usted es más receptivo a las influencias de su ambiente y las bioenergías ambientales pueden afectar su campo bioenergético.

Hay otras consideraciones también: 1) si usted es muy receptivo a los campos de energía de su ambiente, puede encontrar que su campo bioenergético cambiará de un ambiente a otro (por ejemplo su Chakra Coronario puede ser de 60 MHz en su casa y de 200 MHz en su trabajo); 2) la presencia o la ausencia de otras bioenergías, tales como plantas, pueden aumentar las frecuencias en un cuarto - también, la posición de las plantas e incluso de objetos inanimados como los muebles pueden cambiar los patrones de frecuencia del cuarto; 3) hay una posibilidad de que las bioenergías de sus manos proyecten energía que la antena este tomando realmente.

En otras palabras, usted puede estar leyendo sus propias frecuencias del nivel externo del Aura cuando usted está procurando medir el espacio aéreo ambiental de su hogar. Una buena manera de probar esto es tener puestos los guantes 100% de algodón, esperar varios minutos para que el algodón comience a absorber el campo bioenergético de sus manos (lo que causa la retracción del mismo hacia el cuerpo), luego recoja sus medidas. Si las frecuencias parecen ser diferentes a las de antes, usted podría concluir que previamente estaba midiendo accidentalmente su propio campo de energía. También, recuerde "limpiar" la antena con frecuencia al tomar medidas.

¿Usted Ha Oído Hablar de Alguna Persona Ofreciendo un Accesorio para el Contador de Frecuencia del RFI™ que Nos Permitiría Conectarlo Directamente a la Computadora? Eso Aumentaría la Precisión de la Medición Permitiéndonos Calcular los Valores Promedio en un Tiempo Dado.

Estamos experimentando con ese tema justamente ahora. La razón por la cual no hemos actualizado el **RFI™** a este nivel de integración en tiempo real de los datos hasta este punto tiene dos cuestiones: 1) la tarea de programación de convertir mediciones digitales de frecuencia, de enviarlas a través de un puerto Rs-232 o USB a su computadora, y después transformar los datos en información útil que pueda ser monitoreada, es una tarea muy complicada de hecho aunque nos estamos moviendo gradualmente en esa dirección; y 2) la gran mayoría de los usuarios del **RFI™** está

feliz con el proceso pues la mayoría goza del control "a nivel del usuario ". Sin embargo, estamos trabajando en una característica en tiempo real de integración de datos, aunque puede no estar lista hasta dentro de un año o dos. Todos los usuarios licenciados del **RFI™** tendrán la oportunidad de pedir modelos actualizados con descuentos sustanciales.

Acabo de Tomar Medidas del RFI™ para Comprobar el Espacio Donde Estaría Trabajando sobre Mis Clientes. Las lecturas son muy altas, 800 MHz, 600 MHz, etc., con la mayoría en el rango de los 800. He Medido Varios Edificios pero Este es el de Medidas Más Altas. ¿Usted Tiene Alguna Idea de Porqué Serían Tan Altas? Hay Plantas en el Centro del edificio. También He Notado Registros Más Elevados en Mis Clientes Medidos en Este Edificio.

Hay un arte oriental llamado Sheng Fui que implica la orientación de ciertas formas geométricas, de los muebles y de las plantas en disposiciones que promueven atmósferas curativas. Una posibilidad, es que el edificio esté ante todo situado en una localización ideal (estos son los llamados "nodos de energía" situados por todas partes del mundo en localizaciones matemáticamente definidas que son conocidas por ser generadores de energía), y los objetos dentro del edificio estén situados para promover la generación de energías. Hemos oído que la colocación de ciertas plantas en el centro del cuarto tiende a maximizar la atmósfera curativa. Otra posibilidad puede ser que haya un cierto tipo de transmisor de alta frecuencia en alguna parte del edificio, no obstante dudo que éste sea el caso a menos que haya algún tipo de torre de transmisión de radio o celular o una empresa de servicios localizada dentro, sobre o cerca del edificio.

Una cosa interesante a probar aquí seria medir a la gente mientras está en el edificio, luego posteriomente hacerlo cuando está en su casa. Sería interesante ver si las bioenergías disminuyen en frecuencias, lo cual sería probable, pero también ver si los

colores siguen siendo similares. Si usted ve cantidad de rojos y de grises/negros en la Aura mientras que están en sus casas, luego observa violetas, verdes y azules cuando están en el edificio, ésta sería una buena evidencia para apoyar que el edificio es una zona curativa natural.

Las Lecturas RFI™ Fluctúan desde 200 MHz a 800 MHz Mientras que Roto 360 grados. Por otra parte, Cada Vez que Roto, Mi Cabeza Empieza a dar Vueltas. He Realizado Mediciones Mucho Mejores en Otros Lugares y las Lecturas No Fluctúan Más Allá de los 100 MHz, y Mi Cabeza No Me Da Vueltas . ¿Hay Alguna Posibilidad de que Ondas Armónicas en la Casa Originen Cargas Mentales Caóticas en el Cerebro que Hagan que las Personas Sensibles Tengan Alucinaciones e Insomnio?

El tema aquí para el análisis científico no es la "fluctuación," sino más bien la "detección" de ciertos niveles de frecuencia. El mero hecho del cambio en las frecuencias no nos dice nada que podamos interpretar, a excepción de que el ambiente es relativamente inestable. El nivel de las frecuencias que usted detectó, sin embargo, puede ser interpretado. La frecuencia de la resonancia de los campos de energía define su nivel del "informatibilidad", también llamado “infoconductivilidad" o índice del "intercambio energoinformático". Por consiguiente, las frecuencias bajas indican que el campo de energía detectado tiene baja actividad, baja influencia en el cerebro y en el cuerpo humano, y un bajo nivel de intercambio de información energética o energoinformación (bioenergías) entre sí mismo y entre otros seres humanos. Inversamente, los de alta frecuencia indican que el campo de energía tiene un alto nivel de intercambio de energoinformación con los seres humanos, de este modo, tiene una alta influencia en el cerebro y el cuerpo. Conforme usted rota 360 grados, eventualmente cambia de dirección la antena hacia el comienzo de un campo de energía sumamente activo. Diríamos científicamente que usted "detectó" ese campo, y que el campo tiene " alta informatibilidad" y de este modo también tiene una alta influencia en el cerebro y el cuerpo. Esta es la razón por la cual usted tiene esas

sensaciones cuando lo encuentra.

He Medido Frecuencias de 80 a 110 MHz en la Mayoría de los Cuartos de Mi Hogar, Pero He Descubierto un Área muy pequeña en Donde la Frecuencia salta a 650 - 750 MHz. ¿Qué Significa Esto?

Podría significar muchas cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hemos realizado investigaciones paranormales, hemos notado un "salto" significativo en las frecuencias ambientales al encontrar un "portal" de entrada o salida de entidades metafísicas de nuestro "plano" o "dimensión." Asimismo, si usted está familiarizado con las pirámides y las energías geométricas, sabrá que hay un "punto focal" de altísima energía en relación con las áreas circundantes– quizás algo en el cuarto está actuando como generador de energía en este sentido. Hay un sin fin de posibilidades, y podemos ayudarle con las interpretaciones de lo que usted encuentre, pero en última instancia aprenderá a evaluar estas situaciones y sacará sus propias conclusiones a través de la experiencia (como nosotros). Recuerde, fundamentalmente, que cada número que usted lea en el contador es un número "correcto". Si los números "saltan" frecuentemente, esto sólo significa que hay oscilaciones de alta energía "dinámica" o "inestable", y que diversas ondas EM se están superponiendo en el mismo espacio.

¿Hay una Posición Ideal en la que Debe Encontrarse el Cliente para Realizar las Lecturas – Parado, Sentado, o Acostado? Logro Lecturas Muy Diferentes En Cada Posición, Separadas Una de Otra por Escasos Minutos Solamente.

No recomendamos que el sujeto se acueste durante las mediciones, porque se hace incapié en que la recolección de los datos es del frente y de los costados del cuerpo; al acostarse, es más difícil colocar la antena correctamente para obtener datos de los lados del cuerpo que cuando el sueto está parado o sentado en un banco. Usted

siempre debería mantener la antena situada en forma perpendicular al cuerpo y paralela al piso, con el "clip" de la antena en el punto medio aproximado de la región de interés. Cambiar la orientación de la antena de perpendicular a paralela al cuerpo definitivamente introducirá una mayor área del Aura con la cual la antena deberá interactuar, y de esta manera influenciará sus frecuencias medidas.

He Desarrollado Mi Propio Método de Consistencia Al Medir a la Misma Persona de la Misma Manera Durante Varios Días, y No Obstante Eso las Lecturas son Muy Diferentes Cada Vez. El Resutado Parece Ser Totalmente Aleatorio Haga lo que Haga. ¿Tiene Alguna Sugerencia que Me Ayude a Conseguir un Cierto Grado de Consistencia o Me Enseñe a Analizar los Resultados para Poder Ver un Cierto Nivel Muy Básico de Consistencia?

Tendríamos que hacerle una cantidad de preguntas antes de poder evaluar esto un poco más; por ejemplo, si los datos de frecuencia no parecen ser constantes, ¿hay un cierto nivel de consistencia en los colores? ¿Está la persona en el mismo estado físico y emocional cada vez? ¿Es la misma hora? ¿Está en la misma lugar físico? ¿Usted está usando siempre la chaqueta de laboratorio de algodón? ¿"Limpia" frecuentemente la antena? ¿Ha observado alguna respuesta con el filtro encendido o en el gráfico de barras de la fuerza de la señal? Hay a la distancia demasiadas variables para evaluar esto en este momento. Por lo menos en un caso, un usuario registró casi cada variable posible, y realmente pudimos comprender qué era lo que potencialmente podría estar sucediendo. Lo que nosotros sabemos es que las frecuencias "saltan" debido a factores o razones específicas, y que esas razones se pueden descubrir con paciencia y experiencia; nada en el universo es verdaderamente aleatorio en el sentido de que no hay nada carente de significado. ITEM está siempre disponible para asistirle en este tipo de condiciones, pero para que ITEM le brinde el máximo beneficio, usted necesitará definir exactamente las condiciones y los detalles de su situación.

¿Tiene Usted Alguna Base de Datos de Lecturas a la Cual Yo Podría Acceder para Realizar una Comparación y Poder Obtener Alguna Idea Sobre lo que Usted u Otras Personas Han Encontrado?

Hemos estado rastreando la investigación de nuestra red global de investigadores **RFI™** por varios años. Los resultados generalmente no son almacenados en una base de datos electrónica, sino más bien como " archivos de casos." Si usted está interesado en una línea particular de investigación, podemos ponerlo en contacto con otros investigadores del mundo con intereses similares.

Tengo una Pregunta Sobre las Mediciones del RFI™. Me Parece que las Medidas que Recojo Varían tanto como 50 MHz más o menos Dependiendo de la Dirección a la que Me Enfrento. ¿ Esto Es Normal?

Al detectar y evaluar energías sutiles, toda es muy específico del sitio. Es decir, realmente depende mucho del ambiente donde se estén realizando las lecturas, incluyendo la presencia de personas, otras cosas vivas, incluso las entidades "metafísicas", y a menudo la presencia de cristales y de imanes en un cuarto pueden causar tales respuestas. También, debe considerar que su propia Aura puede cambiar con frecuencia, y que usted está detectando la influencia de su propia Aura en el ambiente circundante.

Cuando usted detecta tal respuesta "variable" o relativamente "inestable", es un indicador del nivel del intercambio de información energética en sus alrededores. Algunas veces usted puede ser capaz de encontrar sitios que están desprovistos de cualquier cosa excepto de radiación natural de fondo, y las lecturas de frecuencia pueden ser relativamente estáticas. Otras veces, cuando usted piensa que está en un punto donde posiblemente nada podría influenciar las lecturas, pueden encontrar "puntos de alta frecuencia" que parecen venir de ninguna parte. Es entonces interesante investigar la fuente de esas impregnaciones de energía.. En un caso, un

investigador estableció que un ser amado a muchas millas de distancia pensara intensamente en él - en el mismo momento aproximado, el investigador comenzó a recibir lecturas inusualmente variables y anormales del ambiente en el cual él se encontraba. Al intentar reproducir este descubrimiento, consiguió resultados diversos – la transmisión telepática causó a veces "excitación," y a veces no, y no estamos totalmente seguros porqué no funcionó todo el tiempo.

El sistema **RFI™**, como cualquier otro "sistema" como por ejemplo un EEG o cualquier cosa que proporcione un ida y vuelta variable de datos, requiere experiencia y una buena comprensión de los fundamentos para su uso eficiente. Nos gusta enfatizarles a las personas que se tomen su tiempo para leer los materiales antes de lanzarse a realizar demasiados experimentos. La gente no lee los materiales, tiene ciertas expectativas en su mente, y salta directamente a realizar lecturas completas sobre los sujetos - esto a menudo conduce a la confusión y a veces a la decepción porque no se han tomado el tiempo de aprender cómo hacer realmente las cosas. Así que recomendaría tomarse su tiempo con él, y entrar en contacto con ITEM y hacer preguntas. La energía es perpetua y a menudo imprevisible, así que el llegar a ser sabio en la detección eficiente de esta energía es la mejor cosa que los usuarios del **RFI™** pueden hacer antes de saltar demasiado aprisa (esta es la razón por la cual nosotros apoyamos a que los usuarios **RFI™** tomen lass Serie Desarrollo Profesional en Medicina Energética conjuntamente con el aprendizaje del **RFI™**).

¿Cómo Puedo Utilizar el RFI™ para Investigar Muestras de Sangre?

Usted puede colocar muestras de la sangre en un plato de petri pequeño (como los utilizados para cultivar bacterias o células), cerciorándose, por supuesto, de que no haya interferencia en el área (utilizando el gráfico de barras de la fuerza de la señal y el filtro para chequearlo). Usted puede incluso querer considerar el colocar la muestra bajo cierta clase de cristal o dispositivo metálico de protección (dejando un espacio para el ingreso de la antena), lo cual ayudará a reflejar algunas frecuencias

extrañas dentro del cuarto. Utilice la longitud más corta de la antena. Coloque el plato de petri que contiene la muestra en una superficie plana y limpia, y ponga el extremo de la antena tan cerca de la muestra como pueda sin entrar en contacto con ella, sosteniendo el contador y la antena paralelos a la superficie plana. Si hay otras personas en el cuarto, estas deberían estar paradas por lo menos a 6 pies de distancia de la muestra cuando usted realiza la medición, para asegurarse de que la antena no tome sus campos. También recomendaríamos el uso de los guantes 100% de algodón que ayudarán a absorber algunas de las energías que irradian de su mano. Utilizando el tercer ajuste de la velocidad, lleve el extremo de la antena al lado de la muestra y déjelo cerca de 15 segundos o hasta ver que las lecturas se "equillibran" o se estabilizan. Si las lecturas parecen saltar frecuentemente, esto es posiblemente un indicador de una muestra de sangre "sana", pues la sangre está irradiando mucha información. Si las lecturas no se estabilizan, entonces presione el botón de Pausa después de la tercera lectura y utilice esta frecuencia ingresándola directamente en la función de “Análisis de Punto/Objeto" del software (Análisis del Nivel de Salud) para examinar la interpretación. Cerciorarse de registrar la frecuencia, para compararla con otras muestras. En general, es justo decir que frecuencias más altas indican generalmente una muestra "más sana" porque hay un índice más alto del intercambio de energoinformación entre la muestra y el ambiente (es decir, las células y los líquidos de la sangre intercambian oxígeno y nutrientes a una mayor velocidad). Este procedimiento se puede utilizar para otras muestras biológicas también.

¿ Qué Probabilidaes Hay De Que una Persona Pueda Tener una Determinada Configuración del Aura en Algún Momento en Particular?

La fórmula matemática para calcular el número de permutaciones de un sistema fijo es $N = X^{Y}$ es decir, N = X a la potencia exponencial Y. En este fórmula, X = el número de los valores variables (es decir, colores), Y = el número de regiones espaciales fijas, o posiciones, y N = el número resultante de las permutaciones.

Usando la fórmula de la permutación, podemos calcular el número de las diversas configuraciones posibles del Aura que una persona podría tener en cualquier momento en particular.

Hay 40 regiones del Aura que conforman una gráfica color del **RFI™**, cada una de las cuales puede tener cualesquiera de los 15 diversos colores en cualquier momento en el tiempo. Por lo tanto, el Aura humana en su totalidad tendrá por lo menos 1.1×10^{47} permutaciones (combinaciones posibles) de las configuraciones del Aura en cualquier momento particular en el tiempo (15^{40}). Es casi imposible describir la magnitud increíble de este número de combinaciones. En otras palabras hay menos de una en un trillón trillón trillón trillón de posibilidades de que una persona en particular pudiera tener una configuración particular del Aura en un momento en particular. La improbabilidad matemática fenomenal de tener alguna configuración particular del Aura está imponiendo la evidencia de que debe haber una cierta razón substancial por la que la persona no tuvo una de las más de millones de trillones de otras diversas Auras, y demuestra que la configuración particular del Aura detectada por el **RFI™** no puede ser descartada simplemente como producto de la casualidad o del error. Estadísticamente, no puede ser simplemente una coincidencia el tener una configuración particular del Aura, especialmente cuando esa Aura, estando empíricamente interpretada, tiene una relación estrecha y fuertemente racional con la salud clínicamente verificada de la persona y a sus estados psicológicos. El hecho de que el **RFI™** detecte exitosamente aquella configuración individual extremadamente improbable del Aura, que refleja exacta y precisamente la condición real de la persona, es la prueba práctica de que los resultados del **RFI™** son válidos.

7.0 AURA POR IMÁGENES: TALLER Y DEBATE

Lo que sigue es un extracto de la trascripción de ITEM de las conferencias y de los debates de la clase titulada Conferencias sobre la Ciencia Energoinformática: Un Curso de Dos Meses en Medicina Energética. El curso fue celebrado en Moscú, Rusia, del 7 de abril al 9 de junio de 1998.

Proporcionamos este extracto como guía adicional mientras que usted comienza a entender cómo utilizar el **RFI™** en la práctica. Por favor, tenga presente que las lecturas del **RFI™** descritas aquí fueron realizadas antes de tener los actuales modelos de contador de frecuencia y programa del software del **RFI™**.

7.1 LOS PARTICIPANTES

Matthew Greene, J.D. (PROFESOR): Fundador de ITEM, inventor primario del **RFI™**, procurador en leyes especializado en salud, hipnoterapeuta médico certificado, psicólogo paranormal certificado, miembro fundador de la Asociación Nacional de Psicología Transpersonal (USA), miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, presidente del Subcomité de Informaciones del Gobierno de la Cámara Americana De Comercio en la Comisión de Salud de Moscú.

AJ White, R.N., M.S. (AJ): Enfermera de cuidados intensivos, profesora de la facultad de medicina, ex presidente de la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Intensivos, ex practicante de cuidados primarios de la Embajada Americana en la Unidad de Salud de Moscú, y miembro de la Cámara de Comercio Americana en el Comité de Salud de Moscú.

Mohammad Mirza, M.D. (MIRZA): Doctor en medicina, cirujano de emergencias, ex oficial médico del Hospital del Gobierno de Pakistán, y ex oficial médico del Ministerio de Salud de Irán.

Steve Pleickhardt, D.M.D. (STEVE): Cirujano dental, cirujano del staff del Centro Dental Americano en Moscú, Rusia.

Laura Verbitsky (LAURA): Viaja desde Escocia, estudiante de ciencias metafísicas y parapsicología en la República Checa, Rusia, Irlanda, Singapur, y Egipto.

7.2 DEBATE SOBRE LA ESTRUCTURA Y LA INTERPRETACIÓN DEL AURA

PROFESOR: Muy bien. En la clase pasada, hablábamos del sistema de los Chakras. Puesto que AJ no estaba aquí, AJ, ¿usted tiene algún conocimiento propio, independiente, acerca de lo que es un Chakra?

AJ: Realmente, la última definición de la que he oído hablar sobre los Chakras, que probablemente me resulta la mejor y que podemos relacionar con la época actual, es la información que viene de Carolyn Myss. Es de un libro llamado "Anatomía del Espíritu," un libro que ella escribió. Su definición - o interpretación – me parece la mejor, porque podemos relacionarla con lo que ahora sabemos. En oposición con la afirmación de los Chakras como "vórtices" de energía, donde usted capta energía o interactúa con la energía del mundo, ella los describe más bien como piezas de una computadora que procesan información de ese área en particular, por ejemplo del Chakra Base, y de la energía que lo recorre. Esto crea justamente un conjunto de gran sentido, ya que si nos integramos a la energía del mundo, considerando a esa energía mundial como teniendo toda la información del mundo, entonces usted procesa dicha información a través de esas diferentes partes de procesamiento en su cuerpo. ¿No es una buena idea? ¿No es una manera agradable del pensar acerca de esto? Es buena para mí. Se ajusta bien a mi hemisferio derecho.

PROFESOR: Los Chakras, entonces, son canales de intercambio de información energética entre el ambiente externo y el cuerpo humano y la mente.

AJ: Correcto.

PROFESOR: Repasemos un pedacito de la clase pasada, porque vamos a ver algunos Chakras hoy. Vimos la explicación rusa sobre qué son los Chakras, la cual está basada en la teoría del cerebro derecho e izquierdo, de cómo las energías ingresan por el lado izquierdo del cuerpo y salen por el lado derecho, a lo largo de la espina dorsal del lado izquierdo del cuerpo las energías fluyen hacia arriba, y en el derecho fluyen hacia abajo. En ciertos puntos, donde se localizan los Chakras, las energías "se entrecruzan" de modo que el flujo derecho se dirige hacia la izquierda, y el flujo izquierdo se dirige hacia la derecha, de manera que ellos se cruzan y recruzan antes de continuar con sus trayectorias originales. Luego abordamos la física del campo eléctrico y de cómo, cuando se cruzan, fluyen en el sentido de las agujas del reloj en un círculo, y fluyendo de esta manera, en un círculo, generan un campo de torsión, y salen disparados hacia delante, penetrando todos los niveles del Aura, a la vez que también es generado un campo electromagnético más limitado que irradia hacia fuera, tanto hacia delante como hacia atrás.

Ahora bien, el Aura en sí misma tiene dos niveles primarios. Entre las 0-4 pulgadas del cuerpo físico, se llama "Nivel de Salud," porque ese nivel está tan cerca del cuerpo, que refleja las emanaciones más pequeñas, de nivel inferior de la actividad celular, de la actividad eléctrica neurológica con sus campos circundantes, y precisamente de la materia biológica. De tal modo, la información que conseguimos de ese nivel interno del Aura es información de la salud, información del funcionamiento físico del cuerpo biológico. Entre las 4-18 pulgadas del cuerpo - un área mucho más grande – está lo que se denomina "Nivel Emocional," o "Cuerpo Emocional." Este nivel comprende más de la psicología, las ondas cerebrales, y las emociones, y esas energías sutiles que atraviesan y rodean el cuerpo humano. Luego, en la parte superior, por encima del nivel emocional, sobre los hombros y la cabeza, cerca de las 18-24 pulgadas más allá del cuerpo, se localiza algo que llamamos "Cuerpo Causal", el cual también puede ser considerado nuestro "Yo superior". Ésas son las energías mentales más profundas que tienen que ver con nuestro ser metafísico, nuestro campo eléctrico de conciencia del cual se cree que se manifiesta y se transforma en el cuerpo físico, o, más exactamente, habita el cuerpo físico y lo manipula a través del cerebro eléctrico.

De esta manera estos puntos Chakra, los puntos donde las energías que fluyen se cruzan hacia

el otro lado y regresan en ciertas localizaciones a lo largo de la columna espinal, estas bioenergías salen disparadas, y penetran todos los diversos niveles del Aura. De este modo cuando usted lee un Chakra, tiene que interpretarlo de un modo diferente que a un campo eléctrico que indica condiciones de salud o condiciones psicológicas. Son un poco más puros, y menos variables, de modo que son más invariables, o fijos.

Tradicionalmente, los colores asociados a los Chakras, partiendo del Chakra inferior hacia arriba, son rojo en el Chakra Base, naranja en el Chakra Sacral, amarillo en el Plexo Solar, verde en el Corazón, azul en la Garganta, y violeta alrededor del área tradicional del Tercer Ojo, sobre la frente. Y luego en la parte superior, está el lila llamado "Chakra Corona," que es también el Cuerpo Causal. Estos colores son los colores básicos del espectro óptico, como los colores primarios de la bioenergía - no los colores primarios visuales de un artista, sino más bien los colores fundamentales de la bioenergía. Dentro del universo, y de la energoinformación que puede clasificarse como colores, éstos son los siete colores básicos identificables - colores distinguibles - y cada frecuencia de color representa la información distintiva de la energía. De manera que cuando detectamos bioenergía de cierto color, si es uno de estos colores primarios, sabemos cuál es la interpretación, cuál es el significado. Sabemos esto sólo experimentalmente, porque hemos podido calcular las frecuencias de los diversos colores del espectro, y los hicimos resonar hacia abajo en el rango electromagnético. Entonces, cuando utilizamos una antena electromagnética para leerlos, como en este contador de frecuencia, obtenemos ese número y podemos decir qué color son. Luego, por supuesto, podemos observar al paciente para ver si su condición física o psicológica real corresponde a la información bioenergética que se refleja en ese Chakra, o parte del Aura. De modo que ésta es la teoría básica del Aura por imágenes que utiliza los campos electromagnéticos.

En estos puntos del cuerpo humano, en el sistema de los Chakras, tenemos esta teoría que si una persona está "equilibrada" - en otras palabras, saludable, o psicológicamente equilibrada - entonces todas las áreas de los Chakras en cada posición reflejarán esos colores tradicionales que se cree deben estar allí. Por ejemplo, el área del corazón, tradicionalmente se considera verde, pero experimentalmente se encuentra que no es necesariamente verde, sino que pueden encontrarse muchos colores diferentes. El practicante en metafísica que ve la bioenergía en esa

área, y dice "es azul, cuando *se supone* que debería ser verde, de modo que debe estar desequilibrado, por lo cual debemos hacer algo para corregir la energía de este paciente y que vuelva a ser verde, lo cual es lo que *se supone* que debe ser." ¿Alguna idea sobre esto?

AJ: Primero que nada, no he oído a la gente decir eso, y no puedo entender porqué alguien desearía hacer eso. No tiene sentido para mí. Personalmente, no intentaría cambiar la bioenergía de cierta área suponiendo que ésa fuese la manera.

PROFESOR: Correcto. Pienso que su pregunta de "¿porqué desearíamos hacer eso?" es exactamente la pregunta correcta que hay que responder, porque en medicina energética tenemos que dirigir los tratamientos para cada paciente en particular. La salud es una cosa muy individual, y lo que es saludable para una persona no es necesariamente saludable para otra persona. Usted realmente da en el clavo, pero muchos terapeutas en bioenergía y curadores psíquicos toman ese camino con la filosofía de que éstas son las energías "universales" y ésas son las posiciones "naturales" de esas energías, así que si son diferentes entonces debe haber un problema que necesita ser solucionado, pero claramente hay algunos defectos e imperfecciones en ese acercamiento a la terapia.

Pero lo que está claro - observacionalmente claro - es que en cada Chakra, el color tradicional y el significado de ese color, identifica el tema, la categoría de la información que es tratada por la posición de esa bioenergía. Así pues, por ejemplo, el Chakra Cardíaco emana mucha bioenergía en un vórtice, y se supone que debería ser de color verde para ser considerado "equilibrado," de esta manera, si es de color verde significa que no hay obstáculos, no hay ninguna condición ni ninguna otra cosa alterando el flujo natural de esas energías universales, de modo que es saludable. Si hay algo "en medio", en cambio, por ejemplo violeta en lugar del verde, pero está en el Chakra verde, lo que nos dice eso es lo que está dentro de esa categoría - o tema - de la vida de la persona, que serían las emociones en el caso del Chakra Cardíaco. Por consiguiente, sabemos que cualquier energía localizada en el Chakra Cardíaco describe la condición - o el estado - de las emociones de esa persona. De modo que en lugar de decir esta persona está "desequilibrada" y que hay un "bloqueo" o algo que tiene que ser removido, en lugar de eso lo vemos como una información valiosa. Puede ser incluso información de diagnóstico que podemos

utilizar para analizar la condición del paciente, emocional y físicamente.

AJ: Pienso que probablemente una de las cosas más importantes para decir, es que se tiende a pensar que tenemos que "arreglar" a todos, y encontramos que no podemos quitar un mecanismo de defensa o algo que alguien tiene, a menos que usted tenga la habilidad de brindarle otras opciones. Por lo tanto, aunque las cosas no parezcan visualmente correctas, aún es lo correcto para esa persona en ese momento. Quizá en otro momento, habrá procesado lo que fuere que esa cuestión sea, y las cosas cambiarán, pero pienso que eso es parte de ser poco criterioso, y no se puede decir "pienso que esto no está bien, déjame arreglarlo para usted." No funciona.

PROFESOR: Eso es absolutamente correcto, y los mecanismos de defensa son un tema muy importante a abordar. Eso lleva a la cuestión de "¿qué es salud?" y cómo definimos salud. La salud es efectivamente qué tan adecuadamente una persona interactúa con su entorno, y si puede funcionar de una manera eficaz y apropiada en su entorno. De esta manera, la salud es una característica de funcionamiento, y no de algunos valores normativos que serían impuestos sobre las personas.

AJ: [Riendo] hay algunas personas que podrían decir que aquellos de nosotros que han elegido vivir en Rusia en este tiempo particular han elegido tener una psicosis funcional estando aquí, pero el comportamiento que exhibimos aquí que no sería aceptable en otro entorno, es perfectamente aceptable aquí.

PROFESOR: ¿Oh, usted habla de todos esos tratos con la Mafia que usted hace cada día, AJ? [Risas] Sí, esa clase de cosas.

AJ: Exactamente.

PROFESOR: Eso es saludable en este ambiente, y no es saludable allá en los Estados.

AJ: Correcto, no es saludable en otra parte. Pienso que es una nota adicional importante aquí, porque pienso que la gente se comporta de manera diferente aquí que en sus propios lugares.

PROFESOR: Sí, y una gran parte del entorno, y del ajuste al entorno, es el entorno psicológico. Por ejemplo, si el niño A está viviendo en un hogar abusivo, y el niño B está viviendo en un hogar saludable, emocionalmente comprensivo, lo saludable para el niño B en el hogar comprensivo sería tener todos sus canales de energía, su Chakras, "abiertos" y fluyendo en sus colores naturales, teniendo una saludable apertura para recibir energías emocionales, y una mente subconsciente abierta a recibir montones de sugerencias, porque está obteniendo estímulo, ayuda, educación y así sucesivamente, entonces tener todos los Chakras supuestamente "balanceados" y "abiertos" con sus colores predeterminados es una condición saludable. Para el niño A en el hogar abusivo, ésa no sería una condición saludable, sino una condición muy malsana, que haría al niño muy vulnerable al impacto y al daño máximos a la salud física y psicológica proveniente del entorno. De modo que una condición "saludable" para el niño A debería ser precisamente tener algún "bloqueo" en ciertas áreas, particularmente en el Chakra Cardíaco, relacionado con las emociones, y en el Chakra de la Garganta, relacionado con la comunicación y la apertura.

AJ: Acabo de oír hablar de un nuevo libro que ha salido, escrito por una psiquiatra que ha pasado muchas horas entrevistando asesinos seriales que han estado bajo pena de muerte en los Estados Unidos. Lo que ella descubrió fue que estas personas eran básicamente seres humanos vulnerables, y que el 99.9 por ciento de ellos vinieron de hogares con situaciones muy abusivas, y también con la posibilidad de haber desarrollado una cierta clase de disfunción cerebral, que por supuesto podría estar relacionada con el padecimiento de estas situaciones abusivas, las cuales afectan la manera en que su cerebro procesa y se desarrolla. De modo que si alguien se vuelve disfuncional, a la edad de 2 o 3 años, puede pasar desapercibido socialmente, a menos que por supuesto salga y mate a pequeños gatos y cosas por el estilo, y parezca ser una persona normal hasta que repentinamente este comportamiento se exhiba más adelante en extrañas matanzas seriales. De todas formas, pensé que era muy interesante que los denominadores comunes que ella iba encontrando fueran el abuso y la posible disfunción en el desarrollo cerebral. Todas esas variables se articulan, si la energía que alguien toma a una corta edad cuando está muy abierto y vulnerable es tan negativa que hace que el cerebro desarrolle una disfunción, lo cual también causaría obviamente una enorme disfunción emocional. Así que si pudiéramos realizar imágenes

del Aura de estas personas, sería muy interesante.

PROFESOR: Realmente, usted podría realizar imágenes del Aura, pero las imágenes tendrían que ser interpretadas no por valores normativos, sino con una minuciosa comprensión y realizando un estudio cuidadoso del caso del entorno pasado y actual del individuo. Para los Chakras, por lo menos, no podemos sólo mirar las bioenergías y hacer una conclusión definitiva acerca de si son "saludables" o no, pero lo qué sí *podemos* obtener sin ningún historial, es una comprensión de la condición en la que se encuentran ahora. Podemos tomar a alguien sin ninguna comprensión de su historia o de su situación o entorno actual y observar qué información energética se encuentra en qué Chakra. Una vez más, cada Chakra es la categoría de una cierta área o esfera de la vida de esa persona.

El Chakra Base contiene la información sobre la categoría de la sexualidad, personalidad y de la propia identidad. Si no es rojo, y encontramos algún otro color allí como el naranja, el naranja es energía curativa. Por lo tanto, si observamos el Chakra "rojo" y encontramos el color naranja, la manera en la que describimos esto es diciendo que existe energía de color naranja en la categoría roja. En este ejemplo, en otras palabras, hay energía curativa en la categoría que describe la propia identidad. De modo que si hay energía curativa en esa categoría, eso nos dice que existe un cierto desafío en el área de la propia identidad, un cierto problema que es la razón de porqué se encuentra este color curativo. Podría ser alguien con un ego dañado por abuso psicológico y que está experimentando un proceso curativo. Por consiguiente, inmediatamente, sin saber nada sobre esta persona, podemos decir algo sobre esa área de su vida.

La siguiente área de nuestras vidas es el Chakra naranja, que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con lo curativo. De manera que si hay una bioenergía diferente en la categoría curativa, eso nos diría ya sea qué tipo de curación está experimentando la persona en estos momentos, como en qué áreas esta actuando dicha curación. Por ejemplo, si hay verde - que se refiere a las emociones - en el Chakra naranja, entonces eso significa que existe información acerca de la emoción en el área de su vida que involucra la curación. De modo que nos indicará que las energías curativas de esta persona están siendo aplicadas en ese momento a las cuestiones emocionales. De manera que en el Chakra curativo, la pregunta es "¿qué tipo de

curación?". Puesto que hay energía verde, la respuesta es "curación emocional." Ya que no hay naranja allí, podemos preguntar, "¿donde van esas energías naranjas?". Bien, van hacia las áreas de las cuestiones emocionales.

Luego, observamos el Chakra amarillo, que representa básicamente a las glándulas suprarrenales, relacionado con la actividad nerviosa. Esta categoría indica algo acerca de las condiciones nerviosas o de las condiciones de la adrenalina. No significa necesariamente que la persona es o está nerviosa, podría haber ya sea una sobre-estimulación o una sub-estimulación, así que la persona podría estar absolutamente relajada incluso con una bioenergía amarilla. El Chakra amarillo, entonces, es una categoría que guarda relación con estar nervioso o relajado. De modo que cualquier bioenergía que esté situada en el Chakra amarillo nos dice qué cosas influencian la condición de nerviosismo o de calma de esa persona. Si observamos a una persona que obviamente está muy relajada, y observamos qué color de información energética está en el Chakra amarillo, puede ser que encontremos el azul. La pregunta es "¿qué factores están contribuyendo al estado de relajación de esta persona?". Si la respuesta es azul, el cual se relaciona con la comunicación, ésta es una persona que se siente relajada y confortada cuando tiene buena comunicación en su entorno.

Los Chakras en sí mismos identifican la categoría de un área de la vida de la persona. El color de la bioenergía presente en un Chakra, entonces, describe tanto la esfera de la vida de la persona a la cual las energías de ese Chakra están siendo destinadas, como el factor, acontecimiento o tema que está influenciando y predominando sobre el área de la vida de la persona descrita por la categoría del Chakra. Esto es diferente de cuando leemos el Aura y hay una cierta parte del Aura - no de los Chakras - que tiene cierto color de bioenergía. Eso indica solamente que hay cierto color de información energética que se asocia a esa región física, y no indica tanto sobre la vida o la psicología de la persona como lo hacen las energías en el sistema de los Chakras.

Por consiguiente, si una persona tiene un fobia acerca de cierta parte de su cuerpo tal como la mano, y teme que algo le vaya a suceder a su mano, tal como un carnicero que tema la posibilidad de cortársela, o un pianista que teme cualquier cosa improbable y desconocida que pueda sucederle a sus manos, y realmente se preocupa acerca de esto, puede ser que usted

encuentre una bioenergía amarilla en esa área de la mano. Eso indicaría que hay un cierto nerviosismo asociado a esa parte del cuerpo. Entonces, si desarrolla una cierta clase de enfermedad psicosomática en su mano, y de repente no pudiera utilizar su mano debido a cierto dolor o parálisis psicosomática, y no pudiera ir a trabajar más, la bioenergía amarilla en el Nivel de Salud le diría enseguida la razón por la que esto sucede. Esto es porque se encuentra nervioso por su mano, y desarrolló un complejo psicológico que causó una reacción psicosomática, la cual a su vez causó que su mano dejara de funcionar correctamente. Usted ahora puede corregir eso con una terapia de hipnosis, para desprogramar la creencia y el miedo y la parálisis psicosomática se irá, pudiendo entonces regresar de nuevo a su trabajo. Si se atreve [risas]. Pero qué color encontramos en el Chakra amarillo en sí mismo, es lo que justamente nos dice qué factores contribuyen a su estado general de nerviosismo o de relajación.

El Chakra Cardíaco es la categoría de las emociones, y el Chakra de la Garganta es la categoría de la comunicación, y el Chakra del Tercer Ojo es la categoría de la actividad intelectual, psíquica o espiritual. Así es que efectivamente ese es el método básico que utilizamos para analizar los Chakras. Primero miramos la categoría, que es definida por el significado del color universal tradicional asociado a ese Chakra. El color de la bioenergía que se detecta realmente en ese Chakra indica cómo la persona está procesando las situaciones de la vida definidas por esa categoría. Así es cómo interpretamos los Chakras, y esto es lo que significan para nosotros.

El resto del análisis del Nivel de Salud del Aura es simplemente ver qué bioenergías están asociadas con las diversas partes del cuerpo físico. Para el cuerpo físico, esto es muy directo. Localice la parte del cuerpo y coloque la antena allí a 4 pulgadas, y observe el color de la bioenergía que allí se presenta, y precisamente esto le dirá lisa y llanamente que hay ciertas bioenergías o energías mentales asociadas a esa parte del cuerpo.

En el Nivel Psicológico, el Nivel Emocional, hay menos asociación con el cuerpo físico, porque estamos hablando de emociones, de pensamientos y de sensaciones. De modo que nos da la mayoría de la información donde tiene aplicación la teoría del cerebro derecho-izquierdo. El lado izquierdo del cuerpo se convierte en un macrocosmos para el lado derecho del cerebro, y el lado derecho del cuerpo se convierte en un macrocosmos para el lado izquierdo del cerebro. Cuando

estamos leyendo el Nivel Emocional del área a partir de las 4 a 18 pulgadas del cuerpo, sin importar qué bioenergía se localiza en ese *lado* del cuerpo, nosotros podemos concluir que ese color de la bioenergía está presente en el hemisferio correspondiente del cerebro. Luego, usando nuestra comprensión acerca de las distinciones y las funciones predominantes del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, eso puede darnos más información sobre la psicología de esa persona. Por consiguiente, en el Nivel Emocional no estamos leyendo bioenergías de la parte específica del cuerpo y de la localización física, sino que más bien estamos observando todas las bioenergías que están en el lado izquierdo, y todas las bioenergías en el lado derecho, tomadas conjuntamente, un lado a la vez. Así es como conseguimos la mayoría de la información psicológica.

Las energías que están cerca de la cabeza, incluyendo el cuello y arriba de los hombros, tienden a no ser asociadas al cruce del cerebro-cuerpo, porque dichas bioenergías son sólo ondas cerebrales casi en su totalidad. De esta manera, específicamente alrededor de la cabeza, cualquier energía detectada en el lado izquierdo de la cabeza será simplemente bioenergía irradiada directamente del hemisferio cerebral izquierdo, y las energías en el lado derecho de la cabeza serán ondas cerebrales irradiadas directamente del hemisferio cerebral derecho. Por lo tanto, hay que recordar que una vez que se sube sobre el nivel del cuello, para el Nivel Emocional del Aura, no hay cruce. Lo que está a la izquierda es hemisferio cerebral izquierdo, y lo que está a la derecha es hemisferio cerebral derecho, y eso es así, porque son todas ondas cerebrales. Las bioenergías alrededor de la cabeza, entonces, indican las energías mentales sutiles predominantes que están ocupando bs pensamientos de la persona. De esta manera, si la persona se está concentrando en algo, o tiene un pensamiento de preocupación, primario o predominante, entonces la categoría de su vida relacionada con ese pensamiento será revelada como el color de la bioenergía correspondiente en el área de la cabeza. En contraste, las bioenergías en los lados derecho e izquierdo del cuerpo en el Nivel Emocional del Aura no reflejan los pensamientos predominantes, sino más bien más detalles y menos pensamientos predominantes, todo que esté presente en el hemisferio correspondiente del cerebro.

Ahora, para interpretar correctamente las bioenergías del Cuerpo Emocional, tenemos que recordar que el lado izquierdo del cuerpo, en donde la energía sutil externa entra a través del área

de la mano izquierda, es el lado receptivo del cuerpo. Cuando observamos las bioenergías en el lado izquierdo del cuerpo, e identificamos qué colores están allí, lo que nos está dando es una indicación muy clara de qué bioenergías e información energética se encuentran en el ambiente de esa persona. De modo que cuando observamos el lado izquierdo del cuerpo en el Nivel Emocional, realmente no estamos aprendiendo nada sobre la psicología de la persona. Lo que estamos viendo es lo que está en su ambiente, y de esta manera conseguimos un perfil psicológico de su ambiente y de las personas de su entorno, de la gente que está en su vida. Es importante entender que una persona puede estar en un ambiente muy agresivo y malsano, y aún ser muy saludable. Entonces lo que necesitamos recordar es que las energías en el lado izquierdo del Cuerpo Emocional de una persona no nos dicen nada sobre qué clase de persona es, o qué clase de psicología tiene. Esto solamente nos abre una ventana a su entorno.

El lado derecho del cuerpo, en el Nivel Emocional del Aura, revela las bioenergías que la persona proyecta hacia su ambiente, lo que le brinda a su ambiente. Una vez más los colores detectados en este lado del Aura no nos dicen demasiado del propio perfil psicológico de la persona, pero nos dicen bastante acerca de cómo la persona interactúa con su ambiente, y cómo se comporta en él.

Ahora, un área importante del análisis del Aura por imágenes compara las energías que están en el ambiente de la persona, que aparecen en el lado izquierdo del Nivel Emocional del Aura, con las energías que proyecta hacia su entorno a través del lado derecho del Cuerpo Emocional. La disparidad entre esas dos cosas puede indicar la falta de adaptación de una persona a su entorno. Por ejemplo, si en el lado izquierdo, vemos un entorno con una gran cantidad de energías de amor, bienestar y respaldo y energías curativas, y luego vemos emerger una gran cantidad de rojo y de amarillo, lo cual significa dolor o malfuncionamiento físico, y enfoque material y físico y nerviosismo, puede ser que esta persona esté mal adaptada a su ambiente. Tal vez esta persona no experimenta y no acepta apropiadamente las energías saludables que están en su entorno. Es decir, en ese caso, hay gran cantidad de amor y de afecto alrededor, y la persona no está receptiva a él, o no lo acepta por una cierta razón. Allí todavía hay algo que la incomoda, lo cual es un "bloqueo" entre las buenas energías en su ambiente y su habilidad de aceptar y de recibir esas energías y beneficiarse de ellas.

El sistema de los Chakras, en el centro de la gráfica del Aura, nos dice las características de una persona. Ésta es la información más directa sobre su perfil psicológico. Un perfil psicológico completo de una persona viene de la comparación entre los lados izquierdo y derecho del Cuerpo Emocional para considerar qué disparidades o qué fallas de adaptación pueden haber allí y, luego de observar los Chakras, ver cuáles son sus características psicológicas y su composición - en cuanto a la mecánica de su psicología. Habiendo cubierto todos estos aspectos, pienso que estamos todos listos para comenzar a hacer imágenes e interpretaciones del Aura de cada uno, a menos que alguno de ustedes tenga otra pregunta sobre la interpretación.

7.3 DEBATE SOBRE CONSIDERACIONES OPCIONALES AVANZADAS

Muy bien, así que ahora permítanme que hagamos a uno por uno algunas gráficas de Aura por imágenes y luego las interpretaremos para conseguir un cierto entrenamiento aplicando esta teoría del color. Mientras hacemos el ajuste inicial, déjenme que les hable acerca de algo útil para tener en cuenta. Mientras que estemos haciendo las exploraciones del campo eléctrico del Aura, vamos a utilizar estas chaquetas blancas de laboratorio.

Con anterioridad hemos abordado la teoría atómica, y cómo la energía deja impresiones en la materia, y cambia la manera en la que los electrones se mueven, y cómo muchas veces cambia el número de electrones disponibles. Algo importante a considerar, es que cuando usted está utilizando la tecnología **RFI™**, está sosteniendo el contador de frecuencia con la antena en su mano, y colocando la antena a la distancia de un brazo dentro del campo del Aura de la persona a la que usted le está realizando la lectura. Lo demostraré en Steve aquí… [Sosteniendo la antena de modo que penetre el Aura de Steve].

Lo que es importante recordar es que cuando usted está haciendo esto, puede ver precisamente con sus ojos que estoy casi tan cerca de la antena como Steve. Las partes externas de mi Aura se están superponiendo con la antena tanto como su Aura. Eso es un problema. Eso es interferencia. De manera que ahora cuando enciendo el contador de frecuencia y comienzo a detectar sus bioenergías, lo que puede suceder es que tal vez lea mis propias bioenergías

también. Así es que podemos leer el Aura en su totalidad, todo alrededor, y podemos no estar seguros de si son sus energías o las mías, o una combinación o un patrón de la interferencia de ambas interactuando una con otra.

Entonces he aquí cómo solucionamos esto. Observen la teoría atómica. Cuando tenemos cierta cantidad de materia fresca que tiene una gran cantidad de electrones en ella, cuando mi campo Aúrico impacta sobre esta materia física, tiene que "pasar a través" de algunos de esos electrones. Tiene que golpear a algunos de esos electrones, dejar huellas en la materia. Y lo que encontramos experimentalmente es que cuando usted tiene una chaqueta ionizada de laboratorio - es decir, una chaqueta de laboratorio con una gran cantidad de electrones adicionales en ella - y la usa sobre sus ropas, esto cubre mi Aura y la jala hacia adentro. El voltaje de mi Aura, como fue medido con un voltímetro digital usando la misma antena, va de aproximadamente los 250 mV , todo alrededor, a cerca de los 100 mV, por ejemplo. Lo que significa que mi Aura se vuelve más pequeña, tal vez no necesariamente más pequeña, sino que al menos está contenida dentro de un espacio más pequeño, más cercano a mi cuerpo.

De esta manera, ahora cuando me coloco esta chaqueta ionizada de laboratorio, tomará alrededor de una hora para que esta chaqueta de laboratorio se sature y absorba toda la información de la energía de mi Aura. Puede ser simplemente un suéter nuevo, si usted lo lavó y acaba de ponérselo, el cual puede servir también como barrera, reduciendo su Aura sólo por alrededor de una hora. Después de una hora, lo que sucede con la ropa es que se satura, porque mi cuerpo continúa produciendo bioenergía, y ésta continúa impactando sobre la ropa, y después de un rato todos los electrones en la materia estarán totalmente afectados. Después de que se satura de esta manera, la bioenergía comienza a aflorar y a pasar a través de la materia, volviendo a sus 250 mV normales, a mayor distancia de mi cuerpo. Pero ahora que acabo de ponerme esta chaqueta de laboratorio recién ionizada, mi Aura bajó de cerca de las 24 pulgadas de mi cuerpo a solamente 10 pulgadas de él. Entonces ahora, cuando extiendo la antena y me preparo para leer el Aura de alguien, mi propia Aura aflora solo a 10 pulgadas, por lo cual incluso no llega a alcanzar a mi mano que sostiene el contador de frecuencia, aislando perfectamente la antena de la influencia de mi Aura. Ahora, cuando leo el Aura de la persona, sé que las bioenergías que estoy detectando a través de la antena son sus energías y no las mías. Así que

ahora ya es más preciso, en función de los datos.

AJ: Creo que usted puede escoger no hacer salir a su Aura tan lejos. No creo que tenga que haber una cierta clase de barrera ionizada. No creo que eso necesariamente funcione, porque si usted elige que desea interferir lo hará, tenga o no una barrera ionizada.

PROFESOR: Eso parece ser verdad, porque las formas de pensamiento, como los campos eléctricos, son caracterizadas por los pensamientos que los crearon. Así que si usted tiene el pensamiento de que su Aura es grande e interferirá, esas formas de pensamiento pueden alterar realmente la forma de su Aura, alineando sus campos para obligarla a hacerse más grande y para interferir. Por esos mismos mecanismos, si usted visualiza y siente su Aura más pequeña, llegará a ser más pequeña.

AJ: Entonces cuál es la idea de una chaqueta de laboratorio.

PROFESOR: La idea de la chaqueta de laboratorio surgió porque tuvimos algunos ayudantes haciendo Aura por imágenes con nosotros por algunos años, y ellos tenían un control muy pobre de sus pensamientos e imágenes mentales. Tenían muy poca experiencia en hacer prácticas metafísicas y psíquicas. Encontramos que sus Auras interferían, y no podían entrenarse para cambiar eso. Entonces analizamos eso, y dijimos "¿qué podemos hacer para reducir al mínimo esta interferencia?", entonces les pusimos una chaqueta ionizada de laboratorio y su Aura se redujo de cerca de 250 mV a solamente 100 mV. Así es que surtió efecto. Algo de esto pudo haber sido por efecto placebo, porque les dijimos que sus Auras iban a reducirse, y eso está muy bien. Pero la física atómica también apoya la idea de que hay algún efecto de "retraso" cuando usted se coloca la ropa ionizada.

STEVE: Entonces ¿qué es una chaqueta de laboratorio "ionizada"?

PROFESOR: El proceso de ionización es básicamente utilizar un generador de iones. Un ion es básicamente un átomo con montones de electrones adicionales, partículas adicionales de carga negativa. Los generadores de iones funcionan de diversas maneras. A veces simplemente crean

chispas eléctricas, que alcanzan - creo - a algunas moléculas de oxígeno, y las cargan con partículas adicionales de carga negativa. Algunos generadores de iones funcionan frotando sustancias entre sí y causando la "fricción completa" de los electrones, como por ejemplo el frotamiento del algodón sobre el cristal. Entonces cualquier clase de dispositivo o máquina que genere electrones adicionales, o que los remueva de un objeto fuente y los lance al aire, creará un campo de iones. Lo que hacemos es simplemente encender un generador de iones, y colgar las chaquetas de laboratorio al lado de él, por ejemplo en una percha, hasta que sus átomos se saturen con todos los electrones adicionales. Entonces tenemos una chaqueta ionizada de laboratorio.

Hablando de la ionización, es importante recordar también que cuando usted está haciendo la lectura del Aura con la antena, la antena es metálica, y se cargará. Es un conductor, y como tal puede tener algunas propiedades magnéticas en ciertas formas limitadas. Cuando usted hace una lectura del Aura de una persona y termina de explorar todo su biocampo, haciendo que la antena pase por todas las energías del campo bioenergético de la persona, lo que puede suceder es que la antena se polarice un poco. Es decir que la información de la energía del Aura puede permanecer alrededor de la antena como una carga magnética. No estoy seguro de cuán correcto es esto técnicamente hablando, pero según mi leal saber y entender esta es una buena descripción de lo que sucede.

En la práctica, lo que encontramos es que cuando hacemos una lectura del Aura de alguien, éste a veces tiene un predominio real de un color particular en su Aura. Por ejemplo, tuvimos un curador psíquico que podía controlar las energías de su Aura y por una orden, cambiar su Aura entera, cada pulgada cúbica de ella, a solamente un color, tal como el naranja. A propósito, no dejamos que nos dijera el color de antemano, para evitar la influencia inconsciente de nuestra propia información energética de nuestras formas de pensamiento. Luego, después de que terminamos la lectura de su Aura para verificar que su Aura fuera toda de un color, hicimos lecturas separadas sobre otros 10 sujetos, y uno después de otro, todas sus Auras fueron detectadas como siendo totalmente anaranjadas, también, lo cual es estadísticamente imposible. De lo que nos dimos cuenta es que la antena se había polarizado, y estábamos realizando las otras 10 lecturas sin detectar realmente ninguna información energética nueva en ninguno de los

otros sujetos.

Entonces, lo que aprendimos que teníamos que hacer - esto realmente funciona - era tomar un paño del algodón, doblarlo alrededor de la antena en una mano y frotarlo hacia arriba y hacia abajo en toda la longitud de la antena. En realidad, generalmente utilizamos la esquina inferior de la chaqueta de algodón de laboratorio para realizar esto, incluso mientras todavía lo llevamos puesto. Debe ser algodón, porque si no es algodón, puede ser que no funcione muy bien del todo. Nosotros Intentamos con una chaqueta de nylon de laboratorio, y no ocurrió nada. No tuvo ningún efecto de atenuación ni de blindando para reducir el Aura del operador, y no ayudó a limpiar la antena de ninguna manera. Esto es precisamente como el pequeño experimento que hacen en la secundaria, en donde toman una varilla de vidrio y un paño de algodón y lo frotan hacia adelante y hacia atrás para provocar la liberación de iones adicionales. Eso literalmente arranca la información energética - esa configuración de iones en la antena que fue caracterizada por el Aura del sujeto anterior. Y ahora la antena está despejada y limpia, y lista para la siguiente persona.

Así que es de mucha ayuda utilizar la chaqueta ionizada de laboratorio de algodón, y también es importante frotar la antena con un paño de algodón después de cada lectura.

STEVE: ¿Aunque usted estuviera usando la chaqueta ionizada de laboratorio, no habría aún bioenergías saliendo de sus manos, las cuales no estarían blindadas por la chaqueta de laboratorio, pudiendo influenciar la antena de todos modos?

PROFESOR: Bueno, las manos proyectan energía, especialmente la mano derecha. Afortunadamente, este contador de frecuencia de mano está conectado a tierra, porque fue hecho para el uso en electrónica industrial, de esta manera, las energías provenientes de mi mano derecha, mientras estoy sosteniendo este dispositivo, están siendo detenidas por esta carcaza aislada del dispositivo, y no están siendo comunicadas a la antena. Aunque si sostengo mal el contador, por ejemplo con mis dedos abiertos y apuntando hacia la antena, puede ser que de alguna manera la esté afectando. Pero si estoy sosteniendo el contador de frecuencia desde la base, con mis dedos plegados alrededor de los costados, apuntando lejos de la antena, entonces

no estaría proyectando mis bioenergías hacia la antena.

Esta es una buena razón por la que si usted tiene su propio equipo personalizado - así como algunas personas tienen un contador de frecuencia realmente de lujo que puede ser realmente costoso, apoyado en un escritorio o una mesa porque es muy grande - y además con cables saliendo a una antena, la cual debe sostener en su mano, lo que también puede causar interferencia, porque la antena está muy cerca de su mano. En este caso, donde tenemos un contador de frecuencia con la antena aislada y montada en un extremo, tenemos una situación muy buena. Pero si usted tiene un equipo personalizado en el laboratorio, tiene que fijarse en eso - dónde están sus manos y su cuerpo con respecto a la antena, cómo está sosteniendo la antena, si está blindada y donde están apuntando sus dedos. Tiene que pensar en eso constantemente.

La forma en que trabaja la antena es la de que cualquier estímulo electromagnético o eléctrico que flote cerca, que entre en contacto con la antena, será detectado por ella, y la información energética de esa señal de campo eléctrico será identificada por el contador de frecuencia. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que está cerca de la antena.

Primero, cuando encendemos el contador de frecuencia, necesitamos encenderlo con su función de "filtro". Usando el filtro, si no hay tipos de ondas de radio que son típicas interferencias, se leerá cero. De modo que ahora la lectura es cero. Ahora, moveré la antena por diferentes áreas del cuarto, para ver qué zonas del cuarto contienen interferencia a las cuales el dispositivo es sensible. El acondicionador de aire lee cero… La televisión y el cable de la TV marcan cero… Ésta es la función usada por la radio electrónica, así que si existe cualquier cosa que pudiera ser considerada interferencia, aparecerá aquí de este modo.

[Encendiendo la computadora portátil y la impresora en el escritorio.] Esto también lee cero… Ahora pongamos a funcionar un programa y veamos si pasa algo… Ahora lee 105 Hz, que es rojo, y es una resonancia de 50 Hz. Ahora, a solo 8 pulgadas de la computadora lee cero otra vez, así que hay muy poca interferencia de la computadora, y apenas al lado de la computadora ya lee cero, así que podemos utilizar una computadora portátil incluso directamente cerca de una

sesión de Aura por imágenes sin interferencia.

[Moviéndose hacia una pared con interruptores de luz] Muy bien, así que cuando la pongo cerca de estos cables de transmisión en la pared, entonces conseguimos realmente una lectura de 50 Hz. Ésta es la frecuencia del suministro de corriente eléctrica en Rusia. Si estuviéramos en los EE.UU. entonces serían 60 Hz. Luego, cuando quito la antena, lentamente, puedo ver dónde se localiza la interferencia, porque fuera del límite del campo - cerca de 2 pies en este caso - el contador baja a œro. Entonces esta función del filtro puede mostrarnos la forma de los campos de interferencia en el cuarto. [Nota - las lecturas no fueron tomadas con el contador de frecuencia FC1003, sino con un contador que se utilizaba previamente el cual podía detectar frecuencias en la gama de los Hz.]

[Moviéndose hacia la lámpara del techo en el centro del cuarto] aquí tenemos una lámpara que está encendida, y podemos poner la antena bien cerca de una de las bombillas que está encendida, y bien cerca de los cables que corren por el techo… Marca 50 Hz, entonces ahora moveremos la antena hacia el piso, sosteniéndola horizontalmente, para ver cuán lejos está el límite externo del campo de interferencia. La luz es débil, así que hoy solamente llega a un pie de la lámpara, así que tenemos espacio suficiente para trabajar sin interferencia, aún con la lámpara. A veces, si una lámpara de techo es fuerte aún con el reductor de intensidad de luz, puede ser necesario apagarla para eliminar la interferencia en el centro del cuarto.

Entonces podemos ver que en realidad, la interferencia que podíamos esperar de los aparatos eléctricos es realmente mínima. Ahora, hemos identificado una parte del cuarto donde no hay ninguna interferencia electromagnética en absoluto, así que utilizaremos dicha área para hacerle las lecturas a cada uno.

La función que estamos utilizando se llama "filtro" en el contador de frecuencia. Lo que sucede en la electrónica radial es que usted intenta sintonizar, generalmente, frecuencias de emisión, tales como la transmisión de una radio o lo que usted pueda sintonizar. Cuando no hay señal de radio real en el área de la antena o de un sensor, entonces los números en el contador de la frecuencia "vagan" por todas partes, "saltando" - 2 Hz, 70 Hz, luego 120 Hz, 560 Hz, y saltan hacia adelante

y hacia atrás en una secuencia no lineal. Estas lecturas se llaman “lecturas fantasma". Se llaman así porque en radio electrónica, el ingeniero sabe que no tiene nada conectado a ese contador de frecuencia - las puntas de prueba no están conectadas a nada, no hay dispositivo que él está midiendo actualmente, y los números de todas formas saltan en todas partes. Es como si hubiera algún dispositivo "fantasma" que estuviera generando señales no lineales. Convencionalmente, esto se considera absurdo, como si el contador de frecuencia se volviera loco, porque no tiene relación con los dispositivos electrónicos físicos tangibles que son el foco de atención en la ingeniería.

En realidad, sin embargo, lo que encontramos es que estas lecturas indican bioenergías y energías sutiles, campos electromagnéticos flotando a nuestro alrededor, los cuáles tienen diversas frecuencias. Y cualquier cosa que pasa por esta antena, cuando no está cerca de una aparato transmisor, o de cualquier fuente de señal significativa, cualquier cosa que pase a través de la antena va directamente al contador de frecuencia. Así es que estas “lecturas fantasma", que los ingenieros consideran insignificantes, para nosotros son la esencia de lo que estamos intentando leer. Entonces cuando hacemos una lectura del Aura estamos buscando una parte del cuarto que no tenga ninguna señal significativa o dominante, que lea cero cuando el filtro esté encendido. Desde nuestra perspectiva, desde el trabajo con la ciencia bioenergoinformática, estas señales dominantes que el ingeniero está buscando, las consideramos "interferencia", porque interfieren con las “lecturas fantasma" que son el foco de nuestra atención. Luego, apagamos el filtro y estamos libres para leer todas las "lecturas fantasma" en esa parte del cuarto.

Ahora que el filtro está apagado y que podemos detectar las "lecturas fantasma", por dondequiera que miremos en el cuarto entero, vamos a obtener una cierta lectura. Incluso en las partes del cuarto que leían cero con el filtro encendido, probando que no había interferencia en ese lugar, sin embargo, nunca leerá cero con el filtro apagado. Así que en todas partes del cuarto, sin usar el filtro, no hay un solo lugar donde no haya una cierta frecuencia presente. Éste es el refuerzo de nuestra teoría de que todo en el universo tiene una cierta frecuencia, y no hay lugar en el universo que no tenga absolutamente nada. Incluso en el espacio profundo, en el espacio exterior con los astronautas, donde hay sólo vacío físico o un agujero negro o algo, allí están operando algunas energías circundantes y algunas frecuencias que se utilizan para transmitir

información energética. Incluso si no hay información energética siendo transmitida desde otra posición "vacía", habrá señales transmitidas a través de todo el espacio desde otras posiciones, pasando a través de esa posición y la frecuencia de esas señales será detectable - si no directamente, por lo menos por su resonancia en el espectro electromagnético. Así que con un buen contador de frecuencia, en todas partes del universo usted va a obtener una cierta lectura. Y recuerden, lo que otros ingenieros llaman "interferencia" o "lectura fantasma", para nosotros, es la lectura exacta que identifica la energía sutil ambiental.

7.4 ANÁLISIS DEL AURA #1 - NIVEL DE SALUD

¿Porqué no seguimos adelante y comenzamos?… Haré la primer lectura, para mostrarles cómo funciona el proceso. ¿Quién quisiera ser el primero?

MIRZA: ¡Oh! ¡Hágamelo primero!

PROFESOR: Muy bien, Laura, voy a pasar alrededor del Aura de Mirza una región a la vez, y quisiera que usted anotara el color por mí en esta gráfica. Para cada región, buscaré el número de frecuencia en esta gráfica de traducción, y entonces le diré qué color de bioenergía hemos detectado. Vamos a comenzar por el lado izquierdo del cuerpo, con su mano izquierda, que para nosotros es el lado derecho de la gráfica. Eso los confunde a todos, ustedes tienen que recordar – lado izquierdo de la gráfica, lado derecho del cuerpo. Es como el asunto del cerebro derecho-izquierdo. Es decir la gráfica funciona exactamente de la forma en que vemos a otro, es como mirar una fotografía del otro de frente.

Vamos a leer el Nivel de Salud del Aura, así que ustedes notarán que la antena estará siempre a 4 pulgadas de su cuerpo, aproximadamente en el punto medio de 2 pulgadas.

Así que comenzamos en la pierna izquierda… que es rosa. Mirza, ¿puede levantar sus brazos un poquito, aproximadamente en un ángulo de 45 grados? Le pregunté si podía levantar sus brazos, porque una vez que llegue a la zona del muslo en el área de la cintura, su mano estará justamente allí y voy a terminar leyendo su mano sin poder detectar la bioenergía de su muslo y

torso. Ahora el muslo izquierdo… que es también rosa. Torso izquierdo.... rosa. Luego en el antebrazo izquierdo salta a naranja. El brazo izquierdo también es naranja. Ahora el hombro y el cuello izquierdos… esto es rojo. El lado izquierdo de la cabeza es rosa otra vez. En la parte superior de la cabeza… naranja. Lado derecho de la cabeza.... naranja. Lado derecho del cuello y del hombro… naranja también. Brazo derecho.... rosa. Antebrazo derecho… más rosa. Ahora debajo del brazo, en el torso… tenemos naranja. Muslo derecho… también naranja. Pierna derecha.... rojo.

Hemos encontrado ya algunos colores, y están bastante cerca uno del otro en el espectro del color. Ahora leamos los Chakras, y noten cómo utilizamos la antena de forma diferente. Cuando realicé la lectura alrededor del perímetro lateral del cuerpo, sostuve la antena horizontalmente, de frente, apuntando lejos de mí y directamente delante de una región de su Aura. En otras palabras, trato de dejar la antena penetrar el área más pequeña posible, para controlar qué energías de la región entran en contacto con la antena. Porque si la sostengo apuntando hacia arriba en ángulo, entonces puedo detectar algo en la extremidad de la antena, mientras que algunas otras energías se cruzan por la base de la antena - como ciertas formas de pensamiento o algo similar encontrándose con la antena.

AJ: Mmm… Ya veo… Ya veo.

PROFESOR: Entonces tienen que ser muy conscientes de la longitud de la antena, de conservarla dentro del campo del sujeto, y de no hacer que se abra a otras cosas que no estén dentro de las regiones del Aura que ustedes están midiendo. Muy bien, ahora los Chakras. Esta vez, estoy sosteniendo la antena desde la izquierda o la derecha, paralela al frente del cuerpo del sujeto, también horizontalmente, y colocando el centro de la antena sobre cada punto Chakra, con la antena completamente frente a él. Entonces tengo la antena apuntando horizontalmente desde la izquierda o la derecha en el frente de su cuerpo, porque éstos son Chakras que se alinean verticalmente a lo largo de la espina dorsal. Si sostengo la antena de forma vertical, verticalmente, entonces leería casi todos los Chakras de una vez y lo que conseguiríamos no sería el color de ningún Chakra, sino el patrón de interferencia de todos juntos mezclados. Eso podría ser atractivo para realizar una cierta clase de promedio o algo así, pero no estamos

buscando promedios matemáticos. Estamos buscando la información específica de la energía de cada punto Chakra individual.

Muy bien, empezando por la base. El Chakra Base es rojo. El siguiente… rosa. El Tercer Chakra… azul marino. Ahora el Chakra Cardíaco.... rosa. Chakra de la Garganta … bordó. Tercer Ojo.... lila. Y el Chakra Corona es también lila.

MIRZA: Intentaba hacer eso. [Risas]

AJ: [Riendo] Ahora vamos a comenzar a jugar. Apenas puedo esperar a ver esto.

PROFESOR: Entonces, ahora tenemos una gráfica del Aura de Mirza, como fue capturada durante un período de cerca de 90 segundos, con todos los colores alineados. Ahora saquemos a la luz las gráficas de interpretación para el Nivel de Salud. Lo que tenemos es el Chakra Base - la sexualidad y la percepción sí mismo - y es rojo. De modo que, simplemente, se encuentra balanceado. No hay aquí información energética particular, esta es simplemente su condición natural.

En el segundo Chakra, tenemos rosa, el cual está asociado a "experiencias sensuales y físicas del cuerpo, bienestar físico, generalmente saludable." El segundo Chakra es el Chakra "naranja", de modo que ésta es la categoría del aspecto curativo de la vida de Mirza. Entonces dentro de la esfera curativa de su vida hay información rosa. La pregunta a la que la información del Chakra "naranja" responde es, "¿qué clase de curación está experimentando él?" y "¿dónde van sus energías curativas?". Con una bioenergía rosa en esa categoría, la respuesta a esa pregunta es, experiencias agradables del cuerpo físico, bienestar físico, y sensaciones agradables. Eso podría indicar que Mirza está intentando quizá tener vacaciones, relajarse y darse un descanso.

El Chakra siguiente sobre el estómago, el Chakra "amarillo", tiene bioenergía azul marino. Azul marino se asocia a "incremento de la actividad biológica …"

MIRZA: ¡Eso es cierto! Estoy teniendo gastritis, sí. Eso es hiperproducción de ácido.

LAURA: ¡Uau!

PROFESOR: Y ése es el Chakra del estómago. La interpretación del azul marino, basada en nuestras asociaciones experimentales, es "incremento de la actividad biológica, funcionamiento actual de sistemas metabólicos" - en este caso esto es la digestión estomacal - o "ciertos órganos o sistemas circulatorios que actualmente ejercen un esfuerzo adicional." De manera que fue un diagnóstico preciso en el Nivel de Salud. Pero, ustedes ven, esto es lo que es interesante acerca del comentario de Mirza - para mí es simplemente incremento de la actividad biológica, porque hice los cálculos y resolví la lógica y sé lo que significa, pero él es médico, y vio azul marino – "incremento de la actividad biológica " - y él ya hizo un diagnóstico. Él dijo, "hey, esto debe ser gastritis." Por supuesto, no es perjudicial que él sepa que tiene gastritis [risas], pero vemos de qué forma el conocimiento médico hace del **RFI™** una herramienta útil, porque si usted es médico y mira esta gráfica del Aura con esta información, puede hacer ya un diagnóstico inicial del paciente, y puede ser que le dé una razón para realizar pruebas o exámenes adicionales en ese paciente con métodos convencionales.

En el Chakra siguiente, el Chakra Cardíaco, que es el Chakra "verde", hay rojo claro. Entonces la pregunta en la categoría del Chakra "verde" es, "cuáles son sus temas emocionales?" Los asuntos emocionales, según las interpretaciones asociadas al rojo claro, son…

AJ: ¿Usted dijo "rojo claro"? Porque yo no lo llamaría "rojo claro." Lo llamaría "rosa," y "rosa" es considerado como autoestima, energía curativa. Es una cosa muy buena. Es solamente que el rojo claro no significa nada para mí, pero conozco acerca del " rosa", sin embargo..

PROFESOR: El concepto tradicional del color "rosa" es autoestima, bienestar, y así sucesivamente…

AJ: Correcto, correcto.

PROFESOR: La cual es exactamente la misma interpretación que asigné al rojo claro, que es

visualmente la misma cosa. Yo simplemente lo llamé " rojo claro " porque no me atuve a las filosofías tradicionales, sino que más bien lo calculé objetivamente, y sucedió que estaba en el espectro óptico después del rojo, y los cálculos y la lógica condujeron a la misma interpretación sobre bases independientes. Esto es "experiencias sensuales y físicas del cuerpo, bienestar físico y sensaciones agradables ". De modo que lo que está en sus asuntos emocionales es que él está relajado, cómodo y teniendo experiencias agradables.

Chakra de la Garganta, Chakra "azul" - hay rojo oscuro (bordó). Bordó es básicamente "el foco físico y material, que indica la actividad mental relacionada con las cuestiones de la supervivencia, el dinero, los objetos materiales, y el ambiente físico inmediato."

MIRZA: ¡Eso Es Moscú! [Risas]

PROFESOR: También se relaciona con los "instintos, necesidades y deseos básicos del ser humano." Son las habilidades de supervivencia.

MIRZA: ¿Podría estar relacionado también con el hipertiroidismo?

PROFESOR: Bueno, tengan presente que esto es un Chakra, así que puede ser interpretado desde la salud y desde las asociaciones psicológicas. Puesto que los Chakras también corresponden a las glándulas endocrinas, pienso que tenemos que utilizar tanto las interpretaciones de salud como las psicológicas para conseguir la mayor cantidad de información.

AJ: Bueno realmente, debería ser interpretado según la distancia del cuerpo a la que se encuentre.

PROFESOR: Debe ser así, si no fuera por la excepción de que las energías de los Chakras penetran todos los niveles del Aura, así que es teóricamente imposible distinguir en qué nivel está. Ése es el problema de interpretación que tenemos. Pero podemos tomar el número objetivo de la frecuencia, y aplicar esos datos al contexto en el cual necesitamos analizarlo. Entonces veamos la interpretación desde los cuadros de asociación de la salud, y observemos si tiene

sentido. La interpretación del Nivel de Salud del bordó es "incremento de la actividad biológica en forma de crecimiento, desarrollo o regeneración."

MIRZA: Eso entonces tiene sentido, porque está en el Chakra de la Garganta, y tengo una historia del hipertiroidismo, que es literalmente “incremento de la actividad biológica."

PROFESOR: Muy bien, de modo que el diagnóstico también fue identificado exactamente aquí también. Vayamos de nuevo a la interpretación psicológica. Puesto que éste es el Chakra "azul", asociado a la categoría de la comunicación, el asunto es, "¿cuál es foco de Mirza en lo referente a sus comunicaciones y habilidades de comunicación?" El foco, identificado por la bioenergía bordó, es el tema de las habilidades de supervivencia. Así es que él se ha preocupado por hacer dinero, poder obtener comida … básicamente la clase de cosas que tenemos que hacer en Moscú.

Después está el Chakra del Tercer Ojo, el Chakra "violeta", que es la categoría del trabajo psíquico y de la actividad intelectual. ¿Entonces, qué clase de actividad intelectual? Bien, la "bioenergía lila" indica la "claridad de pensamiento, actividad psíquica, la comprensión de la verdad, el sujeto puede actualmente participar en el intercambio de información energética." Ésa es nuestra interpretación. Cuéntenos, Mirza, lo que usted hacía en el momento de medir el Chakra del Tercer Ojo. ¿Usted dijo que estaba manipulando la lectura?

MIRZA: Sí, intentaba abrirme, y entrar en contacto con todos. Intentaba hacerme sensible a las bioenergías circundantes.

PROFESOR: Usted literalmente se "sintonizaba" con todos, y esto se reflejó en que su actividad intelectual fue identificada como "actividad psíquica" e "intercambio de información energética."

Ahora en el Chakra Corona, hay lila. Justo sobre la cabeza. Y es la misma interpretación. Entonces el Aura encima de la cabeza, en el Nivel de Salud, es naranja. Entonces ahora tenemos que ir a la gráfica de datos de interpretación del Nivel de Salud. Esto es algo difícil. Ustedes tienen muchos niveles, y tienen que saber siempre donde se encuentra en el Aura - si están

leyendo un Chakra, una parte del cuerpo, u ondas cerebrales. Afortunadamente, después de que terminemos la siguiente generación del **RFI™**, todo esto será hecho automáticamente en la computadora. Nos tomará 3 años de cálculos para tenerlo listo en un programa de computadora.

Entonces tenemos naranja en la parte superior de la cabeza, y la interpretación del Nivel de Salud es "una energía curativa está actualmente actuando sobre el área, actividad inmunológica y recuperación." Ahora, en cualquier otra parte del cuerpo esto sería exacto. En cualquier otra parte del cuerpo donde hay naranja, es energía curativa que actúa sobre esa área, a no ser que sea en la cabeza, la cual principalmente es el área de las ondas cerebrales, así que a menos que esté detectando algo en la cabeza que sea curable, por ejemplo un dolor de cabeza que esté siendo curado por un medicamento o algo, o a menos que haya realmente un cierto problema físico en la cabeza que esté siendo curado, son probablemente ondas cerebrales mostrando sus pensamientos predominantes. La excepción a la regla de leer el Nivel de Salud del cuerpo es, entonces, si estamos leyendo la cabeza, donde se encuentran generalmente los pensamientos predominantes del sujeto. Puesto que hay naranja aquí, podemos decir que los pensamientos predominantes de Mirza estarían relacionados con las cuestiones curativas, quizá queriendo ser un sanador, o quizás relacionado con ser curado.

Muy bien, en el lado derecho de la cabeza tenemos naranja. En todo el lado derecho de su cuerpo, hay cuatro instancias de naranja, de entre siete regiones. Más de la mitad del lado derecho de su cuerpo es bioenergía naranja. Así es que Mirza puede proyectar gran cantidad de energía curativa en su ambiente. Si esto estuviera en el Nivel Psicológico, entre las 4 y las 18 pulgadas del cuerpo, nos indicaría que él es un sanador - como profesión o como personalidad - o que está actualmente comprometido con un cierto tipo de actividad curativa. Tenemos que recordar, sin embargo, que éste es el Nivel de Salud. En general, en el Nivel de Salud, cuando las bioenergías naranjas están en una parte del cuerpo que no es la cabeza, esto generalmente significa que, la "energía curativa están actuando en estos momentos sobre el área en cuestión." De modo que significa que hubo cierta lesión o enfermedad, que está en el proceso de curación y de recuperación.

Es importante observar que muchas de las veces en las que detectamos naranja en el Nivel de Salud, y decimos "oh, hay un cierto proceso curativo en esta parte de su cuerpo," y los sujetos, en nuestros pocos años de experimentación, dicen generalmente "bueno, estoy perfectamente sano, y me siento perfectamente bien, *pero* hace dos semanas tuve una lesión allí, y ahora no la siento más." De modo que esto es lo que significa el naranja. El naranja le dice que todavía existe un cierto indicio de la enfermedad o de la lesión en el pasado reciente, pero ya está en camino a la curación.

En el brazo y en el antebrazo derecho, encontramos rosa, lo que significa "experiencias sensuales y físicas del cuerpo, bienestar físico, y sensaciones agradables." ¿Entonces su brazo derecho debe estar agradable y relajado, huh? [Risas] Desde la interpretación del Nivel de Salud, esto simplemente significa que su brazo derecho está sano, sin problemas. Eso es todo lo que significa.

Luego en la pierna derecha, hay rojo, indicando el "malfuncionamiento biológico o el daño físico." Puede también indicar una "respuesta de dolor o una sensación de dolor."

MIRZA: Eso es correcto, porque tengo algo de artritis en mi pierna en este momento, y en el lado derecho estoy sintiendo más dolor.

PROFESOR: Sí, y los datos de la interpretación también indican, "una sensación de dolor en el área donde el bioenergía fue detectada, con o sin malfuncionamiento o daño real, generalmente no saludable." Entonces puede ser que no haya realmente lesión allí, pero puede ser que de todos modos simplemente duela.

Bien, hasta ahora, hemos detectado con exactitud, hipertiroidismo, gastritis, y dolor por artritis, y hemos revelado la localización exacta de estas condiciones. Para un análisis del Nivel de Salud, en un paciente que jamás hemos visto antes y con el cual nunca nos habíamos entrevistado por sus problemas de salud, ya nos pusimos al tanto sobre tres condiciones de salud existentes. Solo necesitamos el entrenamiento médico para entender cómo aplicar las interpretaciones del **Campo de Resonancia por Imágenes** ä .

Ahora el lado izquierdo del cuerpo. Tengan presente que éste es el Nivel de Salud, así que no hablamos aquí del entorno, esto es solamente lo que está en el cuerpo físico. Hay rosa en la cabeza, que es básicamente salud y bienestar. Si lo consideramos como ondas cerebrales, usando la interpretación psicológica del rosa, son bioenergías de romanticismo.

En el hombro encontramos rojo, que es "malfuncionamiento biológico o daño físico." El naranja en el brazo izquierdo indica más procesos curativos que están ocurriendo allí.

MIRZA: Bueno, mis brazos están muy cansados. Tuve un largo día llevando libros pesados.

PROFESOR: Muy bien, rosa en el torso significa salud y bienestar. El naranja en el antebrazo es más energía curativa. Por una cierta razón, su brazo izquierdo tiene mucha energía anaranjada en él, pero deseo precisar que no está necesariamente relacionado con tensión o lesión física. Puede ser que incluso sea simplemente una respuesta del sistema inmune en ese área. Podría ser que haya bacterias o algo, no necesariamente una infección, simplemente su sistema inmune está realizando su saludable función de luchar contra las bacterias. Así es que el naranja puede encontrarse también en el comienzo de una enfermedad que nunca vaya a llegar al nivel de un problema de salud debido a la intervención del sistema inmunológico, o en el final de una enfermedad o de una lesión que ya no se aprecia físicamente y que se encuentra en la etapa final de curación.

Y luego el resto del cuerpo es rosa, que es salud y bienestar. Pienso que todos ustedes tienen ahora un sentido muy claro de cómo acercarse a una gráfica del Aura, ¿no es cierto?

STEVE: La interpretación es muy difícil.

PROFESOR: Sí, es realmente compleja, y hay que pensar mucho. Pero la realidad nunca es simple, ¿cierto?

MIRZA: Cierto, pero hay lógica en esto, y podemos darle sentido.

PROFESOR: Para un análisis médico más detallado, es útil concentrarse no solamente en los lados del cuerpo y los Chakras, como estamos haciendo ahora, sino también en la parte posterior del sujeto. Ya que la columna vertebral, con todas sus conexiones neurológicas a los órganos biológicos está más cercana a la parte posterior, cuando realizamos una lectura del Aura por imágenes de la parte posterior podemos conseguir teóricamente un análisis fenomenal del Nivel de Salud, con detalles sobre todos los órganos internos. En la mayoría de los casos, solo necesitamos una buena gráfica médica de los nervios espinales relacionados con cada órgano, y podemos dirigir la antena horizontalmente - como hacemos con los Chakras - a lo largo de la espina dorsal. Entonces, siempre que detectemos una bioenergía determinada, podemos fijarnos donde está la antena y observar en la gráfica a qué órganos corresponden los nervios de las correspondientes vértebras y eso nos dirá qué órganos contienen la bioenergía detectada.

Ésa es otra razón por la que no leemos los Chakras de la parte posterior, por lo menos en el Nivel de Salud, porque la actividad neurológica eléctrica a lo largo de la columna vertebral es tan fuerte que interfiere con las señales del Chakra en la parte posterior. Entonces cuando estamos haciendo una lectura regular, utilizamos una gráfica con una vista delantera del sujeto, pero para el análisis médico avanzado necesitamos una gráfica que muestre una vista de la parte posterior de la persona. Por esta razón, algunas clínicas que experimentan con el **RFI™** utilizan una gráfica con casillas de verificación etiquetadas como "Frente" y "Dorso", para crear sus propias gráficas personalizadas y evitar la confusión acerca de cómo interpretar los datos.

7.5 ANÁLISIS DEL AURA #2 - NIVEL DE SALUD

Muy bien, ahora vamos a leer el Aura de Steve. [Las medidas fueron tomadas sin ser grabadas.]

Recuerden que los Chakras tienen que ser interpretados sobre la base de los cuadros de asociación del Nivel Emocional (o Psicológico). Pero al mismo tiempo, podemos también considerar las interpretaciones del Nivel de Salud porque también hay glándulas endocrinas asociadas correspondientes a cada Chakra. Tenemos que mirar tanto las interpretaciones del Nivel de Salud como las interpretaciones psicológicas para un análisis cuidadoso del los Chakras.

El Chakra Base de Steve es bordó. En la categoría de la "percepción de sí mismo", entonces, encontramos la información energética de las “habilidades de supervivencia", lo que sugiere que no está teniendo bastante tiempo para relajarse y ser él mismo, sino que por el contrario está ocupado en ejercer sus habilidades de supervivencia en Moscú.

Después está el Chakra "naranja"… A propósito, noten que a menudo me refiero a los Chakras por su color por defecto, su color teórico. Personalmente, hago esto porque lo prefiero en lugar de enumerarlos, mientras que algunas personas prefieren decir "1er Chakra" para el Base, y "2do Chakra" para el naranja. Ésta es la convención tradicional - numerarlos desde abajo hacia arriba, porque el Base se considera el primero. En una versión anterior de nuestro libro de textos los enumeramos de arriba hacia abajo, solo porque vimos esta forma de enumeración en algunos otros libros, y no podríamos pensar en ninguna otra razón para enumerarlos de esa manera porque no tiene ningún significado práctico. Realmente, los números son arbitrarios, y prefiero referirme a los Chakras por su color teórico por defecto porque nos recuerda, cuando los estamos interpretando – cuál es la categoría, o tópico, de la información energética de cada uno de ellos. Esto hace que podamos examinar las interpretaciones más rápida y exactamente.

Entonces este segundo Chakra es el Chakra "naranja” y aquí encontramos el color rojo. Por consiguiente, decimos que hay información energética de color "rojo” en el Chakra "naranja". El rojo es "foco material y físico, realización de metas materiales y ambiciones" y esta información está en la categoría curativa. ¿Eso es bastante interesante, no? ¿Por qué encontramos eso dentro el área curativa de su vida?. Otra manera de mirar esto es que la información dentro de la categoría es un factor - en otras palabras ver qué energía influencia o afecta esa área de la vida de la persona, ya sea que esté o no ejerciendo realmente su acción en ese momento. Entonces en el caso de Steve, quizá si hay un tema de curación, alguna condición de salud o dolencia en esta persona como paciente, un factor significativo en esa enfermedad serían sus condiciones laborales. Eso sugiere que su trabajo intenso y la focalización en lo físico y lo material son un factor de curación. Si está sano, grandioso, significa que está adecuadamente adaptado para sus actividades materiales, y si no lo está, entonces quiere decir que una de las formas para mejorar su salud sería cambiar algo en su lugar de trabajo.

Después está el Chakra "amarillo", el cual contiene información energética violeta. Esto es "energía intelectual, claridad de pensamiento, actividad intelectual o habilidad psíquica." ¿Por qué está esa bioenergía en el Chakra "amarillo", el Chakra del Plexo Solar? ¿Qué es el amarillo?. Ustedes no lo recuerdan. Muy bien, el amarillo significa factores relacionados con el estado de nerviosismo o de calma de la persona. Entonces la bioenergía en la categoría del "amarillo" refiere a los factores que harían a la persona calmada o nerviosa. Algo que afecta su nivel de bienestar. En este caso, lo que afecta el nivel de bienestar de Steve en este momento son las energías "violetas", que son energías intelectuales. Entonces ésta es una persona que, si desea obtener más bienestar, puede encontrarlo en algo intelectual, quizás algo académico. Si está incómodo, entonces, la causa de ese malestar podría encontrarse en disturbios en las áreas intelectuales o académicas. Algo que lo frustra en esas áreas.

STEVE: Eso generalmente es verdad, sí.

PROFESOR: Muy bien, ahora el Chakra "verde", el Chakra Cardíaco, que es la categoría de los asuntos emocionales, tiene energía naranja en él. Eso es curación emocional. La interpretación es "actividad mental relacionada con la resolución de cuestiones emocionales, recuperación de experiencias intensas de la vida y superación de obstáculos."

STEVE: Absolutamente…

PROFESOR: ¿Qué sucedió? Si a usted no le molesta compartirlo con nosotros…

STEVE: Acabo de pasar por un divorcio.

PROFESOR: Eso es exactamente de lo que se trata todo esto [continuando la lectura en los cuadros de interpretación] "generalmente saludable, pero el apoyo psicológico y la psicoterapia resultarían [interrumpido por la risa de todos] muy beneficiosas." [Risas generales] ¡Eso es lo que dice! [Más risas]

Ahora tengan presente que estas interpretaciones fueron verificadas con estudio de casos pero no fueron escritas para el caso de Steve. No tuvimos ningún sujeto que pasara por un divorcio, así que no dijimos, "oh, dejemos a este individuo ver a un psicoterapeuta." Éste fue el resultado de la lógica y de los cálculos. Así que esta lectura que estamos haciendo para Steve es la verificación de que los cálculos más nuevos, los cuales terminé - hace *una hora* entera - [risas] están en el camino correcto. [Risa general]

STEVE: [alegremente] usted tiene que factorizar el divorcio…

PROFESOR: [pensativamente] Así que, calculamos la frecuencia del divorcio…

MIRZA: Esperanzadamente, esto no sucede "*frecuente* - mente".[risa]

PROFESOR: Muy bien, entonces la siguiente es la bioenergía celeste en el Chakra de la Garganta. Así que esto describe la categoría de la comunicación en la vida de Steve. Celeste indica "energía emocional, el sujeto demuestra empatía y sensibilidad a las emociones de otros, y gusta de estar en comunicación o de expresar sus propias emociones, ya sea consciente o subconscientemente".

STEVE: Eso es muy cierto, creo yo.

PROFESOR: Luego tenemos bordó en el Chakra del Tercer Ojo. Esto es "enfoque material y físico," y "habilidades de supervivencia." En el Chakra "violeta", esto significa que la bioenergía detectada es la actividad intelectual predominante. Entonces es bastante claro que la actividad intelectual predominante hace referencia a sus habilidades de supervivencia - el trabajo.

AJ: Las *Buenas* noticias - ¡ las *buenas* noticias son su Chakra Coronario!

PROFESOR: El Chakra Coronario, que es el "añil" o el Chakra "lila", en este caso contiene violeta. El Chakra Coronario es el yo superior, o el ser metafísico. Entonces la bioenergía violeta allí es "energía intelectual, claridad de pensamiento, actividad intelectual o académica y habilidad

psíquica."

Muy bien, ahora todas las ondas cerebrales, alrededor de toda la cabeza de Steve - izquierda, derecha y superior - son azul marino. También, más del 50% del lado izquierdo del cuerpo es azul marino. Ahora, las ondas cerebrales tienen que ser interpretadas usando los cuadros de asociación emocionales. Azul marino es… "liderazgo, expresión de ideas intelectuales que involucran o influyen en situaciones materiales o sociales." Steve, ¿hay alguna razón particular por la que usted tendría energía predominante de liderazgo *hoy*? Porque suele cambiar día a día.

STEVE: Salí de una reunión ayer por la noche, y acaban de hacerme presidente de esta organización. Estoy a cargo de formar la organización, así que soy el líder de este grupo.

PROFESOR: De modo que es literalmente la "expresión de las ideas intelectuales que involucran o influyen en situaciones materiales o sociales." Ésa es la esencia del liderazgo.

AJ: ¡Él tiene dorado! ¡Deseo saber lo que significa el dorado!

MIRZA: ¿Pero qué hay acerca del mismo color azul marino en el cuerpo, en el lado izquierdo? Usted dijo que era algo más.

PROFESOR: Bien, en el área de la cabeza son todas las ondas cerebrales, así que utilizamos las interpretaciones psicológicas. En el lado izquierdo del cuerpo, donde más del 50% es azul marino, puesto que medimos a 4 pulgadas del cuerpo, nosotros debemos utilizar las interpretaciones del Nivel de Salud. En ese caso, azul marino es "incremento de la actividad biológica," e indica que, "ciertos órganos o sistemas circulatorios," como la circulación sanguínea, "están ejerciendo actualmente un esfuerzo adicional. Generalmente saludable, a menos que esta bioenergía aparezca en la misma área por períodos prolongados."

STEVE: Estuve precisamente ejercitándome. Ése quizá sea motivo.

PROFESOR: ¿Por qué solamente en el brazo izquierdo? ¿Usted levanta pesas más pesadas con

la mano izquierda? [Risas] si usted es diestro, está mostrando probablemente más desarrollo o actividad en su mano izquierda, lo cual es una compensación por el hecho de que es más débil.

Ahora, en el muslo es bordó…

AJ: Y luego, dorado. Hay dorado aquí… [Señalando con entusiasmo]

PROFESOR: Lo sé… ¡estoy manteniendo el suspenso! Entonces el bordó es también "incremento de la actividad biológica" relacionada con la ejercitación de Steve. Entonces en todo el lado izquierdo del cuerpo hay un incremento de la actividad biológica y de la circulación.

Muy bien, ahora el dorado. El dorado está en la pierna izquierda. El dorado, en el Nivel de Salud, es… [AJ se inclina hacia adelante en el borde de su asiento, mientras que el profesor busca a través de sus notas de laboratorio]… creo qué, niños, no calculé eso todavía.

CLASE ENTERA: [compartiendo la frustración con AJ] ¡Oh, no!

PROFESOR: Pero tengo la interpretación del Nivel Emocional.

AJ: Bien, ustedes ven, yo no pienso que esto debería ser Nivel de Salud de todos modos. Pienso que debería ser Nivel Emocional. Absolutamente todo debería ser Nivel Emocional en el lado izquierdo, porque tiene que ver con qué energías están entrando.

PROFESOR: Pero esto todavía está a 4 pulgadas del cuerpo, así que es controlado por lo que está sucediendo en el cuerpo físico. Porque las bioenergías de la salud son más fuertes y más estables en esa región del Aura, de modo que eso es todo lo que podemos leer a 4 pulgadas.

¡Oh, tengo el dorado! Acabo de encontrarlo en una parte diferente de mis notas. Muy bien, la interpretación del dorado en el Nivel de Salud es: " la energía curativa está emanando de un área que ya es vital y saludable." Ahora, noten que esto es diferente de cuando hay naranja, el cual se encontraba después del dolor y del malfuncionamiento y cuya área está en proceso de curación.

El dorado significa que el área *ya* es sana, y que no tuvo ningún problema recientemente, pero ahora hay energía curativa saliendo de ese área de todos modos.

MIRZA: ¡Está en su pierna, así que él tiene que patear a alguien para curarlo! [Risas generales]

PROFESOR: ¿¡Quiere patear a alguien?!

AJ: ¡Bueno – esa es una posibilidad!

PROFESOR: Bien, pienso que algunas personas podrían necesitar una buena patada curativa en su trasero. Podría ser parte de su "proceso curativo." [Risas generalizadas]

[Continuando con la lectura de los cuadros de interpretación] "este exceso de energía curativa se proyecta hacia afuera para contribuir con energía saludable y curativa al medio ambiente, a otras personas, animales, plantas y objetos que entren en contacto con esta bioenergía.." [Más risas], Muy bien, esto es ¡"terapia de patada"! [Risas]

¿Bien, ustedes saben lo que eso me dice a mí?. Noten que en el resto de todo ese lado del cuerpo existe una abundancia de salud y de actividad biológica incrementada, y pienso que el dorado en ese lado del cuerpo es compatible con esto. No sólo está irradiando un funcionamiento biológico saludable, sino que tiene un elemento de información energética que incluso tiene justamente una función curativa pura.

Ahora terminaremos con el lado derecho del cuerpo de Steve, todavía en el Nivel de Salud. Más azul marino… "incremento de la actividad biológica." Ahora, el violeta es muy interesante en el Nivel de Salud, porque el violeta - como ustedes recordarán - es energía intelectual y mental. En el Nivel de Salud, cuando se asocia a una parte particular del cuerpo, significa algo muy diferente, pero muy lógico. Para el violeta, el nuevo cuadro de interpretación dice, "existe una conexión Psicosomática clara y directa en el área que presenta esta bioenergía. En este momento, la actividad mental está influenciando y controlando la actividad biológica y la salud física." Ahora lo que significa es que no hay necesariamente ningún problema de salud en esa área. Puede ser

que esté perfectamente sano. Pero esto significa que *si hubiera* un problema de salud allí, *si* hubiera cierta enfermedad o dolencia allí, el violeta nos diría que existe una enfermedad psicosomática y que el área del cuerpo donde encontramos la energía violeta puede ser controlada, y es sumamente probable que se encuentre beneficio simplemente en la hipnoterapia o en un placebo.

Entonces si un paciente viene y dice, " me duele el hombro, ¿puede que tenga un nervio pellizcado?" y ustedes hacen una imagen del Aura y encuentran violeta en esa zona, entonces tienen razón para creer que probablemente haya una causa psicosomática del dolor en esa área. Luego, un profesional médico podría continuar con ese análisis, y realizar un diagnóstico más preciso. Si no hay dolor o dolencia en dicha área, pero hay una bioenergía violeta, esto significa simplemente que hay una conexión - entre la mente y esa parte del cuerpo. Entonces cuando hay violeta en el Aura de la salud, eso revela una conexión mente-cuerpo, con una parte específica del cuerpo, pero no quiere decir que necesariamente haya algo malo allí. Es simplemente una conexión psicosomática y nada más que una conexión.

Después, encontramos lila en el brazo en el Nivel de Salud… "hay una clara y directa conexión entre mente y cuerpo en el área que presenta esta bioenergía." Es similar al violeta, porque el lila - en el espectro óptico - es básicamente violeta con un poco de blanco. [Continuando la lectura en los cuadros de interpretación.] " la persona tiene una positiva y agradable asociación psicológica con la parte de su cuerpo dónde esta bioenergía se localiza." Entonces a Steve le gusta su brazo derecho. [Risas]

AJ: [a Steve] bien, usted es dentista y es diestro, ¿correcto?

STEVE: Sí, eso es correcto.

PROFESOR: El lila en su brazo con el que trabaja indica quizá satisfacción con su trabajo. los "acontecimientos, acciones y terapias que involucran a este área tienen un impacto psicológico significativamente favorable en la persona." Entonces si usted dañara su brazo, esto tendría un impacto psicológico significativo en usted, más que en otra parte, porque lo necesita para

practicar su profesión. Así que el lila aquí indica no solamente una conexión psicosomática, o una conexión mente-cuerpo relacionada con la salud, sino más bien una conexión psicológica y emocional, usted realmente cuida esa parte de su cuerpo en particular. En otras palabras, en lugar de una conexión mente-cuerpo, es más una conexión cuerpo-mente, donde las condiciones o los acontecimientos guardan relación con la influencia del cuerpo sobre la mente y la psicología. Entonces el lila significa que la parte del cuerpo influye en su psicología, mientras que el violeta significa que la parte del cuerpo está bajo el control o la influencia de su psicología. Esa es una diferencia sutil pero importante.

Muy bien, bordó cerca de la mano… "actividad biológica incrementada en forma de crecimiento o regeneración. Generalmente saludable." Así que esto no indica nada en particular aquí, pero es interesante que sea consistente con el azul marino en el otro lado de su Aura que es también "actividad biológica incrementada." De modo que el tono rojo y que el tono azul tienen significados similares, indicando que el bordó aquí es también un resultado de su ejercitación, aunque el lado derecho de su cuerpo reaccionó de forma levemente diferente que el lado izquierdo. Éste es un ejemplo de cuántas veces un color de la bioenergía no nos dice realmente nada por sí mismo, pero puede ser interpretado en el contexto de los otros colores del Aura.

Luego tenemos violeta en el muslo… Esto es otra vez "conexión psicosomática", y luego en la base de la pierna tenemos azul marino, que es esa actividad biológica incrementada saludable del ejercicio. Así es el Aura de Steve. Ésta es una gran cantidad de información. ¿No es una tonelada de información?

LAURA: Sí…

PROFESOR: Es mucha información, para Steve que simplemente pasó por aquí. Nunca había tenido un encuentro con él antes…

STEVE: Y muchos detalles.

PROFESOR: Sí. Sé que el uso de su brazo derecho es central para su identidad, que es alguien

que se ve afectado emocionalmente por las experiencias intelectuales - es decir que su nivel de bienestar está muy determinado por su satisfacción intelectual - y que está pasando por un proceso curativo emocional intenso. También descubrí empatía y sensibilidad a las emociones de los otros, en combinación con algunas conexiones psicosomáticas en partes de su cuerpo. De modo que si esas partes de su cuerpo tienen un problema, yo miraría no solamente su psicología, sino también le prestaría atención a su ambiente psicológico. También podría conjeturar que usted ha ejercitado recientemente, porque encontré una abundancia de azul marino sobre toda su Aura. Y usted no solamente es saludable en conjunto, sino que es tan sano que hacia la base de su Aura hay incluso un color dorado filtrándose, lo cual es simplemente un abundante exceso de energía curativa. Usted es tan sano que simplemente derrama esa salud, y puede tener incidencia sobre otras personas.

STEVE: Bueno todos ustedes pueden tocar mi pierna … [risas generales]

PROFESOR: ¿Qué piensa usted de estas lecturas, AJ? ¿ Parecen tener sentido, no ?

AJ: Oh, sí. Seguro. Absolutamente.

PROFESOR: No están fuera de lugar. Es decir, identifican algunas cosas concretas.

STEVE: Realmente me sorprendí por el naranja en el Chakra Cardíaco que usted encontró. Eso fue asombroso.

PROFESOR: Muy bien, entonces ¿quién desea ser el siguiente? [AJ y Laura deciden hacerse entre ellas una exploración del **RFI™**, comenzando con AJ. Mirza se ofrece voluntariamente a escribir los colores en la gráfica.]

LAURA: [poniéndose una chaqueta de laboratorio.] Siempre deseé usar una de éstas.

PROFESOR: Es agradable. Traje adrede bastantes chaquetas de laboratorio para cada uno de nosotros.

AJ: ¿Y "adrede" trajo una suficientemente grande para mí?

PROFESOR: Sí. Tengo una muy grande precisamente para usted. [nota del redactor: AJ se refería solamente a su altura].

AJ: Ya veo. Ella la tiene puesta.

PROFESOR: [a Laura] Esa es para AJ. Tamaño 42. A usted le traje un talle 38 porque usted es muy pequeña.

LAURA: [Ruborizándose] ¡Oh, gracias! [Risas generales]

7.6 **ANÁLISIS DEL AURA #3 - NIVEL DE SALUD**

PROFESOR: [Después de que se termina la imagen del Aura de AJ] Muy bien, he aquí cómo luce el Aura de AJ. Hay mucho azul, tanto azul marino como azul…

MIRZA: ¡Ésos son los mismos colores que ella está usando!

STEVE: Ella es "la señora de azul"…

AJ: Me visto siempre de la manera en que me siento. Eso es verdad, siempre lo hago.

PROFESOR: Observemos al lado izquierdo del cuerpo, otra vez el Nivel de Salud. No se olviden – lado izquierdo del cuerpo, lado derecho de la gráfica. Partiremos de la base e iremos hacia arriba. Muy bien… violeta, violeta, violeta, y luego el torso es violeta. Entonces, la condición médica de todo el lado izquierdo inferior de su cuerpo está bajo el control de su mente.

Luego, el brazo entero es azul marino, que es actividad biológica incrementada, así que ella pudo haber estado haciendo ejercicio recientemente como Steve, o al menos ella ha aumentado la

circulación sanguínea en ese brazo. A la izquierda, el hombro es celeste, el cual puede ser también llamado turquesa. En el Nivel de Salud, celeste es el "bienestar y la actividad biológica saludable en los sistemas circulatorios, incluyendo la circulación sanguínea, respiratoria, y de los sistemas linfáticos, y cualquier fluido que genera sistemas en el área de la bioenergía. Generalmente saludable." Entonces este celeste en la parte superior del brazo parece ser el punto principal - o causal - de la circulación incrementada en el resto del brazo, lo cual es evidenciado por el azul marino. De modo que tiene sentido.

Todo alrededor de la cabeza - izquierda, derecha y superior - y todas las ondas cerebrales son azules. Pero puesto que son ondas cerebrales, tenemos que utilizar los cuadros de interpretación psicológica. Porque para todo lo mental se utilizan las interpretaciones emocionales/psicológicas. Azul es " comunicación, perspectiva de la realidad. Busca la expresión de la verdad, comunicación abierta con buenas intenciones." Ésa es AJ.

AJ: Eso es verdad. Me siento realmente bien con respecto a mi azul allá arriba … [risas] Permítanme que les comunique eso… [Más risas]

PROFESOR: También medimos un color secundario de azul marino en la parte superior, el cual estaba junto con el azul. Esto es "liderazgo, expresión de las ideas intelectuales que involucran o influyen en situaciones materiales o sociales." Entonces este Aura es una reflexión muy precisa de la personalidad de AJ. Hablando de personalidad, ya que estamos en el centro del Aura, vamos ahora a analizar los Chakras, antes de que veamos el lado derecho del cuerpo.

Muy bien, comienzo con el Chakra Base… azul marino. Entonces el Chakra del "sentido de sí mismo" también tiene energías de liderazgo. Lo que es realmente interesante, en nuestros 3 años de ensayos experimentales con el Aura por imágenes, encontramos que en los casos donde una persona tuvo un rasgo extremadamente fuerte y obvio de personalidad - algo muy claro y predominante en su personalidad - se reflejó todo el tiempo en el Chakra Coronario superior o en el Chakra del Tercer Ojo siendo igual que el Chakra Base. De manera que cuando los Chakras de la parte superior y de la base son iguales, indica que el color de la bioenergía describe la esencia fundamental de su personalidad.

AJ: Y de hecho, cuando usted observa los siete Chakras, con el Chakra Cardíaco en el centro, los Chakras que se encuentran arriba y debajo del centro pueden ser iguales. En otras palabras, los colores de la bioenergía pueden ser simétricos arriba y debajo del Chakra Cardíaco. De modo que el superior y el base son complementarios, y pueden tener la misma bioenergía en pares. Los tres Chakras que se encuentran debajo del Chakra Cardíaco están relacionados a lo físico, y los tres que están sobre él están relacionados con lo mental, o metafísico. De esta manera lo físico y lo metafísico algunas veces forman parejas. Y así es que mientras que no tienen que ser iguales en el color, tienen que tener idéntico poder para estar balanceados entre sí.

PROFESOR: Entonces la idea es que para que exista equilibrio entre el mundo material y el mundo metafísico, usted necesita tener cierto equilibrio en los Chakras. ¿Ahora, cuál sería ese equilibrio? ¿Qué indicaría ese equilibrio?

AJ: No sé. Lo siento, yo no puedo hablar inteligentemente sobre esto porque acabo de elaborarlo en mi cabeza. Pero lo puedo averiguar.

PROFESOR: Bueno, yo pienso que está claro que los inferiores están más relacionados con las cosas físicas y los superiores están más relacionados con las cosas mentales, y el cuerpo esta diseñado de esa forma, y los sistemas biológicos están diseñados de esa manera, con el cerebro en la parte superior. Pero pienso que esta idea de equilibrio podría ser no más que filosofía.

AJ: Sí. Sí, es realmente filosofía. No está en lenguaje científico; es una filosofía acerca del equilibrio.

PROFESOR: Pero eso no quiere decir que sea necesariamente acientífico, y mucho menos que no sea informativo. No es algo mecánico. Lo mecánico que nosotros tenemos es que cada color de referencia - asociado con una frecuencia - de cada Chakra representa una categoría de información basada en asociaciones experimentales, de esta manera tenemos información verdaderamente franca sin consideración por ninguna filosofía de equilibrio.

Lo que es interesante, sin embargo, sobre esa teoría - usted mencionó el Chakra Cardíaco como siendo el centro - es que en el Centro Ruso para la Investigación de la Medicina Tradicional en Moscú, la cual es una escuela médica con un hospital de 70 camas, ellos tienen cursos especializados en medicina energética. Y en las lecciones en los talleres sobre Chakras enseñan que el Chakra Cardíaco es el centro de control de todos los puntos de los meridianos. Los puntos de los meridianos son básicamente los puntos de acupuntura, pero son también senderos de energía. De modo que existe una cierta investigación científica sobre estos puntos. Simplemente tenemos que ser estrictos separando las explicaciones sustentadas científicamente de la mera filosofía.

Muy bien, ahora en el Chakra naranja - el Chakra de la curación - AJ tiene dorado. Eso indicaría que AJ tiene abundancia de energías curativas, y que sus energías curativas no están siendo utilizadas para la cura de sus propios problemas, porque aparentemente no parece tener ninguno. En cambio sus energías curativas están siendo proyectadas hacia afuera para beneficio de otras personas. De modo que AJ está en "modo curativo," y si ella hiciera una cierta clase de ejercicio o algo de Reiki hoy, probablemente tendría un éxito increíble.

El Chakra amarillo - su nivel de bienestar. El factor que influencia el nivel de bienestar de AJ es verde, lo cual refiere a los factores emocionales. Es decir que AJ está cómoda cuando las emociones son confortables, y se siente mal cuando sus emociones son perturbadas. Eso parece ser una situación bastante normal, - incluso universal - ¿correcto? Pero noten que esto es diferente del análisis del Aura de Steve donde su nivel de bienestar era más dependiente de la satisfacción intelectual. Entonces, a pesar de que suene como una obvia frase trillada, es realmente información significativa e individualizada con una cierta significación. También según la filosofía tradicional del equilibrio, lo que podría ser llamado "normal " sería que el amarillo esté en el Chakra amarillo. Pero lógicamente, mirando el análisis de AJ, parece más "normal" tener energía verde allí, porque eso es lo que afecta los niveles de bienestar de la mayoría de las personas - su entorno emocional.

AJ: También, el Plexo Solar es el área donde se siente la emoción.

PROFESOR: Ésa es la "sensación de las entrañas", claro. Muy bien, ahora en el Chakra Cardíaco tenemos azul marino, que es liderazgo. Ella es un líder "de corazón." [Risas] Pero, seriamente, lo que indica eso es que en la categoría de las emociones en la vida de AJ, el factor más grande que afecta su estado emocional es el liderazgo. De modo que las emociones de AJ también están muy influenciadas por los resultados y sus logros como líder. Si un día la frustran como líder, y las cosas no funcionan, y nadie la escucha, usted va a estar… bueno, emocionalmente perturbada [risas generalizadas].

AJ: ¡La gente dice eso con frecuencia, que me perturban emocionalmente! [Más risas].

PROFESOR: El Chakra de la Garganta - la comunicación - es la categoría que revela el asunto o el foco primario de sus habilidades de comunicación. Y aquí es violeta, que es información energética intelectual. El Chakra del Tercer Ojo, que es la esfera de la actividad intelectual, también tiene información energética de liderazgo, como vimos antes. De modo que terminamos con los Chakras.

Ahora, vamos a analizar el lado derecho del cuerpo, en el lado izquierdo de la gráfica, y puesto que las mediciones están dentro de las 4 pulgadas del cuerpo, y no están cerca del cerebro o de los Chakras, debemos utilizar las interpretaciones del Nivel de Salud. En todo este costado hay azul marino, a excepción de un poco de violeta. De modo que de forma predominante hay un incremento saludable de la actividad biológica y de la circulación, lo cual es lo mismo que encontramos en el lado izquierdo, así que esta condición saludable está en todo el cuerpo, alrededor de todo el cuerpo. ¿Qué *ha estado haciendo* usted ?

AJ: ¿Usted piensa que voy a decírselo a ustedes, *chicos*? [Risas generales]

PROFESOR: ¡Uh-uh-oh! Ella tiene un precio. [Risas] Usted va a tener que empaquetar eso y venderlo.

AJ: Sí, usted lo obtuvo. Realmente, creo que el lado izquierdo son las bioenergías que entran – de las que usted está rodeado, y el lado derecho son las bioenergías que salen.

PROFESOR: Eso es verdad, pero solamente para el Nivel Emocional del Aura, a partir de las 4-18 pulgadas. Puesto que éste es el Nivel de Salud, está puramente relacionado a las áreas específicas del cuerpo, e interpretado como información de salud.

AJ: Muy bien, así que en el Nivel Emocional, tengo una tendencia a no integrar las cosas que entran. Intelectualmente las integraré, pero no las integraré en la estructura bioenergética de mi cuerpo. Recuerdo que tuvimos debates de energía de odio y odios personales , y yo simplemente tengo una tendencia a dejar que esas cosas me atraviesen y a dejarlas pasar.

PROFESOR: Oh, así que usted piensa que esta gráfica de la salud - el hecho de que concuerden en la izquierda y la derecha- podría ser parte de ese fenómeno de que las energías tienden a fluir a través de usted y a salir directamente hacia afuera. De modo que si usted tiene muchas energías saludables en su entorno, le atravesarían y se retirarían. Eso es interesante, porque en el Nivel de Salud, la parte específica del cuerpo donde la bioenergía es encontrada simplemente identifica que cierta bioenergía está en esa parte del cuerpo, y está enfocado muy físicamente. Pero la mecánica - la estructura de los campos neurológico y eléctrico dentro de su cuerpo que llevan esas energías - esa mecánica sería la misma, y también podría operar el flujo de las energías de salud. En otras palabras, el color de la bioenergía en el Nivel de Salud es generado por el cuerpo físico, pero también dichas bioenergías pueden fluir y viajar a través de los mismos sistemas y mecanismos bioenergéticos, así como las bioenergías del nivel emocional podrían hacerlo.

AJ: También hay otra explicación posible para esto, y es que desde que comenzó la primavera, esta estación de las alergias, he estado tomando una gran cantidad de Ginseng y antioxidantes …

PROFESOR: ¡Así que *ese* es su secreto! Ginseng y antioxidantes. Ése es el porqué ella es toda azul marino. Ése es el por qué.

AJ: Correcto. Eso es correcto, ya que eso forma parte del tratamiento de las alergias y que muy

bien podría haber incrementado la actividad biológica, ya que realmente ha impulsado los sistemas de mi cuerpo.

7.7 **ANÁLISIS DEL AURA #4 - NIVEL PSICOLOGICO**

PROFESOR: Ahora, tenemos tiempo de realizar la lectura de Laura…

MIRZA: ¡El Aura de Laura! el Aura de Laura - he estado esperando un rato largo para decir eso [risas]. [AJ toma las medidas del “Aura de Laura", mientras que Mirza dibuja los colores en la gráfica].

PROFESOR: Ahora recuerden, este vez nosotros medimos el Nivel Emocional del Aura, a partir de las 4-18 pulgadas del cuerpo, así que las interpretaciones deben ser enteramente psicológicas. En el Nivel Emocional, el lado izquierdo del cuerpo indica todas las bioenergías dentro de su entorno, su entorno mental y psicológico. En el entorno de Laura, en Moscú, hay… celeste - la "expresión de las emociones," y el celeste aparece en dos áreas de su lado izquierdo, así es que hay bastante flujo emocional teniendo lugar alrededor de Laura. Rosa - "energía sexual, romance, deseo físico y sensual." [Laura comienza a ruborizarse] no es usted, esto está alrededor de usted, en su ambiente. No es necesariamente usted.

AJ: ¡Oh, muy mal! [Risa]

LAURA: Bueno, lo que está alrededor es usted, ¡así que estos son todos ustedes! [Más risas]

STEVE: Yo fui el más cercano a ella… [Risas generales]

PROFESOR: Rosa también se relaciona con la "realización emocional y romántica, o la diversión y el entretenimiento."

El naranja revela energía curativa en su ambiente. El violeta, es bioenergía intelectual o académica, así como psíquica. El lila, es "actividad psíquica, comprensión de la verdad,

participación en el intercambio de información energética." Entonces el lila significa que hay gran cantidad de energías metafísicas o sutiles alrededor suyo, y podría haber algunas interacciones de energía-energía a su alrededor. De modo que el entorno de Laura está formado por - flujo emocional, energía curativa, diversión y romance, y actividades intelectuales.

El lado derecho del cuerpo en el Nivel Emocional revela las bioenergías que Laura está proyectando - o con las que está contribuyendo - a su entorno. Dorado, es un flujo de energía curativa.

MIRZA: [sentándose al lado de Laura] A propósito, lo estoy sintiendo. [Risas]

PROFESOR: A propósito, la interpretación del dorado es un poco diferente en el Nivel Emocional. El cuadro de asociación dice "el sujeto tiene abundancia de bioenergía curativa, por lo cual no se siente sobrecargado ni inhibido por los problemas emocionales personales que pudiera tener." De esta manera, lo mismo que en el Nivel de Salud, el naranja significa bioenergía curativa actuando en una parte del cuerpo, y el dorado en el Nivel de Salud significa que no está siendo utilizada sino que está libre para curar a otros; el dorado en el Nivel Emocional también significa que la bioenergía curativa emocional que ella tiene no se está utilizando para solucionar ningún problema, pero está fluyendo hacia fuera para ser aplicada a otras cosas.

Otras bioenergías que Laura está proyectando hacia afuera…Azul marino - liderazgo. Violeta - energía intelectual, y actividad espiritual y psíquica. Bordó - habilidades de supervivencia. Rosa - romance, diversión y entretenimiento. Finalmente, lila, que es "claridad de pensamiento, actividad psíquica, y participación en el intercambio de información energética."

MIRZA: Un momento… esas energías lilas de actividad mental ¿están saliendo de su pierna?

PROFESOR: No se confunda. Éste no es el Nivel de Salud. En el Nivel Emocional del Aura, las energías no se asocian directamente a las partes del cuerpo. En el Nivel Emocional del Aura, el cuerpo es simplemente un macrocosmos del cerebro - una ventana magnificada dentro del cerebro - porque todas las partes del cuerpo, en el Nivel Emocional, pueden ser rastreadas a

través del sistema nervioso y del sistema de meridianos hasta partes específicas del cerebro. El cerebro en sí mismo es demasiado pequeño para que miremos dentro, y no podemos colocar una antena o unas puntas de testeo allí adentro, pero ya que los nervios se ramifican a todo lo largo del cuerpo, el cuerpo lo magnifica para nosotros. En consecuencia, el Nivel Emocional del Aura muestra solamente qué bioenergías se relacionan con la parte correspondiente del cerebro. Puesto que el cerebro izquierdo activo está conectado con el lado derecho del cuerpo, el lado derecho del Aura del Nivel Emocional manifiesta las bioenergías que ella proyecta hacia afuera, a su entorno.

A propósito, sobre la interpretación del azul marino como "liderazgo." El liderazgo no es siempre como en una sala de reunión corporativa. Es también "expresión de las ideas intelectuales que involucran o influencian situaciones materiales o *sociales*", así es que muy bien podría ser Laura expresando algunas de sus ideas y filosofías que ejercen influencia sobre sus situaciones sociales

.

LAURA: Sí, eso es verdad. Estoy constantemente dando consejo a la gente. Siempre, siempre, siempre. La gente siempre viene a mí con sus problemas.

PROFESOR: Bien, eso explica el flujo emocional en su ambiente, y su provisión de consejo es revelada por sus propias bioenergías azul marino influenciando situaciones sociales.

Ahora hagamos una comparación de los lados izquierdo y derecho del Aura del Nivel Emocional. Estamos interesados en la relación entre qué bioenergías están en el ambiente de Laura, y qué bioenergías ella está proyectando hacia fuera. Esto nos hablará acerca de la compatibilidad con su ambiente - su adaptación.

Esta clase de análisis de comparación no es extremadamente importante, pero en ciertos casos puede revelar información significativa. Por ejemplo, si una persona tiene gran cantidad de bioenergías de amor, afecto y apoyo emocional en su ambiente, pero la persona está proyectando solamente bioenergías de supervivencia y de enfoque material, esto sugiere un bloqueo. En otras palabras la psicología o el comportamiento de la persona está pobremente - o

"inadecuadamente" - satisfecho por su ambiente, y muestra que ella no puede beneficiarse - o "aceptar" - de las bioenergías positivas y constructivas o de los estímulos psicológicos de su ambiente. Por otro lado, si el ambiente contiene todas bioenergías agresivas y de supervivencia, y las energías propias de la persona son todas de amor, afecto y franqueza, esto podría sugerir una adaptación pobre y una deficiente defensa psicológica contra un ambiente dañino y peligroso.

En el caso de Laura, todo parece emparejarse. Ella tiene algo de violeta entrando, y algo de violeta saliendo. Ella tiene azul de comunicación entrando y saliendo, y energía curativa naranja entrando y una energía curativa de dorado de una calidad incluso mayor, saliendo. De manera que ella es una persona que está muy bien ajustada a su ambiente.

Ahora miremos el sistema de los Chakras para mayor información. El Chakra Base es bordó, mostrando que incluso el sentido básico de sí mismo de Laura está caracterizado por el ambiente físico inmediato y las cuestiones materiales. Hay naranja en el Chakra curativo, así que ella es un canal despejado de bioenergías curativas. El Chakra "amarillo" contiene rosa, mostrando que el factor principal en el nivel de bienestar de Laura es la "comodidad física, la realización emocional, la diversión y el entretenimiento."

LAURA: Parece que necesito mucha diversión…

PROFESOR: Bueno, usted está hablando siempre de su búsqueda de actividades más interesantes. Usted siempre está inscribiéndose en diversos grupos y talleres - malabarismo, meditación zen, este loco curso … [risas]

Vayamos de nuevo al "Aura de Laura." Ella tiene verde en el Chakra Cardíaco, así que es un canal despejado de todas las bioenergías emocionales - ningún bloqueo u obstáculo o cuestión, simplemente un canal despejado. El Chakra de la Garganta, la categoría de la comunicación, contiene azul marino, que es la expresión de las ideas que influencian situaciones sociales. De modo que el tipo primario de comunicación de Laura, es una clase de comunicación de liderazgo. El Chakra del Tercer Ojo también es azul marino, mostrando que ella está mentalmente enfocada en proporcionar consejo. Ella probablemente piensa mucho acerca de cómo solucionar los

problemas de sus amigos, y posibilita situaciones sociales. El Chakra Corona es violeta, que es "actividad intelectual, claridad de pensamiento, actividad académica o habilidad psíquica." Eso significa que ella está prestando atención a nuestra clase. [Risas.] De modo que eso es todo por ahora.

7.8 **PREGUNTAS Y DEBATE DE LA CLASE**

STEVE: ¿Usted sabe lo que noté? ¿Por qué usted va de un valor numérico - porque el contador de frecuencia le da un valor numérico - y después traduce esto a un color?

AJ: Porque nunca no se ha hecho en forma numérica antes. Siempre se ha hecho en color.

STEVE: ¿Entonces esto es una tradición? Pero desde un punto de vista científico podría ser mejor mantenerlo en un valor numérico. Por qué usted se introduce en estas cosas que son realmente esotéricas, usted sabe, colores, emociones, etc.

AJ: Bueno, eso es porque históricamente, en China y en las filosofías orientales, se ha hecho siempre en colores. No había ninguna medición en ese entonces. No era científico.

STEVE: Pero lo que hicimos hoy, esto es más un análisis científico. Es más científico.

AJ: Pero usted puede hablar con la gente acerca del color. Usted no puede hablar con la gente en números.

PROFESOR: Sí, es eso exactamente. Eso es de lo que se trata. Primero que nada, conservamos los números. Cuando hacemos una medición clínica del Aura para los estudios científicos, anotamos los números. Hoy simplemente anotamos los colores en la gráfica, así que podríamos ver cuáles eran los significados. Pero en el laboratorio, ustedes pueden anotar la frecuencia, también.

De hecho, los colores que utilizamos en el sistema del **Campo de Resonancia por Imágenes** ä no son arbitrarios, y no se basan en filosofías. Lo que hemos hecho fue literalmente calcular la asociación y la correspondencia de frecuencias en el espectro electromagnético con frecuencias en el espectro óptico de la luz visible. Como resultado, los números científicos de hecho identifican colores específicos. Debido a esta correlación objetiva, los colores también se determinan científicamente, y tienen significado científico concreto y sentido independiente, pues incorporan exactamente las propiedades y la información relacionada con las frecuencias electromagnéticas. Por lo tanto, tales colores correspondientes, científicamente calculados, no comprometen el valor científico del proceso de la medición. Son, sin embargo, "colores de referencia," pero estos colores de referencia identifican y describen exactamente las propiedades y las características técnicas de la bioenergía que se ha detectado electromagnéticamente.

En realidad, sin embargo, hay muy poca información adicional que tendríamos utilizando sólo los números por sí mismos. Las interpretaciones no están basadas en ideas filosóficas sobre los colores, sino que están firmemente basadas en correspondencias y correlaciones calculadas con casos experimentales en números. Sencillamente sucede que las bioenergías resuenan en muchas diversas frecuencias, así que muchos números diferentes en todo el espectro electromagnético identifican exactamente las mismas bioenergías. El sistema de color precisamente toma las resonancias en el espectro óptico, para asignar colores de referencia que identifican exactamente la misma bioenergía, sin tener en cuenta cuál es la resonancia que tiene en ese momento. Esta es la razón por la cual se llama Campo de “Resonancia” por Imágenes. En consecuencia, una vez que tenemos el color, tenemos exacta y objetivamente identificada la naturaleza de la bioenergía, y podemos confiar en las interpretaciones científicamente asociadas.

La única cosa que los datos numéricos pueden decirnos y que los colores no nos dicen, es la frecuencia - o velocidad - del intercambio de información energética en el sistema bioenergético que estamos midiendo. Si el azul es detectado aproximadamente a 160 MHz y en otra localización se detecta azul a aproximadamente 320 MHz, la bioenergía es igual, y de hecho significan la misma cosa. La única diferencia es que el primer azul está vibrando más lentamente, así que es menos activo, o es menos probable el intercambio de la información energética con el ambiente, o con otras partes del Aura. El segundo azul está vibrando mucho más rápidamente,

así que puede enviar y recibir señales de información energética aproximadamente 2 veces más rápido que la otra bioenergía, así que podría tener mayor influencia sobre las bioenergías externas, e incluso sobre otras partes del Aura. De modo que el número es solamente útil para dos cosas: (1) para darnos la identidad de la bioenergía, según lo descrito por su color de referencia, y (2) para decirnos qué áreas del Aura están participando más activamente del intercambio de información energética con el entorno o con otras regiones del Aura. Para la mayor parte de los propósitos del Aura por imágenes, sin embargo, nos referimos solamente a la identidad y a la interpretación de las bioenergías detectadas, así que podemos confiar cómodamente solo en los colores de referencia.

MIRZA: Tengo otra pregunta. ¿Podemos comprobar los colores de los objetos, como este libro negro y esta carpeta violeta?

PROFESOR: No. Es solamente bioenergía. El Aura por imágenes solo puede detectar bioenergía. Si leemos las bioenergías de este libro negro, no es probable que sea negro solo porque el libro es negro. El libro en sí mismo contiene información, y cuando las personas leen el libro, esta información se asimila en sus cerebro, y probablemente se transmite como formas de pensamiento tal como las personas entienden y procesan la información en el libro. El libro, como materia física, se impregnará con la información energética de esas formas de pensamiento, especialmente porque los libros se sostienen generalmente en las manos, y la cabeza está físicamente cerca del libro. Por lo tanto, las bioenergías del libro en sí mismo estarán relacionadas con los pensamientos de aquellos que lo lean, influenciados muy probablemente por la información contenida en el libro como tal.

Las bioenergías son identificadas con referencia a colores verdaderos en el espectro óptico, pero aquí está la diferencia: el color del libro es simplemente la frecuencia visual del espectro de la materia física del libro en sí mismo. Por otro lado, el color de la bioenergía del libro es la resonancia de una frecuencia electromagnética invisible calculada dentro del espectro óptico, lo cual nos habla acerca del Aura del libro, o de la información energética impresa en el libro, en oposición a su aspecto físico.

Déjenme decirles algo acerca del punto de Steve, el cual es realmente importante. Tenemos los números, y realmente funcionan bien, pero todavía necesitamos los colores porque son colores de "referencia". La información resuena a todo lo largo del espectro, y la misma información energética - incluso la misma identidad de la misma bioenergía - será registrada, o detectada, en diferentes frecuencias tanto altas como bajas. De modo que si tuviéramos que enumerar cada resonancia numérica que hay para un color de bioenergía, tendríamos centenares de ellos a lo largo del espectro electromagnético. Nunca podríamos llevar el control de todos ellos, pero todos ellos significan lo mismo, y la identidad y la función de la bioenergía detectada es la misma. Así que le damos un color de referencia, y decimos que es "azul." Y la razón por la cual decimos que es "azul" es porque resuena, eventualmente, en una frecuencia que - en el espectro óptico visual - es de hecho azul.

AJ: Y, *vemos* colores. Podemos leer un Aura y ver colores, no vemos números.

PROFESOR: Eso es correcto. Es fácil para nosotros interpretar exactamente, porque podemos aprender los 15 colores, y recordar lo que ellos significan. De esa manera, si usted es médico y observa la gráfica todo el tiempo, es como aprender a leer una radiografía. Usted puede aprender lo que debe buscar y puede recordar lo que significa la información.

AJ: Correcto, pero hay una razón para realizar esto con los números y la razón es que todos piensan que suena loco hablar de que la gente tiene colores de una cierta energía metafísica a su alrededor. Pero cuando nos sentamos con una pieza de equipo, y medimos a una persona, y decimos “nosotros, midiendo estas frecuencias numéricas, podemos obtener una idea muy buena de lo que podemos sentir intuitivamente”, le podemos poner números.

Hay muchas personas que ven los colores del Aura psíquicamente, pero muchas veces las personas ven colores y no confían en eso que ven. Piensan que simplemente están "viendo cosas," como una alucinación. O pueden detectar energía, pero no confían en ello. Eso es algo que no puede ser documentado, pero esto *puede* ser documentado por números, midiendo estas cosas. Nosotros no podemos decir, " hoy vi 93.4", pero podemos decir, "vi muchísima energía curativa."

PROFESOR: Esa es exactamente la razón por la cual realizamos el **RFI™** de la manera en que lo hicimos. Tomamos las medidas basándonos solamente en datos numéricos, por objetividad y exactitud, y después las calculamos en correlaciones exactas y precisas con colores específicos dentro del espectro óptico, los cuales utilizamos para los colores de referencia. De esta manera, tenemos lo mejor de ambos mundos - confiabilidad científica, y utilidad práctica.

LAURA: ¿Puede usted ver realmente las Auras, AJ?

AJ: De vez en cuando. No siempre. Tiene que ser muy fuerte. No soy muy sensible. Pero cuando las bioenergías son lo bastante fuertes como para sentirlas, realmente sentirlas, entonces las puedo ver. Se ve con el ojo de la "mente," y se puede confiar en eso, porque es verdadero.

PROFESOR: Entonces lo que esto significa es que el proceso de Aura por imágenes - **Campo de Resonancia por Imágenes** ä - es no solamente una gran forma de obtener información rápida y precisa del Aura humana, sino también una verificación del trabajo de los psíquicos. Hicimos muchos experimentos en el primer año de desarrollo de esta tecnología, y tuvimos psíquicos profesionales que tenían una gran experiencia y entrenamiento y que eran respetados por sus buenos resultados. Los psíquicos leían a diferentes personas y nos informaban acerca de qué colores estaban en el Aura y dónde, y nosotros verificábamos esto con el contador de frecuencia. Con los psíquicos mejor entrenados, las correlaciones estaban en una exactitud cercana al 90%.

Tengan presente que nuestras lecturas científicas de verificación estaban "ocultas," porque los números solamente aparecían en el contador de frecuencia y nosotros no podíamos saber qué color se asociaba a cada número hasta ver la traducción en el gráfica de los datos numéricos que muestra los colores. Así que no había manera de que el operador fuese influenciado por las lecturas. Para hacer estos estudios "doble ciego," hicimos que los psíquicos anotaran sus lecturas en un pedazo de papel, de modo que los pensamientos subconscientes o las expectativas del operador sobre un color no pudieran crear las formas de pensamiento interferentes que pudieran influenciar las bioenergías medidas electrónicamente.

Este experimento prueba que la gente de hecho puede hacer trabajos psíquicos y que puede realmente visual y mentalmente "ver" las frecuencias del color de la bioenergía alrededor del cuerpo humano. De modo que esto significa que ustedes *pueden* hacerlo, y que *pueden* aprender a utilizar su cerebro y entrenarse para convertirse en efectivos, precisos y confiables curadores psíquicos o bioenergéticos sin el equipamiento bioenergoinformático.

AJ: Usted puede ver, pero nadie lo ha documentado alguna vez, realmente. Hablan acerca de las personas que son curadores, pero no ha habido suficiente investigación realmente intensa para apoyar eso. Pero si usted puede medirlo, eso es otra historia.

STEVE: Tal vez usted informó acerca de esto a comienzos de las clases que yo perdí, pero ¿cómo hace usted para alterar estas bioenergías, cómo cura usted a alguien con estos problemas?

AJ: Bueno, hay gente que puede, y estas personas tienen la habilidad para refrenar otras bioenergías y poder contrarrestar los disturbios bioenergéticos del paciente..

PROFESOR: En otras palabras, usted hace un análisis de las condiciones bioenergéticas y de la estructura de los campos bioenergéticos del paciente, y luego hace un análisis como los que hicimos hoy en el Nivel de Salud. Después tiene que emitir sus juicios profesionales, como profesional médico, acerca de si esas condiciones son saludables o no, y lo que necesitaría ser corregido. Una vez que usted haya decidido esto, como con cualquier otro análisis médico, será el momento de decidir el tratamiento. Entonces lo que hacemos es diseñar un tratamiento que esté ideado para equilibrar la condición de salud, o tratar sus causas. Hay dos maneras de hacer eso. Uno, es controlando nuestros pensamientos, y proyectando la energía electromagnética de la forma de pensamiento, de modo que tenga un impacto electromagnético sobre el campo bioenergético y lo altere según los leyes de la física del campo eléctrico y del campo de torsión. La segunda manera es utilizar tecnología como generadores de campo eléctrico que modulan la pulsación, la frecuencia, la forma de onda, y otras características importantes del estímulo curativo. De esta manera podemos literalmente diseñar un campo eléctrico que entregue información energética como tratamiento médico, o que simplemente tenga incidencia sobre el

tratamiento médico por el puro impacto del campo electromagnético.

AJ: Es gracioso, estoy muy incómoda con ese concepto, pero al mismo tiempo tengo que reírme de mí misma, porque en medicina alopática es lo que se llama una "vida mejor a través de la química." ¿Y qué hacemos? Entramos y *químicamente* alteramos a la gente, para hacer que las cosas sucedan. Y entonces puedo decir filosóficamente hablando que no estoy feliz con el concepto de tomar una energía eléctrica hecha por el hombre y entrar y manipular el campo eléctrico de alguien, ¿pero de qué modo esto es diferente a lo que hacemos químicamente?

PROFESOR: Esa es una pregunta excelente. La respuesta es la siguiente. En términos de acercamiento, es muy similar. Es una fuerza externa diseñada para tener un impacto en el cuerpo físico para cambiar su estructura o función, así que en términos generales es la misma cosa. Bueno, lo que nos dice en primer lugar es que la terapia bioenergética con generadores es tan tangible, real y científica como cualquier diseño químico de las compañías farmacéuticas. De modo que la medicina bioenergética es igualmente apropiada en el mismo nivel de ciencia y tecnología, y es igualmente legítima.

La única diferencia es que en medicina química, predominantemente, la mayoría de los medicamentos químicos y de los productos farmacéuticos están tratando solamente síntomas de la enfermedad. Solamente síntomas. Si algo duele, usted calma el dolor, y se olvida totalmente de la fuente de dicho dolor, de sus causas. En medicina bioenergética, podemos ir más allá de la medicina química. El medicamento químico puede incidir sobre algunas de las estructuras como son los receptores del dolor, o estimular quizá algunas funciones curativas. En otras palabras, puede hacer cosas para "encubrir" la enfermedad, porque eso es lo que hace nuestra biología. Reconstruye, regenera y "encubre" la enfermedad. Por ejemplo, si usted tiene una alergia, puede bloquear la reacción de la célula cebada, para parar de estornudar, pero eso no modifica nada de lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo en términos de la reacción alérgica. Usted puede aún tener erupciones, hinchazón, y toda clase de cosas, pero con el medicamento usted parará de estornudar. Eso es todo lo que puede hacer. En medicina bioenergética, sin embargo, podemos entrar a niveles y a las causas más profundas de la enfermedad, porque los niveles y las causas más profundas de la enfermedad *son* bioenergéticas por naturaleza. Son tanto mentales, como

psicológicas, o simplemente por la energía sutil que está relacionada a las cosas que ocurren biológicamente - la energía detrás de la materia. De modo que podemos ir a estos niveles más profundos y podemos dirigir los tratamientos que precisamente no manipulan los síntomas, sino que van realmente al corazón y a la raíz más profunda de la causa, pudiendo eliminar totalmente la enfermedad, tanto si es emocional, psicológica, o aún, física.

AJ: Pero el argumento que yo utilizaría contra eso es el mismo que utilizaría contra la medicina alopática, y es que: ¿no prestamos un mejor servicio a nuestros clientes comunicándonos con ellos acerca del qué cuestiones son verdaderas y animándolos a que se hagan responsables de ellos mismos? Porque todos se curan a sí mismos. Usted no cura a nadie , ellos deben curarse a sí mismos. La medicina energética es también una modalidad para comunicar a los demás qué la cuestión es - no voy a discutir eso - si enfocamos la atención en dicha comunicación, ¿no es eso mejor que entrar y manipular algo? Vea, yo no creo que debamos tratar de reemplazar a la medicina alopática haciendo aparecer nuestros dispositivos para introducir cosas y energías nuevas. Pienso que debemos ser capaces de leer en donde están las cosas y dejar al otro decidir cuándo se encuentra listo para aprender la lección que tenía que aprender con esa experiencia, curarse a sí mismo y seguir su camino.

PROFESOR: Entonces lo que necesitamos romper es esta dependencia pasiva de los pacientes de esperar la cura mágica de algún "sanador" lo bastante "poderoso". Porque si ellos *desean* estar enfermos, si tienen problemas psicosomáticos, o factores psicológicos que están participando en la causa y progreso de su enfermedad, entonces usted puede utilizar un gran dispositivo médico de lujo, y acto seguido, dirán "Muy bien, quién tiene un dispositivo más grande y mejor que pueda servirme?"

AJ: ¡Exactamente! Es lo que se llama "yo no necesito ser responsable de mí mismo. Puedo ir a algún gurú, y pedirle que me cure." De modo que necesitamos autorizar al paciente, y creo que esa es la dirección que ahora está tomando la medicina en los EE.UU., la de participar al paciente como socio igualitario en el proceso curativo. Pienso que se está intentando un movimiento hacia ese rumbo, pero para tomar ese camino, por supuesto, los médicos van a tener que asumir un papel diferente al que tienen ahora en los EE.UU.. Así es que realmente no creo

que debamos ver a la medicina bioenergética como una forma de entrar en ese espacio vacío y apareciendo con las respuestas mágicas.

PROFESOR: De modo que necesitamos hacer muchísimos diseños, muchísimos análisis y aislar los factores causativos de la enfermedad, pero no podemos olvidarnos de que casi siempre, un factor causativo importante - si no un factor de la enfermedad en sí mismo, por lo menos un factor en el perpetuación de la enfermedad - es psicológico.

AJ: Recuerdo que hace aproximadamente 20 años, leí una estadística que decía que el 80% de todas las enfermedades tienen un origen psicosomático. Es absolutamente cierto.

STEVE: Además, muchas de las causas son ambientales.

AJ: Pero entonces allí está el asunto de por qué usted optó por meterse en esa situación. Pienso que hay algunas cosas que son, en verdad, puramente físicas, pero todavía siguen siendo 80 % psicológicas. Un virus es un virus, pero si usted está sano, entonces, como su sistema inmunológico está sano, no será atacado por ese virus. Así es que usted elige dejar a ese virus entrar a su cuerpo y asumir el control.

PROFESOR: Entonces podemos sintonizar la frecuencia compleja de ese virus, y podemos dirigir y enviar un tratamiento de campo eléctrico con una frecuencia y forma opuesta, obteniendo una línea plana y así matar al virus. Y surtirá efecto, pero luego también tenemos que considerar porqué sucedió esto y qué fue lo que hizo que bajaran las defensas inmunológicas del paciente. Lo que esto significa es que necesitamos desarrollar lo que se denomina "psicología de la salud." La bioenergonformática es una tecnología fenomenal del cuidado de la salud que va más allá de las habilidades de cualquier tecnología anterior, pero tiene que ser realizada no solamente por médicos, sino en cooperación con psicólogos. Eso también significa que sería una buena política de cuidado sanitario tener médicos que tengan cierto entrenamiento en psicoterapia y bioenergonformática, y autorizar su utilización conjuntamente con sus prácticas médicas.

AJ: Gran idea. **PROFESOR**: Pero el verdadero poder de la medicina energética es su habilidad

para detectar, cuantificar, y analizar tanto las condiciones psicológicas como las físicas. En este proceso de Aura por imágenes vimos, por ejemplo, cómo la ciencia bioenergonformática puede darnos completa y detallada información sobre la psicología y las emociones de una persona, y cómo estas afectan su salud de formas específicas. De manera que el valor de la medicina energética no está en la posibilidad de sustituir la tecnología química por los dispositivos electrónicos, sino más bien en aprovechar el potencial abrumadoramente formidable de la medicina energética de analizar y de trabajar con problemas físicos, mentales y psicosomáticos. En esencia, es simplemente un campo científico más completo y más comprensivo. La única desventaja, en este momento, es que sigue siendo una tecnología en desarrollo. Pero en la Edad Media, cuando se usaban sanguijuelas para chupar la sangre, la medicina alopática fue también una tecnología en vías de desarrollo, de modo que ese no es un obstáculo.

8.0 GENERANDO INGRESOS CON EL RFI

Hay básicamente dos formas de obtener ingresos a través del programa **RFI** de ITEM: a través del Programa del Coordinador de Investigación **RFI** de ITEM y utilizando el **RFI** como parte de su práctica. Las siguientes secciones están dedicadas a éstas actividades productoras de ingresos.

8.1 PROGRAMA DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL RFI

El programa del Coordinador de Investigación **RFI** de ITEM no es un "programa de distribución", sino más bien un programa para acumular fondos y contribuir con nuevos descubrimientos para la investigación y desarrollo en curso de ITEM (R&D). Usted puede ganar dinero como un Coordinator De Investigación reclutando a licenciatarios nuevos para el programa de investigación y desarrollo **RFI** de ITEM. Hay dos tipos de posiciones del Coordinador De Investigación – "Básico" y Avanzado," como se plantea debajo. **Nota importante** – si usted ordenó el **RFI** a través de un distribuidor estadounidense de ITEM, estos programas no se aplican a usted, aunque usted puede contactar al distribuidor para interesarse por el tipo de programas que puede ofrecerle.

8.1.1 Coordinador de Investigación Básico

Cuando usted ordena el sistema **RFI**, ITEM le vende una licencia para usar esta tecnología en desarrollo, junto con el software y el equipo necesario. Cuando ITEM le vende esta licencia, automáticamente usted pasa a ser considerado un "Coordinador De Investigación Básico" del **RFI**. Bajo la política existente de ITEM para Coordinadores De Investigación Básicos, por cada referencia que usted efectúe que dé como resultado la venta de una nueva licencia **RFI** para ITEM, le recompensamos con **una comisión por referencia de $100.** Sin embargo, necesitamos la documentación de la referencia antes de otorgar la comisión. Hay al menos dos formas para que tal documentación pueda ser suministrada:

1) Distribuya las **Hojas de Información del Sistema RFI** incluidas en el CD del **RFI** (vea Materiales Promocionales en el menú de Ayuda) a las personas interesadas. Escriba su **nombre** al pie del formulario de correo (en el reverso) antes de distribuirlo . Si la persona interesada envía el formulario, ITEM verá su nombre en el formulario e instantáneamente lo acreditará a usted por la comisión de referencia. Alternativamente, usted puede desarrollar sus anuncios personalizados **RFI** para la distribución. Si usted decide desarrollar sus propios anuncios, debe seguir estas reglas:

- Debe contactarse con ITEM para informarle de su intención de desarrollar un anuncio personalizado. De esta manera, podemos llevar el control de las publicidades autorizadas versus las publicidades no autorizadas.

- Debe enviarle a ITEM una copia del anuncio cuando esté listo. También le sugerimos que envíe un borrador a fin de que podamos hacer comentarios en él antes de que usted gaste dinero en hacer un anuncio que no pueda ser aceptado. Los anuncios en borrador o finales deben ser modificados de conformidad con nuestros comentarios para que nosotros lo consideremos como un anuncio autorizado.

- Debe incluir el siguiente aviso en algún lugar en su anuncio: "Campo de Resonancia por Imágenes™" (RFI) es una marca registrada de Tecnologías de Innovación y Medicina Energética (ITEM). Copyright © 2003, Todos los Derechos Internacionales Reservados. Sitio Web: http://www.item-bioenergy.com ".

2) Si los nuevos pedidos fueron hechos a través del sitio Web de ITEM, en lugar de haber sido enviados por correo, usted puede ganar comisiones de referencia cuando el nuevo licenciatario indique su nombre en la sección Comentarios del formulario de pedido de internet de ITEM. Por consiguiente, usted debería pedirle al nuevo licenciatario que coloque su nombre en la sección Comentarios al hacer el pedido a través del sitio Web de

ITEM. Las excepciones pueden hacerse sobre la base del caso por caso si su nombre no está colocado en la orden de pedido pero el nuevo licenciatario reporta que fue hecha una referencia a través suyo.

Si usted vive en el EE.UU. o si su banco puede aceptar cheques en dólares estadounidenses, enviaremos su comisión de referencia por $100 a través de un cheque corporativo de ITEM. Si su banco no puede aceptar dólares estadounidenses, entonces le recomendamos que : 1) cobre el pago completo del **RFI** y la tarifa por costos de envío y manejo del nuevo licenciatario; 2) encargue el paquete **RFI** en el sitio Web de ITEM usando su tarjeta de crédito y coloque que la orden es para un Coordinador De Investigación Básico, así como también su Número de Asociado; y 3) ITEM automáticamente le acreditará $100. De este modo, usted habrá recibido una ganancia neta de $100.

Algunos Investigadores **RFI** nuevos han recuperado rápidamente el costo de la licencia **RFI** en pocos meses a través de dichas comisiones de referencia. Hay un potencial ilimitado de ganancia, pero por supuesto cuánto gane depende enteramente de usted.

8.1.2 **Coordinador de Investigación Avanzado**

El programa "Básico" le brinda la oportunidad de ganar comisiones de referencia de $100 (US) por la venta a cada nuevo licenciatario **RFI** que usted reclute. Si está interesado en ganancias potenciales aún mayores, entonces usted puede estar interesado en el programa "**Avanzado**". El programa Avanzado los provee a los Coordinadores De Investigación la oportunidad de obtener descuentos significativos en los nuevos sistemas **RFI**. El Coordinador De Investigación Avanzado compra sistemas **RFI** de ITEM a precios de oferta, luego los vende a otros a precio minorista.

Lista De Precios del Coordinador de Investigación Avanzado

La siguiente Lista de Precios del Coordinador De Investigación Avanzado se basa en los precios

más actuales de suministro y costos de materiales de ITEM, los costos internos fijos de ITEM, y las mejores estimaciones de cómo estos costos se reducen en proporción al volumen de pedidos. La lista de precios ofrece descuentos más importantes para mayor número de unidades por pedido. Esta estructura de descuentos no debe ser percibida como indicando un valor inferior de los productos, ni debería ser interpretada como que dicha mejora de precios está disponible por un pedido de un volumen inferior. La política de incrementar los descuentos para los pedidos superiores al volumen se basa en un principio de beneficio para ambas partes - ITEM y sus Coordinadores De Investigación Avanzados. Animar a los Coordinadores De Investigación Avanzados a ordenar más sistemas **RFI** al mismo tiempo, le permite a ITEM comprar mayor cantidad de materiales y suministros a precio reducido, y utilizar más eficazmente el tiempo pagado a sus empleados, y por consiguiente se le reducen los costos a todos los Coordinadores De Investigación Avanzados.

De este modo, ITEM baja los costos para los Coordinadores De Investigación Avanzados que reclutan menos Investigadores **RFI**, e ITEM reduce sus propias ganancias para alentar a los Coordinadores De Investigación Avanzados a ordenar un número mayor de paquetes **RFI** por embarque. Esta estructura también toma en consideración el incremento de los gastos de publicidad y mercadeo que necesitan los Coordinadores De Investigación Avanzados para reclutar a más Investigadores **RFI**. Por consiguiente, esta estructura de precios hace al programa R&D completo más estable y más provechoso para los Coordinadores De Investigación.

La **Estructura de Precios** está determinada por la asociación de un porcentaje de descuento para cada número de unidades pedidas en la misma orden del Coordinador De Investigación. Los precios asumen un costo minorista para el **RFI** de $890 (US), los cuales están sujetos a cambio:

Unidades por Pedido	**Porcentaje de Descuento en el Precio de Venta Al Público**	**Precio del Coordinador de Investigación por Unidad (USD)**	**Ganancia del Coordinador de Investigación por Unidad (USD)**
2-3	30 %	$625	$265

4-5	35 %	$580	$310
6-10	40 %	$535	$355
11-20	45 %	$490	$400
21 o más	50 %	$445	$445

Para empezar a ganar dinero como un Coordinador De Investigación Avanzado por cuenta de ITEM, y recibir el derecho de comprar paquetes **RFI** con los descuentos de Coordinador De Investigación Avanzado, todo lo que usted tiene que hacer es realizar un **primer pedido mínimo** de **2 unidades. Si usted quisiera ser considerado Coordinador Exclusivo de un país o región particular, por favor comuníquese con ITEM –** ciertos territorios ya están bajo acuerdo. El compromiso de reclutar una cantidad mínima de nuevos Investigadores **RFI** es un requisito para la distribución exclusiva.

Análisis de Rentabilidad

ITEM diseñó el programa para crear un pequeño negocio para los Coordinadores De Investigación Avanzados, como un método de pago para sus servicios y soporte. Los Coordinadores De Investigación Avanzados compran paquetes del prototipo con un descuento de ITEM, para acelerar las actividades de investigación y desarrollo de ITEM. Luego cobran los aportes monetarios de los nuevos licenciatarios al mismo precio que ellos le pagarían directamente a ITEM. A este respecto, el Programa del Coordinador De Investigación Avanzado puede ser comparado con un negocio de ventas por menor para los propósitos del análisis de rentabilidad.

Como se desprende de la tabla de arriba, **mientras más unidades pide por orden, más alto será su margen de beneficio,** y más rápido podrá acceder al siguiente margen de beneficio superior. Si usted invierte un poco más en la promoción, como en el frente del negocio o en el despliegue de las exhibiciones, las demostraciones promocionales en las conferencias de salud o las ferias alternativas de salud, o en publicidades dentro de publicaciones especiales locales como boletines de prensa redituables, usted aumentará el interés en la tecnología **RFI**, rentabilizando su negocio cada vez más.

Muchos comerciantes y negocios de ventas por menor miden sus ganancias en términos de "sobreprecio". El término "sobreprecio" indica un porcentaje, que es el porcentaje del precio al por mayor que se agrega para calcular el precio de venta al público. Por ejemplo, si usted compra algo por $70, y lo vende por $100, usted literalmente aumenta el precio del producto en $30. Ya que $30 es el 43 % de $70, se dice que el "aumento del precio" en el producto fue del 43 %. En otras palabras, el porcentaje del "sobreprecio" es idéntico **al rédito del porcentaje sobre su inversión**.

La mayoría de los comerciantes necesitan un sobreprecio del 30 % para los productos que venderán en su negocio al por menor. La estructura de fijación de precios del Coordinador De Investigación Avanzado de ITEM le da un **sobreprecio de al menos un 43 % directamente desde el principio**. Su margen de beneficio está enteramente bajo su control, a merced de cuánto usted quiera invertir en la promoción y la divulgación para atraer a los potenciales licenciatarios del **RFI**. La siguiente es una tabla que muestra el "sobreprecio" en cada nivel de cantidad por pedido:

Unidades por Pedido	Porcentaje de Descuento	Porcentaje de "Sobreprecio" (% de Rédito sobre la Inversión)
2-3	30 %	43 %
4-5	35 %	54 %
6-10	40 %	67 %
11-20	45 %	82 %
21 o más	50 %	100 %

ITEM le ofrece el siguiente soporte a los Coordinadores De Investigación Avanzados:

1) Proporciona materiales promocionales oficiales de ITEM para ayudar a los Coordinadores De Investigación a reclutar a los nuevos licenciatarios del **RFI**;

2) Compra del equipo, manuales impresos, software de producto, y armado de los paquetes **RFI** para sus nuevos licenciatarios;

3) Manipulación del embarque y distribución de la entrega;

4) Proporciona soporte especializado a sus nuevos licenciatarios ; y

5) Continúa con los esfuerzos de investigación y desarrollo en respuesta a los descubrimientos del licenciatario y a sus comentarios.

De los Coordinadores De Investigación Avanzados se esperará que:

1) Aprendan el proceso **RFI** y estudien el manual;

2) Muestren el sistema **RFI** a los eventuales licenciatarios o que repartan la literatura de ITEM y los materiales promocionales del **RFI** ;

3) Proporcione a ITEM la información completa de cualquier nuevo licenciatario que ordene el **RFI** a través del Coordinador De Investigación (no directamente a través de ITEM); y

4) Reenvíe cualquier comentario de los licenciatarios, y los anime a tener comunicaciones directas con ITEM.

Los Coordinadores De Investigación Avanzados deben seguir las reglas presentadas en la Sección 8.1.1 sobre la creación de publicidades personalizadas **RFI**.

8.1.3 **Reglas Importantes de Elegibilidad para los Coordinadores Básicos y Avanzados**

1) El tipo de publicidad que los Coordinadores De Investigación tienen permiso de usar en Internet está estrictamente limitada. **La promoción del RFI en otros sitios webs sólo está permitida si se siguen 3 reglas (A, B y C mostradas debajo):**

A. El sitio Web debe tener su propio propósito primario independiente o contenido separado del **RFI**, es decir que el **RFI** no debe ser el propósito único o primario de la existencia de ese sitio Web. En otras palabras, debe tener algo personal para ofrecer

que sea el contenido predominante (es decir., más de 50 %) de ese sitio Web, como ser informes o información gratuita, grupos de discusión, contenido científico o filosófico, evaluación de métodos curativos, prácticas o tecnologías, por nombrar algunos ejemplos.

B. La presentación o la descripción del **RFI** en dicho sitio Web debe ser de contenido original, es decir, un trabajo científico o creativo de los autores del sitio Web. En otras palabras, deben ser ya sea descripciones nuevas de cómo puede ser utilizado el **RFI** por un grupo de interés especial, de práctica o pasatiempo, puede haber evaluaciones, recomendaciones o testimonio**s** sobre el **RFI** recabados por los Coordinadores De Investigación, y contribuciones similares nuevas de los Coordinadores De Investigación que crean o patrocinan el sitio Web.

C. El sitio Web debe contener un enlace directo al sitio Web de ITEM en lo alto de cualquier página que aborde temas sobre el **RFI** (el sitio Web de ITEM es **http://www.item-bioenergy.com**). El Coordinador De Investigación debe contactar a ITEM (**Central@item-Bioenergy.com**) para la aprobación de su contenido Web antes de su publicación. De otra manera, ninguna de las comisiones por referencia serán otorgadas.

2) Las comisiones por referencia de los Coordinadores de Investigación (actualmente de $100) por reclutar a los nuevos licenciatarios es sólo para referencias en persona, no para los clics efectivos de Internet de otros sitios Web. Las altas comisiones son ofrecidas sobre la teoría de que la comunicación de persona a persona alcanza a aquellos potenciales interesados a los que ITEM no puede llegar basándose solo en la promoción por Internet . ITEM no pagará semejantes comisiones de referencia a meros enlaces de otros sitios Web.

3) Las elevadas retribuciones por referencia personal no serán acreditadas si el sitio Web del

Coordinador De Investigación le da instrucciones a los visitantes de ingresar simplemente el nombre del Coordinador y el Número de Asociado al hacer el pedido directamente de ITEM, o si tal información es introducida sobre el carrito de compras de ITEM por algún mecanismo automático del sitio Web del Coordinador.

4) Está permitido dirigir un sitio Web de conformidad con las susodichas normas basadas en el programa del Coordinador De Investigación y la estructura de retribución del Coordinador De Investigación, y proveer información de contacto a los visitantes para ese sitio Web para que hagan contacto personal para participar de demostraciones o debates. Está permitido también dirigir tal sitio Web para complementar las presentaciones en persona, y para animar a los posibles clientes a mantener contacto con usted. Los subsiguientes pedidos directos en el sitio Web de ITEM conteniendo el nombre del Coordinador De Investigación y Número de Asociado serán acreditados y pagados por ITEM como retribuciones por referencias en persona.

5) Los informes y las descripciones de ITEM en su sitio de Internet, así como sus folletos impresos, son Propiedad Registrada © de ITEM, e ITEM no acepta su utilización en otros sitios Web. Por consiguiente, la copia de los materiales de ITEM por parte de los Coordinadores De Investigación para el uso en sus sitios Web o en publicaciones nuevas bajo su nombre, está estrictamente prohibido.

6) Citar frases o párrafos seleccionados del texto de los informes de ITEM y de los materiales está permitido, informando que las citas son atribuidas a "Tecnologías de Innovación y Medicina Energética (ITEM)", ya sea inmediatamente después de cada cita, o en forma de apostillas o notas numeradas al pie, y con tal que tales citas no abarquen más del 25 % del texto del documento.

7) Todas las publicaciones nuevas o las promociones creadas por los Coordinadores De Investigación, ya sea impresas o en Internet, deben estar bajo el propio nombre o bajo el

nombre de la compañía o de la organización. La declaración de que el "**Campo de Resonancia por Imágenes**™ y el **RFI** son Marcas Registradas de Innovation Technologies y Energy Medicine" debe aparecer en la base de toda página que presente al **RFI**, y en el cuerpo del texto, la indicación "(TM)" debe aparecer después de cada uso de las palabras "**Campo de Resonancia por Imágenes**" o "**RFI**", para señalar que son marcas registradas de ITEM.

8) Los folletos oficiales y los materiales de mercadeo creados por ITEM pueden ser fotocopiados, y los informes del sitio Web oficial de ITEM pueden ser impresos y fotocopiados, y los Coordinadores De Investigación tienen permiso para usar esos materiales inalterados como ayuda para reclutar a los nuevos licenciatarios en el contacto y la referencia de persona a persona.

9) ITEM se reserva el derecho a declinar le abastecimiento o el pago de las retribuciones por referencia de persona a persona a cualquier Coordinador De Investigación que no cumpla con las anteriormente citadas reglas y con las condiciones del Programa del Coordinador De Investigación de ITEM.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estas reglas y condiciones, por favor contáctenos.

8.2 USANDO EL RFI CON LA CLIENTELA

Muchos licenciatarios nuevos del **RFI** utilizan el **RFI** para complementar las terapias alternativas, medicina energética, o la práctica psicológica que ya utilizan. El **RFI** añade una nueva dimensión que no sólo le ayudará a analizar las condiciones de sus pacientes, sino que también podrá asistirlo para conseguir nueva clientela. Algunos Investigadores nuevos de hecho han desarrollado un nuevo negocio con el solo propósito de realizar lecturas del **RFI** . Cualquiera sea el caso, ITEM no ofrece sugerencias sobre cuánto usted debería cobrar por las "consultas" del **RFI** – cobre lo que lo haga sentir más cómodo .

Además de incorporar el **RFI** a su práctica, muchos licenciatarios prefieren realizar lecturas del **RFI** en ferias como una fuente de ingresos adicional. Ya que el **RFI** puede ser usado a plena luz del día, es perfecto para ferias psíquicas al aire libre o en salones, ferias de salud, y convenciones científicas. Todo el mundo quiere saber cómo luce su Aura, o ver pruebas científicas de que las Auras son un fenómeno real, de esta manera, al crear gráficos a colores e interpretaciones, rápidamente se vuelve el acontecimiento más popular en cualquier feria de fin de semana. Las antenas y los números en unidades científicas crean una gran impresión, brindan un buen show, y proyectan una imagen científica profesional.

Simplemente instale el programa de software **RFI** en una **notebook o PC portátil,** y tome una impresora color, así como también el contador de frecuencia de mano. Las imágenes a color del Aura usualmente se venden por $10-20 mínimo cada una, y un paquete **RFI** puede usarse para hacer imágenes completas del cuerpo de aproximadamente 4 a 6 personas por hora.

En una feria de salud, el **RFI** compitió con una cámara de Aura basada en Polaroid de unos $20,000. Las personas en la feria de fin de semana rápidamente se dieron cuenta de que la cámara costosa sólo mostraba la parte superior del cuerpo y excluía incluso las manos y que las imágenes eran vagas y nubladas. La mayoría de ellos prefirieron las imágenes del cuerpo precisas, completas y a color del **RFI** que incluían los siete chakras. Sobre todo, las personas estaban más intrigadas por la profundidad y el detalle de la **información** acerca de su Aura que sólo el **RFI** podría proveer. A la hora del almuerzo del primer día del fin de semana, la cámara de Aura de $20,000 estaba ociosa, mientras los técnicos de ITEM trabajaban horas extra con dos unidades **RFI**, leyendo a 12 personas por hora por el resto del fin de semana.

ITEM siempre se ha encontrado con que el **RFI** es el "golpe del espectáculo" cada vez que asistimos a las conferencias de cuidado de la salud, salud alternativa o a las ferias de espiritualidad. Basados en nuestras experiencias positivas, podemos hacer las siguientes sugerencias:

1) Nos agrada hacer una pancarta para poner al lado de nuestra cabina para darle a las personas que pasan por una explicación inmediata de lo que ellos son testigos mientras estamos ocupados haciendo lecturas del Aura a los clientes. Usualmente tenemos un el atril de artista simple de madera, que utilizamos para sujetar un tablero blanco para afiches. Simplemente imprimimos imágenes del aura de muestra, hacemos fotocopias ampliadas a color, y las pegamos sobre el tablero para afiches, junto con un gran título como '**Campo de Resonancia por Imágenes™, Análisis del Aura y Exploración Cerebral**'. Esto siempre atrae a muchas personas que quieren ver a su Aura y recibir interpretaciones. Es también útil tener el Vídeo del **RFI** (vea el menú de Ayuda en el software) en una computadora en los eventos públicos para atraer visitas.

2) Consiga algo que capte la atención desde lejos. Por ejemplo, ITEM ha usado una luz estroboscópica. Cubrimos el lente con "gel de escenografía" plástico violeta y lo ponemos en el piso bajo nuestro cartel. Determine la velocidad de la luz estroboscópica en una frecuencia muy baja, de tal manera que atraiga la atención, pero que no tenga un efecto agitador. Alrededor de un pulso por segundo crea un efecto agradable, e ilumina el piso delante de su cabina con una rara ambientación que fija la atención.

3) Al hacer muchas gráficas del Aura en público, como en una conferencia de salud o feria psíquica, conviene a menudo tener un asistente. A medida que usted ve los números en el contador de frecuencia, y fija en un número con el botón "Pausa", lea ese número en voz alta para su asistente. Su asistente entonces puede dar un clic sobre la región del Aura que usted midió, y puede escribir ese número en el programa de computadora. La computadora luego calculará y dibujará el color de la bioenergía en la gráfica para usted mientras continúa examinando el Aura y observando los números en el contador de frecuencia. Esto ahorra mucho tiempo, permitiéndole leer a más clientes por hora, pudiendo tomar turnos o dar a los otros pausas ocasionales. Leyendo los números en voz alta, especialmente mientras trae puesta la chaqueta blanca de laboratorio y sostiene la

antena, también atraerá la atención positiva en los eventos públicos y proyectará una imagen más profesional y científica.

4) Al hacer gráficas del Aura en un evento público, es importante traer consigo una impresora a color y emplear al máximo la función de interpretación del software de computadora personalizado. Usted debería traer consigo una cantidad suficiente de papel para imprimir las hojas de interpretación que los clientes pueden llevar a casa junto con sus gráficas a color del Aura. Esto incrementa el atractivo y la demanda por comprar sus imágenes del Aura, pues las personas estarán más interesadas en la información de su Aura, y podrán continuar gozando y comprendiendo los significados complejos y las interpretaciones mucho tiempo después de que usted se los haya explicado .

5) Usted debería cobrar precios diferentes para niveles diferentes de análisis e interpretación. Por ejemplo, para una lectura del Nivel de Salud o Psicológico sólo, usted podría cobrar $10. Para una lectura de ambos niveles, el de Salud y el Psicológico usted podría cobrar $15. Para una lectura de todos los niveles del Aura y una imagen del Cerebro con interpretaciones, usted podría cobrar $20. Sin embargo, cobre lo que lo haga sentirse cómodo.

9.0 SOPORTE TÉCNICO PARA SU PAQUETE RFI

El Soporte Técnico Gratuito será proporcionado para asistir a los Investigadores **RFI** con todas las preguntas directamente relacionadas con (1) el uso efectivo de la tecnología **RFI**, así como también (2) para solucionar cualquier problema que parezca estar relacionado con el uso o funcionamiento del sistema **RFI** en sí mismo.

Este soporte técnico gratuito incluye (1) soporte vitalicio ilimitado por Email, y (2) hasta una hora de soporte telefónico con un asesor experto de ITEM. Nuestro soporte técnico por Email es **Central@item-bioenergy.com**. Si usted necesita realizar una consulta por teléfono, por favor llame al 1-888-304-ITEM o pónganos al tanto a través de un Email y un representante de ITEM concertará con usted un momento apropiado para tener una conversación.

ITEM se reserva el derecho de cobrar una retribución por las consultas relacionadas con (1) usos especiales del RFI para propósitos específicos aparte de medir el campo del Aura humana, (2) principios científicos generales de las Auras y las bioenergías, o (3) diseño personalizado o selección de métodos alternativos de conteo de frecuencias o dispositivos. ITEM recomienda que los usuarios **RFI** estudien la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (vea **http://www.item-bioenergy.com/certification/index.html**). Para aprender acercamientos y teorías avanzadas en las ciencias bioenergéticas y para obtener la certificación internacional en Medicina Energética.

El contador de frecuencia es seleccionado por ITEM siendo el que más se adapta para los procesos **RFI**. Nosotros probamos cada contador de frecuencia antes de enviarlo como parte del paquete **RFI**. ITEM no tiene ningún papel en el diseño, manufactura o reparación de los contadores de frecuencia proporcionados, aunque podemos ayudarle con los problemas del contador de frecuencia. Como se indica en Sección 3.1.5, por favor comuníquese con ITEM si usted identifica un problema, ya que le podemos aconsejar sobre sus opciones para la reparación o el reemplazo.

El software personalizado **del** RFI es desarrollado por y de la propiedad de ITEM. Si usted tiene algún problema con el funcionamiento correcto de su software, o descubre algún error que pudimos haber pasado por alto, por favor menciónelo con tanto detalle como le sea posible. Si existe un defecto real o un funcionamiento defectuoso, haremos los cambios apropiados en el software y le enviaremos un nuevo programa de software mejorado en forma gratuita. Si es una mejora o modificación de las funciones existentes que actualmente trabajan apropiadamente, entonces haremos los cambios tan pronto como nos sea posible, y ofreceremos la mejora a todos los Investigadores **RFI** a un precio reducido.

Por favor note que debido a los altos costos para hacer copias a color, muchos de los gráficos originales a color en este manual fueron impresos en blanco y negro – sólo aquéllos estimados como absolutamente necesarios para demostrar un punto crítico fueron impresos en color. Sin embargo, ITEM tiene la versión completa a color de este manual en su sitio de Investigadores **RFI** protegido por contraseña en **www.item-bioenergy.com/password/ updates.asp**. Aquí usted puede descargar e imprimir o simplemente ver los gráficos a color incluidos en este manual.

¡Los mejores deseos para usted del personal de ITEM con el uso y la exploración de la tecnología **RFI**!